


機械器具 52 医療用拡張器
一般医療機器 拡張器 11254000

KARL STORZ CCL-エクストラクター

【形状・構造及び原理等】

・代表的な形状を以下に示す。

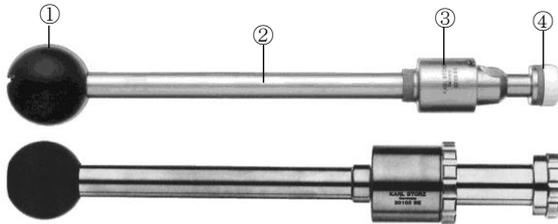

番号	名称	機能及び動作	原材料
①	ボール	手術部位の気密性を保持する。	硬質プラスチック*
②	シャフト	器械チャンネルの外筒	ステンレス鋼
③	バルブヘッド	挿入器具の気密性を保持する。	—
④	器械ポート	組織摘出鉗子を挿入する。	—


※: 組織、体液又は血液に直接又は間接的に接触することがある部分

【使用目的又は効果】


経腔的に切除された卵巣嚢腫、筋腫等の子宮付属器又は骨盤内臓器を摘出する目的で使用する。

【使用方法等】


1. 所定の方法で洗浄および滅菌を行う。
2. 器具に瑕疵が無いことを確認する。
3. 本品を後臍円蓋に挿入する。
腹腔鏡により確認しながら本品の球状面を子宮仙骨靭帯の間に置く。

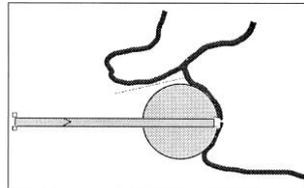


4. 本品を後臍円蓋に正確に当て、腹腔鏡下でモノポーラ、CO₂レーザー、バイポーラによりダグラス窩を水平に切開する。ダグラス窩切開術を施行後は球状面をしっかりと後臍円蓋に正確に当てることでCO₂ガスの流出を防ぐ。

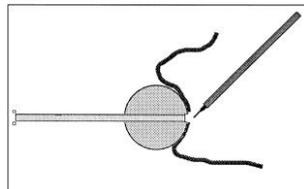


5. 把持鉗子を本品の器械チャンネルを通して挿入する。悪性腫瘍の疑いのある組織やデルモイドシストの場合にはプラスチックバッグに回収して摘出する。

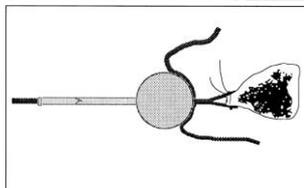


6. 把持鉗子をCCLの球面に持ってこるように引き込む。

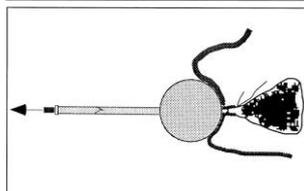

7. ダグラス窩切開術は腹腔鏡のトロカール外径に比べて大きな組織標本の摘出が可能である。通常、直径6~7cm位までの大きな組織摘出を行うことができる。

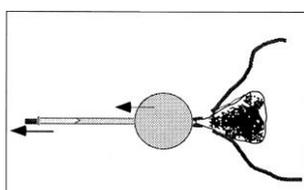

8. 組織摘出後、本品を後臍円蓋に再度挿入することにより、腹腔鏡下での止血、洗浄、縫合等の処置をCO₂ガスの流出が無く行える。

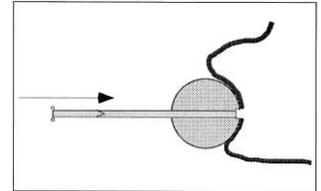

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 本品は未滅菌品のため、使用前に所定の方法で滅菌を行うこと。
2. 滅菌は常に同一の方法で行うことを推奨する。[異なる滅菌方法を実施すると、構造材に負担をかけ本品の劣化・損傷を招き、故障につながる可能性が高い]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品は、摘出把持鉗子と共に用いること。
2. 完全に乾いた状態で使用すること。
3. 使用中は、器具全般および患者に異常の無いことを絶えず監視すること。
4. 使用後は次の事項に注意すること。
 - (1) 指定された方法で洗浄・滅菌したのち、良く乾かしてから整理してまとめておくこと。
 - (2) 次回の使用に支障のないよう必ず清浄にしておくこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. よく洗浄後、必ず乾燥させてから保管すること。
2. 水のかからない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。(特に体内に入る部分及び可動部分については入念に確認すること。)
3. 器具は使用後速やかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄すること。[付着物は修復不能な損傷の原因になる]
4. 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。

5. 洗浄方法

(1) 自動洗浄器

- ① 内視鏡のプログラムが設定されている自動器具洗浄器を使用し、管腔を有する器具は専用洗浄チューブを接続して使用すること。
- ② 適切なラックを使用し、他の器具と重なり合わないように入れること。[他の器具と重なり合うことにより損傷の原因となり、また、重なっている部分で洗浄効果が減衰する]
- ③ 器具の接続部を開放し、ストップコックやシーリングを分解してラックに入れること。
- ④ 温水の温度が、硬性鏡は90℃、軟性鏡は60℃を超えないこと。
- ⑤ 洗浄剤や水質によっても製品にダメージを与える場合があり、器具に変質等が生じた場合、直ちに自動洗浄器の使用を中止し、洗浄剤、水質の確認を行うこと。

(2) 超音波洗浄器

- ① テレスコープの超音波洗浄は行わないこと。[光学系に損傷を与える可能性がある]
- ② プラスチック等軟性部品には使用しないこと。[超音波振動を吸収するためには効果が無いのみならず、材質の劣化を促進する可能性がある]

- ③ 剪刀・ネジを有する器具には使用しないこと。[超音波の振動によって繊細な剪刀の刃先が欠損する可能性や、微細なネジの緩みが発生し、機能に影響を与える可能性がある]

(3) マニュアル洗浄

- ① 洗浄剤及び化学消毒剤を使ってブラッシング及び浸漬等により手洗い洗浄を行う。
- ② 感染のリスクを防止するため、手洗い洗浄時には手袋・防水エプロン・ゴーグル等を必ず使用すること。
- ③ 管腔内を洗浄するため適切なブラシやクリーニングピストルを準備すること。
- ④ 洗浄、浸漬用にフタ付きで水きり用の内かごが付いている容器を準備すること。
- ⑤ 洗浄手順
 - a. ストップコックやシーリング等、器具の接続部をすべて分解する。
 - b. 専用容器に準備した洗浄溶液に器具を浸漬する。水温は 35～40℃前後(暖かいと感じる温度)が適温である。薬剤による器具の損傷の可能性があるので、溶液には 60 分以上浸漬したままにしないこと。
 - c. スポンジで全ての外表面を注意深く清掃する。
 - d. 管腔内は適切なブラシやクリーニングピストルを用いて洗浄する。
 - e. 純水で時間をかけて十分な濯ぎを行う。
 - f. 埃の出ないやわらかい布や圧縮空気で乾燥させる。

6. 洗浄後の器具の点検とお手入れ


- (1) 外観の目視(特に体内に入る部分には入念に)確認、可動部の機能確認を行うこと。(異常が見られたら使用を中止し、交換すること。)
- (2) プラスチック又はシリコン部品の変色・変質・柔軟性(硬化の有無)・孔の有無を確認し、異常が認められた場合は直ちに部品を交換すること。
- (3) 高周波適用器具の絶縁部のはがれ・めくれ・傷・亀裂等を目視確認すること。(これらが認められたら使用を中止し交換すること。)
- (4) ストップコックの接触面に専用グリスを必ず塗布すること。
- (5) 鉗子のジョウ等すべての可動部分には、滅菌による熱損傷を防止する為、専用のオイルを必ず塗布すること。

7. 洗浄剤


- (1) 材質にアルミニウム、真鍮を使用している製品にはアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤は使用しないこと。[材質に損傷を与える可能性が高い]
- (2) その他の製品をアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤で洗浄する場合には、洗浄剤又は消毒剤の残留物が残らないように純水にて十分に濯ぎを行うこと。
- (3) 内視鏡および内視鏡関連器具に適した洗浄剤又は消毒剤を使用すること。

8. メンテナンス方法


- (1) エクストラクターのバルブヘッドのつまみネジを緩め、バルブを取り外す。
- (2) バルブヘッドを分解し、内部シール⑩に損傷がないか調べ、必要であれば交換する。

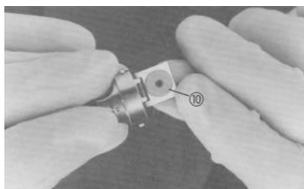


- (3) バルブヘッドを分解するために、シール⑩上のネジ⑪を時計方向に回す。

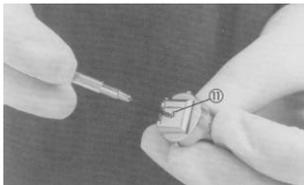


- (4) 手で洗浄する場合には、バルブフラップを開いたまま行うこと。一方、機械洗浄の際にはオープニングロッド又は適当な保持ロッドを使って、フラップバルブを開いた状態に固定して行うこと。

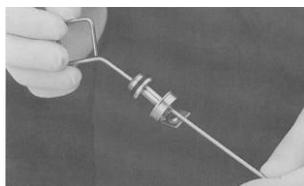

- (5) スポンジ又はブラシを用いて全ての外表面を清掃する。

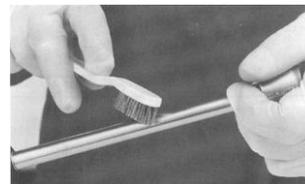

- (6) 管腔をブラシで注意深く清掃する。

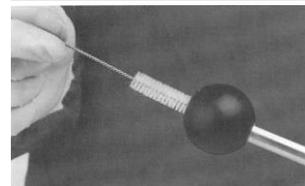

- (7) 全てのパーツを水洗いしてから圧縮空気で乾かす。

- (8) 洗浄乾燥後、バルブフラップ③の連結部にいねいに注油する。バルブヘッドまで分解した場合は、フラップの窪みに内部シール⑩を入れ、ネジ⑪を反時計方向に回して固定する。ネジは極わずかだけ回すこと。閉じた状態のフラップバルブ⑧が正しく装着されていることを確認する。



- (9) バルブヘッドをシャフトに取り付け、つまみネジを締め付ける。
- (10) 器械ボートをバルブヘッドに挿入する。

9. 使用前に必ず下記の何れかの方法で滅菌又は消毒を行うこと。

注: 滅菌前に器具を洗浄し、良く乾燥してから滅菌を行うこと。

(1) エチレンオキシドガス滅菌方法

本品を滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、エチレンオキシドガス滅菌を行う。

<滅菌条件>

- ・ガス濃度 : 600～700 mg/L
- ・温度 : 40～60 °C
- ・湿度 : 50～60 %RH
- ・圧力 : 0.1 MPa
- ・時間 : 3～6 時間

<ガス除去方法>

50～60℃で8～12 時間のエアレーションを行う。

(2) オートクレーブ滅菌方法

本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、オートクレーブ滅菌を行う。

<滅菌条件>

- ・温度 : 134 °C
- ・圧力 : 2 気圧
- ・時間 : 5～8 分間

※真空式高圧蒸気滅菌(pre-high vacuum)方式のオートクレーブを使用すること。

※オートクレーブ滅菌を行う際に金属容器を使用している場合は、本品と金属部を直接触れないよう注意すること。

(3) プラズマ滅菌(ジョンソン・エンド・ジョンソン社/販売名「ステラッド 100S」)

本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、プラズマ滅菌を行う。

<滅菌条件>

- ・温度 : 約 45℃
- ・湿度 : 約 10%RH
- ・時間 : 45～105 分(機種による)

(4) 薬液消毒方法

容器を 2 個用意し、一方には薬液を他方には滅菌水を入れる。薬液に 30 分浸した後、本品を滅菌水に移し、約 5 分間浸す。

<消毒条件>

- ・使用薬液 : 2%グルタルアルデヒド
- ※薬液消毒の場合、必ず、薬剤製造業者の指示に従うこと。また、本品を 60 分以上液体に浸漬させたままにしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社

TEL:03-6380-8622

製造業者:KARL STORZ SE & Co. KG(カールストルツ社)

国名:Germany

添付文書番号 : KSTJ - Z059