

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 皮膚バリア粘着プレート 31071000
プリマ傷あとケアシートPX

【禁忌・禁止】

次の部位には使用しないで下さい。

- ・治療中の傷口（炎症を起こしている傷口又は開いている傷口）〔感染の恐れがある〕
- ・まぶたや目の周囲

【形状・構造及び原理等】


1. 形状・構造

粘着性のある高純度ポリエチレンジェルの片面をウレタンフィルムで被覆したもの

12×6 cm（厚さ：1 mm）

2. 原理

外部の汚染物質から皮膚部位を保護するために皮膚に粘着する器具。
皮膚に当てることにより、皮膚の保護をする。

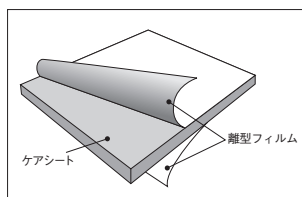

【使用目的又は効果】

傷あと・火傷あと・ニキビあと等の赤みや盛り上がりが残ってしまった気になる部位、及び酸素マスク等の医療機器による圧迫から皮膚部位を保護するための皮膚保護材です。（「傷あと」とは、カサプタが取れてから1ヶ月を経過した部位を対象とする。）

【使用方法等】


1. 箱から取り出して二つ折りの硬いカバーを外し、傷あと・火傷あと等の大きさに合わせて切り抜きます。傷あと・火傷あと等より大きめに余裕をもって切り抜いて下さい。
2. 傷あと・火傷あと・ニキビあと等の部位をよく洗い乾かします。
3. 両面に貼られている緑色のシールの付いた離型フィルムを剥がします。この時、本体のウレタンフィルムと一緒に剥がさないように丁寧に剥がして下さい。
4. 粘着面を傷あと等の部位に密着させます。ひじ、ひざ等の関節や、かかと等のよく動くところに貼る場合は、伸縮包帯やネット等で軽く押さえると固定しやすくなります。
5. 1日8時間以上、可能であれば24時間使用することをお勧めします。
6. 使用後は1日1回、水又はぬるま湯で洗って下さい。汚れがひどい場合は中性洗剤を使用して洗い、よくすすいで下さい。
7. 洗浄後はシートを軽く振って水気をきり、清潔な所で自然乾燥後、再使用して下さい。
8. 1枚のシートで大きさが足りない場合は、複数枚を隙間なく並べて貼って下さい。

<使用方法に関する注意>

1. シートを切る場合は、離型フィルムは剥がさないで下さい。さらにご家庭にある紙で挟むと簡単に切断できます。
2. 皮膚の弱い方は、いきなり長時間使用すると赤みや痒みが出る場合がありますので、1～2時間から使用を開始し、毎日徐々に使用時間を増やし、慣らしながら使用して下さい。
3. 汗をかきやすい人や汗をかきやすい季節には本品を洗う回数を増やし、本品を貼り付けていた皮膚もよく洗

い、清潔を保って下さい。

4. テープで固定しますとウレタンフィルムが剥がれて壊れやすくなるのでご注意下さい。
5. 酸素マスク等の医療機器の使用時に貼る場合は、鼻や口に入らないように大きめに切って使用して下さい。

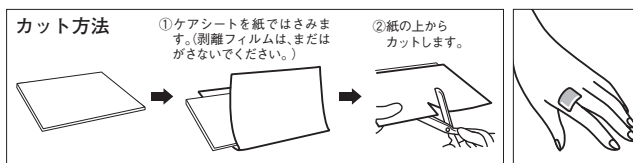

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中、皮膚に発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談して下さい。
- 2) 傷口が治ってもかさぶたが取れてから1ヶ月以上を経過した後にお使い下さい。

2. その他の注意

- 1) 傷あと等の部位に密着させるときに、空気を入れないようにして下さい。発疹、発赤、かゆみの原因となる場合があります。
- 2) 洗っても汚れが落ちなくなったり、皮膚への接着が悪くなったら、新しいものに交換して下さい。破損しなければ効果は変わらず継続してご使用になれます。
- 3) シートを使用部位から剥がす時は、なるべく両手を使用して出来るだけ伸ばさないようにゆっくりと丁寧に剥がして下さい。伸ばし過ぎると破損しやすくなります。
- 4) 乾かす時にドライヤーやレンジなどを使用しないで下さい。また、紙や布などで拭くと紙や糸くずが付着し、取れなくなりますのでご注意下さい。
- 5) 入浴時等、水に濡れる場合は取り外して下さい。
- 6) 軟膏やクリーム等との併用は避けて下さい。
- 7) 小さく切り抜いたシートを流し等に流しますと配管等の詰まりの原因になりますのでご注意下さい。
- 8) 酸素マスク等医療機器による圧迫から皮膚を保護するために、適切な大きさに切り抜いて使用する場合、特に口の周り等に貼付する時は、汗、よだれなどで剥がれやすく、剥がれたシートを誤飲すると窒息の危険があります。充分にご注意してご使用下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 使用しない時は、直射日光を避けて涼しい所で保管して下さい。
2. 可燃物ですので、火のそばや高温になる所には放置しないで下さい。
3. シートを食べたり、耳、口や鼻に詰めたりしますと危険ですので、幼児や高齢者の手の届かない所に保管して下さい。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 原沢製薬工業株式会社
住所 東京都港区高輪三丁目19番17号
TEL 03-3441-5191