

この電子添文をよく読んでから使用してください。

体外診断用医薬品

2022 年 9 月作成（第 1 版）

製造販売承認番号 30400EZ00059000

サイトメガロウイルス核酸キット Alinity[®] m システム CMV

【全般的な注意】

- ・本製品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないこと。
- ・診断は、他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断すること。
- ・本書に記載された使用方法に従って使用すること。本書に記載された使用方法および使用目的以外での使用については、測定結果の信頼性は保証しない。
- ・本測定で使用する試薬類には、ヒト由来成分が含まれているものがあり、感染の危険があるので感染性のあるものとして取り扱うこと。詳細は、【形状・構造等（キットの構成）】または【用法・用量（操作方法）】を参照すること。
- ・本測定で使用する試薬類には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているものがある。誤って目や口に入れたり皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けること。詳細は、【形状・構造等（キットの構成）】または【用法・用量（操作方法）】を参照すること。
- ・使用する機器の電子添文および取扱説明書をよく読んでから使用すること。

【形状・構造等（キットの構成）】

1. 増幅・検出試薬トレイ 1

- ・増幅・検出試薬ウェル

CMV フォワードプライマー A

CMV リバースプライマー A

プローブ A

CMV フォワードプライマー B

CMV リバースプライマー B

プローブ B

HotStart DNA ポリメラーゼ

dNTP ※ Mix

※ dNTP：デオキシリボヌクレオシド三リン酸

dNTP Mix は以下の 4 成分を有するヌクレオチド・Na の同濃度の混合物である。

2'-デオキシアデノシン 5'-三リン酸（dATP）

2'-デオキシシチジン 5'-三リン酸（dCTP）

2'-デオキシチミジン 5'-三リン酸（dTTP）

2'-デオキシグアノシン 5'-三リン酸（dGTP）

（他の含有物：緩衝液、添加剤、色素）

- ・内部コントロール・プロテアーゼ K ウェル

（主な含有物：緩衝液、内部コントロール用塩基配列をもつ非感染性リニア DNA、プロテアーゼ K、添加剤、DNA）

2. 活性試薬トレイ 2

- ・活性試薬ウェル

（主な含有物：塩化マグネシウム、塩化カリウム、塩化テトラメチルアンモニウム 保存剤：ProClin 950）

- ・本キットは、増幅・検出試薬トレイ 1 と活性試薬トレイ 2 の 2 種類のマルチウェルトレイで構成されている。
- ・増幅・検出試薬トレイ 1（アルミパウチ個包装、乾燥剤入り）は、各 48 テスト分の増幅・検出試薬ウェルと内部コントロール・プロテアーゼ K ウェルから成り、試薬は凍結乾燥品である。1 テストあたり各 1 ウェルを使用する。
- ・活性試薬トレイ 2（アルミパウチ個包装、乾燥剤なし）は、48 テスト分の液状活性試薬ウェルから成る。1 テストあたり 1 ウェルを使用する。

【使用目的】

血漿中のサイトメガロウイルス（CMV）DNA の測定（サイトメガロウイルス感染の診断補助）

【測定原理】

本品はポリメラーゼ連鎖反応（PCR）法による CMV DNA の増幅、及び核酸ハイブリダイゼーションを用いたヒト血漿中の CMV DNA を測定するキットであり、以下の 5 つの主な反応ステップから成り立っている。

1. 検体からの CMV DNA の抽出・精製

検体にライシス溶液（内部コントロールの DNA 及びプロテアーゼ K を含む）を加え、磁性粒子を用いて所定の操作を行い、CMV DNA を抽出・精製する。

2. PCR による CMV DNA の増幅

標的二本鎖 DNA を熱変性処理することによってそれぞれを一本鎖にする。2 種類の CMV フォワードプライマー A 又は B 及び 2 種類の CMV リバースプライマー A 又は B をそれぞれの標的とする配列に結合させ、dNTP Mix（dATP、dCTP、dTTP、dGTP）存在下で HotStart DNA ポリメラーゼを用いて PCR 反応を行うことにより二本鎖 CMV DNA を増幅する。

3. 標識プローブと増幅 DNA とのハイブリダイゼーション

熱変性処理により生じた一本鎖 CMV DNA の鋳型（アンチセンス）DNA に特異的に結合する蛍光標識したプローブ A 又はプローブ B をハイブリダイズさせる。

4. 蛍光強度の測定

標的に結合したプローブ A 又はプローブ B からの蛍光強度を測定波長 520 nm で測定する（同時に増幅された内部コントロールの蛍光強度は測定波長 670 nm で測定する）。

5. CMV DNA 濃度の算出

検体の C_t 値※（Threshold Cycle 値）を 2 濃度のキャリブレーションで作成した標準曲線にあてはめ、CMV DNA 量を算出する。

※ C_t 値：検体の蛍光強度が閾値に達したときのサイクル数

【操作上の注意】

（1）測定試料の性質、採取法

検体種

本キットの測定では、検体として血漿を使用することができる。下表に示した採血管のみを使用すること。他の種類の検体種や採血管は、本キットで利用できることを確認していない。

検体種 ^a	採血管
血漿	EDTA-2K EDTA-3K PPT（Plasma Preparation Tube） ^b

^a 機器は、検体の種類を区別する機能を持たないので、測定の際には検体種が正しいことを確認すること。

^b 分離剤入り血漿採血管。

検体の保存条件

検体種	温度	最長保存期間	その他
全血	2 ～ 8℃	5 日間	採血後の全血は、血漿を分離するまでの間保存しておくことができる。
	15 ～ 30℃	1 日間	全血の状態では 2 ～ 8℃ に保存した時間と、血漿を分離した後に 2 ～ 8℃ で保存した時間の合計は、120 時間を超えてはならない。
血漿	2 ～ 8℃	5 日間	血漿は血球を分離した後、元検体チューブ（分離剤の有無は問わない）や子検体チューブで保存することができる。
	15 ～ 30℃	1 日間	全血の状態では 2 ～ 8℃ に保存した時間と、血漿を分離した後に 2 ～ 8℃ で保存した時間の合計は、120 時間を超えてはならない。
			血漿はさらに機器にセットした状態で 4 時間まで保存できる。

検体種	温度	最長保存期間	その他
	-70℃以下	長期間	<p>血漿は血球を分離した後、分離剤入り採血管（PPT）や子検体チューブで凍結保存することができる。分離剤なしの採血管で採取した血漿は、凍結前に子検体チューブに移すこと。^a</p> <p>血漿は凍結融解を3回まで繰り返すことができる。融解した検体は、機器にセットするまで2～8℃で6時間まで保存することができる。</p> <p>血漿はさらに機器にセットした状態で4時間まで保存できる。</p>

^a 3回を超える凍結融解の繰り返しは避けること。

検体の輸送条件

検体を輸送する場合は、検体の保存条件の保存温度と期間に従うこと。検体を輸送する場合は、臨床検体、診断目的検体、生物学的検体に対する適切な法規等に対応した包装・表示を行うこと。

検体の調製

採血後の全血

- 血液の採取と遠心分離については、採血管の製造元の取扱説明書に従うこと。遠心分離を行い、血漿検体から血球を分離する。
 - 遠心分離前の全血は、上記の表に従って保存することができる。
 - 遠心分離後の血漿検体は、機器にセットするまで、あるいは希釈を行うまでの間、血球が残っている状態で（分離剤の有無に関係なく）保存するか、子検体チューブに移して保存することができる。保存時間と保存温度については上記の表を参照すること。
 - 長期間保存する必要がある場合は、血漿検体を分離剤入り採血管のままかあるいは子検体チューブに移した状態で、-70℃で凍結保存することができる。
- 注：血漿検体は、血球が残っている場合、分離剤なしで凍結することはできない。

凍結血漿検体（分離剤入り採血管）

- 検体を15～30℃または2～8℃で融解する。一度融解した検体をすぐに使用しない場合は、2～8℃で6時間まで保存することができる。
- 各検体をボルテックスミキサーで2～3秒間×3回攪拌する。
- 機器にセットする前、あるいは希釈を行う前に、検体の入った分離剤入り採血管を2000gで5分間遠心分離する。固形物が認められた場合は、検体の上清を新しい子検体チューブに移し替える。固形物が新しいチューブの中に混入しないよう注意すること。

凍結検体（子検体チューブ）

- 検体を15～30℃または2～8℃で融解する。一度融解した検体をすぐに使用しない場合は、2～8℃で6時間まで保存することができる。
- 各検体をボルテックスミキサーで2～3秒間×3回攪拌する。固形物が認められた場合は、検体を新しい子検体チューブに移し替える。固形物が新しいチューブの中に混入しないよう注意すること。
- または、各検体をボルテックスミキサーで2～3秒間×3回攪拌し、固形物が認められた場合は、2000gで5分間遠心分離する。検体の上清を新しい子検体チューブに移し替える。固形物が新しいチューブの中に混入しないよう注意すること。

元検体チューブや子検体チューブの中の検体はすべて、検体IDバーコードラベルや、検体IDと使用ラック、ポジションで識別できるようにしておくこと。使用できるチューブのサイズについては、本書の【用法・用量（操作方法）】2. 測定手順または機器取扱説明書の4章を参照すること。チューブの蓋を開ける際は、キャップの内側に触れないよう注意すること。

(2) 妨害物質・妨害薬剤

交差反応性

本キットの分析特異性の検討を行った。CMV 陰性血漿、CMV DNA 濃度125 IU/mLの陽性血漿、CMV DNA 濃度2,000 IU/mLの陽性血漿に微生物（表1）を添加したパネルを用いた。ウイルスと真菌の添加後濃度は10⁵ Units/mL、バクテリアの添加後濃度は10⁶ Units/mLとした。これらのパネルを測定したところ、本キットへの交差反応や干渉は認められなかった。

表1 微生物

ウイルス
アデノウイルス
BK ポリオーマウイルス
Epstein Barr ウイルス（EBV）
B 型肝炎ウイルス（HBV）
C 型肝炎ウイルス（HCV）
ヘルペスウイルス 6B
ヘルペスウイルス 7
ヘルペスウイルス 8（カポジ肉腫関連ウイルス）
ヒト免疫不全ウイルス -1 型（HIV-1）
ヒト免疫不全ウイルス -2 型（HIV-2）
単純ヘルペスウイルス -1（HSV-1）
単純ヘルペスウイルス -2（HSV-2）
ヒトパピローマウイルス 16 型（HPV-16）
ヒトパピローマウイルス 18 型（HPV-18）
ヒト T 細胞白血病ウイルス 1 型（HTLV-1）
ポリオーマウイルス JC
バルボウイルス B19
ワクチニアウイルス（VACV）
水痘帯状疱疹ウイルス（VZV）
バクテリア
<i>Chlamydia trachomatis</i>
<i>Enterococcus faecalis</i>
<i>Escherichia coli</i>
<i>Listeria monocytogenes</i>
<i>Mycobacterium gordonae</i>
<i>Mycobacterium pneumoniae</i>
<i>Mycobacterium smegmatis</i>
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>
<i>Propionibacterium acnes</i> (PA) (<i>Cutibacterium acnes</i>)
<i>Salmonella typhi</i>
<i>Salmonella typhimurium</i>
<i>Staphylococcus aureus</i> (SA)
<i>Staphylococcus epidermidis</i>
<i>Streptococcus pneumoniae</i>
真菌
<i>Aspergillus niger</i>
<i>Candida albicans</i> (CA)
<i>Cryptococcus neoformans</i>

干渉物質

内因性物質、自己免疫疾患、移植患者に対し一般的に投与される薬剤の影響（高濃度の場合）を評価した。CMV DNA 陰性血漿サンプル 8 例、CMV DNA 濃度 125 IU/mL および 2,000 IU/mL の陽性血漿サンプル 8 例を用いた。

アルブミン (60 mg/mL)、ヘモグロビン (10 g/L)、トリグリセリド (16.94 mmol/L)、抱合型ビリルビン (475 µmol/L)、非抱合型ビリルビン (684 µmol/L)、ヒトゲノム DNA (2 µg/mL) による影響は認められなかった。

全身性エリテマトーデス (SLE)、抗核抗体 (ANA) 陽性、関節リウマチ (RA) の各患者の検体では、疾患による影響は認められなかった。

表 2 に示した薬剤による影響は認められなかった。検討は個々の薬剤または薬剤群ごとに薬剤をプールして行い、各薬剤の濃度は報告されている最高血中濃度 (C_{max}) の 3 倍以上とした。

表 2 薬剤

薬剤群	薬剤
1	ミコフェノール酸
2	アモキシシリン、クラバン酸、ホスカルネット、ピペラシリン、タゾバクタムナトリウム、バンコマイシン
3	アシクロビル、ベシル酸アムロジピン、アテノロール、アザチオプリン、セフォテタン、シドホビル、シクロスポリン、エベロリムス、ファモチジン、フルコナゾール、ガンシクロビル、リシノプリル、ミコフェノール酸モフェチル、プレドニゾン、ラベプラゾール、シロリムス、スルファメトキサゾール、タクロリムス、チカルシリン、トリメトプリム、パラシクロビル、バルガンシクロビル塩酸塩、バルサルタン

(3) その他

本キットは Alinity m システムの試薬である。

【用法・用量（操作方法）】

(1) 試薬の調製方法

すべての構成試薬はそのまま用いる。

(2) 必要な器具・器材・試料等

- Alinity m CMV キャリブレーション (Alinity m CMV CAL Kit、製品番号 9N46-70)
(主な含有物：緩衝液、非感染性 CMV リニアプラスミド DNA、DNA 保存剤：アジ化ナトリウム、ProClin 950)

	容量
キャリブレーション A	1.75 mL × 4
キャリブレーション B	1.75 mL × 4

- Alinity m CMV コントロール (Alinity m CMV CTRL Kit、製品番号 9N46-80)
 - 陰性コントロール (CTRL -)
(主な含有物：緩衝液、DNA 保存剤：アジ化ナトリウム、ProClin 950)
 - 陽性コントロール L (CTRL +)
(主な含有物：ヒト血漿 (HBs 抗原陰性、HIV-1 RNA 陰性、HCV RNA 陰性、HBV DNA 陰性、HIV-1/HIV-2 抗体陰性、HCV 抗体陰性、HIV-1 抗原陰性、Syphilis 陰性)、不活化 CMV 保存剤：ProClin 300、ProClin 950)
 - 陽性コントロール H (CTRL ++)
(主な含有物：緩衝液、非感染性 CMV リニアプラスミド DNA、DNA 保存剤：アジ化ナトリウム、ProClin 950)

	容量
陰性コントロール	0.75 mL × 12
陽性コントロール L	0.75 mL × 12
陽性コントロール H	0.75 mL × 12

- Alinity m 核酸抽出試薬キット 2 (Alinity m Sample Prep Kit 2、製品番号 9N12-01)
 - 溶出液 2 (Elution Buffer 2)
(主な含有物：リン酸カリウム緩衝液、Tween 20 保存剤：ProClin 950)
 - 磁性粒子 2 (Microparticles 2)
(主な含有物：磁性粒子)

	容量
溶出液 2	22 mL × 4
磁性粒子 2	24 mL × 4

- Alinity m ライシス溶液 (Alinity m Lysis Solution、製品番号 9N20-01、975 mL × 1)
(主な含有物：TRIS 緩衝液、GITC、Tween 20)
- Alinity m 希釈液 (Alinity m Diluent Solution、製品番号 9N20-03、975 mL × 4)
(主な含有物：水、ProClin 950)
- Alinity m 蒸発防止溶液 (Alinity m Vapor Barrier Solution、製品番号 9N20-04、975 mL × 1)
(主な含有物：ミネラルオイル)
- Alinity m 検体希釈キット I^a (Alinity m Specimen Dilution Kit I、製品番号 9N50-01、2.45 mL × 24)
(主な含有物：TRIS 緩衝液、グアニジンチオシアン酸塩)
- 血漿測定用 Alinity m CMV アプリケーション仕様ファイル (製品番号 9N46-01A 以降)
- ボルテックスミキサー
- 遠心分離機 (2000 g 対応機種)
- Alinity m LRV チューブ (製品番号 9N49-01)^a
- 分注量 10 ~ 1000 µL の校正済みピペット^a
- 分注量 10 ~ 1000 µL のピペット用フィルター付きピペットチップ^a
- 384 ウェルプレート用アダプター
- 遠心分離機 (スイングプレートローター、プレートアダプター対応、100 g 以上対応機種)
- Alinity m トランスポートチューブ ピアサブルキャップ (製品番号 9N49-10、オプション)
- Alinity m トランスポートチューブ (製品番号 9N49-11、オプション)
- Alinity m ピアサブルキャップ (製品番号 9N49-12、オプション)
- Alinity m アリコートチューブ (製品番号 9N49-13、オプション)

^a これらは希釈測定が必要な場合に、3. 検体の希釈で使用する。

機器の操作に必要な器具等については、機器取扱説明書の 1 章を参照すること。

機器の操作方法については、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

正しい測定結果を得るため、機器取扱説明書の 9 章に従って日常的なメンテナンスを行うこと。

(3) 測定（操作）法

以下の操作は、「Alinity m システム」で行う。

- ライシス溶液 1.5 mL をライシスウェルに分注する。
- 内部コントロール・プロテアーゼ K ウェルに希釈液 35 µL を加える。
- プレートリートメントウェルに検体 0.5 mL、内部コントロール・プロテアーゼ K 40 µL 及び 1) の溶液 0.15 mL を加えて、インキュベーションする。
- 上記混合液 0.69 mL をライシスウェルに加えて、インキュベーションする。
- 上記混合液を、磁性粒子を用いて、洗浄し、核酸抽出液を得る。
- 上記核酸抽出液を溶出液 60 µL に加え、インキュベーションする。
- 増幅・検出試薬ウェルに上記溶出液 24.2 µL 及び活性試薬 5.8 µL を分注し、マスターミックスとする。
- マスターミックス 25 µL を反応ベッセルに加えて、PCR 反応を繰り返し、ピーク蛍光波長 520 nm における蛍光強度を測定する（同時に増幅された内部コントロールのピーク蛍光波長 670 nm における蛍光強度を測定する）。
- CMV DNA の C_t 値 (Threshold Cycle 値) を 2 濃度のキャリブレーションで作成した標準曲線に当てはめて CMV DNA 量を算出する。

1. 操作上の注意

- 測定を行うには、本キット用のアプリケーション仕様ファイルが機器にインストールされている必要がある。
- 機器の操作方法についての詳細は、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。
- 核酸抽出を始める前に、本書の指示をよく読むこと。
- 検体のピペッティングを行う際は、フィルター付きピペットチップまたは使い捨てピペットを単回使用すること。ピペッティング中のピペットの汚染を防止するため、ピペット本体がサンプルチューブや容器の内側に接触しないように注意すること。十分な長さのフィルター付きピペットチップを使用すること。

- ・作業場所と機器は、潜在的汚染源とみなすこと。
- ・増幅・検出試薬トレイ 1 は、機器にセットする前に 2. 測定手順に従って、凍結乾燥試薬がチューブの底に落ちるように作業台の上で軽くたたくこと。
- ・活性試薬トレイ 2 は、機器にセットする前に 2. 測定手順に従って、必ず遠心分離機にかけること。
- ・増幅産物のモニタリング方法については、機器取扱説明書の 9 章を参照すること。
- ・核酸汚染のリスクを軽減するため、検体がこぼれた場合は、1.0% 次亜塩素酸ナトリウムやその他の適切な消毒液による拭き取りを含め、清掃および除染すること。
- ・コンタミネーションを防ぐため、核酸抽出試薬キット 2、試薬トレイ、機器の溶液類、インテグレートドリアクションユニット (IRU)、ピペットチップを取り扱う前に手袋を新しいものに交換すること。また、手袋が検体、キャリブレータ、コントロール、試薬で汚染された場合も新しいものに交換すること。常にパウダーフリー手袋を使用すること。
- ・本キットの測定では、必ず専用のキャリブレータ、コントロールを使用すること。詳細は、4. アッセイキャリブレーション、5. 阻害の検出、6. 陰性コントロールと陽性コントロールを参照すること。
- ・キャリブレータとコントロールの容器は、ピアサブルキャップ付きの単回使用チューブである。元の箱から取り出した後は、キャップの汚染や破損に注意すること。使用後のチューブは廃棄すること。

2. 測定手順

増幅・検出試薬トレイ 1 は、機器にセットする前に、ラベルを上に向けてトレイの端を持ち、凍結乾燥試薬がチューブの底に落ちるように作業台の上で軽く 3 回たたく。

活性試薬トレイ 2 は、機器にセットする前に以下に従って遠心分離機にかける。

- 1) 活性試薬トレイ 2 をプレートアダプターにセットする。
- 2) 活性試薬トレイ 2 をセットしたプレートアダプターを、プレートアダプター対応のスイングプレート遠心機にセットする。100 ～ 800 g で 1 ～ 5 分間遠心分離し、泡を取り除く。
- 3) 遠心分離後直ちに、活性試薬トレイ 2 をアッセイトレイキャリアにセットする。活性試薬トレイ 2 はなるべく動かさないように注意する。アッセイトレイキャリアを機器取扱説明書 5 章の手順に従って機器にセットする。
- 4) 移動中に活性試薬トレイ 2 を大きく動かしてしまい、泡が生じた可能性がある場合は（活性試薬トレイ 2 を落とした、ぶつけた、逆にしたなど）、再度遠心分離機にかけること。

5) 機器取扱説明書の 5 章に従って、試薬とサンプルの残量管理を行う。測定に関する機器の操作方法についての詳細は、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。検体を測定する前に、キャリブレーションとコントロールのステータスを確認すること。再キャリブレーションやコントロールの測定が必要な場合は、4. アッセイキャリブレーション、5. 阻害の検出、6. 陰性コントロールと陽性コントロールを参照すること。キャリブレータやコントロールは、検体と別に測定しても、同時に測定してもよい。オーダー作成画面で、該当する測定項目 (CMV-PL) を選択する。増幅・検出試薬キット、キャリブレータ、コントロール、検体は、機器にセットされていた積算時間がトラッキングされている。積算時間があらかじめ定められた最長時間を超えると、機器はこの増幅・検出試薬キット、キャリブレータ、コントロール、測定検体を使用できないと見なす。検体チューブを機器にセットする前に、検体が最大量と最小量の規定を満たしていること、キャップの有無が正しいことを確認する。分離済みの血漿が入った採血管、検体が入ったアリコートチューブ（子検体チューブ）は、ユニバーサルサンプルラック（サンプルラック）に載せて機器にセットしてから、4 時間以内に処理を開始すること。

チューブタイプと検体量				
チューブタイプ ^a	製品番号	必要最少量	最大許容量	機器上のキャップの有無
採血管（元検体チューブ）				
採血管	—	内径 10.0 mm 以上の採血管は 10.0 mm ^b	内径 10.6 ～ 13.2 mm の採血管 分離剤、血球の分離剤あり： 5.0 mL、 分離剤なし： 6.0 mL 内径 13.2 mm 以上の採血管 分離剤あり： 8.5 mL、 分離剤なし： 10.0 mL	キャップなし
アリコートチューブ（子検体チューブ）				
Alinity m アリコートチューブ	9N49-13	0.65 mL	3.5 mL	キャップあり ^c または キャップなし
Alinity m トランスポートチューブ	9N49-11	1.0 mL 0.65 mL	7.0 mL 3.5 mL	キャップなし キャップあり ^c
Alinity m トランスポートチューブ ピアサブルキャップ	9N49-10	1.0 mL 0.65 mL	7.0 mL 3.5 mL	キャップなし キャップあり
その他のチューブ	—	内径 10.6 mm 以下のチューブは 0.9 mL	内径 10.6 ～ 13.2 mm のチューブ 分離剤あり： 5.0 mL、 分離剤なし： 6.0 mL 内径 13.2 mm 以下のチューブは 1.4 mL 内径 13.2 mm 以上のチューブ 分離剤あり： 8.5 mL 分離剤なし： 10.0 mL	キャップなし

^a 使用可能な検体チューブの要件については機器取扱説明書の 4 章を、サンプルラックのセット方法については機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

^b 採血管中で、分離剤、血球よりも上にある血漿の必要最低限の高さを示している。以下の式を用いて採血管の内径 (mm) から最少検体量 (mL) を算出することができる。

$$\text{血漿の最少検体量} = 0.00785 \times \text{内径}^2$$

^c キャップは Alinity m ピアサブルキャップ（製品番号 9N49-12）を使用すること。

以下のチューブを機器にセットする場合は、サンプルラック用のリテンションバーを使用すること。

- 1) ピアサブルキャップ付きのキャリブレータ、コントロール
- 2) 分離剤入り採血管に入った検体
- 3) ピアサブルキャップ付きのトランスポートチューブに入った検体

リテンションバーは、使用後毎回清掃を行うこと。

検体チューブを機器にセットする前に以下を行うこと。

- ・各検体チューブに、検体 ID バーコードが正しく貼られているか確認する。
- ・検体に泡がないことを確認する。泡がある場合は滅菌済みピペットチップで取り除くこと。交差汚染を防ぐため、検体チューブごとに新しいピペットチップを使用すること。

3. 検体の希釈（オプション）

Alinity m 検体希釈キット I を使用して、以下に従い検体を手希釈し、機器で測定することができる。

検体量が少ないものの 220～649 μL ある場合は、2.5 倍希釈を行い、測定することができる。

希釈検体	血漿検体量	希釈倍率
少量検体	220～649 μL	2.5

検体希釈フローを参照すること。

機器のオーダー作成画面にある患者検体タブで希釈倍率を選択すること。選択された希釈倍率を使用して希釈前の検体濃度が自動的に算出され、測定結果として報告される。


注：希釈した検体は 2 時間以内に機器にセットすること。Alinity m 検体希釈チューブは単回使用し、再使用しないこと。

検体の 2.5 倍希釈は、Alinity m 検体希釈キット I を用いて以下の通り行う。

1. Alinity m LRV チューブ(以下 LRV チューブ)に検体 ID を示すバーコードラベルを貼る。
2. 新しい Alinity m 検体希釈チューブを開封し、検体希釈液 330 μL を LRV チューブに分注する。
3. LRV チューブに患者血漿検体 220 μL を添加する。
4. チューブのキャップを閉め、ボルテックスミキサーで 2～3 秒間×3 回攪拌してから、上向きにして作業台の上で軽く叩き、内溶液をチューブの底に落とす。
5. LRV チューブのキャップを外す。チューブ内の溶液を確認し、泡がある場合には取り除く。
6. LRV チューブをサンプルラックにセットする。

注：Alinity m 検体希釈チューブの外側に結晶や液体が付いている場合は、液もれの可能性があるのでため使用しないこと。

検体希釈フロー

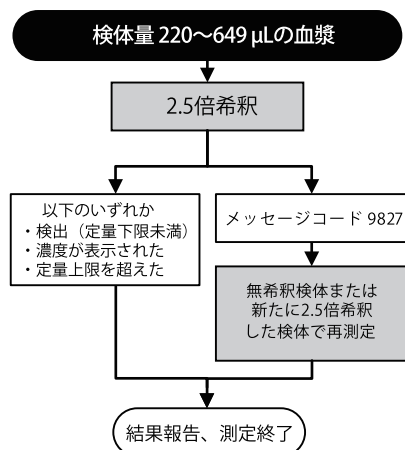

4. アッセイキャリブレーション

キャリブレーションの方法については、機器取扱説明書の 6 章を参照すること。

キャリブレーションとコントロールのロット固有の濃度は、機器のアボットメール、弊社担当者から入手可能である。

キャリブレーションを行う場合は以下に従う。

- ・キャリブレーション（キャリブレーション A、キャリブレーション B）やコントロール（陰性コントロール、陽性コントロール L、陽性コントロール H）のチューブのバーコードを機器に読み取らせ、ロット固有の濃度をアボットメールを通じて自動的に機器にインポートさせる。
- ・ロット固有の濃度は弊社担当者を通じて入手し、USB ドライブから機器にインポートすることもできる。

キャリブレーションのオーダー方法および機器へのセット方法については、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

CMV DNA 濃度を定量化するためには、検量線が必要である。

キャリブレーションを行うには、キャリブレーション A とキャリブレーション B のチューブが少なくとも各 1 本必要である。各キャリブレーションのチューブを使用して 3 重測定が行われる。2 濃度のキャリブレーションの測定結果を元に、検量線（ロット固有の CMV 濃度と蛍光強度が閾値に達した時の Threshold cycle (C_t) 値の関係）が作成される。検量線の傾きと切片が算出され、機器に保存される。

一度、規格を満たしたキャリブレーションの結果が機器に保存されると、その後は測定ごとにキャリブレーションを行う必要はないが、次のいずれかの場合には再キャリブレーションを行う。

- ・新しいロット番号の増幅・検出試薬キットを使用する場合
- ・新しいロット番号の Alinity m 核酸抽出試薬キット 2 または Alinity m ライシス溶液を使用する場合
- ・キャリブレーションのステータスが使用期限切れの場合
- ・新しいバージョンのアプリケーション仕様ファイルをインストールした場合

測定値に影響を及ぼす可能性のある部分のメンテナンスや修理を実施した場合も、再キャリブレーションを必要とする可能性がある。詳細は弊社担当者に確認すること。

5. 阻害の検出

キャリブレーションでは、アッセイパラメータの規格として内部コントロールの C_t 値が設定される。

核酸抽出開始時に規定量の内部コントロールを各検体、キャリブレーション、コントロールに添加して測定することで、検体処理の正確さと測定の有効性の評価が行われる。

検体やコントロールの内部コントロールの C_t 値の規格は、その前に測定されたキャリブレーションの内部コントロールの C_t 値の中央値を元に算出される。

検体やコントロールの内部コントロールの C_t 値が規格を外れている場合は、メッセージコードが表示される。内部コントロールの C_t 値が規格の上限を超えている場合は、阻害など測定に異常があったことを示している。

メッセージコードが表示された場合の対応については、機器取扱説明書の 10 章を参照すること。

6. 陰性コントロールと陽性コントロール

測定の有効性をモニタリングするため、少なくとも 48 時間に一度、陰性コントロール、陽性コントロール L、陽性コントロール H を測定すること。検体の測定結果を報告する前に、すべてのコントロールについて有効な測定結果が得られていることを確認すること。新たにキャリブレーションを行う場合も、キャリブレーションに続けてコントロールを測定し、有効な測定結果が得られていることを確認すること。

施設の精度管理方針に従い、必要な場合はコントロールの測定を追加する。

コントロールの結果が無効だった場合、検体にフラグが表示される。無効なコントロールよりも後に測定した検体は、すべて再測定すること。

コントロールの測定結果が無効だった場合に示されるフラグについては機器取扱説明書の 5 章を、トラブルシューティングについては機器取扱説明書の 10 章を参照すること。

陰性コントロールでは CMV は検出されない。陰性コントロールで CMV が検出された場合、他のサンプルあるいは増幅産物が陰性コントロールに混入したことを示している。汚染を除去するため機器を清掃し、本書のサンプル調製方法に従って再度コントロールと検体のサンプル調製を行うこと。増幅産物のモニタリング方法については、機器取扱説明書の 9 章を参照すること。

陰性コントロールが一貫して陽性を示す場合は、弊社に連絡すること。

コントロールの測定では、陽性コントロール L と陽性コントロール H のロット固有の濃度は以下の方法で入手することができる。

- ・コントロール（陽性コントロール L、陽性コントロール H）のチューブのバーコードを機器に読み取らせ、アボットメールを通じて自動的に機器にインポートさせる。
- ・弊社担当者を通じて入手し、USB ドライブから機器にインポートする。

【測定結果の判定法】

(1) 算出

患者検体中の CMV ウイルス濃度が本キットの定量範囲内であれば、定量的な測定結果が算出される。検体中の CMV DNA 濃度はソフトウェア上で検量線から算出される。測定結果の単位は IU/mL または Log [IU/mL] である (IU: International Unit)。単位の設定については、機器取扱説明書を参照すること。

希釈測定した検体では、ユーザーが選択した希釈倍率を使用して希釈前の検体濃度が自動的に算出され、測定結果として報告される。

(2) 測定結果の表示と判定

無希釈検体

各検体について、結果と判定が表示される。また、メッセージコードやフラグが表示される場合もある。

機器表示		
結果	判定	フラグ
Not Detected (検出されず)	Target not detected (検出されず)	
<1.48 Log (IU/mL)	Detected <LLOQ (検出 (定量下限未満))	
1.48 ~ 8.00 Log (IU/mL)		
> 8.00 Log (IU/mL)	>ULOQ (定量上限を超える)	

希釈検体

希釈測定した各検体については、結果と判定（該当する場合のみ）および希釈測定されたことを示すフラグ DIL が表示される。希釈前の状態に換算した CMV DNA 濃度が、定量的な測定結果として報告される。

CMV が検出されなかった希釈検体については結果は報告されず、メッセージコード (9827) が表示される。この検体は検出されずと報告することはできない。無希釈の検体で再検査を行うか、再度 2.5 倍に希釈して測定すること（検体希釈フロー参照）。

注: 無希釈の検体に対する本キットの LLOQ (定量下限) は 30 IU/mL (1.48 Log IU/mL) である。このため、希釈検体の報告可能な測定値の下限は 75 IU/mL (1.88 Log IU/mL) である。

無希釈の検体に対する本キットの ULOQ (定量上限) は 100,000,000 IU/mL (8.00 Log IU/mL) である。このため、希釈検体の測定値が定量上限を超えた場合は、>250,000,000 IU/mL (8.40 Log IU/mL) と表示される。

2.5 倍希釈検体		
機器表示		
結果	判定	フラグ
<1.88 Log (IU/mL)	Detected <LLOQ (検出 (定量下限未満))	DIL
1.88 ~ 8.40 Log (IU/mL)		DIL
> 8.40 Log (IU/mL)	>ULOQ (定量上限を超える)	DIL

(3) フラグ、結果コード、メッセージコード

測定結果によってはフラグ欄やコード欄に情報が表示される場合がある。これらの欄に表示される可能性のあるフラグやコードについては、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

メッセージコードの内容については、機器取扱説明書の 10 章を参照すること。

判定上の注意

- 正しい測定結果を得るためには、検体の適切な採取、取り扱いを行う必要がある（【操作上の注意】(1) 測定試料の性質、採取法を参照すること）。
- 本キットでは、ヒト血漿（EDTA-2K、EDTA-3K、PPT）を使用することができる。他の種類の血漿採血管は、本キットで使用できることを確認していない。
- 血漿中の固形物（フィブリン繊維など）はサンプル調製に影響を与える可能性がある。
- 機器や測定方法は、増幅産物による汚染リスクの軽減を考慮しているが、施設の基準と本書に記載された手順を遵守し、キャリブレーション、陽性コントロール、検体による核酸汚染の管理を行うこと。
- 本キットの測定結果が臨床所見に矛盾する場合、追加の測定を行い測定結果を確認することを推奨する。
- 結果が“Not Detected”であっても CMV DNA の存在を否定することはできない。
- 患者のウイルス量をモニタリングする際は、モニタリング期間を通して同じ種類の検体を使用すること。必要に応じて学会等のガイドラインに従うこと。
- 各種測定キットにはそれぞれ特徴があるため、測定キットを変更する場合は、各施設において変更前に相関性の検討を行い、技術的な相違を確認することを推奨する。使用者は、各施設の方針や手順に従う必要がある。

【性能】

(1) 測定範囲

血漿測定の測定範囲は 30 ~ 100,000,000 IU/mL である。

(2) 検出限界 (LoD)

1st World Health Organization (WHO) International Standard for Human Cytomegalovirus for Nucleic Acid Amplification Techniques (NIBSC code 09/162, genotype gB1, Merlin) を CMV 陰性ヒト血漿を用いて希釈したサンプルを測定し、LoD を算出した。本キット 4 ロットを用いて、複数日に渡り CMV DNA 濃度の測定を行った。代表的な結果の例を表 3 に示す。

プロビット解析を行ったところ、血漿の検出率が 95% となる CMV DNA 濃度は 18.98 IU/mL (95%信頼区間 11.16 ~ 62.82 IU/mL) であった (表 3)。

表 3 LoD

CMV DNA (IU/mL)	有効測定数	検出数	検出率 (%)
64.40	119	119	100
38.60	119	119	100
25.80	120	120	100
12.90	117	106	90.6
6.40	119	78	65.5
3.20	119	53	44.5
1.60	120	35	29.2

本キットのLoDは30 IU/mLである。

(3) ジェノタイプ gB2、gB3、gB4、抗ウイルス薬耐性株の LoD

培養した CMV ジェノタイプ gB2、gB3、gB4、抗ウイルス薬耐性株を、CMV 陰性血漿で 4 濃度に希釈し、本キット 1 ロットを用いて複数日に渡り測定した。代表的な結果の例を表 4 に示す。

30 IU/mL (1.48 Log IU/mL) 以上の濃度で検出率が 95% 以上であった。これらの結果は、CMV ジェノタイプ gB2、gB3、gB4、抗ウイルス薬耐性株についても、本キットが LoD まで検出可能であることを示している。

表 4 各ジェノタイプにおける LoD

ジェノタイプ	CMV DNA (IU/mL)	有効測定数	検出数	検出率 (%)
gB2	100.00	40	40	100
	50.00	40	40	100
	30.00	40	38	95.0
	20.00	40	39	97.5
gB3	100.00	39	39	100
	50.00	40	40	100
	30.00	40	40	100
	20.00	39	39	100
gB4	100.00	40	40	100
	50.00	40	40	100
	30.00	40	40	100
	20.00	40	40	100
抗ウイルス薬 耐性株	100.00	40	40	100
	50.00	40	40	100
	30.00	39	39	100
	20.00	40	40	100


(4) 直線性

直線性の上限を ULOQ (定量上限)、下限を LLOQ (定量下限) とすると、直線性を示す範囲は 1.48 ~ 8.00 Log IU/mL (30 ~ 100,000,000 IU/mL) である。

直線性の検討を行うため、CMV ジェノタイプ gB2 を陰性血漿で希釈して、濃度範囲 10 ~ 200,000,000 IU/mL (1.00 ~ 8.30 Log IU/mL) のパネル 14 例を調製した。濃度 10 ~ 100,000 IU/mL (1.00 ~ 5.00 Log IU/mL) のパネルは培養ウイルスを使用し、濃度 500 ~ 200,000,000 IU/mL (2.70 ~ 8.30 Log IU/mL) のパネルはプラスミド DNA を使用した。本キットは検討を行った CMV DNA 濃度範囲 (10 ~ 200,000,000 IU/mL) で直線性を示した。

代表的な結果の例を図 1 に示す。

図1 直線性^a

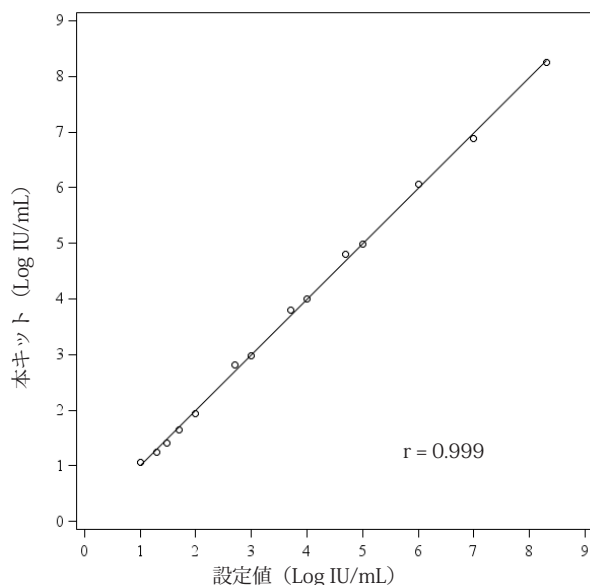

^a 注：グラフのマーカーは、各パネル濃度の測定結果の平均値 (Log IU/mL) を示している。


(5) CMV ジェノタイプの直線性

直線性の検討を行うため、CMV ジェノタイプ gB1、gB3、gB4 を陰性血漿で希釈して、濃度範囲 10 ~ 200,000,000 IU/mL (1.00 ~ 8.30 Log IU/mL) のパネル 14 例を調製した。各ジェノタイプについて、濃度 10 ~ 100,000 IU/mL (1.00 ~ 5.00 Log IU/mL) のパネルは培養ウイルスを使用し、濃度 500 ~ 200,000,000 IU/mL (2.70 ~ 8.30 Log IU/mL) のパネルはプラスミド DNA を使用した。

本キットはジェノタイプ gB1、gB3、gB4 について、検討を行った CMV DNA 濃度範囲 (10 ~ 200,000,000 IU/mL) で直線性を示した。

ジェノタイプ gB1、gB3、gB4 の代表的な結果の例を、ジェノタイプ gB2 の結果と共に図 2 に示す。

図2 CMV ジェノタイプの直線性^a

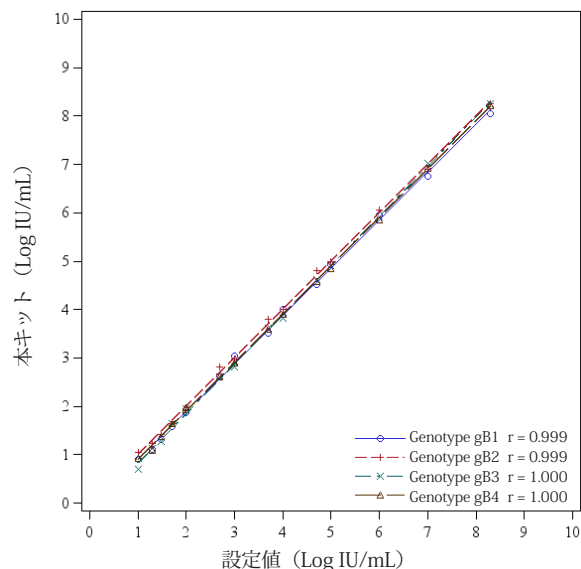

^a 注：グラフのマーカーは、各パネル濃度の測定結果の平均値 (Log IU/mL) を示している。

本キットはジェノタイプ gB1、gB2、gB3、gB4 について、検討を行った CMV DNA 濃度範囲 (10 ~ 200,000,000 IU/mL) で直線性を持つことが示された。

(6) 再現性

8 例の血漿パネルを使用して、再現性の検討を行った。パネルは、濃度 1.48 ~ 2.00 Log IU/mL (30 ~ 100 IU/mL) は陽性臨床検体を、濃度 2.00 Log IU/mL 超 ~ 5.00 Log IU/mL (100 IU/mL 超 ~ 100,000 IU/mL) は培養ウイルスを、濃度 5.00 Log IU/mL 超はプラスミド DNA を使用して調製した。各パネルは 3 台の機器、3 名の測定者 (機器 1 台につき 1 名)、3 ロットの本キット (機器 1 台につき 1 ロット) で、5 日間に渡り 1 日 2 回 5 重測定し、各パネルにつきそれぞれ計 150 回測定した。

代表的な結果の例を表 5 に示す。施設内標準偏差 (SD) は、CMV DNA 濃度 2.70 ~ 8.00 Log IU/mL (500 ~ 100,000,000 IU/mL) では 0.25 Log IU/mL 以下、1.70 ~ 2.70 Log IU/mL 未満 (50 ~ 500 IU/mL 未満) では 0.50 Log IU/mL 以下であった。

表5 再現性

パネル	N ^d	平均						
		(Log IU /mL)	測定内 SD	測定間 SD	日差間 SD	施設内 SD ^a	機器間 SD ^b	総 SD ^c
1	149	1.35	0.28	0.00	0.05	0.28	0.07	0.29
2	147	1.63	0.18	0.05	0.00	0.19	0.03	0.19
3	150	1.92	0.10	0.02	0.00	0.10	0.06	0.12
4	149	2.65	0.08	0.02	0.00	0.09	0.07	0.11
5	149	3.98	0.06	0.03	0.00	0.07	0.03	0.07
6	150	4.99	0.06	0.03	0.00	0.07	0.05	0.08
7	150	6.98	0.05	0.04	0.02	0.07	0.09	0.11
8	149	8.34	0.06	0.01	0.00	0.06	0.11	0.12

^a 施設内 SD は、測定内成分、測定間成分、日差成分を含んでいる。

^b 機器間 SD の成分は機器、試薬ロット、測定者である。

^c 総 SD は、測定内成分、測定間成分、日差成分、機器間成分を含んでいる。

^d 有効測定数。

(7) 希釈測定

無希釈サンプルの測定値と希釈測定したサンプルの測定値とを比較し、2.5 倍希釈測定の評価を行った。CMV 濃度 225 ~ 200,000,000 IU/mL の血漿パネル 5 例を使用し、各パネルを複数回に渡り無希釈測定または希釈測定した。5 例のパネルの、平均値の差 (希釈測定 - 無希釈測定) の範囲は 0.03 ~ 0.16 Log IU/mL であった。

(8) 希釈測定の再現性

3 例の血漿パネルを使用して、希釈測定の再現性の検討を行った。パネル 1 とパネル 2 は培養ウイルスを CMV 陰性サンプルに添加して調製し、パネル 3 はプラスミド DNA を CMV 陰性サンプルに添加して調製した。各パネルは 3 台の機器、3 ロットの検体希釈液、3 ロットの本キット、3 名の測定者で (機器 1 台につき検体希釈液 1 ロット、本キット 1 ロット、測定者 1 名)、5 日間に渡り 1 日 2 回 5 重測定し、それぞれ計 150 回測定した。

代表的な結果の例を表 6 に示す。

表6 希釈測定の再現性

パネル	N ^a	平均						
		(Log IU /mL)	測定内 SD	測定間 SD	日差間 SD	施設内 SD ^b	機器間 SD ^c	総 SD ^d
1	149	3.69	0.06	0.03	0.00	0.06	0.02	0.07
2	148	5.00	0.05	0.03	0.02	0.06	0.01	0.06
3	147	8.31	0.08	0.00	0.06	0.10	0.10	0.14

^a 有効測定数。

^b 施設内 SD は、測定内成分、測定間成分、日差成分を含んでいる。

^c 機器間 SD の成分は機器、試薬ロット、検体希釈液ロット、測定者である。


^d 総 SD は、測定内成分、測定間成分、日差成分、機器間成分を含んでいる。

(9) 相関性試験成績

1) 既承認品との相関 -1

CMV DNA 陽性血漿を測定することにより、本キットと A 社キットを比較した。造血幹細胞移植 (HSCT) 患者、固形臓器移植 (SOT) 患者、その他免疫不全症患者から採取した検体、およびウイルスまたは CMV DNA を含むプラスミドを血漿に添加して調製したサンプルを使用した。測定結果が両方のキットで定量範囲内であった 124 例を、Deming 法で解析した。結果を図 3 に示す。平均バイアス (本キット - A 社キット) は 0.16 Log IU/mL (95%信頼区間 0.13 ~ 0.20) であった。臨床検体と調製検体に分けて Deming 法で解析を行ったところ、臨床検体 63 例の結果は相関係数 0.922、傾き 0.98 (95%信頼区間 0.86 ~ 1.10)、切片は 0.27 Log IU/mL (95%信頼区間 -0.18 ~ 0.73)、調製検体 61 例の結果は相関係数 0.993、傾き 0.99 (95%信頼区間 0.96 ~ 1.02)、切片は 0.20 Log IU/mL (95%信頼区間 0.00 ~ 0.40) であった。


図 3 A 社キットとの相関性

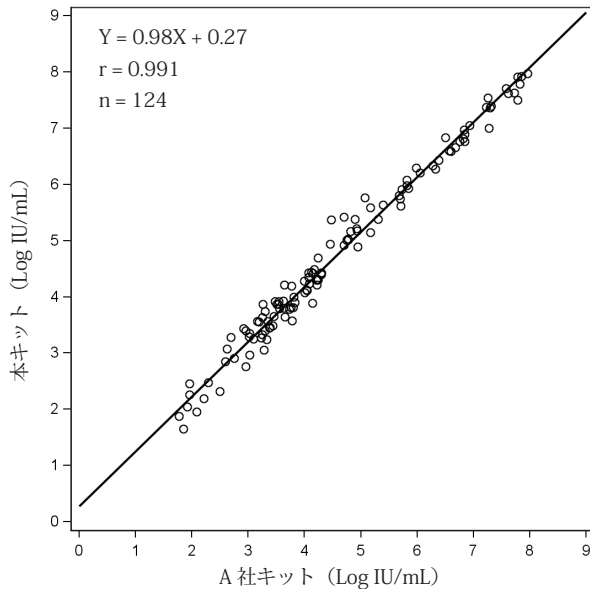

2) 既承認品との相関 -2

本キットと B 社キットとの相関性を検討するため、造血幹細胞移植患者および臓器移植患者から採取した検体を用いて、測定結果が両方のキットで定量範囲内であった 177 例を Deming 法で解析した。図 4 は Deming 法での解析結果を示しており、傾き 0.99、切片 0.17、相関係数 0.974 であり、平均バイアス (本キット - B 社キット) は、0.14 Log IU/mL (95%信頼区間 0.11 ~ 0.18) であった。

図 4 B 社キットとの相関性

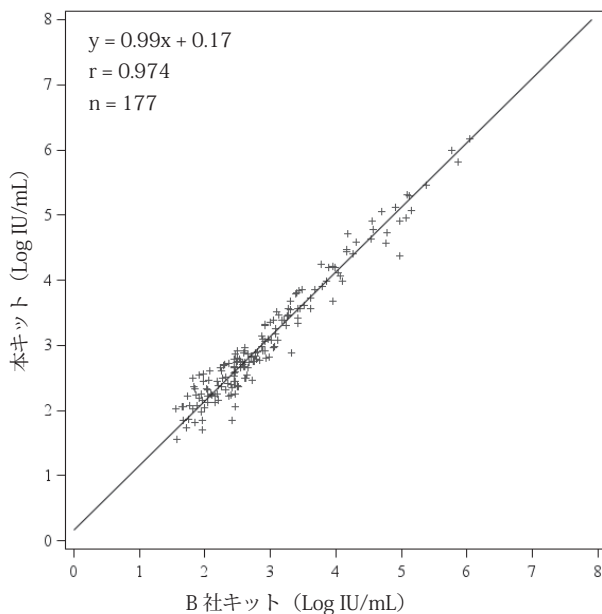

(10) 校正用の基準物質

本キットでは、校正用基準物質として 1st World Health Organization (WHO) International Standard for Human Cytomegalovirus for Nucleic Acid Amplification Techniques (NIBSC code: 09/162) を用いている。

【使用上又は取扱い上の注意】

(1) 取扱い上 (危険防止) の注意

- ・本キットの測定では、ヒト検体を取り扱う。検体は、HIV、HBV、HCV 等の感染の恐れがあるものとして取り扱うこと。検査にあたっては、感染の危険を避けるため、専用の着衣、眼鏡、マスクおよび使い捨て手袋を着用し、また口によるピペッティングは行わないこと。検体や試薬類を扱う場所では、飲食、喫煙、化粧およびコンタクトレンズの取り扱いをしないこと。
- ・注意：本測定で使用する試薬類には、ヒト由来および / または潜在的に感染性のある物質が含まれている。詳細は、【形状・構造等 (キットの構成)】または【用法・用量 (操作方法)】を参照すること。ヒト血液由来物質は FDA が承認または認可した適切な測定キットにおいて、HCV 抗体陰性、HIV-1 抗体陰性、HIV-2 抗体陰性、HBs 抗原陰性、HIV-1 抗原陰性、Syphilis 陰性であり、また FDA が承認または認可した適切な PCR 法において、HIV-1 RNA 陰性、HCV RNA 陰性、HBV DNA 陰性である。ヒト由来物質または不活化微生物が完全に感染伝播しないことを保証する試験は知られていない。試薬類およびヒト検体は、Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories¹、OSHA Standard on Bloodborne Pathogens²、CLSI Document M29-A4³、他の適切なバイオセーフティ基準⁴に従って取り扱うこと。すべてのヒト由来物質は潜在的に感染性があると考えること。
- ・試薬が誤って目や口に入った場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けること。
- ・本測定で使用する試薬類には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているものがある。詳細は、【形状・構造等 (キットの構成)】または【用法・用量 (操作方法)】を参照すること。酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。内容物および容器は適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す。

・増幅・検出試薬トレイ 1



危険	トリシヒドロキシメチルアミノメタン、プロテアーゼ K を含む
H315	皮膚刺激
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H319	強い眼刺激
H334	吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ
H335	呼吸器への刺激のおそれ
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P264	取扱後は手をよく洗うこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
P284	換気が不十分な場合：呼吸用保護具を着用すること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P304+P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P305+P351+P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P312	気分が悪い時は医師に連絡すること。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P337+P313	目の刺激が続く場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P342+P311	呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

保管	
P405	施錠して保管すること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す。
・ 活性試薬トレイ 2



危険	塩化テトラメチルアンモニウム、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンを含む
H302	飲み込むと有害
H316	軽度の皮膚刺激 ^a
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H370	臓器の障害
H412	長期継続的影響により水生生物に有害

安全対策

P260	ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
P264	取扱後は手をよく洗うこと。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P273	環境への放出を避けること。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。

応急措置

P301+P312	飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師に連絡すること。
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P308+P311	ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

廃棄

P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。
------	------------------------

^a EC 1272/2008 (CLP) または OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 を適用する場合は該当しない。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す。
・ キャリブレーション



警告	2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、アジ化ナトリウムを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
EUH032	酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する

安全対策

P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。

応急措置

P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

廃棄

P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。
------	------------------------

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す。 ・ 陽性コントロール L	
---	--



警告	2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン (EC No. 247-500-7) と 2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オン (EC No. 220-239-6) の混合物 (3:1)、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン (EC No. 247-500-7) と 2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン (EC No. 220-239-6) の混合物 (3:1) を含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H402 ^a	水生生物に有害
H412	長期継続的影響により水生生物に有害

安全対策

P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P273	環境への放出を避けること。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。

応急措置

P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

廃棄

P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。
------	------------------------

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す。
・ 陰性コントロール
・ 陽性コントロール H



警告	2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、アジ化ナトリウムを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
EUH032	酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する

安全対策

P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。

応急措置

P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

廃棄

P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。
------	------------------------

^a EC 1272/2008 (CLP) を適用する場合は該当しない。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す。
・ 溶出液 2



警告	2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

安全対策

P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。

応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当を受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す。

・磁性粒子 2



危険	水酸化ナトリウムを含む
H318	重篤な眼の損傷
安全対策	
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
応急措置	
P305+P351+P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P310	直ちに医師に連絡すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す。

・ライシス溶液



危険	グアニジンチオシアン酸塩を含む
H302+H312+H332	飲み込んだり皮膚に接触したり吸入すると有害
H314	重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
H412	長期継続的影響により水生生物に有害
EUH032	酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する
安全対策	
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
P273	環境への放出を避けること。
P264	取扱後は手をよく洗うこと。
応急措置	
P305+P351+P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P303+P361+P353	皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。
P301+P330+P312	飲み込んだ場合：口をすすぐこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。
P304+P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P301+P330+P331	飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
P310	直ちに医師に連絡すること。
P363	汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
P405	施錠して保管すること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す。

・希釈液



警告	2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当を受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

廃棄

P501 内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す。

・検体希釈キット I

グアニジンチオシアン酸塩を含む

EUH032 酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する

廃棄

P501 内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

安全データシート（SDS）は試薬類の安全な取り扱い、輸送および廃棄に関する重要な情報が記載されたものである。

安全データシートについては、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

機器操作中の安全上の注意の詳細については、機器取扱説明書の 7 章と 8 章を参照すること。

(2) 使用上の注意

一般的な注意事項

- ・使用期限を過ぎた試薬類を使用しないこと。
- ・キット内または異なるキットの試薬を混ぜて使用しないこと。
- ・同一のロット番号の試薬であっても試薬を注ぎ足すことはしないこと。

試薬の輸送

凍結で輸送する。

試薬の保存

アルミパウチ包装の破損を防ぐため、増幅・検出試薬トレイ 1 (AMP TRAY 1) と活性試薬トレイ 2 (ACT TRAY 2) は元の箱に戻しておくことを推奨する。アルミパウチ包装は、試薬トレイを機器にセットする直前に開封すること。試薬類を機器にセットすると機器上積算時間のトラッキングが開始される。

	保存温度	最長保存期間
未開封	2 ~ 8℃	使用期限まで
機器上	機器の設定温度	30 日間

(ただし使用期限を超えないこと)

試薬の取扱い

- ・破損が認められる試薬類は使用しないこと。
- ・試薬トレイを取り扱う際は、なるべくトレイ表面に触れないよう注意すること。
- ・1 台のアクセイトレイキャリアには最大 2 ロットのアクセイトレイ (増幅・検出試薬トレイ 1 と活性試薬トレイ 2) をセットすることができる。ただし、トレイ 1 とトレイ 2 は元の増幅・検出試薬キットのロット番号が同じものを組み合わせること。
- ・増幅・検出試薬トレイ 1 と活性試薬トレイ 2 は、機器にセットされていた時間がトラッキングされている。規定の積算時間を超えた増幅・検出試薬トレイ 1 と活性試薬トレイ 2 は使用できなくなる。
- ・機器操作中の試薬の取扱い上の注意については、機器取扱説明書の 8 章を参照すること。

試薬の劣化

- ・キャリブレーションやコントロールの測定でエラーが発生した場合や、コントロールの測定値が繰り返し管理範囲を外れる場合は、試薬が劣化している可能性が考えられる。
- ・凍結で輸送される。施設で受領した後は 2 ～ 8℃で保存すること。受領した試薬類が上記に従って取り扱われていなかった場合や、破損が認められる場合は弊社にご連絡ください。
- ・トラブルシューティングについては、機器取扱説明書の 10 章を参照すること。

キャリブレータの輸送

凍結で輸送する。

キャリブレータの保存

	保存温度	最長保存期間
未開封	-25 ～ -15℃	使用期限まで
機器上	機器の設定温度	4 時間経過後は廃棄

キャリブレータの取扱い

- ・キャリブレータの容器は、ピアサブルキャップ付きの単回使用チューブである。チューブを箱から取り出した後は、キャップの汚染や破損に注意すること。キャリブレータは、機器にセットされていた積算時間がトラッキングされている。キャリブレータのチューブを機器にセットすると機器上積算時間のカウントが開始される。規定の積算時間を超えたキャリブレータは自動的に使用できなくなる。
- ・機器操作中のキャリブレータの取扱いについては、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

キャリブレータの使用手順

キャリブレーションの方法については、機器取扱説明書の 6 章を参照すること。

キャリブレータのロット固有の濃度は、機器のアボットメール、弊社担当者から入手可能である。

キャリブレーションを行う場合は以下に従う。

- ・キャリブレータ（キャリブレータ A、キャリブレータ B）のチューブのバーコードを読み取ると、ロット固有の濃度がアボットメールを通じて自動的に機器にインポートされる。
- ・弊社担当者を通じてロット固有の濃度を入手し、USB ドライブから機器にインポートすることもできる。キャリブレータのオーダー方法および機器へのセット方法については、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

キャリブレーションを行うには、キャリブレータ A とキャリブレータ B のチューブが各 1 本必要である。各キャリブレータのチューブを使用して 3 重測定が行われる。2 濃度のキャリブレータの測定結果を元に、検量線が作成される。キャリブレータのチューブは単回使用である。

- ・キャリブレータを 15 ～ 30℃または 2 ～ 8℃で融解する。
- ・キャリブレータの融解後は、2 ～ 8℃で 24 時間まで保存することができる。
- ・2 ～ 8℃の保存場所から取り出した後、すぐに使用可能である。
- ・機器にセットする前に、各キャリブレータをボルテックスミキサーで 2 ～ 3 秒間× 3 回攪拌する。攪拌後、チューブを作業台の上で軽く叩き、溶液をチューブの底に落とす。
- ・キャリブレータをユニバーサルサンプルラックにセットする。

コントロールの輸送

凍結で輸送する。

コントロールの保存

	保存温度	最長保存期間
未開封	-25 ～ -15℃	使用期限まで
機器上	機器の設定温度	4 時間経過後は廃棄

コントロールの取扱い

- ・コントロールの容器は、ピアサブルキャップ付きの単回使用チューブである。チューブを箱から取り出した後は、キャップの汚染や破損に注意すること。コントロールは、機器にセットされていた積算時間がトラッキングされている。コントロールのチューブを機器にセットすると機器上積算時間のカウントが開始される。規定の積算時間を超えたコントロールは自動的に使用できなくなる。
- ・機器操作中のコントロールの取扱いについては、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

コントロールの使用手順

陽性コントロールのロット固有の濃度は、機器のアボットメール、弊社担当者から入手可能である。

コントロールを測定する場合は以下に従う。

- ・コントロール（陰性コントロール、陽性コントロール L、陽性コントロール H）のチューブのバーコードを読み取ると、ロット固有の濃度がアボットメールを通じて自動的に機器にインポートされる。
- ・弊社担当者を通じてロット固有の濃度を入手し、USB ドライブから機器にインポートすることもできる。

コントロールのオーダー方法および機器へのセット方法については、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

陰性コントロール、陽性コントロール L、陽性コントロール H のチューブは単回使用である。

- ・コントロールを 15 ～ 30℃または 2 ～ 8℃で融解する。
- ・コントロールの融解後は、2 ～ 8℃で 24 時間まで保存することができる。
- ・2 ～ 8℃の保存場所から取り出した後、すぐに使用可能である。
- ・機器にセットする前に、各コントロールをボルテックスミキサーで 2 ～ 3 秒間× 3 回攪拌する。攪拌後、チューブを作業台の上で軽く叩き、溶液をチューブの底に落とす。
- ・コントロールをユニバーサルサンプルラックにセットする。

核酸抽出試薬キット 2 の輸送

2 ～ 8℃で輸送する。

核酸抽出試薬キット 2 の保存

破損を防ぐため、元の箱に戻して保存することを推奨する。

	保存温度	最長保存期間
未開封	2 ～ 8℃	使用期限まで
機器上	機器の設定温度	10 日間 (ただし使用期限を超えないこと)

核酸抽出試薬キット 2 の取扱い

- ・磁性粒子 2 は磁性粒子を含む。ボトルやキットを強い磁場の中に置かないこと。
- ・キットを日光などの線源に直接さらさないこと。
- ・破損が認められる試薬類は使用しないこと。
- ・核酸抽出試薬キットは、機器にセットされていた積算時間がトラッキングされている。規定の積算時間を超えた核酸抽出試薬キットは自動的に使用できなくなる。
- ・使用期限を超えた場合は使用しないこと。
- ・機器にセットする前に、核酸抽出試薬キット 2 の各試薬パックを 20 ～ 30 秒間転倒混和してよく攪拌する。
- ・機器操作中の核酸抽出試薬キットの試薬類の取扱いについては、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

核酸抽出試薬キット 2 の使用手順

核酸抽出試薬キット 2 の機器へのセット方法については、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

ライシス溶液の輸送

室温で輸送する。

ライシス溶液の保存

	保存温度	最長保存期間
未開封	15 ～ 30℃	使用期限まで
機器上	機器の設定温度	30 日間経過後は廃棄 (ただし使用期限を超えないこと)

ライシス溶液の使用手順

ライシス溶液の機器へのセット方法については、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

その他の詳細については、機器取扱説明書の 1 章および 5 章を参照すること。

希釈液の輸送

室温で輸送する。

希釈液の保存

	保存温度	最長保存期間
未開封	15 ～ 30℃	使用期限まで
機器上	機器の設定温度	30 日間経過後は廃棄 (ただし使用期限を超えないこと)

希釈液の使用手順

希釈液の機器へのセット方法については、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

その他の詳細については、機器取扱説明書の 1 章および 5 章を参照すること。

蒸発防止溶液の輸送

室温で輸送する。

蒸発防止溶液の保存

	保存温度	最長保存期間
未開封	15 ～ 30℃	使用期限まで
機器上	機器の設定温度	使用期限まで

蒸発防止溶液の使用手順

蒸発防止溶液の機器へのセット方法については、機器取扱説明書の 5 章を参照すること。

その他の詳細については、機器取扱説明書の 1 章および 5 章を参照すること。

検体希釈キット I の保存

	保存温度	最長保存期間
未開封	15 ～ 30℃	使用期限まで

キャリブレーション、コントロール、その他試薬類の劣化

- キャリブレーションやコントロールの測定でエラーが発生した場合や、コントロールの測定値が繰り返し管理範囲を外れる場合は、キャリブレーション、コントロール、その他試薬類が劣化している可能性が考えられる。
- キャリブレーション、コントロールは凍結で輸送される。施設で受領した後は -25 ～ -15℃ で保存すること。受領したキャリブレーション、コントロール、その他試薬類が輸送条件や保存条件に従って取り扱われていなかった場合や、破損が認められる場合は弊社にご連絡ください。
- トラブルシューティングについては、機器取扱説明書の 10 章を参照すること。

(3) 廃棄上の注意

- 検体中には HIV、HBV、HCV 等の感染性のものが存在する恐れがあるので、廃液、使用済み器具などは適切な方法により滅菌処理を行うこと。詳細については、機器取扱説明書の 8 章を参照すること。
- 試薬および器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理および清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理すること。
- 検体が飛散した場合には、飛散した溶液を吸収剤で吸収し、飛散した場所を洗浄液で拭き取った後、さらに 1.0% 次亜塩素酸ナトリウム溶液などの適切な消毒剤で拭き取ること。作業は適切な保護用具（手袋、安全眼鏡、実験衣など）を着用して行うこと。
- 本測定で使用する試薬類には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているものがある。詳細は、【形状・構造等（キットの構成）】または【用法・用量（操作方法）】を参照すること。アジ化ナトリウムは、鉛管、銅管と反応して爆発性の金属アジドを生成することがあるので、廃棄する場合には、大量の水と共に流すこと。安全な廃棄方法の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

【貯蔵方法、有効期間】

貯蔵方法 2 ～ 8℃ に保存する。

有効期間 24 ヶ月

使用期限は、外装に表示されている。

【包装単位】

Alinity m システム CMV	製品番号 9N46-96 : 192 回用
・ 増幅・検出試薬トレイ 1	48 回用 × 4
・ 活性試薬トレイ 2	48 回用 × 4

【主要文献】

1. US Department of Health and Human Services. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories*. 6th ed. Washington, DC: US Government Printing Office; December 2020. [Also available online. Type> www.cdc.gov, search>BMBL>look up sections III and IV.]
2. US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. 29 CFR Part 1910.1030. Bloodborne Pathogens.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Fourth Edition*. CLSI Document M29-A4. Wayne, PA: CLSI; 2014.
4. World Health Organization. *Laboratory Biosafety Manual*. 3rd ed. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2004.

【問い合わせ先】

アボットジャパン合同会社

カスタマーサポートセンター

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台 278

TEL 0120-031441

【製造販売業者の名称及び住所】

アボットジャパン合同会社

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台 278

TEL 047 (385) 2211 (代表)

© ABBOTT JAPAN LLC 2022

すべての商標の所有権は、各商標の所有権者に帰属します。