

** 使用の前に本電子添文をよくお読みください。

クラス I 血液・生化学検査用シリーズ 80026001

スポットケム™ D ALP


ALP [ALP2] *

** 【全般的な注意】

本品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないでください。
診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて、総合的に判断してください。
電子添文に記載された使用方法および使用目的以外での使用については、保証致しません。
使用する装置の電子添文および取扱説明書にしたがって使用してください。

【形状・構造等(キットの構成)】

本品はストリップ状であり、試薬パッドは検体保持層、試薬層、支持体からなる多層構造をしています。

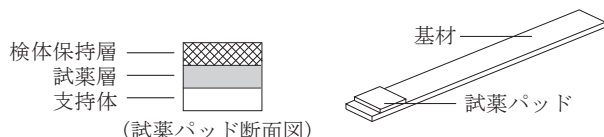

本品は100枚中に下記の成分を含有します。

<ALP(血液検査用アルカリ性フォスファターゼキット)>


p-ニトロフェニルリン酸ジ(2-アミノ-2-エチル-1,3-
プロパンジオール)塩.....2.0 mg

【使用目的】

血清または血漿中のアルカリ性フォスファターゼの測定

【測定原理】

試薬パッドに一定量点着された検体(血清、血漿)は、まず検体保持層全面に均一に展延します。展延した検体は、試薬層に到達し、これを溶解し反応が進行します。検体中のアルカリ性フォスファターゼは、基質であるp-ニトロフェニルリン酸に作用し、これを加水分解して、黄色のp-ニトロフェノールとリン酸を生成します¹⁾。この反応が進行しながら試薬層は完全に溶解して検体保持層に吸収され、両者は一体となって検出層を形成します。この検出層で生成された黄色の呈色物質を比色定量します。

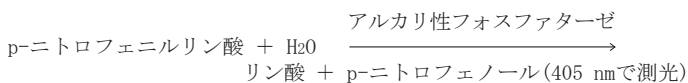

【操作上の注意】

** 本品はスポットケム Dコンセプトシリーズ専用試薬です。

<検体について>

検体の取り扱いについては次の点に注意してください。注意を怠ると正しい測定結果が得られなかったり、測定不能の原因となります。

1. 溶血をさせて採取した新鮮な検体で測定してください。
2. 測定できる検体は血清、血漿のみです。これら以外の検体を測定しないでください。
 - ・血清を用いる場合
血清分離に先立ち、血液が十分に凝固していることを確認してください。
 - ・血漿を用いる場合
採血後すみやかに遠心分離をしてください。その際、血球が残らないように注意してください。
3. 血清、血漿分離後、フィブリンが浮遊している場合は除去してください。装置のノズルが詰まる原因となります。
4. キュベット(検体容器)にはスポットケムD専用キュベットを使用してください。使用するキュベットについては専用測定装置の取扱説明書にしたがってください。

5. 検体を分注する際は気泡が入らないようにしてください。気泡が入った場合には、必ず気泡を取り除いてから測定してください。
6. 冷蔵または冷凍保存されていた検体を使用する際には、測定環境温度(10~30℃)にもどしてから測定してください。
7. 血清、血漿分離後はすみやかに測定してください。
8. 蒸発防止のため、検体保存の際はキャップをしっかりと閉めてください。
9. 測定範囲上限を超える検体を測定する際の希釈液には、生理食塩水もしくはプール血清を使用してください。

<抗凝固剤・解糖阻止剤について>

血漿検体を測定に使用する際には、下記表で○のついた抗凝固剤もしくは解糖阻止剤を使用してください。

ヘパリンナトリウム	○
ヘパリンリチウム	○
EDTA	×(負誤差を生じます)
クエン酸三ナトリウム	×(負誤差を生じます)
シュウ酸二ナトリウム	×(負誤差を生じます)
モノヨード酢酸ナトリウム	○
フッ化ナトリウム ^{注1)}	×

注1) フッ化ナトリウム入りの採血管で採血した検体は測定できません。フッ化水素を発生し、専用測定装置に重大な損傷を与えることがあります。

<妨害物質について>

1. 下記の物質は、括弧内の濃度以上では測定値に影響を及ぼします。
 - ビリルビンC: 負誤差(10 mg/dL)
 - 溶血: 正誤差(ヘモグロビン250 mg/dL)
2. 下記の物質は、括弧内の濃度以下では測定値に影響を及ぼしません。
 - ビリルビンF(20 mg/dL)、乳ビ(1550ホルマジン濁度)
 - アスコルビン酸(20 mg/dL)、尿酸(20 mg/dL)
3. その他測定値に影響を及ぼす要因は下記のとおりです。
 - ・テオフィリンを投与された患者の検体は使用しないでください。
 - ・胎盤由来のALPを含む試料では低値、小腸由来のALPを含む試料では高値となることがあります。
 - ・ALP活性は徐々に上昇する傾向にありますので、採血後はすぐに血清あるいは血漿分離して、すみやかに測定してください。
 - ・凍結検体および凍結乾燥検体では融解および溶解後にALP活性の上昇が見られます²⁾。

<試薬について>

本品をアルミパックから取り出す際は試薬パッド部分に触れないでください。また、試薬パッドが剥がれないように、本品が湾曲しないようにも注意してください。

【用法・用量(操作方法)】

<操作法(概要)>

1. 新しいロットの試薬を使って測定する場合は、必ずキャリブレーションを行ってください。
2. アルミパックを測定環境温度(10~30℃)にもどしてください。
3. 本品をアルミパックより取り出してください。本品をアルミパックから取り出した後は放置せず、ただちに使用してください。
4. 本品および検体を分注したキュベットを専用測定装置にセットし測定を開始します。詳細は専用測定装置の取扱説明書にしたがってください。

<用法・用量>

1. 検体6.0 μ Lを試薬パッド表面に点着します。
2. 405 nmにおける試薬パッド表面の反射率を測定し、一定時間中の反射率変化量を求めます。
3. 反射率変化量から検量線を用いてALP濃度を求めます。

<キャリブレーションについて>

キャリブレーションの方法は、ご使用の装置により異なり、キャリブレータを用いる方法とロットカード（磁気カード）または2次元コードを用いる方法の3種類があります。

1. キャリブレータを用いる方法
スポットケムD専用キャリブレータキット(1、2、3)を使用します。詳細は専用測定装置のリファレンスマニュアルおよびキャリブレータの添付文書にしたがってください。
2. ロットカードを用いる方法
同梱のロットカードを専用測定装置に読み込ませることによって、キャリブレーションは完了します。新しいロットの試薬を使って測定する場合は、必ずロットカードを専用測定装置に読み込ませてください。引き続き同一ロットの試薬を使用する場合はこの操作は必要ありません。詳細については、専用測定装置の取扱説明書をお読みください。
3. 2次元コードを用いる方法
外箱に印刷されたReagent Info. の2次元コードを専用測定装置に読み込ませることによって、キャリブレーションは完了します。新しいロットの試薬を使って測定する場合は、必ず2次元コードを専用測定装置に読み込ませてください。引き続き同一ロットの試薬を使用する場合はこの操作は必要ありません。詳細については、専用測定装置の取扱説明書をお読みください。

**【測定結果の判定法】

参考基準範囲 38~113 U/L ^{3), 注2)}

基準範囲は種々の条件下、各検査室により変動する可能性がありますので、各施設にて適した値を設定してください。

注2) 酵素検査項目の測定単位は、使用する装置によって、「IU/L」で表示される場合があります。

【性能】

** 1. 性能

<感度>

1. 精製水を検体として操作するとき、ALP濃度の測定値はすべて45 U/L未満です。
2. ALP濃度95 U/Lの管理用物質を検体として操作するとき、ALP濃度の測定値は71~119 U/Lの範囲内です。

<正確性>

ALP濃度既知の管理用物質(95 U/L、347 U/L)を測定するとき、ALP濃度の測定値は既知濃度の $\pm 25\%$ 以内にありま

<同時再現性>

同一検体(95 U/L、347 U/L)を10回同時に測定するとき、測定値の変動係数(CV%)は8%以下です。

<測定範囲>

45~1400 U/L

* 2. 相関性試験成績

99例の血清検体について、本法(Y)とIFCC対応法(X)との相関性試験を行った結果、相関係数 $r=0.994$ 、回帰式 $y=0.979x+4.2$ の成績を得ました。

** 3. 校正用の基準物質（標準物質）

JCCLS CRM-001

【使用上又は取扱い上の注意】

<取扱い上(危険防止)の注意>

1. 検体はHIV、HBV、HCV等の感染の危険性があるものとして取り扱ってください。
2. 検体を取り扱うときは、感染の危険性を考慮して使い捨ての手袋を着用するなど、慎重に取り扱ってください。
3. アルミパックから本品を取り出す際には手を怪我しないように注意してください。
4. 検体が皮膚に付着したり、目や口に入ったりしないように注意してください。誤って皮膚に付着したり、目や口に入ったりした場合には、ただちに水で十分に洗浄するなど

<使用上の注意>

本品使用の際には次のような点に注意してください。注意を怠ると正しい測定結果が得られなかったり、測定不能の原因となります。

1. 本品は必ず2~8℃で保存してください。
2. 有効期限の過ぎたものは使用しないでください。
3. 有効期限内であっても、試薬パッドが変色、変形しているものは使用しないでください。また本品を落として試薬パッドが汚れたり、水滴などの液体が試薬パッドについた場合も本品は使用しないでください。
4. 本品基材には測定に必要なバーコード情報を印刷していますので、基材部分を汚したり、湾曲させたりしないでください。
5. アルミパックにピンホールなどの穴が開いていたり、中に入っている乾燥剤が砕けている際も本品は使用しないでください。
6. 一度使用した本品は再度使用しないでください。また、キューベット、ピペットチップも一度使用したものは再度使用しないでください。

<廃棄上の注意>

感染のおそれがある検体を測定した場合は、使用済の本品、測定した残りの検体、キューベットおよびチップを必ず適切な処理をした後、廃棄してください。廃棄の際には、環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」にしたがって適切に処理してください。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法
冷蔵(2~8℃)で保存してください。
2. 有効期間
1年(有効期限はアルミパックおよびパッケージに記載)

【包装単位】

アルミパック	25枚(1箱中)
ロットカード(磁気カード)	1枚(1箱中)

【主要文献】

1. Tietz, N. W., et al: Clinica Chimica Acta, 339F-367F(1983)
2. 臨床検査学講座第2版 臨床化学検査学
- * 3. 日本臨床検査標準協議会 JCCLS共用基準範囲(2020年2月3日)

【問合わせ先】

アークレイ お客様相談室
滋賀県甲賀市甲南町柑子1480 〒520-3306
TEL 0120-103-400<通話料無料>
(平日 8:30~18:00、土曜日 8:30~12:00)