






<TG>
検体中のトリグリセライドは、リボプロテインリパーゼによって加水分解されてグリセロールになります。グリセロールはATPの存在下でグリセロールキナーゼの作用によりグリセロール-3-リン酸を生じ、このグリセロール-3-リン酸はグリセロール-3-リン酸オキシダーゼの触媒作用により酸化されて過酸化水素を生成します¹⁾²⁾³⁾⁴⁾。生じた過酸化水素は、ペルオキシダーゼの触媒作用によって4-アミノアンチピリン、DAOSを酸化縮合して、青色の呈色物質を生成します。この呈色物質を比色定量します。

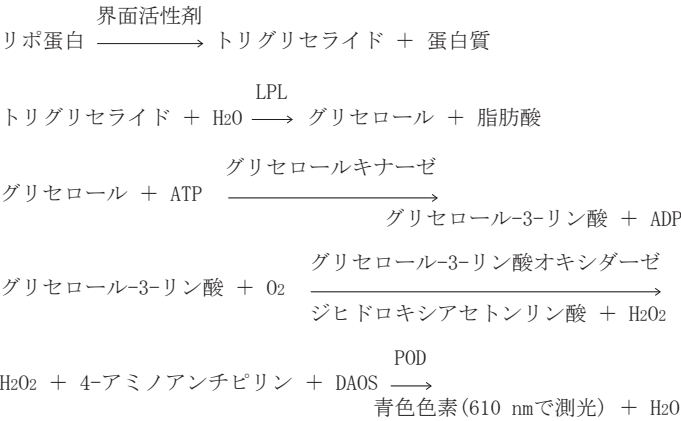


<UA>
検体中の尿酸は、ウリカーゼの触媒作用によって、特異的に酸化されてアラントインと過酸化水素を生成します⁵⁾。生じた過酸化水素はペルオキシダーゼの触媒作用によって、4-アミノアンチピリン、TOSを酸化縮合して、赤紫色の呈色物質を生成します。この呈色物質を比色定量します。

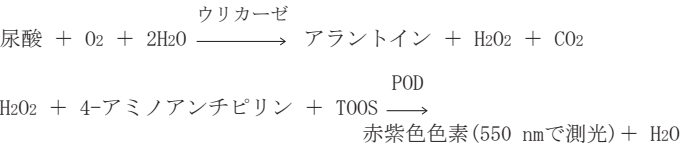

<GLU>
検体中のグルコースは、グルコースオキシダーゼの触媒作用によって、特異的に酸化されてグルコン酸と過酸化水素を生成します。生じた過酸化水素はペルオキシダーゼの触媒作用によって、4-アミノアンチピリン、1-ナフトール-3,6-ジスルホン酸二ナトリウムを酸化縮合して、赤紫色の呈色物質を生成します。この呈色物質を比色定量します。

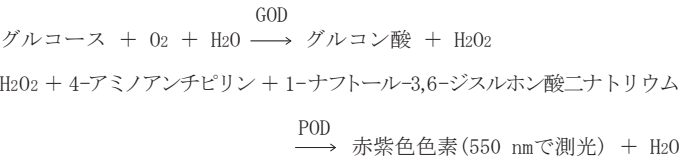

<CRE2>
検体中のクレアチニンは、クレアチナーゼの作用によって、クレアチンを生成します。クレアチンはクレアチナーゼの作用によって、ザルコシンを生成します。ザルコシンはザルコシンオキシダーゼの作用によって、過酸化水素を生成します。このとき生じた過酸化水素はペルオキシダーゼの作用によって、4-アミノアンチピリン、DAOSを酸化縮合して、青色色素を生成します⁶⁾。この呈色物質を比色定量します。

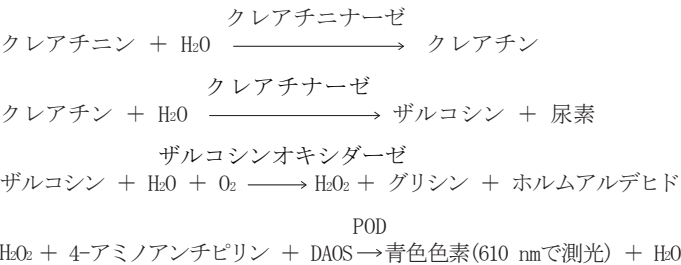

【操作上の注意】

- ※※ 本品はスポットケム Dコンセプトシリーズ専用試薬です。
- <検体について>
検体の取り扱いについては次の点に注意してください。注意を怠ると正しい測定結果が得られなかったり、測定不能の原因となります。
1. 溶血をさけて採取した新鮮な検体で測定してください。
 2. 測定できる検体は血清、血漿のみです。これら以外の検体を測定しないでください。
 - ・血清を用いる場合
血清分離に先立ち、血液が十分に凝固していることを確認してください。
 - ・血漿を用いる場合
採血後すみやかに遠心分離をしてください。その際、血球が残らないように注意してください。
 3. 血清、血漿分離後、フィブリンが浮遊している場合は除去してください。装置のノズルが詰まる原因となります。
 4. キュベット(検体容器)にはスポットケムD専用キュベットを使用してください。使用するキュベットについては専用測定装置の取扱説明書にしがってください。
 5. 検体を分注する際は気泡が入らないようにしてください。気泡が入った場合には、必ず気泡を取り除いてから測定してください。
 6. 冷蔵保存されていた検体を使用する際には、測定環境温度(10～30℃)にもどしてから測定してください。
 7. 血清、血漿分離後はすみやかに測定してください。
 8. 蒸発防止のため、検体保存の際はキャップをしっかりと閉めてください。
 9. 測定範囲上限を超える検体を測定する際は、以下の希釈液を使用してください。
 - ・HDL 生理食塩水、プール血清
 - ・TC BSA水溶液(7 g/dL)、プール血清
 - ・TG 生理食塩水、BSA水溶液(7 g/dL)、プール血清
 - ・UA プール血清
 - ・GLU 生理食塩水、BSA水溶液(7 g/dL)、プール血清
 - ・CRE2 生理食塩水
- <抗凝固剤・解糖阻止剤について>
血漿検体を測定に使用する際には、下記表で○のついた抗凝固剤もしくは解糖阻止剤を使用してください。

ヘパリンナトリウム	○
ヘパリンリチウム	○
EDTA	○
クエン酸三ナトリウム	○
シュウ酸二ナトリウム	○
モノヨード酢酸ナトリウム	○
フッ化ナトリウム ^{※1)}	×

注1)フッ化ナトリウム入りの採血管で採血した検体は測定できません。フッ化水素を発生し、専用測定装置に重大な損傷を与えることがあります。

<妨害物質について>

- ・HDL
 1. 下記の物質は、括弧内の濃度以上では測定値に影響を及ぼします。
 - ビリルビンF：負誤差(10 mg/dL)
 - ビリルビンC：負誤差(10 mg/dL)
 - 溶血：負誤差(ヘモグロビン250 mg/dL)
 2. 下記の物質は、括弧内の濃度以下では測定値に影響を及ぼしません。
 - 乳ビ(1550ホルマジン濁度)、アスコルビン酸(20 mg/dL)
 - 尿酸(20 mg/dL)
 3. その他測定値に影響を及ぼす要因は下記のとおりです。
 - ・総コレステロール中のHDLの割合が著しく低い検体では、高値となることがあります。
 - ・トリグリセライド500 mg/dL以上の検体では、高値となることがあります。
 - ・蛋白低値検体では正誤差、高値検体では負誤差を生じます。
 - ・検体保存の際は冷蔵保存してください。リボ蛋白の変性を避けるため、凍結保存はしないでください⁷⁾。
- ・TC
 1. 下記の物質は、括弧内の濃度以上では測定値に影響を及ぼします。
 - ビリルビンF：負誤差(10 mg/dL)
 - ビリルビンC：負誤差(20 mg/dL)
 - 溶血：負誤差(ヘモグロビン 500 mg/dL)
 - アスコルビン酸：負誤差(5 mg/dL)
 2. 下記の物質は、括弧内の濃度以下では測定値に影響を及ぼしません。
 - 乳ビ(1550ホルマジン濁度)、尿酸(20 mg/dL)

- ・TG
 1. 下記の物質は、括弧内の濃度以上では測定値に影響を及ぼします。
ビリルビンC：負誤差(10 mg/dL)
 2. 下記の物質は、括弧内の濃度以下では測定値に影響を及ぼしません。
ビリルビンF(20 mg/dL)、溶血(ヘモグロビン 500 mg/dL)
アスコルビン酸(20 mg/dL)、尿酸(20 mg/dL)
 3. その他測定値に影響を及ぼす要因は下記のとおりです。
本品は、遊離グリセロールの除去は行っておりません。点滴などにより遊離グリセロールの影響を受けますので、グリセロールを投与している場合は使用しないでください。

- ・UA
 1. 下記の物質は、括弧内の濃度以上では測定値に影響を及ぼします。
ビリルビンF：負誤差(10 mg/dL)
ビリルビンC：負誤差(10 mg/dL)
溶血：正誤差(ヘモグロビン 250 mg/dL)
 2. 下記の物質は、括弧内の濃度以下では測定値に影響を及ぼしません。
乳ビ(1550ホルマジン濁度)、アスコルビン酸(20 mg/dL)

- ・GLU
 1. 下記の物質は、括弧内の濃度以上では測定値に影響を及ぼします。
溶血：正誤差(ヘモグロビン 250 mg/dL)
アスコルビン酸：負誤差(10 mg/dL)
 2. 下記の物質は、括弧内の濃度以下では測定値に影響を及ぼしません。
ビリルビンF(20 mg/dL)、ビリルビンC(20 mg/dL)
乳ビ(1550ホルマジン濁度)、尿酸(20 mg/dL)
また下記の糖は、括弧内の濃度以下では測定値に影響を及ぼしません。
ラクトース(20 mg/dL)、マルトース(40 mg/dL)
キシリトール(20 mg/dL)、キシロース(20 mg/dL)
ガラクトース(20 mg/dL)、フルクトース(10 mg/dL)
マンノース(10 mg/dL)、ソルビトール(10 mg/dL)

- ・CRE2
 1. 下記の物質は、括弧内の濃度以上では測定値に影響を及ぼします。
ビリルビンC：負誤差(10 mg/dL)
アスコルビン酸：負誤差(10 mg/dL)
クレアチン：正誤差または負誤差(2.5 mg/dL)
 2. 下記の物質は、括弧内の濃度以下では測定値に影響を及ぼしません。
乳ビ(1400ホルマジン濁度)、ヘモグロビン(480 mg/dL)、尿酸(20 mg/dL)

＜試薬について＞

本品をアルミパックから取り出す際は試薬パッド部分に触れないでください。また、試薬パッドが剥がれないように、本品が湾曲しないようにも注意してください。

【用法・用量(操作方法)】

＜操作法(概要)＞

1. 新しいロットの試薬を使って測定する場合は、必ずキャリブレーションを行ってください。
2. アルミパックを測定環境温度(10～30℃)にもどしてください。
3. 本品をアルミパックより取り出してください。本品をアルミパックから取り出した後は放置せず、ただちに使用してください。
4. 本品および検体を分注したキューベットを専用測定装置にセットし測定を開始します。詳細は専用測定装置の取扱説明書にしたがってください。

＜用法・用量＞

- ・HDL
 1. 検体5.0 μ Lを試薬パッド表面に点着します。
 2. 610 nmにおける試薬パッド表面の反射率を測定します。
 3. 測定した反射率から検量線を用いてHDL濃度を求めます。

- ・TC
 1. 検体5.0 μ Lを試薬パッド表面に点着します。
 2. 610 nmにおける試薬パッド表面の反射率を測定します。
 3. 測定した反射率から検量線を用いてTC濃度を求めます。

- ・TG
 1. 検体5.0 μ Lを試薬パッド表面に点着します。
 2. 610 nmにおける試薬パッド表面の反射率を測定します。
 3. 測定した反射率から検量線を用いてTG濃度を求めます。

- ・UA
 1. 検体5.0 μ Lを試薬パッド表面に点着します。
 2. 550 nmにおける試薬パッド表面の反射率を測定します。
 3. 測定した反射率から検量線を用いてUA濃度を求めます。

- ・GLU
 1. 検体4.0 μ Lを試薬パッド表面に点着します。

2. 550 nmにおける試薬パッド表面の反射率を測定します。
3. 測定した反射率から検量線を用いてGLU濃度を求めます。

- ・CRE2
 1. 検体6.0 μ Lを試薬パッド表面に点着します。
 2. 610 nmにおける試薬パッド表面の反射率を測定し、一定時間中の反射率変化量を求めます。
 3. 反射率変化量から検量線を用いてCRE濃度を求めます。

＜キャリブレーションについて＞

キャリブレーションの方法は、ご使用の装置により異なり、キャリブレータを用いる方法とロットカード(磁気カード)または2次元コードを用いる方法の3種類があります。

1. キャリブレータを用いる方法
スポットケムD専用キャリブレータキット(1、2、3)を使用します。詳細は専用測定装置のリファレンスマニュアルおよびキャリブレータの添付文書にしたがってください。
2. ロットカードを用いる方法
同梱のロットカードを専用測定装置に読み込ませることによって、キャリブレーションは完了します。新しいロットの試薬を使って測定する場合は、必ずロットカードを専用測定装置に読み込ませてください。引き続き同一ロットの試薬を使用する場合はこの操作は必要ありません。詳細については、専用測定装置の取扱説明書をお読みください。
3. 2次元コードを用いる方法
外箱に印刷されたReagent Info.の2次元コードを専用測定装置に読み込ませることによって、キャリブレーションは完了します。新しいロットの試薬を使って測定する場合は、必ず2次元コードを専用測定装置に読み込ませてください。引き続き同一ロットの試薬を使用する場合はこの操作は必要ありません。詳細については、専用測定装置の取扱説明書をお読みください。

*【測定結果の判定法】

＜参考基準範囲＞⁶⁾

- ・HDL 男：38～90 mg/dL 女：48～103 mg/dL
- ・TC 142～248 mg/dL
- ・UA 男：3.7～7.8 mg/dL 女：2.6～5.5 mg/dL
- ・GLU 73～109 mg/dL
- ・CRE 男：0.65～1.07 mg/dL 女：0.46～0.79 mg/dL
- ・TG 空腹時 男：40～234 mg/dL 女：30～117 mg/dL

基準範囲は種々の条件下、各検査室により変動する可能性がありますので、各施設にて適した値を設定してください。

【性能】

- ・HDL
 1. 性能
＜感度＞
 1. 精製水を検体として操作するとき、HDL濃度の測定値はすべて10 mg/dL未満です。
 2. HDL濃度52 mg/dLの管理用物質を検体として操作するとき、HDL濃度の測定値は39～65 mg/dLの範囲内です。
＜正確性＞
HDL濃度既知の管理用物質(52 mg/dL、80 mg/dL)を測定するとき、HDL濃度の測定値は既知濃度の $\pm 25\%$ 以内にあります。
＜同時再現性＞
同一検体(52 mg/dL、80 mg/dL)を10回同時に測定するとき、測定値の変動係数(CV%)は10%以下です。
＜測定範囲＞
10～150 mg/dL
 2. 相関性試験成績
45例の血清検体について、本法(Y)とHDL直接法(X)との相関性試験を行った結果、相関係数 $r=0.986$ 、回帰式 $y=0.988x+0.51$ の成績を得ました。

- ** 3. 校正用の基準物質(標準物質)
ReCCS JCCRM224

- ・TC
 1. 性能
＜感度＞
 1. 精製水を検体として操作するとき、TC濃度の測定値はすべて50 mg/dL未満です。
 2. TC濃度156 mg/dLの管理用物質を検体として操作するとき、TC濃度の測定値は132～179 mg/dLの範囲内です。
＜正確性＞
TC濃度既知の管理用物質(156 mg/dL、280 mg/dL)を測定するとき、TC濃度の測定値は既知濃度の $\pm 15\%$ 以内にあります。
＜同時再現性＞
同一検体(156 mg/dL、280 mg/dL)を10回同時に測定するとき、測定値の変動係数(CV%)は5%以下です。
＜測定範囲＞
50～400 mg/dL

2. 相関性試験成績
45例の血清検体について、本法 (Y) とコレステロール脱水素酵素法 (X) との相関性試験を行った結果、相関係数 $r=0.991$ 、回帰式 $y=0.980x+3.51$ の成績を得ました。

****** 3. 校正用の基準物質（標準物質）
NIST SRM911

・TG

1. 性能
＜感度＞
1. 精製水を検体として操作するとき、TG濃度の測定値はすべて25 mg/dL未満です。
2. TG濃度115 mg/dLの管理用物質を検体として操作するとき、TG濃度の測定値は98～132 mg/dLの範囲内です。
＜正確性＞
TG濃度既知の管理用物質(115 mg/dL、256 mg/dL)を測定するとき、TG濃度の測定値は既知濃度の±15%以内にありま

****** 3. 校正用の基準物質（標準物質）
ReCCS JCCRM224

・UA

1. 性能
＜感度＞
1. 精製水を検体として操作するとき、UA濃度の測定値はすべて1.0 mg/dL未満です。
2. UA濃度3.1 mg/dLの管理用物質を検体として操作するとき、UA濃度の測定値は2.6～3.6 mg/dLの範囲内です。
＜正確性＞
UA濃度既知の管理用物質(3.1 mg/dL、9.7 mg/dL)を測定するとき、UA濃度の測定値は既知濃度の±15%以内にありま

****** 3. 校正用の基準物質（標準物質）
NIST SRM913

・GLU

1. 性能
＜感度＞
1. 精製水を検体として操作するとき、GLU濃度の測定値はすべて20 mg/dL未満です。
2. GLU濃度92 mg/dLの管理用物質を検体として操作するとき、GLU濃度の測定値は78～106 mg/dLの範囲内です。
＜正確性＞
GLU濃度既知の管理用物質(92 mg/dL、347 mg/dL)を測定するとき、GLU濃度の測定値は既知濃度の±15%以内にありま

****** 3. 校正用の基準物質（標準物質）
NIST SRM965

・CRE2

1. 性能
＜感度＞
1. 精製水を検体として操作するとき、CRE濃度の測定値はすべて0.2 mg/dL未満です。
2. CRE濃度1.1 mg/dLの管理用物質を検体として操作するとき、CRE濃度の測定値は0.6～1.6 mg/dLの範囲内です。
＜正確性＞
CRE濃度2 mg/dL未満の管理用物質を9回同時に測定するとき、CRE濃度の測定値は既知濃度の±0.48 mg/dL以内にありま

度2 mg/dL以上の管理用物質を9回同時に測定するとき、CRE濃度の測定値は既知濃度の±24%以内にありま

＜同時再現性＞
CRE濃度2 mg/dL未満の同一検体を9回同時に測定するとき、測定値の標準偏差(SD)は0.16 mg/dL以下です。CRE濃度2 mg/dL以上の同一検体を9回同時に測定するとき、測定値の変動係数(CV%)は8%以下です。
＜測定範囲＞
0.2～20.0 mg/dL

2. 相関性試験成績
59例の血清検体について、本法 (Y) と酵素法 (X) との相関性試験を行った結果、相関係数 $r=0.9986$ 、回帰式 $y=1.0239x+0.034$ の成績を得ました。

****** 3. 校正用の基準物質（標準物質）
NIST SRM914

【使用上又は取扱い上の注意】

＜取扱い上(危険防止)の注意＞
1. 検体はHIV、HBV、HCV等の感染の危険性があるものとして取り扱ってください。
2. 検体を取り扱うときは、感染の危険性を考慮して使い捨ての手袋を着用するなど、慎重に取り扱ってください。
3. アルミパックから本品を取り出す際には手を怪我しないように注意してください。
4. 検体が皮膚に付着したり、目や口に入ったりしないように注意してください。誤って皮膚に付着したり、目や口に入ったりした場合には、ただちに水で十分に洗浄するなどの応急処置を行い、医師の手当てを受けてください。

＜使用上の注意＞
本品使用の際には次のような点に注意してください。注意を怠ると正しい測定結果が得られなかったり、測定不能の原因となります。

1. 本品は必ず2～8℃で保存してください。
2. 有効期限の過ぎたものは使用しないでください。
3. 有効期限内であっても、試薬パッドが変色、変形しているものは使用しないでください。また本品を落として試薬パッドが汚れたり、水滴などの液体が試薬パッドについた場合も本品は使用しないでください。
4. 本品基材には測定に必要なバーコード情報を印刷していますので、基材部分を汚したり、湾曲させたりしないでください。
5. アルミパックにピンホールなどの穴が開いていたり、中に入っている乾燥剤が砕けている際も本品は使用しないでください。
6. 一度使用した本品は再度使用しないでください。また、キュベット、ピペットチップも一度使用したものは再度使用しないでください。

* ＜廃棄上の注意＞
感染のおそれがある検体を測定した場合は、使用済の本品、測定した残りの検体、キュベットおよびチップを必ず適切な処理をした後、廃棄してください。廃棄の際には、環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」にしたがって適切に処理してください。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法
冷蔵(2～8℃)で保存してください。
2. 有効期間
1年(有効期限はアルミパックおよびパッケージに記載)

【包装単位】

アルミパック 25枚(1箱中)
ロットカード(磁気カード) 1枚(1箱中)

* 【主要文献】

1. Spayd, R. W., Bruschi, B., et al.: Clin. Chem., 24, 1343-1350 (1978)
2. 福井 巖：日本臨床、43巻(秋期臨時増刊号)、340～346 (1985)
3. 松宮和人：Medical Technology Vol. 11 No. 6 495～501 (1982)
4. 松宮和人：Medical Technology Vol. 11 No. 12 1201～1206 (1983)
5. 梁井繁ほか：日本臨床検査自動化学会会誌、20/9、98-101 (1983)
- **** 6. 日本臨床検査標準協議会 JCCLS共用基準範囲(2020年2月3日)
7. 臨床検査学講座第2版 臨床化学検査学

【問合わせ先】

アークレイ お客様相談室
滋賀県甲賀市甲南町柑子1480 〒520-3306
TEL 0120-103-400＜通話料無料＞
(平日 8:30～18:00、土曜日 8:30～12:00)

販売元
アークレイ株式会社
京都市南区東九条西明田町57 〒601-8045

製造販売元
株式会社アークレイ ファクトリー
滋賀県甲賀市甲南町柑子1480 〒520-3306