

血液検査用免疫グロブリンAキット

ビトロス[®] マイクロチップ IgA

届出番号: 13E1X00002000004

【全般的な注意】

- ・本製品は、体外診断用医薬品であり、指定された目的以外には使用しないで下さい。
- ・診断は他の関連する検査結果や臨床症状に基づいて総合的に行ってください。
- ・本電子添文において示された以外の使用方法については保証を致しません。
- ・使用する機器及び試薬の電子添文又は取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。
- ・本製品には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。また、アジ化ナトリウムは金属アジ化物を形成するので、廃棄に際しては十分な水で洗い流して下さい。

【形状・構造等（キットの構成）】

ビトロス マイクロチップ IgA

- 1) 試薬1
- 2) 試薬2
抗ヒトIgAヤギポリクローナル抗体

【使用目的】

血清又は血漿中の免疫グロブリンA (IgA) の測定

【測定項目について】

免疫グロブリンA (IgA) は、血清免疫グロブリンの10～15%を占めます。¹⁾ IgAの血清中での正確な役割は不明確ですが、微生物の付着防止や、ウィルスの付着および侵入の阻害による感染に対して抵抗する役割がわかっています。²⁾ IgA濃度は、再発した感染症、輸血反応によるアナフィラキシーにより増加します。また、慢性肝疾患、慢性の感染症、下部消化管腫瘍および炎症性腸管疾患でもIgA増加が見られます。IgAは、毛細管拡張性運動失調症の診断、多発性ミエローマのMタイプとの区別、IgGミエローマの経過の評価の指標とされます。IgAの低下は、遺伝子欠損によるものと、免疫不全疾患、非IgA多発性ミエローマ、マクログロブリン血症が複合している場合があります。³⁾

【測定原理】


ビトロス マイクロチップ IgAは免疫比濁法を用いて、以下の2ステップ反応により検体中のIgAを測定します。

ステップ1: 検体を生理食塩液で希釈し、ポリマー粒子を含む試薬1と混和します。

ステップ2: 上記検体に試薬2を加えて、抗ヒトIgAヤギポリクローナル抗体と検体中のIgAを一定時間反応させ、IgA-抗ヒトIgAヤギポリクローナル抗体の複合体を形成させます。

ステップ2における反応前後の透過光の減少率を波長340nmにおける吸光度として測定します。

IgA既知濃度の標準液を検体と同様に操作して、標準曲線を作成し、標準曲線から検体中のIgA量を求めます。

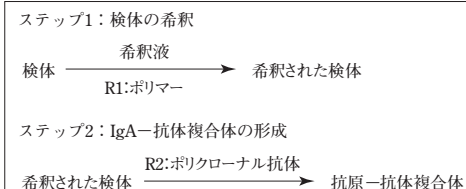

【操作上の注意】

- 1) 測定試料の性質、採取法
血清又は血漿
・抗凝固剤としてヘパリン、EDTAを使用して下さい。
・標準的な採血方法で、採血して下さい。
・EDTA血漿を使用する場合、負誤差を生じる可能性があるもので、最低でも採血管の半分以上採血するようにして下さい。
・検体を繰り返し凍結融解しないで下さい。
・採血後、2時間以内に検体を遠心分離し、血清または血漿を血球成分から分離して下さい。
・検体は18～28℃で1日間、2～8℃で7日間、-18℃以下で4週間保存できます。
- 2) 妨害物質、妨害薬剤
・多発性ミエローマ、アミロイドーシスや他のリンパ増殖性疾患のようなモノクローナル免疫グロブリンが異常高値になった場合、IgA測定値に影響する可能性があります。⁴⁾
・ある種の薬剤は、*in vivo*においてIgAの測定値に影響を与えることが報告されています。詳しくは主要文献を参照して下さい。^{5), 6)}
- 3) その他
・本測定において検体中のIgAは、8000mg/dLまで抗原過剰効果はみられません。
・破損している又は封入が不完全など、目視により損傷が認められる場合は使用しないで下さい。

【用法・用量（操作方法）】

- 1) 試薬の調製方法
・全ての試薬はそのまま使用します。
・機器に装填した試薬は、電源ONの状態で4週間使用可能です。
- 2) 必要な器具・器材・試料等
・ビトロス キャリブレーター キット 20
*・コントロール
・希釈液: FS 希釈液パック2 (生理食塩液 (Di))
- 3) 測定（操作）法
臨床化学自動分析装置を使用します。
(1) 検体6.7 μ Lに生理食塩液 (Di) を93.3 μ L加えて検体を希釈します。
(2) 希釈した検体4.1 μ Lに試薬1を150 μ L加え、37℃で5分間反応させ、340nmにおける吸光度を測定します。
(3) 上記反応液に試薬2を10 μ L加え、37℃で5分間反応させ、340nmにおける吸光度を測定します。
(4) (3)と(2)の吸光度の差を求めます。
(5) IgA既知濃度の標準試薬を用いて、上記(1)～(4)と同様に操作し、作成された標準曲線から検体中のIgA濃度を読み取ります。

【測定結果の判定法】

参考基準範囲

70～400 mg/dL

本範囲は、外部研究結果に基づいています。⁷⁾


母集団により変動があるため、各施設でご検討下さい。

【性能】

- 1) 性能
 - (1) 感度
管理用検体 (IgA濃度0 mg/dL) を測定するとき、測定値は40mg/dL以下となります。
 - (2) 正確性
既知濃度の管理用検体を測定するとき、既知濃度の $\pm 20\%$ 以内にありま。
 - (3) 同時再現性
同一検体を5回以上同時に測定するとき、測定値のCV値は10%以下となります。
 - (4) 測定範囲
40.0～800.0 mg/dL

2) 相関性試験成績

本製品(y)と他社キット(x)との相関は以下の通りです。

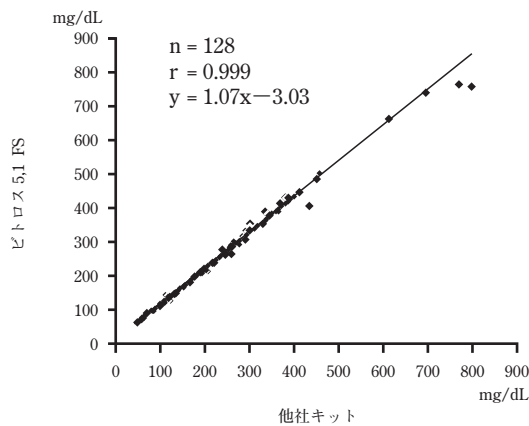

3) 校正用の基準物質 (標準品) CRM470 (IRMM/IFCC)

【使用上又は取り扱い上の注意】

1) 取扱い上 (危険防止) の注意

- すべての検体、コントロール及びキャリブレーターは、感染の可能性があるものとして取り扱って下さい。
- 本製品には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
- 身体汚染防止のため、作業室内では、ゴム手袋、専用の実験衣、安全メガネを着用して下さい。
- 作業室内では、飲食・喫煙はしないで下さい。又ピペットを口で吸わないで下さい。

2) 使用上の注意

- 作業室内全体の十分な換気をお勧めします。

3) 廃棄上の注意

- 不要な検体・ヒト由来の試薬、測定済み試薬、廃液及び汚染されたチップ等は、感染の危険性があるものとして適切な滅菌処理を行った後、廃棄して下さい。〔例：殺菌剤処理（次亜塩素酸ナトリウム液（有効塩素濃度1,000ppm以上）又は2%グルタルアルデヒド液、1時間以上）又はオートクレーブ滅菌処理（121℃、20分以上）〕。
- 本製品にはアジ化ナトリウムが含まれています。アジ化ナトリウムは金属アジ化物を形成するので、廃棄に際しては十分な水で洗い流して下さい。

【貯蔵方法・有効期間】

1) 貯蔵方法

2～8℃で保存して下さい。

2) 有効期間

16ヵ月

使用期限は、製品に表示してあります。使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装単位】

製品コード	製品名	包装
081057	ビットロスマイクロチップIgA	50テスト×6本

【主要文献】

- Burtis C, Ashwood,ED(ed). Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed. Philadelphia, PA; WB Saunders Co; 508; 1999.
- Ritchie RF(ed). Serum Protein in Clinical Medicine, Volume 1 laboratory Section. Scarborough, ME: Foundation for Blood Research; 11. 01-7; 1996.
- Tietz NW, Pruden E, McPherson RA, Fuhman, SA(eds). Clinical Guide to Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 358-361; 1995.
- Aguzzi F, Merilini G, Whicher JT: Serum Monoclonal Components, in Ritchie RF(ed): Serum Proteins in Clinical Medicine, Volume 1 Laboratory Section, 1st Edition, Washington, D.C, AACC, pp 11.03 1-12, 1996.
- Young DS. *Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests*. ed 4. Washington, D.C.: AACC Press 2000.
- Freidman RB, Young DS. *Effects of Disease on Clinical Laboratory Tests*. D.C.: AACC Press 1997.
- Consensus of a Group of Professional Societies and Diagnostic Companies on Guidelines for Interim Reference Ranges for 14 Proteins in Serum Based on the Standardization against the IFCC/BDR/CAP Reference Material(CRM470). Eur J Clin Chem Biochem 1996; 34; 517-520.

*【問い合わせ先】

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
お客様サポートセンター Tel.0120-03-6527
〒104-0053 東京都中央区晴海二丁目1番40号
晴海プライムスクエア

*【製造販売元】

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社
お客様サポートセンター Tel.0120-03-6527
〒104-0053 東京都中央区晴海二丁目1番40号
晴海プライムスクエア