

この添付文書をよく読んでから使用して下さい。

※※ 2021 年 8 月改訂 (第 5 版)

※ 2012 年 8 月改訂 (第 4 版)

体外診断用医薬品

製造販売認証番号: 21200AMZ00311000

尿酸キット

シカリキッド UA

【全般的な注意】

1. 本品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないで下さい。
2. 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の関連する結果等と合わせて担当医師が総合的に判断して下さい。
3. 添付文書に記載された使用方法に従って使用して下さい。記載された使用方法及び使用目的以外での使用については、測定値の信頼性を保証致しかねます。
4. 使用する機器の添付文書及び取扱い説明書をよく読んでから使用して下さい。

【形状・構造等 (キットの構成)】 ※※

シカリキッド UA 試薬 1

N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-m-トルイジン・ナトリウム (TOOS)

シカリキッド UA 試薬 2

4-アミノアンチリン (4-AA)
ウリカーゼ


【使用目的】

血清、血漿又は尿中の尿酸 (UA) の測定

【測定原理】

1. 測定原理

UA はウリカーゼによって酸化され、過酸化水素 (H_2O_2) を生じます。生成した H_2O_2 を TOOS と 4-AA の酸化縮合による青紫色の色素生成に導きます。この色素の生成量を測定することにより、検体中の UA 濃度を測定します。

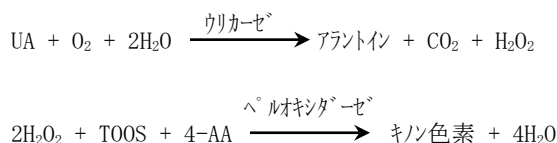

2. 特徴

- (1) 試薬調製の不要な無調製タイプです。
- (2) ウリカーゼ、TOOS を用いた高感度な測定法です。

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質、採取法

- (1) 測定には血清、血漿又は尿を使用して下さい。
- (2) 検体は採取後、直ちに測定に用います。すぐに測定しない場合は密栓して凍結保存して下さい。但し、凍結融解を繰返した検体の測定については、測定値の信頼性を保証致しかねます。
- (3) 抗凝固剤のクエン酸、シュウ酸、フッ化物又は高濃度の EDTA はウリカーゼの活性を低下させます。

- (4) 尿を検体とする場合には、生理食塩水で 10~20 倍に希釈後測定して下さい。
2. 妨害物質
 - (1) 検体中の妨害物質の影響は、ヘモグロビン 500 mg/100 mL、抱合型及び遊離型ビリルビン 16 mg/100 mL、乳び 2000 ホルマジン濁度、アスコルビン酸 30 mg/100 mL まで影響を認めません。
 - (2) 高濃度のグルチコンは、測定値に影響を与えます。
3. その他
 - (1) 採血管使用時、採血量が適量以下の場合、測定値に影響を及ぼす事があります。
 - (2) 検体により、検体中の目的成分以外の物質との反応や妨害反応を生じる事があります。測定値や測定結果に疑問がある場合は、再検査や希釈再検査、あるいは他の検査法により確認して下さい。

【用法・用量 (操作方法)】 ※、※※

1. 試薬調製法

試薬溶液-1: 試薬 1 をそのまま使用します。

試薬溶液-2: 試薬 2 をそのまま使用します。

標準液: 別売の尿酸標準液または、マルチキャリブ 3M を使用して下さい。

2. 操作法

本品は各種自動分析装置に使用されますので、その操作法の一例を示します。

(自動分析装置 操作法例)

(日立 7180 自動分析装置の場合)

主波長 600 nm、副波長 700 nm

検体	4 μ L	試薬 2	
試薬 1	150 μ L	50 μ L	
	測光 1	測光 2	
0 分	5 分	10 分	
吸光度 = 測光 2 - 測光 1			
反応温度: 37 $^{\circ}$ C、試薬ブランク: 精製水又は生理食塩水			

3. 適応機種

日立 7000 シリーズ、日本電子バイオメスティ、ヤシロ TBA-FR シリーズ、バックマン・コールター AU シリーズ等、各種分析装置へのアプリケーションシートを揃えておりますので、弊社までお問い合わせ下さい。

【測定結果の判定法】

高尿酸血症病態識別値¹⁾

血清: 7.0 mg/100 mL 以上

参考正常値²⁾

尿: 0.4~1.2 g/day

使用する基準値は、各施設で決定して下さい。

【性能】

(試験法は弊社試験法による)

- 感 度：ア) 精製水を試料として操作した場合の吸光度は 0.026 以下です。
イ) 10 mg/100 mL の標準液を試料として操作した場合の吸光度からア) の盲検値を減じた値は 0.128～0.158 の範囲です。
- 正確性：濃度が既知の検体を測定するとき、既知濃度の 90～110 % の値が得られます。
- 再現性：弊社管理試料を 10 回同時に測定するとき、濃度 5～20 mg/100 mL の CV 値は 5 % 以下です。
- 測定可能範囲：0～50 mg/100 mL
- 相関性試験成績：他製品との相関性
(X=他製品 Y=本製品 N=150)
血清：Y=0.958X + 0.154 r=0.999

【使用上又は取扱い上の注意】

- 取扱い上の注意
 - 検体は HIV、HBV、HCV 等の感染の恐れがあるものとして取り扱って下さい。検査に当たっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペティングを行わないで下さい。
 - 本品には防腐剤が含有されていますので、皮膚等に付着した場合は直ちに多量の水で洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
- 使用上の注意
 - 試薬は開封後速やかに使用し、保存する場合はキャップを閉めて貯蔵方法に従い保存して下さい。
 - 有効期間を過ぎた試薬は使用しないで下さい。
 - 本品中の容器、付属品等は他の目的に転用しないで下さい。
 - 各々の自動分析機に対応した専用容器に移し替える必要がある場合は、よく洗浄した容器を使用し原則として試薬の注ぎ足しは行わないで下さい。
 - 試薬使用後は、速やかに装置の洗浄を行って下さい。
- 廃棄上の注意
 - 検体が付着した器具、試薬及び試薬容器等は感染の危険性があるものとし、オートクレーブ等で滅菌処理するか、1 %次亜塩素酸等の消毒液に浸して処理して下さい。
 - 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

【貯蔵方法、有効期間】

- 貯蔵方法：2～8 ℃で保存
- 有効期間：1 箇年（使用期限は外装に記載してあります。）

【包装単位】 ※、※※

1. シカリット[®] UA

商品コード [°]	商品名 (タイプ [°])	容量
77433	シカリット [®] UA (LR) 試薬 1	300 mL×3
77434	シカリット [®] UA (LR) 試薬 2	150 mL×3
77435	シカリット [®] UA (MR) 試薬 1	90 mL×3
77436	シカリット [®] UA (MR) 試薬 2	40 mL×3
77476	シカリット [®] UA (7170) 試薬 1	60 mL×4
77477	シカリット [®] UA (7170) 試薬 2	20 mL×4
77582	シカリット [®] UA (EX) 試薬 1	60 mL×4
77583	シカリット [®] UA (EX) 試薬 2	20 mL×4
77739	シカリット [®] UA (EPS) 試薬 1	70 mL×4
77740	シカリット [®] UA (EPS) 試薬 2	70 mL×2
77767	シカリット [®] UA (EPS200) 試薬 1	200 mL×3
77768	シカリット [®] UA (EPS150) 試薬 2	150 mL×2
75255	シカリット [®] UA (EM) 試薬 1	35 mL×2
75256	シカリット [®] UA (EM) 試薬 2	15 mL×2

2. 別売品

商品コード [°]	商品名	容量	上位標準物質
77938	マルチキャリブ [®] 3M	5 mL×3	HECTEF CRM GN
77100	尿酸標準液 (10mg/100mL)	10 mL×6	NIST SRM913a

【主要文献】

- 加賀美年秀：高尿酸血症の定義と治療基準、プリン・ピリミジン代謝，20：162-165，1996。
- 金井正光：臨床検査法提要，32：1806，2005

【参考文献】

- 西岡久寿樹：血清尿酸，日本臨床 43 巻秋季臨時増刊号：247-253，1985。

【問い合わせ先】

関東化学株式会社 ライフサイエンス部
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1
Tel 03-6214-1091

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】※

関東化学株式会社
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1
Tel 03-6214-1091