

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 21700AMY00217000

クラスⅢ免疫検査用シリーズ
ABO式血液型キット, Rh式血液型キット

DG Gel カイノス ABO/Rh (2D) カード

(ゲルカラム遠心凝集法血液型判定用抗体)


【全般的な注意】

1. 本製品は体外診断用医薬品です。これ以外の目的に使用しないでください。
2. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状などに基づいて総合的に判断してください。
3. 電子添文に記載以外の使用方法については保証を致しません。
* 記載以外の用量や濃度の異なる赤血球浮遊液では、偽陰性又は偽陽性の原因となることがあります。正しい検査結果を得るため、赤血球浮遊液の調製にDG Gel Sol以外の希釈液を使用しないでください。
4. 使用する機器の電子添文及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。DG Gelカード用以外の遠心機を使用しないでください。
5. 本製品にはヒト由来モノクローナル抗体が含まれています。HBs抗原、HCV抗体、HIV抗体の検査を行い、陰性の結果を得ておりますが、感染の危険性を完全に否定できる検査法がありません。また、それ以外のウイルスに関する検査はしておりませんので、感染の危険性があるものとして、検体と同様に取扱いには十分注意してください。

【形状・構造等 (キットの構成)】

* 本製品は次の構成試薬を含む 8 本のマイクロチューブから構成されています。マイクロチューブは反応槽とカラムからなり、カラムには緩衝液とゲルが充填されています。すべての構成試薬には 0.09%のアジ化ナトリウムが含まれています。

1. 抗A抗体チューブ : (A)
抗A抗体 (マウス由来モノクローナル抗体) 含有ゲル
2. 抗B抗体チューブ : (B)
抗B抗体 (マウス由来モノクローナル抗体) 含有ゲル
3. 抗AB抗体チューブ : (AB)
4. 抗D抗体チューブ : (D^{VI-})
抗D抗体 (ヒト由来モノクローナル抗体) 含有ゲル
5. 抗D'抗体チューブ : (D^{VI+})
抗D'抗体 (ヒト由来モノクローナル抗体) 含有ゲル
6. コントロールチューブ : (Ctl.)
7. ニュートラルチューブ : (N/A1, N/B)

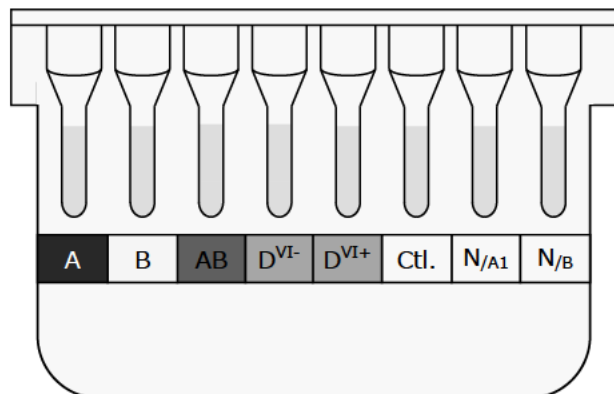

【使用目的】

ABO 血液型の判定における赤血球上の A 抗原の検出
ABO 血液型の判定における赤血球上の B 抗原の検出
Rh 血液型の判定における赤血球上の D (Rh₀) 抗原の検出

【測定原理】

本法は赤血球凝集反応を用いたゲルカラム遠心凝集法に基づいています。抗 A 抗体 (マウス由来モノクローナル抗体) 含有ゲル、抗 B 抗体 (マウス由来モノクローナル抗体) 含有ゲル、抗 D 抗体 (ヒト由来モノクローナル抗体) 含有ゲル及び抗 D'抗体 (ヒト由来モノクローナル抗体) 含有ゲルは、それぞれ対応する抗原と特異的に反応し、赤血球を凝集させます。

凝集した赤血球は微粒子フィルターにより分離され、凝集塊としてカラム内 (上部～中間部) にバンドを形成し、凝集していない赤血球はカラム底部に沈殿します。この凝集の有無により、ABO 及び RhD 血液型の判定を行います。

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質、採取方法
 - 1) EDTA、クエン酸ナトリウム又はヘパリンナトリウムで採取した血液を使用してください。
 - 2) 溶血、白濁又は汚染された検体は使用しないでください。
 - 3) ABO及びRhD血液型判定における抗原検出には、検体として赤血球を使用してください。検査はできるだけ新鮮な検体を使用し、直ちに検査できない場合、冷蔵 (2～8℃) で保存してください。
 - 4) CPD, CPDA又はSAG-マンニトールにより採血された赤血球は冷蔵 (2～8℃) で保存すれば、血液バッグに記載の最終有効年月日まで使用することができます。血液バッグのセグメントの赤血球を使用するときは、赤血球浮遊液を調製する前に生理食塩液で赤血球を洗浄してください。
 - 5) ABO血液型のウラ検査には、検体として血漿又は血清を使用してください。検査はできるだけ新鮮な検体を使用し、直ちに検査できない場合、冷蔵 (2～8℃) で保存してください。長期間保管する場合、冷凍 (-20℃以下) で保存してください。
2. 妨害物質・妨害薬剤
 - 1) 強度の溶血、乳び、汚染された検体及び凝固した検体は、偽陽性又は偽陰性の結果を引き起こす可能性があります。
 - 2) 古い検体や溶血した検体は、新鮮な検体と比較して反応が弱くなることがあります。
 - 3) 高力価抗体の検体は、赤血球を完全に被覆し、自己凝集の原因となることがあります。
 - 4) 高濃度の血清タンパク、血清・血漿中の高分子溶液の存在、又は臍帯血液検体中のWharton's Jellyの存在は、赤血球の非特異的凝集の原因となることがあります。検査を行う前に赤血球を洗浄してください。
 - 5) ABO血液型の亜型は、抗原の発現が弱く、検出されないことがあります。
 - 6) 白血病や他の悪性疾患の患者では、抗原の発現が弱い可能性があります。

7) 抗凝固剤が十分でない血漿や、不完全に凝固した検体の血清を使用した場合、残留フィブリンがカラムの上部で凝集していない赤血球を捕捉し、ピンク又は赤みを帯びた層として現れることがあります。結果は正しく解釈できますが、陰性反応ではこの部分凝集が、誤った解釈を招く可能性があります。検体を再凝固させた後に検査を行ってください。

- ** 8) 新生児、高齢者、免疫不全患者及び透析患者など、同種凝集素が低いあるいは無い患者では、オモテ検査とウラ検査の結果が一致しないことがあります。
- ** 9) D抗原の発現が非常に弱い場合や変異がある場合、検出されないことがあります。
- ** 10) 本製品の抗A抗体は、Tn抗原と反応する可能性があります。
- ** 11) 凝集していない赤血球がカラム内で非常に微細な赤い点や斑点のように見えることがあります。これは非特異的反応であり、判定結果に影響を与えるものではありません。

【用法・用量（操作方法）】

1. 試薬の調製方法

使用前に室温（18～25℃）に戻し、マイクロチューブをカバーしているアルミシールを取り除いてから使用してください。
アルミシールを取り除いた後は直ちに使用してください。

2. 検体の調製方法

検体を冷蔵・冷凍保存していた場合、使用前に室温（18～25℃）に戻してください。
検体として赤血球を使用する場合、DG Gel Sol を用いて 5% 赤血球浮遊液を調製してください。
例：1 mL の DG Gel Sol に 50 μL の赤血球沈査を加えます。

3. 必要な器具・器材・試料等

- 1) マイクロピペット（10 μL、50 μL、1 mL）
2) ディスポーザブルピペットチップ
** 3) ガラス製又はプラスチック製の試験管
4) DG Gel Sol
5) カード用遠心機 DG Spin^{※1}
6) ウラ検査用赤血球試薬

* ※1 DG Gelカード専用の全自動輸血検査装置を使用する場合、機器の取扱説明書を参照してください。

4. 測定（操作）法

- 1) ウラ検査用赤血球試薬A₁及びBを均一に浮遊させ、ニュートラルチューブ（N/A₁）にA₁赤血球試薬を50 μL、ニュートラルチューブ（N/B）にB赤血球試薬を50 μL分注します。
- 2) 血漿又は血清をニュートラルチューブ（N/A₁、N/B）に50 μL加えます^{※2}。
- 3) 5%赤血球浮遊液を均一に浮遊させ、N/A₁、N/B以外の各マイクロチューブ（A、B、AB、D^{VI-}、D^{VI+}、Ctl.）に10 μL分注します^{※2}。
- 4) DG Spinを用いて、DG Gelカードを110 gで9分間遠心します。
- 5) 目視にて結果を読み取り、判定します。

※2 キャリーオーバーを防ぐため、ピペットの先端がマイクロチューブの壁や内容物に接触しないように注意して分注してください。

5. 精度管理

- 1) 精度管理のため、既知の陽性及び陰性コントロールを各検査において実施してください。
- * 2) 予期しない結果がコントロールから得られた場合、機器・試薬・使用した材料すべてが適正であることを確認してください。

【測定結果の判定法】


1. 判定法

- ** 1) 反応態度、凝集の有無、溶血の有無で結果を判定します。
陰性：マイクロチューブ内に赤血球の凝集や溶血が見られません。赤血球はカラムの底部に沈殿しています。
陽性：マイクロチューブ内に赤血球の凝集や溶血が見られます。凝集した赤血球がカラム全体に残存し、異なる反応態度を示すことがあります。カラムの底に沈渣を形成する可能性があります。
- ** 2) A、B及びD抗原が正常に発現している検体では、強い陽性反応が得られます。
- ** 3) A、B及びD抗原の発現が弱い、部分的に発現している場合、弱い陽性反応を示す可能性があります。ABO血液型の亜型A₂もまた、弱い発現を示すことがあります。

** 結果の読み取り（判定法）

陰性	0	カラムの底部に凝集していない赤血球沈渣があり、カラムの他の部分に凝集塊がない
陽性	+/-	カラムの下部にわずかな小凝集塊と、カラムの底部に凝集していない赤血球沈渣
	1+	カラムの下半分に小凝集塊 カラムの底部に凝集していない小さな赤血球沈渣が見られることがある
	2+	カラム全体に小～中程度の大きさの凝集塊 カラムの底部に凝集していない赤血球沈渣が見られることがある
	3+	カラムの上半分に中程度の大きさの凝集塊
部分凝集	4+	カラムの上部に凝集した赤血球がはっきりとしたバンドを形成 凝集した赤血球がバンドの下に見えることがある
	DP	赤血球のバンドがカラムの上部にある、又はカラム全体に分散しており、カラムの底部に凝集していない赤血球沈渣がある
溶血	H	マイクロチューブ内の溶血で、カラム内の赤血球が非常に少ないか、全くない

結果の概要（反応パターン）

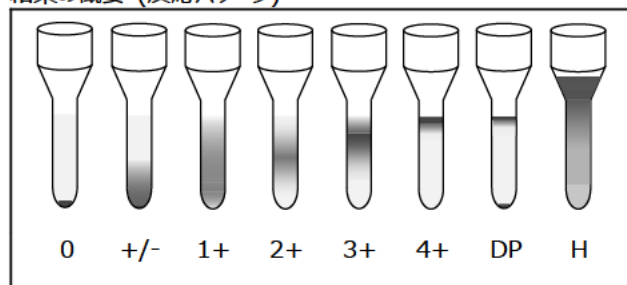

結果の解釈（ABO血液型）

オモテ検査				ウラ検査		判定
A	B	AB	Ctl.	N/A ₁	N/B	
0	0	0	0	+	+	O型
+	0	+	0	0	+	A型
0	+	+	0	+	0	B型
+	+	+	0	0	0	AB型

+ = 陽性 0 = 陰性

結果の解釈 (RhD血液型)

D ^{VI-}	D ^{VI+}	Ctl.	判定
+	+	0	RhD陽性
0	0	0	RhD陰性
0	+	0	weak D partial D
+	0	0	

+ = 陽性 0 = 陰性

2. 判定上の注意

- * 1) 結果の読み取りはDG Gelカードの遠心後、直ちに行ってください。試薬の蒸発を防ぐためにパラフィルムなどでシールし、立てた状態で冷蔵 (2～8℃) で保管することができます。この場合、結果の読み取りは遠心後24時間以内に行ってください。遠心後24時間以降に読み取りした場合、弱い陽性検体は凝集が消失することがあります。
- ** 2) コントロールチューブ (Ctl.) の結果は陰性を示します。連鎖形成、強い寒冷凝集、その他の原因によって陽性となった場合、判定保留としてください。赤血球を生理食塩液で洗浄した後、赤血球浮遊液を調製して再検査を行ってください。再検査の結果が陰性であれば検査は有効であり、陽性であれば判定保留とし、その原因を精査してください。
- 3) ABO血液型判定でオモテ検査とウラ検査の結果が一致しない場合、判定保留とし、その原因を精査してください。
- 4) RhD血液型を陰性と判定する場合、間接抗グロブリン試験を実施してください。weak D又はpartial Dを検出可能な試薬を使用して検査してください。
- 5) 抗D抗体チューブ (D^{VI-}) と抗D'抗体チューブ (D^{VI+}) の結果が一致しない場合、weak D又はpartial Dと解釈されます。必要に応じ、精査してください。
- ** 6) 部分凝集の解釈には注意が必要です。すべての部分凝集の症例が検出されるわけではありません。解決には患者の病歴に関する情報と追加検査が必要です。輸血もしくは骨髄移植歴のある患者からの検体は部分凝集する可能性があります。部分凝集は、一部のABO亜型 (A₃)、Tn抗原、双生児の血液型キメラ、非常に稀に二精子受精からくるモザイクの症例でも観察されています。
- 7) マイクロチューブ内に完全又は部分的な溶血 (上清がカラムがピンク色に染まる) が認められる場合、検体の採取や操作方法が適正であったことを確認して、陽性と判定してください。
- 8) 反応態度が4+の陽性検体では、判定に影響しない形で反応槽に赤血球が残ることがあります。

【性能】

1. 性能

血液型判定用抗体基準 (ゲルカラム遠心凝集法血液型判定用抗体) によります。同時再現性試験については、血液型判定用抗体基準の試験の操作方法に従い、各々3回ずつ同時に試験するとき、本基準に従います。

2. 相関性試験成績

本製品と他社カラム法試薬 (抗A血液型判定用抗体、抗B血液型判定用抗体、抗D血液型判定用抗体) との相関性を検討しました。114検体の赤血球について試験を行ったところ、全例一致し、良好な相関性が得られました。

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 取扱い上 (危険防止) の注意

- * 1) ヒト及び動物由来成分を含むすべての製品、検査に用いる検体はHBV、HCV、HIV等の感染の危険性があるものとして取扱いには十分注意してください。また、検体に接触した器具等は検体と同様、感染の危険性のあるものとして取扱ってください。
- 2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用してください。
- 3) 感染を避けるために口によるピペティングを行わないでください。
- * 4) 本製品にはアジ化ナトリウムが含有されています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合、水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。

2. 使用上の注意

- 1) 微生物汚染、変色、その他の異常が見られる場合、そのDG Gelカードは使用しないでください。
- ** 2) 使用前に各マイクロチューブを確認し、気泡の混入したゲル、ひび割れや亀裂のあるゲル、乾燥したゲル、緩衝液との境界線がないゲルが見られる場合、そのDG Gelカードは使用しないでください。
- ** 3) アルミシールが開封又は破損している場合、そのDG Gelカードは使用しないでください。
- 4) マイクロチューブの上部で液が分散している場合、使用前にDG Gelカードを遠心してください。遠心後に液が下に戻らない場合、そのDG Gelカードは使用しないでください。
- 5) ラベルに記載されている使用期限内に使用してください。
- 6) 本製品は立てた状態で保存してください。
- 7) 本製品は凍結を避け、保管方法に従って保存してください。誤って凍結させた製品は品質が変化して正しい結果が得られないことがあるので使用しないでください。
- ** 8) 過度な熱や、空調設備の吹出口又は換気口に曝された製品は正しい結果が得られない可能性があるため使用しないでください。
- ** 9) 貯蔵又は輸送中に誤った温度での保管が確認された製品は使用しないでください。

3. 廃棄上の注意

- * 1) 本製品を廃棄する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。
- * 2) 検査に使用した器具や試薬等は感染の危険があるものとして適切に処理してください。次亜塩素酸ナトリウム (0.1%以上、1時間以上浸漬)、グルタルアルデヒド溶液 (2%、1時間以上浸漬) による消毒処理又はオートクレーブ (121℃、20分以上) による滅菌処理を行ってください。
- * 3) 本製品が漏出又は飛散した場合、感染の危険があるものとして消毒処理又は滅菌処理を行ってください。
- * 4) 本製品にはアジ化ナトリウムが含有されています。アジ化ナトリウムは鉛、銅等と反応して爆発性の高いアジ化金属を形成することがあるため、廃液等は大量の水で流すよう注意してください。
- * 5) 本製品の容器等は他の目的に転用しないでください。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 保管方法 : 2~8℃
2. 有効期間 : 24ヵ月 (使用期限は容器ラベル及び外箱に表示)

【包装単位】

製品名	管理コード	包装
DG Gel カイノス ABO/Rh (2D) カード	DGC0338	50 カード

【問い合わせ先】

株式会社カイノス 学術部
〒113-0033 東京都文京区本郷 2-38-18
TEL 03 (3816) 4480 FAX 03 (3816) 6544

【製造販売元】

株式会社 **カイノス**

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-38-18

TEL 03 (3816) 4485