

デタミナーCL PIVKA-Ⅱ

<化学発光酵素免疫測定法キット>

製造販売承認番号 22300AMX01236000

【全般的な注意】


1. 本品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないで下さい。
2. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断して下さい。
- ** 3. 電子添文以外の使用方法については保証を致しません。
- ** 4. 使用する機器の電子添文及び取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。
5. 構成試薬(1, 2, 3)はアジ化ナトリウム(0.1%以下)を含有しております。誤って目や口に入れたり、皮膚に着した場合は水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。

【形状・構造等(キットの構成)】

1. SA結合粒子
ストレプトアビジン結合磁性粒子
2. ビオチン化抗体
ビオチン化抗ヒトPIVKA-Ⅱモノクローナル抗体(マウス)
3. 酵素標識抗体
アルカリホスファターゼ標識抗ヒトプロトンピンモノクローナル抗体(マウス)
4. 標準PIVKA-Ⅱ試薬A
脱炭酸プロトンピン
5. 標準PIVKA-Ⅱ試薬B
脱炭酸プロトンピン


1～3の試薬バイアルは、1つのカートリッジに組み込まれています。

カートリッジ（上から見た図）

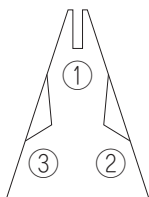

1. SA結合粒子
2. ビオチン化抗体
3. 酵素標識抗体

各試薬バイアル上部の拡大図（横から見た図）

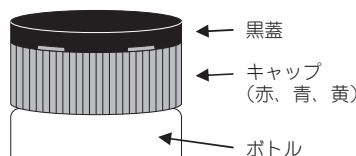

別売品 以下の試薬は別売りしております。組み合わせてご使用下さい。

6. 発光試薬(APS-5)^{注1}
9-(4-クロロフェニルチオホスホリルオキシメチリデン)-10-メチルアクリダンニナトリウム塩

注1 Lumigen®APS-5は、Lumigen社(米国ミシガン州 サウスフィールド)より供給されています。
Lumigen®はLumigen社の登録商標です。

【使用目的】

血清又は血漿中の異常プロトンピン(PIVKA-Ⅱ)の測定(悪性腫瘍の診断の補助等)

【測定原理】

本品は抗ヒトPIVKA-Ⅱモノクローナル抗体(マウス)と抗ヒトプロトロンビンモノクローナル抗体(マウス)を用いた2ステップサンドイッチ法に基づいた化学発光酵素免疫測定(CLEIA法)を原理とし、血清又は血漿中のPIVKA-Ⅱを測定する試薬です。PIVKA-Ⅱを含有する検体にSA結合粒子(ストレプトアビジン結合磁性粒子)、ビオチン化抗体(ビオチン化抗ヒトPIVKA-Ⅱモノクローナル抗体(マウス))を反応させると、SA結合粒子-ビオチン化抗体-検体中PIVKA-Ⅱの複合体が形成されます。この複合体を磁力で集磁した後に洗浄を行い、未反応物を除去した後に酵素標識抗体(アルカリホスファターゼ標識抗ヒトプロトロンビンモノクローナル抗体(マウス))を反応させると、SA結合粒子-ビオチン化抗体-検体中PIVKA-Ⅱ-標識抗体の複合体が形成されます。この複合体を磁力で集磁した後に洗浄を行い、未反応物を除去した後に発光試薬(APS-5)を添加し発光量を測定します。検体中のPIVKA-Ⅱ濃度に応じて発光量は増加し、標準PIVKA-Ⅱ試薬A、Bで予め作成された標準曲線を基に、検体中のPIVKA-Ⅱ濃度を求めることができます。

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質、採取法

- (1)検体は血清、血漿を使用して下さい。
- (2)赤血球・その他の有形成分、沈殿物、浮遊物が含まれている検体(特にフィブリンクロット、クリオグロブリン沈殿など)では、測定値に影響を与える場合があります。使用前に遠心または濾過による除去を行って下さい。
- (3)腐敗、変性等の保存状態の悪い検体は使用しないで下さい。
- (4)検体は採血した日に測定しない場合、凍結保存して下さい。
- (5)凍結融解は1回のみとして、凍結融解を繰り返さないで下さい。
- (6)測定結果の精度管理のため、検体と一緒にコントロール(別売りのデタミナーコントロールCL PIVKA-Ⅱ用 NX)を測定することをお勧めします。
- (7)検体と検体希釈液を機械上もしくは用手により十分混合し、所定時間静置しておくことをお勧めいたします。

2. 妨害物質

- (1)溶血ヘモグロビンは400mg/dLまで測定値に影響はありません。
- (2)遊離型ビリルビン濃度20mg/dL、抱合型ビリルビン濃度20mg/dLまで測定値に影響はありません。
- (3)乳びは1500ホルマジン濁度まで測定値に影響はありません。
- (4)リウマチ因子500IU/mLまで測定値に影響はありません。
- (5)ビオチンは30ng/mLまで測定値に影響はありませんが、高用量のビオチン投与している患者の検体は測定値に負の影響を与えることがあります。
- (6)ビタミンK剤を投与された患者検体では、PIVKA-Ⅱ測定値が低下することがありますので注意して下さい。
- (7)ビタミンK拮抗剤(ワーファリン等)および抗生物質の投与によりPIVKA-Ⅱ測定値が上昇することがありますので注意して下さい。
- (8)測定範囲を外れた高濃度検体は検体希釈液で必要な希釈倍率まで希釈して測定して下さい。

3. その他

- * * (1)本品のご使用に当っては、本電子添文のほか別売試薬それぞれの電子添文もご参照下さい。
- (2)本品は、標準曲線をマスターカーブとしてバーコード管理しています。標準PIVKA-Ⅱ試薬A、Bを用いて、標準曲線の較正を行って下さい。また本品の製造番号が異なる場合は、マスターカーブを改めて入力して下さい。
 - (3)再使用するガラス器具は使用前に洗浄し、よくすすいで、洗浄剤等を完全に除去して下さい。使い捨てガラス器具の使用を推奨します。
 - (4)試薬を溶解するときは、泡立てないよう穏やかに溶解して下さい。
 - (5)ピペット操作は、可能な限り正確に行ってください。
 - (6)製造番号の異なるキット中の試薬を組み合わせ使用しないで下さい。また、同一の製造番号の試薬であっても、試薬を注ぎ足して使用しないで下さい。
 - (7)水は必ず精製水を使用し、水道水は用いないで下さい。
 - (8)試薬及び消耗品は専用のものを使用して下さい。
 - (9)SA結合粒子を横や傾けた状態で長時間放置しないで下さい。
 - (10)本品は、全自動化化学発光免疫測定装置CL-JACK NXの専用試薬です。

【用法・用量(操作方法)】

1. 試薬の調製法

- (1)SA結合粒子
機器にて十分に分散(懸濁)してから使用して下さい。
- (2)標準PIVKA-Ⅱ試薬A、B
 - 1)各バイアルを室内温度(19~26℃)に戻します。
 - 2)アルミキャップ、ゴム栓をはずし、精製水を0.5mLずつ正確に加えます。
 - 3)蓋をして、10分間静置します。
 - 4)泡立てないように注意深く転倒混和し、内容物を完全に溶解します。
 - 5)溶解した標準PIVKA-Ⅱ試薬A、Bは2~8℃で保存し、1週間以内に使用して下さい。
 - 6)1週間以内に使用しない場合は、プラスチック製容器に分注後、-20℃以下で保存して下さい。

(3)洗浄液

1)CL アナライザー洗浄液200mLを精製水1800mLで希釈混和し、室内温度(19~26℃)に戻してから使用して下さい。

2)調製後は常温放置で30日間有効です。

(4)その他の試薬

そのままご使用下さい。

2. 必要な器具・器材・試料等

(1)全自動化学発光免疫測定装置

(2)CL 検体ブロープ洗浄液

(3)キュベット

(4)マイクロピペット

(5)CL アナライザー洗浄液

(6)CL 検体希釈液 PIVKA-Ⅱ用

3. 測定法

(1)測定システムの取扱い方法に従って必要な情報(検体に関する情報)を入力します。

(2)SA結合粒子・ビオチン化抗体・酵素標識抗体は、予め黒蓋を外します。

(3)測定に必要な試薬、検体及びキュベットを所定の位置にセットし標準曲線情報を読み込ませます。

(4)標準PIVKA-Ⅱ試薬A、Bを用いて、標準曲線の校正を行って下さい。

(5)測定システムの取扱い方法に従って測定を開始します。自動的に以下に示す方法で測定が行われます。

測定法概略

免疫発光測定装置「全自動化学発光免疫測定装置 CL-JACK NX」による測定条件例

検体又は標準PIVKA-Ⅱ試薬A、B	10 μ L
検体希釈液	30 μ L
ビオチン化抗体	30 μ L
↓ 37℃、約1.5分	
SA結合粒子	30 μ L
↓ 37℃、約7.5分	
洗浄	
↓	
酵素標識抗体	50 μ L
↓ 37℃、約9分	
洗浄	
↓	
発光試薬	100 μ L
↓ 25℃、約8秒	
測光	

1. 検体又は標準PIVKA-Ⅱ試薬A、B10 μ L、検体希釈液30 μ L及びビオチン化抗体30 μ Lを加え攪拌し、37℃で約1.5分間反応させます。
2. SA結合粒子30 μ Lを加え攪拌し、37℃で約7.5分間反応させます。
3. B/F分離後、洗浄液にて洗浄を行います。洗浄液はCL アナライザー洗浄液をご利用下さい。
4. 洗浄後、酵素標識抗体50 μ Lを加え攪拌し、37℃で約9分間反応させます。
5. B/F分離後、洗浄液にて洗浄を行います。
6. 発光試薬100 μ Lを加え攪拌し、25℃で約8秒間反応させます。
7. 発光量を測定します。

【測定結果の判定法】

基準範囲は各施設において設定されることが望めますが、便宜上、文献報告されている検体中PIVKA-Ⅱの健康成人の参考基準範囲上限値と腫瘍マーカーとしてのカットオフ値を次に示します。

健康成人の基準範囲上限 28mAU/mL¹⁾

カットオフ値 40mAU/mL¹⁾

測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果等を考慮して総合的に判断して下さい。

判定上の注意 検体中のフィブリンクロットや赤血球等の有形成分の存在、検体間の汚染により正しい結果が得られないことがあります。

イムノアッセイでは、非特異反応物質(例えば自己抗体、等)が存在した場合、得られた結果に対して、非特異反応を完全に否定することができない場合があります。

【性能】

自社施設において、自社試験方法に従い、感度、正確性、同時再現性、測定範囲、相関性の試験を行った結果は以下のとおりでした。

1. 性能

(1) 感度

1) 生理食塩水および標準PIVKA-Ⅱ試薬Aを測定したとき以下に示す式で表されるR1が3以上でした。

$$R1 = \text{標準PIVKA-Ⅱ試薬Aのカウント}^{※2} / \text{生理食塩水のカウント}$$

2) 標準PIVKA-Ⅱ試薬のA、Bを測定したとき以下に示す式で表されるR2が100以上でした。

$$R2 = \text{標準PIVKA-Ⅱ試薬Bのカウント} / \text{標準PIVKA-Ⅱ試薬Aのカウント}$$

注2 カウントとは発光試薬がアルカリホスファターゼにより化学発光生じた光子(フォトン)を光電子増倍管で測定するときの単位です。

(2) 正確性

既知PIVKA-Ⅱ濃度の管理検体を測定するとき、測定値は既知PIVKA-Ⅱ濃度の±20%以内でした。

(3) 同時再現性

同一管理検体を10回同時に測定するとき、測定値のCV値は10%以下でした。

(4) 測定範囲

本品の測定範囲は10～75000mAU/mLでした。

(5) 校正用の基準物質(標準物質)

社内標準を使用しています。

2. 相関性試験成績

(1) 本品(y)とA社ECLIAキット(x)との相関性を検討した結果は以下のとおりでした。²⁾

(血清検体)	例数	n=125
	相関係数	r=1.00
(血漿検体)	回帰式	y=1.0x-32.6
	例数	n=102
	相関係数	r=1.00
	回帰式	y=1.0x+11.2

(2) 本品(y)とB社ELISAキット(x)との相関性を検討した結果は以下のとおりでした。²⁾

(血清検体)	例数	n=106
	相関係数	r=1.00
	回帰式	y=0.9x-35.4

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 取扱い上(危険防止)の注意

- (1) 検体はHBV、HCV、HIV等による感染の危険性があります。検体の取扱いには、使い捨て手袋・実験着・保護用眼鏡等を着用し、感染防止のため人体に直接触れないように注意して下さい。測定後はよく手を洗って下さい。
- (2) 標準PIVKA-Ⅱ試薬A、Bはヒト由来成分を含んでいます。HBs抗原、HIV抗体、HCV抗体の検査を行い、陰性の結果を得ていますが、その他の感染因子を含んでいることも考えられます。標準PIVKA-Ⅱ試薬A、Bの取扱いには使い捨て手袋・実験着・保護用眼鏡を着用し、感染防止のため人体に直接触れないように注意して下さい。測定後はよく手を洗って下さい。
- (3) 検体及び試薬を扱う場合には、口によるビベッティングを行わないで下さい。
- (4) 構成試薬(1,2,3)はアジ化ナトリウム(0.1%以下)を含有しております。これらを含むすべての試薬について誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。
- (5) 試薬をこぼした場合は水で希釈した後拭き取って下さい。検体をこぼした場合は、80%アルコールスプレー等を使用し十分に拭き取って下さい。なお、拭き取る際にはゴム製手袋等により手を保護して下さい。
- (6) 本品及び検体を取扱う場所では飲食又は喫煙をしないで下さい。
- (7) 本品中の標準PIVKA-Ⅱ試薬A、Bを開封する場合は、アルミキャップを矢印の方向に溝の片側が切れるまでゆっくり引き、切れた反対側に回転させて取り除いて下さい。アルミ部分が残った場合は、素手で取らずペンチ等で取り除いて下さい。

2. 使用上の注意

- (1) QRコードラベルは濡らしたり、ペンで記入したりしないで下さい。
- (2) SA結合粒子・ビオチン化抗体・酵素標識抗体の色付きキャップは、決して開栓しないで下さい。
- (3) 発光試薬の取扱いには十分注意して下さい。発光試薬は光に敏感なので光に曝さないで下さい。手指が直接発光試薬液に触れた場合は廃棄して下さい。
- (4) 溶解後の標準PIKKA-Ⅱ試薬A、B以外の試薬は凍結を避け、貯蔵方法に従い保存して下さい。凍結させた試薬は品質が変化して正しい結果が得られないことがありますので使用しないで下さい。
- (5) 試薬は傾いた状態で保管しないで下さい。傾いた状態で保管すると、SA結合粒子が乾燥や凝集することで品質が変化して正しい結果が得られないことがありますので使用しないで下さい。
- (6) 発光試薬は、SA結合粒子、ビオチン化抗体、酵素標識抗体、標準PIKKA-Ⅱ試薬A、Bのセットとは別売りです。
- (7) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないで下さい。
- (8) 製造番号の異なる試薬を混ぜて使用しないで下さい。
- (9) 試薬の外観に異常がある場合は使用しないで下さい。
- (10) 標準PIKKA-Ⅱ試薬A、Bを室内温度(19~26℃)に戻す際に、恒温槽に漬けたりしないで下さい。
- (11) 標準PIKKA-Ⅱ試薬A、B(凍結乾燥試薬)の瓶中は陰圧になっていますので、試薬が飛散しないよう、注意して静かに開栓して下さい。
- (12) 検体濃度が測定範囲を超える場合は、検体を検体希釈液で希釈して測定して下さい。

3. 廃棄上の注意

- (1) 検体にはHBV、HCV、HIV等の感染性のものが存在する場合がありますので、使用した器具、廃液などは次のいずれかの方法で処理するか、各施設の感染性医療廃棄物処理マニュアルに従って処理して下さい。
 - 1) オートクレーブにより121℃で20分以上滅菌処理すること。ただし、次亜塩素酸ナトリウム溶液を含む廃棄物は、オートクレーブにかけないこと。
 - 2) 次亜塩素酸ナトリウム溶液(有効塩素濃度1000ppm)又はグルタルアルデヒド(2%)に1時間以上浸漬し消毒処理すること。
- (2) 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。
- (3) 構成試薬(1, 2, 3)はアジ化ナトリウム(0.1%以下)を含有しております。アジ化ナトリウムは鉛管、銅管と反応して爆発性の強い金属アジドを生成することがありますので、試薬廃棄の際には排水管に残留しないよう十分量の水で希釈して洗い流して下さい。
- (4) 廃棄処理中に試薬が飛散した場合は、水で希釈してから拭き取して下さい。また検体が飛散した場合は、80%アルコールスプレー等を使用して十分に拭き取して下さい。なお、拭き取る際にはゴム製手袋等により手を保護して下さい。
- (5) 本品中の容器等は他の目的に転用しないで下さい。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法：2~8℃に保存(冷暗所に保存し、凍結は絶対に避けて下さい。)
2. 有効期間：9ヵ月(使用期限は外箱に記載)

【包装単位】

試薬名	包装単位	商品コード
デタミナーCL PIKKA-Ⅱ NX (SA結合粒子、ビオチン化抗体、 酵素標識抗体及び標準PIKKA-Ⅱ 試薬A、B)	100回用	60534-8
発光試薬	50mL×4	57276-3

検体希釈液には、以下のCL 検体希釈液をご使用下さい。

CL 検体希釈液 PIKKA-Ⅱ用 11mL×3 商品コード58334-9
洗浄液には、以下のCL アナライザー洗浄液をご利用下さい。
CL アナライザー洗浄液 200mL×2 商品コード55117-1
他の形態につきましては弊社までお問い合わせ下さい。

【主要文献】

- 1) 高津和子ら：臨床と研究, 73 : 2656, 1996
- 2) 社内報告書

***【問い合わせ先】

キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社 学術担当
〒104-6004 東京都中央区晴海1-8-10
ダイヤルイン 03-6219-7608

***製造販売元

キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社
東京都中央区晴海 1-8-10