

乳酸脱水素酵素キット
A U リ エ ー ジ ェ ン ト 用

シグナスオート LD IF

【全般的な注意】

1. 本品は、体外診断用医薬品でありそれ以外の目的に使用しないでください。
2. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断してください。
3. 電子化された添付文書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 使用する機器の電子化された添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。

【形状・構造等（キットの構成）】

**シグナスオート LD

*R-I

L-乳酸リチウム

*R-II

ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（酸化型）
[略名：NAD]

【使用目的】

血清又は血漿中の乳酸脱水素酵素（LD）の測定


*【測定原理】

本品は、血清又は血漿中の LD（Lactate dehydrogenase, EC 1.1.1.27）活性を酵素反応速度法により測定する方法で、国際臨床化学連合（IFCC）基準測定操作法に基づき自動分析装置用に開発した試薬です。

検体中の LD は、L-乳酸を基質としてピルビン酸を生成すると同時に、NAD を還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（NADH）に変化させます。

NADH は 340 nm に吸収極大をもちますので、この吸光度の増加速度を測定して LD 活性値を求めます。

なお、本品は、IFCC 法と比例互換性を有しており、別売の販売元酵素キャリブレーションを用いて 37℃ で検量・校正することにより IFCC 標準化に対応します。

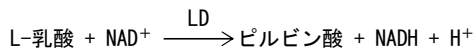

【操作上の注意】

測定試料の性質、採取法

1. 検体は血清、血漿いずれでも使用できます。
2. シュウ酸（抗凝固剤）は、負の誤差を与えますので使用できません。
3. 検体はなるべく新鮮なものを使用してください。検体を保存する場合は室温（16～30℃）で 2～3 日、-20℃以下で 2 週間以内に使用してください。なお、長期保存する場合には、-80℃以下で保存してください。¹⁾

妨害物質・妨害薬剤^{注 i)}

1. 赤血球中には多くの LD が含まれていますので、溶血した検体は正の誤差を与えます。
2. ビリルビン 20 mg/dL まで測定値に影響ありません。
3. アスコルビン酸 20 mg/dL まで測定値にほとんど影響ありません。

【用法・用量（操作方法）】

試薬の調製方法

- *R-I：そのまま使用します。
- *R-II：そのまま使用します。


必要な器具・器材・試料等

検量用試料の詳細については販売元担当者にお問い合わせください。

**測定（操作）法

操作法は自動分析装置により異なります。各装置毎にパラメーターを用意してありますので【問い合わせ先】に請求してください。

（自動分析装置 BECKMAN COULTER DxC 700 AU の使用例）
設定温度 37℃

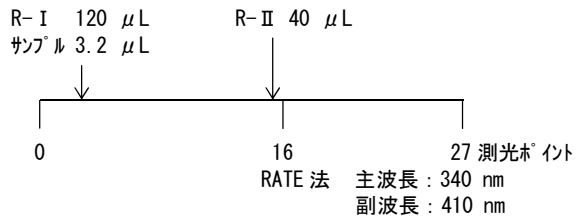

1. 自動分析装置により R-I 120 μL がキュベットに分注され、次にサンプル 3.2 μL、R-II 40 μL が順次加えられて反応が開始します。主波長 340 nm、副波長 410 nm として 1 分間当りの平均吸光度変化量を求めます。盲検には精製水等を用いて同様に測定します。

2. 計算法

LD 活性値 (U/L, 37℃) =

$$\frac{\text{検体の平均吸光度変化量}}{\text{酵素キャリブレーションの平均吸光度変化量}} \times \text{表示値}^{*1}$$

*1 酵素キャリブレーションの表示値 (U/L)

【測定結果の判定法】

1. 参考基準範囲（共用基準範囲）²⁾
124～222 U/L
2. 判定上の注意
 - 1) 測定範囲を超える検体は、精製水又は生理食塩液で希釈した後測定してください。
 - 2) 参考基準範囲は、臨床判断値と異なりますのでご注意ください。

【臨床的意義】

LD は生体内の各組織中に広く分布し、嫌氣的解糖系の最終段階に働きます。血中では心臓、肝臓、腎臓等の各種疾患、悪性腫瘍、白血病、悪性貧血等で上昇がみられ、これら疾患の診断、経過観察の指標となります。³⁾

【性能】

性能

1. 感度・正確性・同時再現性

(1) 感度試験

- 1) 精製水（又は生理食塩液）を試料として操作した場合の吸光度変化は 0.02/min 以下です。
- 2) 既知活性の標準血清を試料として操作した場合、100 U/L に対する吸光度変化は 0.005～0.02/min の範囲内です。

(2) 正確性試験

既知活性の管理用検体を測定するとき、既知活性の ±10% 以内です。

(3) 同時再現性試験

同一検体を 5 回同時に測定するとき、測定値の C.V. 値は 5% 以下です。

2. 測定範囲^{注 ii)}

3～1500 U/L

相関性試験成績^{注iii)}

1. 血清検体
x: IFCC 対応試薬
y: 本品
n=105
 $y=1.010x+2.2$
 $r=1.000$
2. 血漿検体
x: IFCC 対応試薬
y: 本品
n=115
 $y=1.012x+1.8$
 $r=1.000$

較正用基準物質

JCCLS CRM-001 (JCCLS, ReCCS)

注 i, ii, iii) 特定の機種による試験結果のため、機種によっては同様の結果を得られない場合があります。詳細は、販売元担当者にお問い合わせください。

【使用上又は取扱い上の注意】

取扱い上（危険防止）の注意

1. 検体は HIV、HBV、HCV 等の感染の恐れがあるものとして取り扱ってください。検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペットイングを行わないでください。
- *2. R-I は アルカリ性です。また、R-II は酸性ですので、皮膚に付着したり、目に入らないよう注意してください。
3. 試薬が誤って目や口に入った場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。

使用上の注意

1. 本品は凍結を避け、貯蔵方法に従い保存してください。誤って凍結させた試薬は、品質が変化して正しい結果が得られない場合がありますので使用しないでください。
2. 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
- **3. 本品の操作は各自動分析装置毎のパラメーターに従ってください。
4. 開封後、4 週間以内に使用してください。保存環境により変動することがありますのでご注意ください。
5. 試薬の注ぎ足しは行わないでください。
6. 容器を再利用したり他の目的に転用しないでください。

廃棄上の注意

1. 検体中には HIV、HBV、HCV 等の感染性のものが存在する場合がありますので、廃液、使用済み器具などは次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度 1000 ppm、1 時間以上浸漬）又はグルタルアルデヒド（2%、1 時間以上浸漬）による消毒処理あるいはオートクレーブ（121℃、20 分以上）による滅菌処理を行ってください。
2. 検体又は検体を含む溶液が飛散した場合、80%のアルコールスプレー等で拭き取ってください。
- *3. R-I の pH は排水基準の 8.6 を超えています。また、R-II の pH は排水基準の 5.8 未満です。廃棄にあたっては水質汚濁防止法等の規制に注意して処理してください。
4. 試薬及び器具類を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に従って処理してください。

【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法

2~8℃保存

**有効期間

1 年間

使用期限は、表示シート及びボトルに記載してあります。

**【包装単位】

コード No.

単品名

C57429

R-I

R-II

包装

49.5 mL×2

20.0 mL×2

【主要文献】

1. 山崎浩和、他：検査と技術、40（8）、p.755-759（2012）
2. 日本臨床検査標準協議会：日本における主要な臨床検査項目の共用基準範囲（2019）
3. 金井正光、他：臨床検査法提要、改訂第 34 版、金原出版、東京、p.580-584（2015）

**【問い合わせ先】

ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 5 番 7 号
TOC 有明ウエストタワー
TEL 0120-566-730

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

**販売元

ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目 5 番 7 号
TOC 有明ウエストタワー

製造販売元



株式会社 シノテスト

神奈川県相模原市南区大野台4-1-93
TEL : 0120-66-1141

(240404)