



* E 3 8 2 7 1 3 0 *

この添付文書をよく読んでから使用してください。

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 20300AMZ00410000

*2021年3月改訂 (第2版)

2017年7月作成 (第1版)

クラスⅡ汎用・生化学検査用シリーズ
ロイシンアミノペプチダーゼキット

クイックオート ネオ LAP

【全般的な注意】

1. 本品は、体外診断用医薬品でありそれ以外の目的に使用しないでください。
2. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断してください。
3. 添付文書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。
5. 本品には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれておりますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

【形状・構造等（キットの構成）】

R-I 緩衝液

R-II 基質液

L-ロイシン-p-ニトロアニリド塩酸塩
[略名: L-Leu-p-NA・HCl]

【使用目的】

血清又は血漿中のロイシンアミノペプチダーゼ (LAP) の測定

【測定原理】

本品は Rate 法 (L-Leu-pNA 基質) による血清又は血漿中のロイシンアミノペプチダーゼ (LAP) 活性を測定する試薬です。検体中の LAP は、L-ロイシン-p-ニトロアニリドを基質として L-ロイシンと p-ニトロアニリンを生成します。p-ニトロアニリンは 405 nm 付近に吸収極大をもちますので、この吸光度の増加速度を測定して LAP 活性値を求めます。

L-ロイシン-p-ニトロアニリド + H₂O

* 【操作上の注意】

測定試料の性質、採取法

1. 検体は血清、血漿いずれでも使用できます。
2. EDTA (抗凝固剤) は、負の誤差を与えますので使用できません。
3. 検体はなるべく新鮮なものを使用してください。検体を保存する場合は冷蔵 (2~10℃) で1ヶ月、凍結保存 (-10℃以下) で3ヶ月以内に使用してください。¹⁾

妨害物質・妨害薬剤^{注 i)}

1. ヘモグロビン 500 mg/dL までほとんど測定値に影響ありません。
2. ビリルビン 20 mg/dL まで測定値に影響ありません。
3. アスコルビン酸 20 mg/dL まで測定値に影響ありません。


【用法・用量（操作方法）】

試薬の調製方法

- R-I 緩衝液をそのまま使用します。
R-II 基質液をそのまま使用します。

測定（操作）法

LABOSPECT 006 日立自動分析装置の使用例

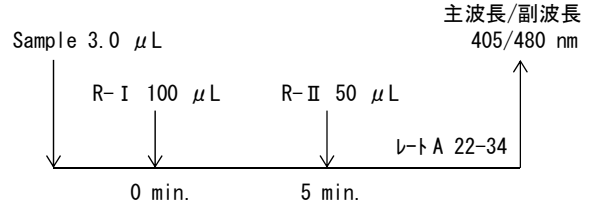

(注) 自動分析装置の設定条件等詳細については、弊社担当者にお問い合わせください。

* 【測定結果の判定法】

1. 参考基準範囲: 30~70 U/L²⁾
2. 判定上の注意
 - 1) 測定範囲を超える検体は、精製水又は生理食塩液で希釈した後測定してください。
 - 2) 参考基準範囲は、臨床判断値と異なりますのでご注意ください。

【臨床的意義】

LAP は腎臓、小腸、膵臓、胆汁等に広く分布し、腸からのペプチドの吸収、腎尿細管からのペプチドの再吸収に関与するといわれており、血中では胆汁うっ滞、限局性肝病変等の肝・胆道疾患、妊娠で高値を示します。³⁾

* 【性能】

性能

1. 感度・正確性・同時再現性
 - (1) 感度試験
精製水を試料として操作した場合の吸光度変化は 0.01/min 以下です。
 - (2) 正確性試験
既知活性の管理用血清を測定するとき、既知活性の ±15% 以内です。
 - (3) 同時再現性試験
同一検体を 5 回同時に測定するとき、吸光度変化の C.V. 値は 10% 以下です。
2. 測定範囲^{注 ii)}
2~1500 U/L

相関性試験成績^{注 iii)}

1. 血清検体

x: 既存製品
y: 本品
n=100
y=0.934x+1
r=0.999
2. 血漿検体

x: 他社 L-Leu-pNA 基質法
y: 本品
n=60
y=0.975x-2
r=1.000

注 i, ii, iii) 特定の機種による試験結果のため、機種によっては同様の結果を得られない場合があります。詳細は、弊社担当者にお問い合わせください。

*【使用上又は取扱い上の注意】

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

取扱い上（危険防止）の注意

1. 検体は HIV、HBV、HCV 等の感染の恐れがあるものとして取り扱ってください。検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるビベッティングを行わないでください。
2. 基質液は酸性です。また、緩衝液には微量のアジ化ナトリウムを含有していますので、皮膚に付着したり、目に入らないよう注意してください。
3. 試薬が誤って目や口に入った場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。

使用上の注意

1. 本品は凍結を避け、貯蔵方法に従い保存してください。誤って凍結させた試薬は、品質が変化して正しい結果が得られない場合がありますので使用しないでください。
2. 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
3. 開封後、緩衝液は1週間、基質液は4週間使用できます。保存環境により変動することがありますのでご注意ください。
4. 試薬の注ぎ足しは行わないでください。
5. 容器を再利用したり他の目的に転用しないでください。

廃棄上の注意

1. 検体中には HIV、HBV、HCV 等の感染性のものが存在する場合がありますので、廃液、使用済み器具などは次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度 1000 ppm、1 時間以上浸漬）又はグルタールアルデヒド（2%、1 時間以上浸漬）による消毒処理あるいはオートクレーブ（121℃、20 分以上）による滅菌処理を行ってください。
2. 検体又は検体を含む溶液が飛散した場合、80%のアルコールスプレー等で拭き取ってください。
3. 緩衝液には微量のアジ化ナトリウムを含有しています。アジ化ナトリウムは鉛や銅と接触すると爆発性のアジ化金属を形成することがあります。本品及び最終反応液を廃棄する際には安全のため大量の水で希釈し流してください。
4. 基質液の pH は排水基準の 5.8 未満です。廃棄にあたっては水質汚濁防止法等の規制に注意して処理してください。
5. 試薬及び器具類を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に従って処理してください。

【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法

2～8℃保存

有効期間

1 年間

【包装単位】

品名	識別記号	規格
統一商品コード		
クイックオート ネオ LAP HLS		
326052721 R-I 緩衝液		55.6 mL×2
R-II 基質液		30.1 mL×2

他に包装がありますので、お問い合わせください。

*【主要文献】

1. 山崎浩和、他：検査と技術、40（8）、p. 755-759（2012）
2. 金井正光、他：臨床検査法提要、改訂第 34 版、金原出版、東京、p. 585-587（2015）
3. 関 知次郎：日本臨牀、47（増刊）、p. 214（1989）

【問い合わせ先】

株式会社シノテスト カスタマーサポート

TEL 0120-66-1141

FAX 042-753-1892

（品質に関するお問い合わせの際は、製造番号を確認の上ご連絡ください。）



株式会社シノテスト

神奈川県相模原市南区大野台4-1-93

TEL：0120-66-1141

(201130)