

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください。

血液・尿検査用グルコースキット

G L U - III 「生研」

【警告】

ブラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者において、実際の血糖値より高値を示すおそれがあるので、ブラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者における血糖測定値に対する影響について、事前に製造販売業者から情報を入手すること。(ブラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者で、実際の血糖値よりも高値を示すことがあり、その偽高値に基づきインスリン等の血糖降下剤を投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症状があらわれるおそれがある。)

【一般的な注意】

1. 本品は、体外診断用医薬品です。これ以外の目的に使用しないでください。
2. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状などに基づいて総合的に判断してください。
3. 電子化された添付文書に記載以外の使用方法については保証を致しません。
4. 使用する機器の電子化された添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。詳細は機器メーカーにお問い合わせください。

【形状・構造等(キットの構成)】


1. 酵素液 (R-1)
ヘキシキナーゼ (HK)
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(酸化型) (NAD)
グルコース-6-リン酸脱水素酵素 (G-6-PDH)
2. 反応液 (R-2)
アデノシン-5'-三リン酸二ナトリウム (ATP・2Na)

【使用目的】

血清、血漿又は尿中のグルコースの測定

【測定原理】

1. 原理
検体中のグルコースは、ATPの存在下でHKの作用によりアデノシン-5'-三リン酸(ADP)及びグルコース-6-リン酸(G6P)を生成します。さらに、G6PにG-6-PDH及びNADとの反応によって生成したニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(還元型)(NADH)の340nmにおける吸光度の増加を測定し、グルコース濃度を求めます。

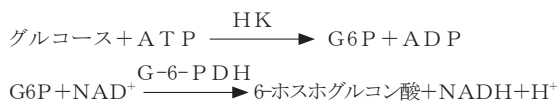

2. 特徴

- 1) 基質特異性の高いヘキシキナーゼ及びグルコース-6-リン酸脱水素酵素を用いています。

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質、採取法
 - 1) 本製品による測定には、検体として血清、血漿又は尿を使用してください。
 - 2) 新鮮な検体を使用してください。採血は早朝空腹時に行い、採血後は速やかに測定してください。
 - 3) 血清中のグルコースは室温又は冷蔵保存で1週間、凍結保存で1年間は安定ですが、全血のままでは速やかに減少します^{1) 2)}。
 - 4) 尿中のグルコースは冷蔵保存で1週間安定です¹⁾。
2. 妨害物質・妨害薬剤
 - 1) アスコルビン酸(100mg/dLまで)、ビリルビン(50mg/dLまで)、乳び(3 000濁度まで)、溶血ヘモグロビン(500mg/dLまで)、イントラリボス(5.0%まで)は測定値に影響を与えませんでした。
 - 2) グルタチオン(1 000mg/dLまで)、尿酸(50mg/dLまで)は測定値に影響を与えませんでした。
 - 3) 抗凝固剤のEDTA、ヘパリン、クエン酸塩及びフッ化ナトリウムは、通常使用濃度では測定値に影響を与えませんでした。
 - 4) 各種防腐剤は通常使用濃度では、測定値に影響を与えませんでした。

【用法・用量(操作方法)】

1. 試薬の調製方法
R-1： 酵素液をそのまま使用してください。
R-2： 反応液をそのまま使用してください。

2. 測定(操作)法
日立7180形自動分析装置の使用例
(測定条件の例)

試料	:	2.0 μL
R-1	:	200 μL
R-2	:	50 μL
主波長	:	340nm
副波長	:	405nm

装置ごとにパラメータを準備していますので、別途ご請求ください。

使用前に測定装置を十分洗浄した後、必ずキャリブレーション(ブランク及びスタンダード)を行ってください。

【測定結果の判定法】

参考基準値	
基準範囲 ³⁾	73~109mg/dL
尿中のグルコース濃度 ⁴⁾	2~20mg/dL
尿中のグルコース排泄量 ⁴⁾	30~130mg/day

「判定上の注意」

- 1) 基準範囲は様々な要因により変動することがありますので、あらかじめ各施設に適した基準範囲を設定してください。
- 2) 検体の濃度が測定範囲を超える場合は、検体を生理食塩液で希釈して再測定してください。
- 3) 検体により、検体中の目的成分以外の物質との反応や妨害反応を生じることがあります。測定値や測定結果に疑問がある場合は、再検査や希釈再検査、または他の検査方法により確認してください。

【性能】

- 性能
 - 感度
 - 精製水を試料として操作するとき、吸光度は0.100以下です。
 - 200mg/dLの標準液を試料として操作するとき、吸光度は0.100～0.900です。
 - 正確性
既知濃度の管理用検体を測定するとき、既知濃度の90～110%です。
 - 同時再現性
同一検体を5回同時に測定するとき、測定値のC.V.値は5.0%以下です。
 - 測定範囲
0.9～1 000mg/dL
- 相関性試験成績
 - 血清検体（x：HK・G-6-PDH法 y：本製品）
例数：n=75
相関係数：r=0.999
回帰式：y=0.982x-0.02
 - 血漿検体（x：HK・G-6-PDH法 y：本製品）
例数：n=60
相関係数：r=0.999
回帰式：y=0.999x-0.35
 - 尿検体（x：HK・G-6-PDH法 y：本製品）
例数：n=170
相関係数：r=0.999
回帰式：y=0.998x+0.52
- 校正用基準物質
含窒素・グルコース常用参照標準物質（ReCCS）

【使用上又は取扱い上の注意】

- 取扱い上（危険防止）の注意
 - 血清等の検体はHIV、HBV、HCV等の感染の危険性があるものとして取扱いには十分注意してください。また、検体に接触した器具等は検体と同様、感染の危険性のあるものとして取扱ってください。
 - 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用してください。
 - 感染を避けるため、口によるピペッティングを行わないでください。
 - 本製品にはアジ化ナトリウムが含有されています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。
- 使用上の注意
 - 本製品は凍結を避け、貯蔵方法に従って保存してください。誤って凍結させた試薬は、品質が変化して正しい結果が得られないことがあるので使用しないでください。
 - 開封後は、蓋をしめて2～10℃で保存してください。開封後の有効期間は1箇月間です。
 - 反応試液は2種類ありますので、測定時に取り違えないようにしてください。
 - ラベルに記載されている使用期限内に使用してください。
 - ロットが同じであっても試薬を注ぎ足して使用しないでください。
- 廃棄上の注意
 - 本製品を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規制に従って処理してください。
 - 検査に使用した器具や試薬等は感染の危険があるものとして適切に処理してください。次亜塩素酸ナトリウム（0.1%以上、1時間以上浸漬）、グルタルアルデヒド溶液（2%、1時間以上浸漬）による消毒処理又はオートクレーブ（121℃、20分以上）による滅菌処理を行ってください。
 - 本製品が漏出又は飛散した場合は、少量のときは吸水紙等で拭き取り、大量のときは水で洗い流してください。
 - 本製品にはアジ化ナトリウムが含有されています。アジ化ナトリウムは鉛、銅等と反応して爆発性の高いアジ化金属を形成することがあるので、廃液等は大量の水で流すよう注意してください。
 - 本製品の容器等は他の目的に転用しないでください。

【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法
2～10℃保存
有効期間
12箇月（使用期限は容器ラベル及び外箱に表示）

【包装単位】

GLU-Ⅲ「生研」

コードNo.	包 装			
513120	55タイプ	酵素液	R-1	52mL×2
		反応液	R-2	13mL×2
513137	70タイプ	酵素液	R-1	60mL×4
513144	70タイプ	反応液	R-2	15mL×4

別売品

マルチキャリブレーターM

コードNo.	包 装	
581235	キャリブレーター	3mL×4

【主要文献】

- 玄番昭夫：Medical Technology, 13, 3：273-278(1985)
- 日本臨床検査医学会ガイドライン作成委員会：臨床検査のガイドライン JSML2015, 25-30(2015)
- 日本臨床検査標準協議会：共用基準範囲
- 金井正光：臨床検査法提要, 35：131-133(2020)

【問い合わせ先】

デンカ株式会社 試薬学術担当
〒103-8338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
フリーダイヤル 0120-206-072
受付時間 9:00～17:00（土日祝日・弊社休業日を除く）

製造販売元

デンカ株式会社

新潟県五泉市木越字鏡田1359番地1