

＊ この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください。

甲状腺刺激ホルモンキット Eテスト「TOSOH」II（TSH）

EIA 法による血清又はヘパリン血漿中の
甲状腺刺激ホルモン（TSH）測定用試薬

【全般的な注意】

1. 本品は体外診断用医薬品ですので、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 疾患の診断には他の検査成績や臨床症状を考慮して総合的に判断してください。
- ＊3. 本電子添文に記載された方法及び目的以外での使用については保証を致しません。
4. 本キットの構成試薬については、HBs 抗原、HIV 抗体及び HCV 抗体が陰性であることが確認されていますが、被検検体と同様に取扱いには注意してください。
5. 全自動エンザイムイムノアッセイ装置をご使用の際には、装置添付の取扱説明書をよく読んでから使用してください。

【形状・構造等（キットの構成）】

＊本製品は次に示す試薬を組み合わせで使用してください。

1. E テスト「TOSOH」II（TSH）免疫反応試薬
抗 TSH マウスモノクローナル抗体固定化ビーズ
抗 TSH マウスモノクローナル抗体アルカリ性ホスファターゼ結合物
2. E テスト「TOSOH」II（TSH）標準品セット（ラベルに識別記号「IF」の表示あり）
E テスト「TOSOH」II（TSH）標準品（1）
E テスト「TOSOH」II（TSH）標準品（2）
E テスト「TOSOH」II（TSH）標準品（3）
E テスト「TOSOH」II（TSH）標準品（4）
E テスト「TOSOH」II（TSH）標準品（5）
E テスト「TOSOH」II（TSH）標準品（6）
3. E テスト「TOSOH」II（TSH）検体希釈液（ラベルに黄緑色で TSH3G と表示）
4. E テスト「TOSOH」II 基質セット（ラベルに桃色で SUB II と表示）
 - 1) E テスト「TOSOH」II 基質
4-メチルウンベリフェリルりん酸
 - 2) E テスト「TOSOH」II 基質溶解液
5. E テスト「TOSOH」II 洗浄液
6. E テスト「TOSOH」II 分注液

【使用目的】

血清又は血漿中の甲状腺刺激ホルモン（TSH）の測定

【測定原理】

1. 特徴

- 1) 全自動エンザイムイムノアッセイ装置を用いて、短時間で自動測定できます。（抗原抗体反応時間は 10 分）
- 2) 2 種類の高親和性 TSH モノクローナル抗体を用いた 1 ステップサンドイッチ EIA（IEMA）法です。
- 3) 磁性ビーズに固定化された抗体と酵素標識された抗体が、試薬カップに凍結乾燥状態で封入されているため、試薬調製の必要がありません。
- 4) 抗原抗体反応から蛍光測定まで専用の試薬カップ内で行われるため、コンタミネーションやキャリーオーバーがほとんどありません。
- 5) 放射性同位元素を使用していないので、そのための特殊な設備を必要としません。

2. 測定原理

本法の原理は 2 種類のモノクローナル抗体を用いた 1 ステップサンドイッチ EIA（IEMA）法です。磁性ビーズに固定化されたモノクローナル抗体と酵素としてアルカリ性ホスファターゼが標識されたモノクローナル抗体とが、凍結乾燥体として試薬カップに封入されています。この試薬カップに検体と分注水を添加すると、凍結乾燥試薬が溶解し抗原抗体反応が開始します。

一定時間、一定温度で抗原抗体反応を行った後、洗浄水で洗浄することにより未反応の酵素標識抗体と検体成分を除去します（B・F 分離）。その後、磁性ビーズに結合した酵素活性を測定するため酵素基質液として 4-メチルウンベリフェリルりん酸を添加し、酵素反応の結果得られる蛍光物質（4-メチルウンベリフェロン）の生成速度を測定することにより、血清又はヘパリン血漿中の TSH 濃度を知ることができます。

【操作上の注意】

1. 検体には新鮮な血清又はヘパリン血漿を用いてください。血漿はヘパリン血漿以外は用いないでください。検体を分取する場合は、溶血させないようにご注意ください。検体を保存する場合は、2～8℃で保存し、7日以内に測定してください。7日以内に測定しない場合は、-20℃以下で凍結保存し、60日以内に測定してください。2～8℃保存又は凍結保存した検体をご使用の際には、15～25℃に戻してから使用してください。
2. 凍結保存検体の凍結融解の繰り返しは避けてください。
3. 検体の希釈には E テスト「TOSOH」II（TSH）検体希釈液（ラベルに黄緑色で TSH3G と表示）を用い、十分に混和してください。
4. 妨害物質
ヘモグロビンは 390 mg/dL まで、遊離型ビリルビンは 17 mg/dL まで、抱合型ビリルビンは 18 mg/dL まで、脂質は 1,600 mg/dL まで、アルブミンは 5.0 g/dL まで、アスコルビン酸は 20 mg/dL まで、ヘパリンは 100 U/mL（日本薬局方定量法による）まで、それぞれ検体に添加しても測定値に影響を与えないことが確認されています。
5. EDTA 又はクエン酸を含む検体は低値を示すことがあります。
6. 2～8℃保存されていた試薬をご使用の際には、15～25℃に戻してから使用してください。

【用法・用量（操作方法）】

1. 試薬の調製法及び調製後の貯法・有効期間

- 1) 免疫反応試薬
E テスト「TOSOH」II（TSH）免疫反応試薬の防湿袋を開封して使用してください。開封後の免疫反応試薬は、15～25℃での累積時間として 240 時間以内に使用してください。例えば、1 日あたり 15～25℃に 8 時間、2～8℃に 16 時間保存することを毎日繰り返した場合は 30 日に相当します。但し、一度防湿袋を開封した免疫反応試薬は、2～8℃に保存していたとしても、30 日を超えては使用しないでください。
- 2) 検体希釈液
E テスト「TOSOH」II（TSH）検体希釈液は液体ですので、開封後、そのまま使用してください。開封後は、15～25℃での累積時間として 72 時間有効です。例えば、15～25℃で 1 日に 8 時間開封して使用し、使用後直ちに密封して 2～8℃で保存した場合は、9 日間有効です。
また、全自動エンザイムイムノアッセイ装置に検体希釈液をセットしない場合（自動希釈機能を利用しない場合）に限り、毎回使用後直ちに密封し 2～8℃で保存するならば 90 日間有効です。
- ＊3) 標準品
E テスト「TOSOH」II（TSH）標準品（1）～（6）（ラベルに識別記号「IF」の表示あり）はいずれも液体ですので、開封後、それぞれ必要量を検体カップにとりそのまま使用してください。いずれも、開封後は密封するならば、2～8℃保存で 1 日間有効です。
E テスト「TOSOH」II（TSH）標準品（2）～（6）の表示濃度は、WHO 2nd IRP, 1983 (Code 80/558) を基準として決めたものに IFCC 基準適合検査値 (Phase IV) への補正係数 0.92 を乗じたものです（9）。その値は、びんのラベルに記載されています。

IFCC: International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

- 4) 基質液
E テスト「TOSOH」II 基質 1 びんに E テスト「TOSOH」II 基質溶解液 1 びん（100 mL）を加えて基質液を調製してください。調製後は、遮光下、15～25℃で 3 日間、2～8℃保存で 30 日間有効です（直射日光、紫外線に当たらないように注意してください）。
- 5) 洗浄水
E テスト「TOSOH」II 洗浄液 1 びんを適量の精製水で希釈して 2.5 L とし、濃度勾配を生じないように十分に混和して、洗浄水を調製してください。調製後は 15～25℃放置で 30 日間有効です。
- 6) 分注水
E テスト「TOSOH」II 分注液 1 びんを適量の精製水で希釈して 5 L とし、濃度勾配を生じないように十分に混和して、分注水を調製してください。調製後は 15～25℃放置で 30 日間有効です。


2. 必要な器具・器材・試薬等

- 1) 検体測定時には精度管理用サンプルを測定し、ご施設での日常の精度管理を実施してください。なお、精度管理用サンプルとしては、別売の弊社コントロールをお薦めします。
- 2) 測定の際には、必要に応じてピペット、サンプルカップ、サンプルチップ等をご用意ください。

3. 測定（操作）法

- 1) E テスト「TOSOH」II（TSH）免疫反応試薬の試薬カップのアルミシールを破ります。
- 2) この試薬カップに分注水 50 μ L と、標準品又は検体 100 μ L を正確に加え、磁石で磁性ビーズを振動させながら攪拌し、37℃で 10 分間、抗原抗体反応を行います。
- 3) 試薬カップを洗浄水で洗浄し、未反応の酵素標識抗体及び検体成分を除去します（B・F 分離）。
- 4) 基質液を 200 μ L 注入した後、磁性ビーズを振動・攪拌させながら、酵素反応により生成した蛍光物質の蛍光強度を落射型蛍光光度計を用いて、励起波長 363 nm、蛍光波長 447 nm で測定し、蛍光物質の生成速度を算出します。
- 5) 標準品に対する蛍光物質の生成速度から検量線を作成し、検体中の TSH 濃度を算出します。
なお、検量線は次の場合に作成します。
 - ① 免疫反応試薬のロットの変更時
 - ② 同一の免疫反応試薬ロットにおいて、検量線作成後 90 日を超えた場合
 - ③ 精度管理用サンプルの値が変動するなど検量線の状態が適切でないと考えられた場合
- 6) 測定結果が 92 μ IU/mL を超えたときは、検体希釈液を用いて適宜希釈率を変えて検体を希釈し、同様の操作 1) ～ 5) により再測定します。

全自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA-2000 を使用したときに得られる検量線の例を次に示します。

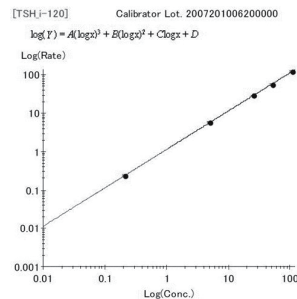

- 【測定結果の判定法】
1. 測定結果の判定
- 1) E テスト「TOSOH」II (TSH) 標準品セット (ラベルに識別記号「IF」の表示あり) を用いて作成した検量線から検体中の TSH 濃度を算出します。
- 2) 結果を判定するための基準値は各検査施設で設定してください。
- 3) 日本臨床検査医学会標準化委員会が中心となって実施されたハーモナイゼーションの結果において、E テスト「TOSOH」II (TSH) につきましては、IFCC 基準適合検査値 (Phase IV) への補正係数は 0.92 であることが確認されております (9, 10)。E テスト「TOSOH」II (TSH) 標準品セット (ラベルに識別記号「IF」の表示あり) は 0.92 を乗じた表示値に設定しておりますので、本法の測定値はそのまま IFCC 基準適合検査値としてご使用いただけます (10)。TSH ハーモナイゼーションの詳細については、文献 (10, 11) 及び日本臨床検査医学会のホームページ (12) をご参照ください。

参考基準範囲

IFCC 基準適合検査値 (Phase IV) の補正方法を利用して確認された日本人成人 (20 ～ 60 歳) 120 例の参考基準範囲は、0.61 ～ 4.23 μ IU/mL です (10, 12)。

なお、参考基準範囲は種々の要因で変動しますので、各施設にて臨床医と相談のうえ設定願います。

2. 判定上の注意
- 1) 疾患の診断には他の検査成績や臨床症状を考慮して総合的に判断してください。
- *2) SI 単位への変換について
本電子添文においては TSH 濃度を μ IU/mL 単位で表記しています。SI 単位である mIU/L への変換には次の関係式を用いることができます。
$$\text{mIU TSH/L} = \mu \text{ IU TSH/mL} \times 1.0$$

【臨床的意義】

甲状腺刺激ホルモン (TSH) は下垂体前葉から産生される分子量約 28,000 の糖たん白質ホルモンで、 α と β の 2 つのサブユニットから構成されています。その生理作用は、甲状腺濾胞細胞の受容体に結合し、主として甲状腺ホルモンの合成・分泌を促進します。また、TSH の分泌は、視床下部からの TSH 放出ホルモン (TRH) によって刺激されるとともに、甲状腺ホルモンの negative feedback 機構によって調節されています (1, 2)。したがって、TSH の測定は視床下部－下垂体－甲状腺系の機能の判定に有用とされています。一般に、TSH 濃度はバセドウ病などの甲状腺機能亢進症で低値を、原発性甲状腺機能低下症では高値を示します (3, 4)。また、二次性 (下垂体性) 及び三次性 (視床下部性) 甲状腺機能低下症では、ともに TSH は低値となりますが、TRH 試験による TSH の反応をみることによりこれらの疾患を鑑別することができます (5, 6)。

近年、TSH 測定の高感度化によって、健康人と甲状腺機能亢進症を明確に分別することができるようになり (7, 8)、その有用性はますます高まっています。

【性能】

1. 感度
- 1) E テスト「TOSOH」II (TSH) 標準品 (1) の蛍光単位 (FU、Rate と呼ぶ) は 8 (nmol/ (L・s)) 以下です。
- 2) E テスト「TOSOH」II (TSH) 標準品 (1) と E テスト「TOSOH」II (TSH) 標準品 (5) の FU を測定して、TSH 濃度に対する FU の比 [注] を求めると、0.6 ～ 6.0 (nmol/ (L・s)) / (μ IU/mL) となります。
[注] FU の比は、下式により計算しました。
$$\text{FU の比} = (\text{A} - \text{B}) / \text{C}$$

A: 標準品 (5) の FU	(nmol/ (L・s))
B: 標準品 (1) の FU	(nmol/ (L・s))
C: 標準品 (5) の TSH 濃度	(μ IU/mL)

2. 正確性
- TSH 濃度が 5 ～ 80 μ IU/mL の範囲にある既知濃度血清 [注] を測定するとき、その測定値は表示濃度の 100±20 % 以内です。
[注] 既知濃度血清とは、東ソー TSH 標準品を対照として E テスト「TOSOH」II (TSH) を用いて測定し、表示濃度を定めた血清をいいます。
なお、東ソー TSH 標準品とは、E テスト「TOSOH」II (TSH) を用いて、TSH の WHO 国際参照品と比較して力価を定めた標品をいいます。

3. 同時再現性
- TSH 濃度が 5 ～ 80 μ IU/mL の範囲にある 2 例の血清をそれぞれ 10 回同時に測定するとき、それぞれの測定値の変動係数は 15 % 以下です。

4. 測定範囲: 0.0092 ～ 92 μ IU/mL
- 低濃度検出限界 0.0092 μ IU/mL は、標準品 (1) の 10 回測定値 (FU) の平均 + 2 × SD の濃度換算値に基づいて算出しました。
また、4,600 μ IU/mL 以下の濃度では、抗原過剰により誤って低い値が出ることは認められませんでした。

5. 交叉反応性
- | 交叉反応性物質 | 交叉率 (%) |
|---------|---------|
| TSH | 100 |
| HCG | < 0.01 |
| FSH | < 0.01 |
| LH | 0.17 |
| HGH | < 0.01 |

6. 相関性試験成績
- 本法でヘパリン血漿 (y) と血清 (x) との相関性を検討した結果は以下のとおりです。

$$\begin{aligned} y &= 0.955 x + 0.172 \\ r &= 0.999 \\ n &= 109 \end{aligned}$$

- 【使用上又は取扱い上の注意】
1. 使用上の注意
- 1) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
- 2) 試薬トレイ間での試薬カップの載せ替えは、試薬の誤った識別につながりますので、絶対に行わないでください。特に、免疫反応試薬を試薬トレイごとセットする機種は、項目名及びロット番号の識別を試薬トレイのバーコード情報でのみ行い、個々の試薬カップのドットコードでは行いませんのでご注意ください。
- 3) 検量線を作成する場合には、新しく防湿袋を開封した免疫反応試薬を使用してください。
- 4) 検量線の有効期間は 90 日です。これを過ぎた場合は、新たに検量線を作成してください。また、精度管理用サンプルの測定値が変動するなど検量線の状態が適切でないと考えられる場合には、90 日以内であっても検量線を作成しなおしてください。
- 5) 測定には新鮮な検体を用いてください。検体を保存する場合は、2 ～ 8 °C で保存し、7 日以内に測定してください。7 日以内に測定しない場合は、-20 °C 以下で凍結保存し、60 日以内に測定してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
- 6) 試験器具などの汚れは判定を誤らせることがありますので、清浄なものを使用してください。
- 7) 本品は血清又はヘパリン血漿中の TSH 測定試薬ですので、検体には上記以外のものを用いないでください。なお、血漿にはヘパリン血漿を用いてください。
- 8) 検体には HAMA (Human Anti-mouse Antibody) を含むものがありますが、マウスノクローナル抗体を用いた測定系では正しい測定値が得られないことがあります。また、各種疾患の治療等の目的でご使用になった薬物の影響により、測定値が変動することがあります。疾患の診断には他の検査成績や臨床症状を考慮して総合的に判断してください。
- 9) アスホターゼ アルファ (遺伝子組換え) 製剤を投与されている患者の検体では、測定値に影響を受ける可能性があります。
- 10) 開封後の検体希釈液を保存する際は、密封してください。密封に用いるゴム栓等の汚れは、試薬劣化の原因となりますので、清浄なものを使用してください。
- 11) 検体希釈液の濃縮やコンタミネーションの影響を避けるため、残液は注ぎ足しをしないで廃棄してください。
- 12) 調製後の基質液は、血清、ごみ、金属類、微生物などの混入により酵素基質成分の分解が促進される場合がありますので、清浄な状態で保存してください。

2. 取扱い上 (危険防止) の注意
- 1) 試料 (検体) は HIV、HBV、HCV 等の感染の恐れがあるものとして取り扱ってください。検査にあたっては感染の危険を避けるために使い捨て手袋を着用し、また口によるビベッティングを行わないでください。
- *2) E テスト「TOSOH」II (TSH) 免疫反応試薬、E テスト「TOSOH」II (TSH) 標準品セット、E テスト「TOSOH」II (TSH) 検体希釈液、E テスト「TOSOH」II 基質セット、E テスト「TOSOH」II 分注液には保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。使用に際しては、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

3. 廃棄上の注意
- *1) E テスト「TOSOH」II (TSH) 免疫反応試薬、E テスト「TOSOH」II (TSH) 標準品セット、E テスト「TOSOH」II (TSH) 検体希釈液、E テスト「TOSOH」II 基質セット、E テスト「TOSOH」II 分注液には保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。アジ化ナトリウムは鉛管・銅管と反応して爆発性のある金属アジドを生成することがありますので、廃棄する場合は、多量の水で薄めるようにしてください。
- 2) 検体の付着したビベットチップ、手袋などの器具及び測定終了後の試薬カップはオートクレーブ (例えば 121 °C、20 分以上) など滅菌後廃棄してください。
- 3) 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法 2 ～ 8 °C 保存
2. 有効期間 12 ヶ月
- * ※使用期限は、各構成試薬の外箱等のラベルに記載されています。

*【包装単位】

品番	品名	包装
0025294	 E テスト「TOSOH」II (TSH) 免疫反応試薬	100 回測定分
0025394	 E テスト「TOSOH」II (TSH) 標準品セット	標準品 (1) - (6) : 各 1.0 mL 入り ×2 本
0015594	 E テスト「TOSOH」II (TSH) 検体希釈液	4.0 mL 入り ×4 本
0015968	E テスト「TOSOH」II 基質セット E テスト「TOSOH」II 基質 E テスト「TOSOH」II 基質溶解液	100 mL 用 ×2 本 100 mL 入り ×2 本
0015955	E テスト「TOSOH」II 洗浄液	100 mL 入り ×4 本
0015956	E テスト「TOSOH」II 分注液	100 mL 入り ×4 本

【主要文献】

1. Pierce, J. G., Eli Lilly lecture: The subunits of pituitary thyrotropin their relationship to other glycoprotein hormones. *Endocrinology*, **89**, 1331-1344 (1971).
2. Utiger, R., Radioimmunoassay of human plasma thyrotropin. *J. Clin. Invest.*, **44**, 1277-1286 (1965).
3. Burger, H. G. and Patel, Y. C., The value of serum thyrotropin measurement in the diagnosis and management of hypothyroidism. *Med. J. Aust.* **2**, 293-297 (1972).
4. Smith, S. R., Burton, D. W., and Izenstark, J. L., Levels of serum thyroid-stimulating hormone in hyperthyroidism. *Arch. Intern. Med.* **139**, 757-760 (1979).
5. Karlberg, B. E., and Almquist, S., Clinical experience with thyrotropin releasing hormone (RH) stimulation test in patients with thyroid, pituitary and hypothalamic disorders. *Acta Endocr.* **72**, 697-713 (1973).
6. Hall, R., Ormston, B. J., Besser, G. M., Cryer, R. J., and McKendrick, M., The thyrotropin-releasing hormone test in diseases of the pituitary and hypothalamus. *Lancet* **1**(7754), 759-763 (1972).
7. Nicoloff, J. T. and Spencer, C. A., The use and misuse of the sensitive thyrotropin assays. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* **71**, 553-558 (1990).
8. Taimela, E., Tähtelä, R., Koskinen, P., Nuutila, P., Forsström, J., Taimela, S., et al., Ability of two new thyrotropin (TSH) assays to separate hyperthyroid patients from euthyroid patients with low TSH. *Clin. Chem.* **40**, 101-105 (1994).
9. AIA News No.1011 甲状腺刺激ホルモン (TSH) 値のハーモナイゼーションについて
10. 菱沼 昭, TSHのハーモナイゼーションについて, *臨床病理* **68** (5); 404-412 (2020).
11. Thienpont, L. M., et al., Harmonization of Serum Thyroid-Stimulating Hormone Measurements Paves the Way for the Adoption of a More Uniform Reference Interval. *Clin. Chem.* **63**, 1248-1260 (2017).
12. 日本臨床検査医学会
<https://www.jslm.org/committees/standard/20200130TSH.pdf>

【問い合わせ先】

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部
カスタマーサポートセンター
〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川 2743-1
フリーダイヤル® 0120-17-1200
TEL. (0467) 76-5384
FAX. (0467) 79-2550

※※【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元



TOSOH

東ソー株式会社

東京都中央区八重洲 2-2-1

製造元



TOSOH

東ソー・エイアイエイ株式会社

富山県富山市岩瀬古志町 2 番地