

** I D テスト・E B - 2 0

I D テスト・E B 試薬

【形状・構造等（キットの構成）】


本品は、I D テスト・E B - 2 0 の成績判定に必要な判定用試薬がセットされています。

構成試薬

		成分(1mL 中)	
・ 10%塩化第二鉄試液	6mL × 1 本	塩化第二鉄	100mg
・ コバック試液	6mL × 1 本	p-ジメチルアミノベンズアルデヒド	50mg
・ 6% α-ナフトール試液	6mL × 1 本	α-ナフトール	60mg
・ 40%水酸化カリウム試液	6mL × 1 本	水酸化カリウム	400mg

【用法・用量（操作方法）】

図の通り各試液を指定のホールに滴下します。詳細は I D テスト・E B - 2 0 の添付文書を参照して下さい。

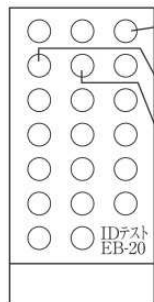

PPA : 10%塩化第二鉄試液を 1 滴加えて 1 分以内に判定。

IND : コバック試液 1 滴を加えて判定。

VP : 6% α-ナフトール試液および 40%水酸化カリウム試液を、それぞれ 1 滴ずつ加え、室温に 5 ~ 20 分間放置後判定。

** 【包装単位】

I D テスト・E B 試薬 100 検体用・・・Code 06628

** 【問い合わせ先】

島津ダイアグノスティクス株式会社
カスタマーサポート担当
〒110-0005
東京都台東区上野 3-24-6
電話 03(5846)5707

** 【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

島津ダイアグノスティクス株式会社
〒110-0005
東京都台東区上野 3-24-6
電話 03(5846)5611 (代)

** * 【貯蔵方法、有効期間】

貯蔵方法

冷所(2~10℃)に保存。

有効期間

製造後 1 年間。