

** N - I D テ ス ト ・ S P - 1 8

S P 試薬

【形状・構造等（キットの構成）】


本品は、N - I D テ ス ト ・ S P - 1 8 の成績判定に必要な判定用試薬がセットされています。

構成試薬

・ 6% α -ナフトール試液	6mL $\times$ 1 本	成分(1mL)中 α -ナフトール	60mg
・ 40%水酸化カリウム試液	6mL $\times$ 1 本	水酸化カリウム	400mg
・ 亜硝酸塩検出試液 I	9mL $\times$ 1 本	スルファニル酸	8.0mg
・ 亜硝酸塩検出試液 II	9mL $\times$ 1 本	ジメチル- α -ナフチルアミン	6.0mg

【用法・用量（操作方法）】

下図の通り各試液を指定のホールに滴下します。詳細はN - I D テ ス ト ・ S P - 1 8 の添付文書を参照して下さい。

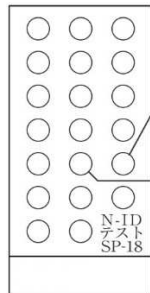

N I T : 亜硝酸塩検出試液 I および II を、それぞれ 1 滴ずつ加えて 3 ~ 5 分後に判定。

V P : 6 % α -ナフトール試液および 40 % 水酸化カリウム試液を、それぞれ 1 滴ずつ加え、室温に約 15 分間放置後判定。

【包装単位】

S P 試薬 100 検体用 Code 06638

** 【問い合わせ先】

島津ダイアグノスティクス株式会社 カスタマーサポート担当
〒110-0005
東京都台東区上野 3-24-6
電話 03(5846)5707

** * 【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

島津ダイアグノスティクス株式会社
〒110-0005
東京都台東区上野 3-24-6
電話 03(5846)5611 (代)

【貯蔵方法、有効期間】

貯蔵方法

冷所(2 ~ 10°C)に保存。

有効期間

製造後 1 年間。