

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください。

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 20400AMZ01157000

**2023 年 4 月改訂 (第 4 版)

*2019 年 3 月改訂 (第 3 版)

培養同定・一般細菌キット

** I D テ ス ト ・ N F - 1 8

N F 試薬

**【形状・構造等（キットの構成）】

本品は、I D テ ス ト ・ N F - 1 8 の成績判定に必要な判定用試薬がセットされています。

構成試薬

・コバック試液	6mL×1本
・亜硝酸塩検出試液	9mL×1本
・亜硝酸塩検出試液	9mL×1本
・亜鉛末	2.5g×1本

成分(1mL 中)

p-ジメチルアミノベンズアルデヒド

50.0mg

スルファニル酸


8.0mg

ジメチル- α -ナフチルアミン

6.0mg

**【用法・用量（操作方法）】

下図の通り各試液を指定のホールに滴下します。詳細は I D テ ス ト ・ N F - 1 8 の添付文書を参照して下さい。

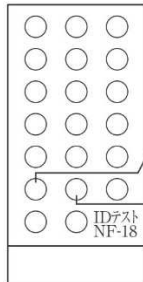

I N D : コバック試液を1滴加えて判定。

N I T : 亜硝酸塩検出試液 I , II をそれぞれ1滴ずつ加えて判定。陰性の時はさらに亜鉛末を加えてから判定。

有効期間

製造後 1 年間。

【包装単位】

NF 試薬 100 検体用 Code 06631

**【問い合わせ先】

島津ダイアグノスティクス株式会社

カスタマーサポート担当

〒110-0005

東京都台東区上野 3-24-6

電話 03(5846)5707

**【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

島津ダイアグノスティクス株式会社

〒110-0005

東京都台東区上野 3-24-6

電話 03(5846)5611 (代)

【貯蔵方法、有効期間】

貯蔵方法

冷所(2~10℃)に保存。

(3D01S)