

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください。

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 20700AMZ00797000

**2023 年 4 月改訂 (第 4 版)

*2019 年 3 月作成 (第 3 版)

培養同定・一般細菌キット

** I Dテスト・EB-9

EB 9 試薬


**【形状・構造等（キットの構成）】

本品は、I Dテスト・EB-9 の成績判定に必要な判定用試薬がセットされています。

構成試薬

・コバック試薬	6mL × 1 本	成分(1mL 中)	
・6% α -ナフトール試液	6mL × 1 本	p-ジメチルアミノベンズアルデヒド	50mg
・  40%水酸化カリウム試液	6mL × 1 本	α -ナフトール	60mg
		水酸化カリウム	400mg

** *【用法・用量（操作方法）】

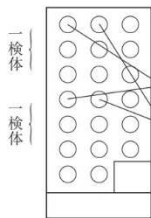

左記のとおり各試薬を指定のホールに滴下します。詳細はIDテスト・EB-9 の添付文書を参照して下さい。

I N D：コバック試液を 1 滴加えて判定。

V P：6% α -ナフトール試液および 40%水酸化カリウム試液をそれぞれ 1 滴ずつ加えて判定します。

**【包装単位】

I Dテスト・EB-9 EB 9 試薬 100 検体用・・・Code 06671

**【問い合わせ先】

島津ダイアグノスティクス株式会社
カスタマーサポート担当
〒110-0005
東京都台東区上野 3-24-6
電話 03(5846)5707

【使用上又は取扱い上の注意】

使用上の注意

1. 試薬等が目や口に入った場合には、水で十分に洗い流し、医師等に相談し、指示を受けて下さい。
2. 使用期限を過ぎた試薬は同定の信頼性が保証できませんので、使用しないで下さい。

**【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

島津ダイアグノスティクス株式会社
〒110-0005
東京都台東区上野 3-24-6
電話 03(5846)5611 (代)

【貯蔵方法、有効期間】

貯蔵方法

冷所(2～10℃)に保存。

有効期間

製造後 1 年間。

(3D01S)