

****使用に際してはこの電子添文をよくお読みください。
また、必要な時に読めるように保管しておいてください。**

XXXXOT

**2022年10月改訂（第6版）
*2017年12月改訂（第5版）

体外診断用医薬品

製造販売承認番号：22200AMX00294000

B型肝炎ウイルスe抗体キット


ルミパルス® HBeAb-N

■全般的な注意

1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 本試薬で抗HBe抗体陽性と判定された場合は、経時的に検査し、また他の検査結果および臨床症状等を考慮して総合的に判断してください。
3. 本書以外の使用方法については保証を致しません。
4. HBeAb-N用標準陽性溶液には、HCV抗体およびHIV抗体検査陰性、HBs抗原検査陽性の原料を使用しております。感染の危険性があるものとして検体同様十分に注意して取扱ってください。
5. HBeAb-N用標準陰性溶液には、HBs抗原、HCV抗体およびHIV抗体検査陰性の原料を使用しておりますが、感染の危険性があるものとして検体同様十分に注意して取扱ってください。
6. 本試薬および検体は、感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。
7. 本試薬には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。
- **8. 本試薬の使用に際しては、本書とあわせ、各試薬の添付文書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書をご参照ください。

■形状・構造等（キットの構成）

1. 抗体結合粒子・酵素標識抗体混合液^{注1)}（使用時液状、150μL/免疫反応カートリッジ）
抗HBeモノクローナル抗体（マウス）結合フェライト粒子およびアルカリホスファターゼ（ALP）標識抗HBeモノクローナル抗体（マウス）を含みます。
2. 中和抗原液（液状、120μL/免疫反応カートリッジ）
リコンビナントHBe抗原を含みます。

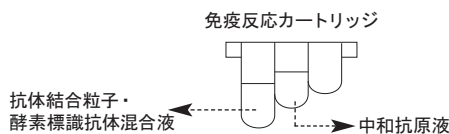

3. HBeAb-N用標準溶液
☐ HBeAb-N用標準陰性溶液（液状、2.0mL×2）
☐ HBeAb-N用標準陽性溶液（液状、2.0mL×2）
4. 基質液（液状、100mL×6、50mL×6）
基質としてAMPDP^{注2)}を含みます。
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。
5. 洗浄液（濃縮液、1000mL×1）

注1) 15℃以下の温度ではゲル化しています。

注2) AMPDP：3-(2'-spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3''-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane disodium salt / 3-(2'-スピロアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3''-ホスホリルオキシ)フェニル-1,2-ジオキセタン・2ナトリウム塩


■使用目的

血清又は血漿中の抗HBe抗体の検出（B型肝炎ウイルス感染の診断補助等）

■測定原理

本試薬は1ステップ競合法に基づいた化学発光酵素免疫測定法による抗HBe抗体検出試薬です。

<反応プロトコール；1ステップモード>

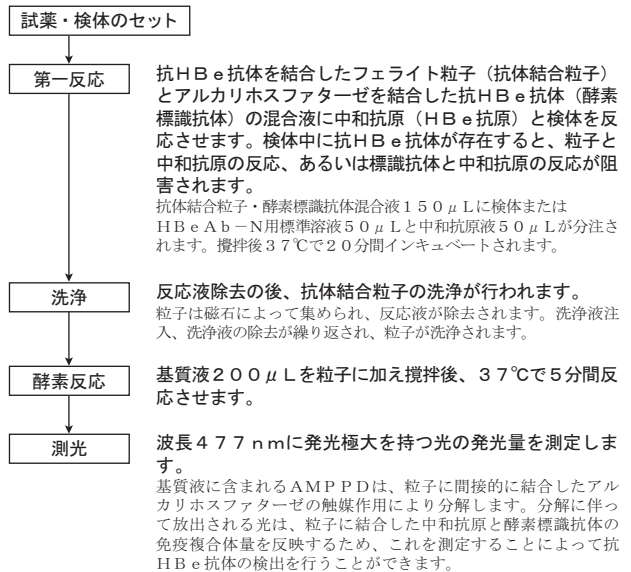

■操作上の注意

1. 測定検体の性質、採取法

- **1) 検体の採取は使用する採血管の電子添文をよく確認し、指定された方法（採血量、遠心分離方法など）により採取してください。
- (2) 検体は、血清、血漿いずれでも測定できます。
- (3) 検体は室内温度（10～25℃）で7日間保存することができますが、可能な限り新鮮な検体を用い、1週間以内に測定してください。1週間以内に測定を行わない場合には-20℃以下で凍結保存してください。凍結融解した検体を使用する場合は完全に均一化してから使用してください。
- (4) 検体を繰り返し凍結融解することは避けてください。
- (5) 検体は室内温度（10～25℃）で7日間保存することができますが、測定値に影響を与える場合があります。正しい結果が得られるように遠心または除去した後に使用してください。
- (6) 検体間の汚染が生じないように検体は注意して取扱ってください。
- (7) 血清検体を非働化することによる影響はありません。
- (8) 検体に抗凝固剤（EDTA-二カリウム、クエン酸ナトリウム、ヘパリンナトリウム）を添加して試験した結果、それぞれ2.5mg/mL、38mg/mL、100U/mLまで測定値に影響は認められませんが、液状の抗凝固剤を用いる場合は、検体の希釈率にご注意ください。

2. 妨害物質・妨害薬剤

検体にビリルビンF、ビリルビンC、ヘモグロビンを添加して試験した結果、それぞれ18.7mg/dL、20.9mg/dL、484mg/dLまで、測定値に影響は認められませんでした。また、乳びに関しても、1460ホルマジン濁度まで測定値に影響は認められませんでした。

3. その他

本試薬は全自動化学発光酵素免疫測定システム
（代表例：ルミパルス G1200）用試薬です。

■用法・用量（操作方法）

1. 試薬の調製法

- (1) 抗体結合粒子・酵素標識抗体混合液および中和抗原液
免疫反応カートリッジには抗体結合粒子・酵素標識抗体混合液および中和抗原液が充填されています。カートリッジケースの透明フィルムを剥がし、そのまま使用します。
・免疫反応カートリッジを取扱う際に、振動を加えたり、逆さまにしたりしないでください。
・免疫反応カートリッジを装置にセットする際は、カートリッジケースの透明フィルムを必ず剥がしてください。剥がし忘れや剥がし残りがある場合、装置の動作異常の原因となります。
・試薬項目および試薬ロットはカートリッジケースのバーコードによって管理されています。カートリッジケース間の免疫反応カートリッジの入れ替えは試薬の誤認識に繋がる可能性がありますので行わないでください。

- (2) H B e A b－N用標準溶液
常温（１５～２５℃）に戻してから軽く転倒混和して使用します。
デッドボリュームを考慮して、サンプルカップに必要な量を滴下します。
・溶液１滴あたりのおよその滴下量は４５μLです。滴下量は容器を押す強さや気泡の混入によって変動します。滴下の際に液滴の中に気泡が多量に混入する場合は、残量が僅かですので新しい試薬を使用してください。サンプルカップに泡が残りますとサンプリング不良の原因になる場合があります。
・デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。
一例としてルミパルス G 1 2 0 0 でサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは１００μLとなります。
・H B e A b－N用標準溶液は、免疫反応カートリッジと同一ロットのものを使用してください。
- (3) 基質液
冷蔵庫から出してそのまま使用します。
・基質液の漏れがないように装置にセットしてください。
・基質液を装置にセットした後は、基質液交換時まで取外しは避けてください。基質液の注ぎ足しはしないでください。基質液がアルカリホスファターゼ（ALP）に汚染されますと使用できません。手指が直接基質液に触れた場合は、廃棄してください。
- (4) 洗浄液
濃縮液のため精製水で１０倍に希釈し、よく攪拌します。希釈した洗浄液は、常温（１５～２５℃）に戻してから使用します。

2. 必要な器具・器材

- (1) マイクロピペット、サンプリングチップおよびサンプルカップ

- (2) 全自動化化学発光酵素免疫測定システム

3. 測定法

- (1) 測定システムの取扱説明書を参照し、検体および測定に必要な試薬を所定の位置にセットしてください。（サンプルの最少必要量は、使用する容器や測定システムによって異なりますので、各測定システムの取扱説明書をご覧ください。）
- (2) H B e A b－N用標準溶液および検体の測定依頼内容をそれぞれ入力します。
- (3) 測定を開始する前に、免疫反応カートリッジ、基質液、洗浄液、サンプリングチップの残量を確認します。
- (4) スタートキーを押し、測定を開始します。装置内で自動的に実行される動作については測定原理の「反応プロトコール」の項をご参照ください。

4. 抗H B e 抗体の検出

検体中の抗H B e 抗体は、H B e A b－N用標準溶液の発光量をもとに算出された抑制率（INH％）から自動的に検出されます。

H B e A b－N用標準溶液の測定は以下の場合に行います。

- ・免疫反応カートリッジ、基質液のいずれかが、新しいロットに切り替わった場合。

上記以外においても必要が生じた場合は、H B e A b－N用標準溶液を測定し抑制率（INH％）の計算式を更新してください。

■測定結果の判定法

1. 抑制率（INH％）の計算

下記の式に従って検体のINH（％）を計算します。

$$INH（\%） = \frac{NCの発光量 - 検体の発光量}{NCの発光量 - PCの発光量} \times 100$$

NC：H B e A b－N用標準陰性溶液

PC：H B e A b－N用標準陽性溶液

2. 判定

陰性：INH（％）が５０未満を示す検体は陰性と判定します。

陽性：INH（％）が５０以上を示す検体は陽性と判定します。

3. 判定上の注意

- (1) B型肝炎が疑われる場合は本試薬で陰性と判定されても、経時的に検査し、また他の検査結果および臨床症状等を考慮して総合的に判断してください。
- (2) 検体中に存在する未同定の非特異反応性物質の影響により、まれに測定値が正確に得られない場合がありますので、他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
- (3) 陽性と判定された検体は、検体中のフィブリンクロットや赤血球等の有形成分の存在、検体間の汚染、非特異反応等の要因により、偽陽性の可能性もあります。
- (4) 自己免疫疾患患者の検体では非特異的な反応が起こりうるので、本試薬の判定結果に基づく診断は、他の検査結果、臨床症状等を考慮して総合的に判断してください。

■臨床的意義

Magniusらにより発見されたH B e 抗原¹⁾は、B型肝炎の活動性および感染性の指標とされており²⁾、H B e 抗原の分泌の低下に伴い出現する抗H B e 抗体の検出は、B型肝炎の経過観察、予後の指標として有用とされております。³⁻⁴⁾

本試薬は、化学発光基質（AMP PD）を用いた化学発光酵素免疫測定法⁵⁾（CLEIA；chemiluminescent enzyme immunoassay）に基づく試薬です。

■性能

1. 性能

(1) 感度

H B e A b－N用標準溶液を所定の操作で測定するとき、H B e A b－N用標準陰性溶液とH B e A b－N用標準陽性溶液の発光量の比は１０以上になります。

(2) 正確性

自家管理検体（陰性３例、陽性３例）を所定の操作で測定するとき、陰性自家管理検体は陰性を示し、陽性自家管理検体は陽性を示します。

(3) 同時再現性

自家管理検体（陰性３例、陽性３例）を所定の操作で６回繰り返し測定するとき、同一の判定結果が得られます。

(4) 最小検出感度

B B I 社製セロコンバージョンパネル（No. PHM935B）を用いて検出感度を検討した結果、パネルNo. PHM935B-27を検出することが確認できました。

2. 相関性試験成績

- (1) 血清検体１４８例を使用し、ルミパルスI H B e A b（自社品）との相関性（一致率）を検討した結果、以下に示す成績が得られました。

表１ 相関性（一致率）試験成績

		対 照 品		合 計
		陽 性	陰 性	
本 品	陽 性	７５例	３例	７８例
	陰 性	０例	７０例	７０例
合 計		７５例	７３例	１４８例

一致率９８％（１４５例/１４８例）

- (2) 血清検体１４８例を使用し、既存C L I A法との相関性（一致率）を検討した結果、以下に示す成績が得られました。

表２ 相関性（一致率）試験成績

		対 照 品		合 計
		陽 性	陰 性	
本 品	陽 性	７５例	３例	７８例
	陰 性	３例	６７例	７０例
合 計		７８例	７０例	１４８例

一致率９６％（１４２例/１４８例）

- (3) 同一人から採取した血清・血漿（抗凝固剤：ヘパリンナトリウム）検体１０４例を使用し、本試薬にて相関性（一致率）を検討した結果、以下に示す成績が得られました。

表３ 血清・血漿相関性（一致率）試験成績

		血 清		合 計
		陽 性	陰 性	
血 漿	陽 性	５１例	０例	５１例
	陰 性	０例	５３例	５３例
合 計		５１例	５３例	１０４例

一致率１００％（１０４例/１０４例）

■使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上（危険防止）の注意

- (1) 検体はH I V、H B V、H C V等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
- (2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペッティングを行わないでください。
- (3) 基質液はアルカリ性溶液（p H 1 0）です。使用に際しては、液が皮膚についたり、目に入らないように注意してください。
- (4) 試薬（検体）が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

2. 使用上の注意

- ** (1) 使用に際しては本書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書に従ってください。
- (2) 免疫反応カートリッジセット（抗体結合粒子・酵素標識抗体混合液、中和抗原液、H B e A b－N用標準溶液）、基質液、洗浄液は個別に包装されていますので、ご使用の測定システムに合わせ、組み合わせで使用してください。
- (3) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。各構成試薬外箱および容器の表示をご確認のうえ使用してください。
- (4) サンプリングチップ、サンプルカップは、使用する測定システム指定のものを使用してください。
- (5) サンプリングチップ、サンプルカップは常に新しいものを使用してください。
- (6) 保管に冷蔵庫をご使用の場合、庫内のファンからの風が直接あたる場所および庫内最下部での保管は、温度変化により水分蒸発の原因となりますので避けてください。

- (7) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注意してください。
- (8) 検体およびHB e A b -N用標準溶液は蒸発による濃縮を考慮し、装置セット後の経過時間に注意してください。
- (9) 正確な測定を行うために、精製水は常に新しいものを使用してください。
- (10) ソーダライムは交換せずに長期間使用を続けると、二酸化炭素の吸収力が低下します。また基質キャップパッキンも交換せずに長期間使用を続けると密閉性が失われ基質液を劣化させる原因となります。ソーダライムと基質キャップパッキンの交換時期についてはご使用の測定システムの取扱説明書をご覧ください。

3. 廃棄上の注意

- ** (1) 各試薬には保存剤として以下のとおりアジ化ナトリウムが含まれています。廃棄する際は爆発性の金属アジドが生成されないように多量の水とともに流してください。また、酸と反応して有毒性のガスを発生する恐れがありますので、酸との接触を避けて廃棄してください。
洗浄液：1.0%（希釈調製前）、基質液：0.05%
抗体結合粒子・酵素標識抗体混合液、中和抗原液、HB e A b -N用標準溶液：0.1%
- (2) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
- (3) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理してください。
- (4) 使用した器具（ピペット、試験管等）、廃液、サンプリングチップ等は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタルアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等による消毒処理あるいは、オートクレーブ（121℃、20分以上）による滅菌処理を行ってください。
- (5) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタルアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等によるふき取りと消毒を行ってください。
- (6) 消毒処理に使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液、グルタルアルデヒド溶液が、皮膚についたり、目に入らないように注意してください。

■貯蔵方法・有効期間

抗体結合粒子・酵素標識抗体混合液	2～10℃に保存	有効期間：18ヵ月
中和抗原液	2～10℃に保存	有効期間：18ヵ月
HB e A b -N用標準溶液	2～10℃に保存	有効期間：18ヵ月
基質液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月
洗浄液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月

使用期限については、各構成試薬の外箱および容器の表示をご参照ください。

*■包装単位

個別包装

ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

コードNo.	品名	包装
295304	ルミパルス HB e A b -N 免疫反応カートリッジセット (抗体結合粒子・酵素標識抗体混合液、 中和抗原液、HB e A b -N用標準溶液)	14テスト×3
219973	ルミパルス 基質液 (共通試薬)	100mL×6
292600	ルミパルス 基質液 (共通試薬)	50mL×6
219942	ルミパルス 洗浄液 (共通試薬)	1000mL×1

■主要文献

- Magnius LO, Espmark JA. New Specificities in Australia antigen positive sera distinct from the Le Bouvier determinants. J Immunol, 109: 1017-1021, 1972.
- Okada K, et al. E Antigen and Anti-e in the Serum of Asymptomatic Carrier Mothers as Indicators of Positive and Negative Transmission of Hepatitis B Virus to Their Infants. N Engl J Med, 294: 746-749, 1976.
- 袖山 健. HBs抗原陽性の慢性肝炎におけるHBe抗原抗体系の臨床的意義. 肝臓, 23: 731-741, 1982.
- 日本消化器病学会 肝機能研究班. 肝疾患における肝炎ウイルスマーカーの選択基準 (4版). 日本消化器病学会誌, 103: 1403-1412, 2006.
- Nishizono I, et al. Rapid and Sensitive Chemiluminescent Enzyme Immunoassay for Measuring Tumor Markers. Clin Chem, 37: 1639-1644, 1991.

■問い合わせ先

*富士レビオ株式会社 お客様コールセンター
TEL : 0120-292-832

■製造販売元

富士レビオ株式会社

**神奈川県相模原市中央区田名塩田1丁目3番14号

