

この添付文書をよく読んでから使用してください。
また、必要時に読めるように保管しておいてください。

体外診断用医薬品

**2021 年 2 月改訂(第 5 版)

*2019 年 11 月改訂(第 4 版)

製造販売承認番号:21300AMY00492000

コバス® システム

クラスⅢ汎用・生化学・免疫・内分泌検査用シリーズ
A型肝炎ウイルス免疫グロブリンMキット

エクルーシス® 試薬 Anti-HAV IgM

*【全般的な注意】

1. 本品は体外診断用であり、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状やほかの検査結果などと併せて、担当医師が総合的に判断してください。
3. 添付文書に記載された使用目的及び用法・用量に従って使用してください。記載された使用目的及び用法・用量以外での使用については、測定結果の信頼性を保証しかねます。
4. 構成試薬(Cal1及び Cal2)はヒト血液由来成分を含みます。HBs 抗原、抗 HIV(HIV-1及び HIV-2)抗体及び抗 HCV 抗体の陰性が確認されています。また、試液2に用いた HAV 抗原及び Cal2(抗 HAV 抗体(IgM 型)陽性ヒト血清)はβ-プロピオラクトン及び紫外線照射により不活性化されています。しかし、不活性化または試験方法によって、感染のリスクを完全かつ確実に排除することはできないため、感染性があるものとして検体同様、取り扱いには十分に注意してください。
5. 使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読み、記載に従って使用してください。

【形状・構造等(キットの構成)】

エクルーシス試薬

1. Anti-HAV IgM

構成試薬/キャップの色

MP 液(M)/無色

streptavidin-coated magnetic microbeads
(SA 磁性 MP)

試液1(R1)/黒

tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) labeled anti-HAV mouse monoclonal antibody (Ru(bpy)₃ labeled anti-HAV antibody)

anti-Hd-γ antibody

試液2(R2)/黒

biotinylated anti-Hd IgM mouse monoclonal antibody
(biotinylated anti-Hd IgM antibody)

HAV antigen

Cal1 (anti-HAV antibody negative human serum) / 白^{*1}

Cal2 (anti-HAV antibody (IgM type) positive human serum) / 黒^{*1}

<付属品>

ボトルラベル

2. プロセル(別売)

構成試薬/キャップの色

プロセル/白

tripropylamine

注意) 1. 2. は組み合わせで使用してください。

※1 ヒト血液由来成分を含みます。詳細は【全般的な注意】の項及び【使用上又は取扱い上の注意】の項「1. 取扱い上(危険防止)の注意」を参照してください。

cobas®

【使用目的】

血清又は血漿中の抗 HAV 抗体(IgM 型)の検出

【測定原理】

本キットは、血清又は血漿中の抗 HAV 抗体(IgM 型)を検出するもので、電気化学発光免疫測定法(ECLIA 法)を測定原理としています¹⁾。第1反応として検体、トリス(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) 標識抗 HAV マウスモノクローナル抗体(Ru(bpy)₃ 標識抗 HAV 抗体)及び抗ヒト Fd-γ 抗体を加えインキュベーションします。このとき、検体中に存在する IgG 抗体は抗ヒト Fd-γ 抗体と反応し、免疫複合体を形成することにより、以降の反応から除外されます。第2反応としてビオチン化抗ヒト IgM マウスモノクローナル抗体(ビオチン化抗ヒト IgM 抗体)、HAV 抗原及びstreptavidin-coated magnetic microbeads (SA 磁性 MP)を加えインキュベーションします。反応混合液を測定セルに吸引し、磁力により SA 磁性 MP を電極に引き付けます。次にトリプロピルアミンを吸引し、未反応物を除去します(B/F 分離)。SA 磁性 MP に結合している Ru(bpy)₃ 標識抗 HAV 抗体の Ru(bpy)₃ は、電極への荷電による酸化と、トリプロピルアミンでの還元反応により励起発光を繰り返すので、所定時間での発光強度を光電子増倍管で測定します。同様の操作をしたキャリブレーションの発光強度からカットオフ値を計算し、カットオフインデックスより検体中の抗 HAV 抗体(IgM 型)の陽性又は陰性を判定します。

**【操作上の注意】

1. 測定試料の性質・採取法

測定試料:血清又は血漿(ヘパリン、EDTA、クエン酸)

測定試料の安定性:15~25℃で7日間、

2~8℃で14日間、

-20℃(±5℃)で3ヵ月間安定

(凍結融解は5回まで)

採血管の種類によっては、測定結果に影響を及ぼす場合がありますので使用する採血管の製造元の指示に従ってください。

沈殿物のある検体は、使用前に遠心操作を行ってください。また、加熱した検体は使用しないでください。

アジ化ナトリウムを含有する検体やコントロールは、測定に使用しないでください。

蒸発による測定への影響を回避するため、機器に設置した検体及びキャリブレーションは2時間以内に測定してください。

血清又は血漿以外の体液や、死亡後に採取された血液検体での測定は確立されていません。

2. 妨害物質・妨害薬剤

- (1) 下表に示す物質が本品の測定に与える影響を確認したところ、下表の各濃度までは測定に与える影響は以下の範囲内でした。

カットオフインデックス $\geq$ 1.0 の検体: $\pm$ 20%以内

カットオフインデックス $<$ 1.0 の検体: $\pm$ 0.20 以内

物質	濃度
溶血(ヘモグロビン)	1,000 mg/dL
黄疸(ビリルビン)	50 mg/dL
乳ビ(イントラリピッド)	1,000 mg/dL
IgG	7.0 g/dL
IgA	1.6 g/dL
リウマチ因子	1,200 IU/mL
ビオチン(ビタミン B ₇) ^{*2}	50 ng/mL

※2 ビオチン(ビタミン B₇)を1日5 mg 以上投与している患者からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施してください。

- (2) 16 種の一般的な治療薬が本品の測定に与える影響を In-vitro 試験で確認したところ、影響は認められませんでした。
- (3) イムノアッセイでは、非特異反応物質が存在した場合、得られた結果に対して、非特異反応を完全に否定できない場合があります。

3. その他

本試薬はコバス 8000(免疫処理用 e801 モジュール)に適用できます。そのほかの適用可能な機器については弊社までお問い合わせください。

*【用法・用量(操作方法)】

1. 試薬の調製方法

エクルーシス試薬

(1) Anti-HAV IgM

① 試薬パック(MP 液、試液1及び試液2)

そのままご使用ください。

② キャリブレーション(Cal1及びCal2)

キャップをした状態で泡立でないように穏やかに混和し、キャップを開け、エクルーシス キャリバイアル(別売)に適量を小分け分注します。この時、キャリブレーション容器を間違えないように注意してください。

Cal1→白キャップのキャリブレーション容器

Cal2→黒キャップのキャリブレーション容器

必要に応じ、添付のボトルラベルを容器に貼ってください。この際、各濃度域にあったラベルを使用してください。調製後、直ちに使用しないキャリブレーションは速やかに2~8℃保存してください。キャップの裏側に試薬が付着しないように垂直の状態で保存、使用してください。

(2) プロセル(別売)

そのままご使用ください。

2. 試薬の安定性

エクルーシス試薬

(1) Anti-HAV IgM

① 試薬パック(MP 液、試液1及び試液2)

未開封時:2~8℃で使用期限まで安定
機器上:16週間安定

② キャリブレーション(Cal1及びCal2)

未開封時:2~8℃で使用期限まで安定
開封後:2~8℃で16週間安定

(使用を開始してから安定性)

機器上:20~25℃で1回のみ使用可能

(2) プロセル(別売)

未開封時:15~25℃で使用期限まで安定

機器上:21日間安定

3. 別途必要な器具・器材・試薬

・コバス 8000(免疫処理用 e801 モジュール)など(そのほかの適用可能な機器については弊社までお問い合わせください)

・エクルーシス プレチコントロール Anti-HAV IgM

・エクルーシス 検体希釈液 (S)

・エクルーシス クリーンセル M

・エクルーシス プレクリーン G2

・エクルーシス アッセイカップ/チップ G2

・エクルーシス PC/CC カップ G2

・エクルーシス DU 用 LFC カップ G2

・エクルーシス PW 用 LFC カップ G2

・エクルーシス キャリバイアル

使用法は、各製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。また、機種により使用する製品が異なりますので、ご不明な点などがございましたら弊社までお問い合わせください。

4. 操作方法

(1) 測定準備

エクルーシス試薬

① Anti-HAV IgM

(a) 機器への試薬パックの設置

機器の試薬マネージャーに試薬パックをセットします。

試薬は泡立でないでください。

キャップの開閉は、機器が自動的にを行います。

使用後は、そのまま機器の試薬マネージャー内に保存してください。

(b) 機器への測定試料の設置

所定の位置に検体をセットします。

機器への設置方法の詳細は、機器の取扱説明書を参照してください。

(c) キャリブレーション

本試薬に使用するマスターキャリブレーションデータは試薬パック、並びにキャリブレーションのバーコード及び電子配信されるキャリブレーション情報に記録されています。マスターキャリブレーションデータを各機器の状態に適合させるために、キャリブレーションを行います。

このキャリブレーションには、キャリブレーション(Cal1及びCal2)を使用します。

ア) キャリブレーションを冷蔵庫から出し、20~25℃に戻します。

キャップをした状態で、泡立ないように穏やかに混和し、キャップを開け、Cal1、Cal2が連続して測定されるように機器にセットします。その際、キャップの裏への試薬の付着に注意してください。付着している場合は取り除いてください。

イ) サンプリング終了後のキャリブレーションは、**廃棄してください**。小分け分注したキャリブレーション1本につき1回のみ測定可能です。

ウ) 新しいロットの試薬を使用する場合、機器に設置してから24時間以内の新しい試薬パックを用いて、必ずキャリブレーションを行ってください。このキャリブレーションデータが、同一ロットの試薬パックに使用されるキャリブレーション(L-Cal)として、機器に記録されます。

エ) 推奨するキャリブレーションの測定・更新頻度は、以下のとおりです。しかしながら、精度管理などで必要が生じた場合は、必ずキャリブレーションを行ってください。

1つの試薬パックを28日間を使いきる場合:

上記 L-Cal は、8週間有効です。この間キャリブレーションは不要です。ただし同一ロット内でも、8週間に1度 L-Cal を更新してください。

1つの試薬パックを28日間を超えて使用する場合:

28日間に1度その試薬パックでキャリブレーションしてください。その際のキャリブレーションデータは、その試薬パックにのみ有効なキャリブレーション(R-Cal)として、機器に記録されます。

キャリブレーション実施後は、必ずコントロール試料を測定し、精度管理を行ってから検体測定を行ってください。

② プロセル(別売)

機器への設置方法の詳細は、機器の取扱説明書を参照してください。

泡立でないでください。

(2) 測定(μキャプチャー法)

① 第1反応:検体^{※3}及び試液1(抗ヒト Fd-γ 抗体、Ru(bpy)₃ 標識抗 HAV 抗体)を加えます。検体中に存在する IgG 抗体は抗ヒト Fd-γ 抗体と反応し、免疫複合体を形成することにより、以降の反応から除外されます。


② 第2反応:試液2(HAV 抗原、ビオチン化抗ヒト IgM 抗体)及びMP液(SA 磁性 MP)を加え反応させます。

③ 反応混合液を測定セルに吸引し、磁力により SA 磁性 MP を電極に引き付けます。

④ プロセル(トリプロピルアミン)を吸引し、未反応物を除去します(B/F 分離)。

SA 磁性 MP に結合している Ru(bpy)₃ 標識抗 HAV 抗体の Ru(bpy)₃ は、電極への荷電による酸化と、トリプロピル

- アミンでの還元反応により励起発光を繰り返すので、所定時間での発光強度を光電子増倍管で測定します。
- ⑤ 同様の操作をしたキャリブレーションの発光強度からカットオフ値を計算し、カットオフインデックスより検体中の抗HAV抗体(IgM型)の陽性又は陰性を判定します。
- 例) 操作概略(コバス 8000 (e801 モジュール) 場合)

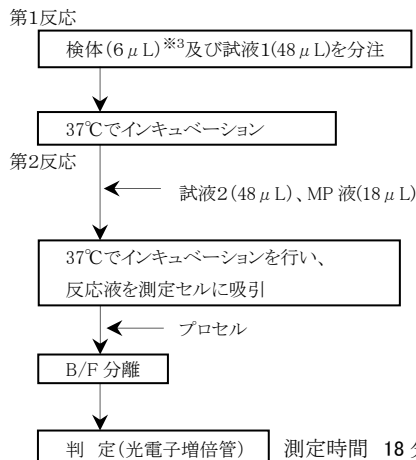

※3 エクルーシス 検体希釈液 (S)(別売)により自動希釈 (400倍)された検体

5. 精度管理

精度管理には、エクルーシス プレチコントロール Anti-HAV IgM(別売)をご使用ください。

精度管理は少なくとも24時間に1回の実施を推奨しています。

コントロールの測定値が許容範囲内にあることを確認してから検体測定を行ってください。

【測定結果の判定法】

1. カットオフインデックス(COI)の算出

キャリブレーション(Cal1及びCal2)から得られた発光強度を用いて、以下の式からカットオフ値を算出します。

$$\text{カットオフ値} = (\text{Cal1の発光強度}) + 0.25 \times (\text{Cal2の発光強度})$$

次に、検体の発光強度とカットオフ値から、以下の式により各検体のカットオフインデックス(COI)を算出します。

$$\text{カットオフインデックス(COI)} = \frac{\text{検体の発光強度}}{\text{カットオフ値}}$$

2. 測定結果の判定法

陰性 : COI < 1.0
陽性 : COI ≥ 1.0

3. 検体の希釈

全ての検体はエクルーシス 検体希釈液 (S)(別売)を用いて自動希釈され、測定されます。追加の検体希釈が必要な場合もエクルーシス検体希釈液 (S)(別売)を用います。

【性能】

1. 性能

【用法・用量(操作方法)】の記載に従い、感度・正確性・同時再現性の各試験を行った場合、下記の規格値に適合します。

(1) 感度試験

- 抗HAV抗体(IgM型)濃度 0~0.5 U/mL の標準液 (Cal1)を試料として操作した場合の発光強度は、100~2,400 Counts です。
- 抗HAV抗体(IgM型)濃度 4.0~6.0 U/mL の標準液 (Cal2)を試料として操作した場合の発光強度は、2,500~30,000 Counts です。

(2) 正確性試験

陰性管理用血清(カットオフインデックス 0.44 以下)及び陽性管理用血清(カットオフインデックス 1.2~2.8)を測定するとき、それぞれ陰性及び陽性を示します。

(3) 同時再現性試験

同一管理用血清(陰性管理用血清カットオフインデックス 0.44 以下及び陽性管理用血清カットオフインデックス 1.2~2.8)をそれぞれ3回同時に測定するとき、陰性管理用血清はすべて陰性、陽性管理用血清はすべて陽性を示します。

2. 相関性試験成績

- (1) 本品と既存製品との相関性を検討したところ、79例の血清検体において100%の一致率と良好な相関性が得られました²⁾。

		本 品	
		陽性	陰性
既存製品	陽性	49	0
	陰性	0	30

- (2) 血清検体と血漿検体との相関性を検討したところ、51例の検体において各凝固剤とも100%の一致率と良好な相関性が得られました²⁾。

		血漿検体	
		陽性	陰性
血清検体	陽性	28	0
	陰性	0	23

3. 較正用の基準物質

自社標準品

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 取扱い上(危険防止)の注意

- 検体及び本品の取扱いには、使い捨て手袋、実験着などの保護衣及び保護用眼鏡を着用するなど、人体に直接触れないように注意してください。また、測定終了後はよく手を洗ってください。
- 試薬が誤って目や口に入った場合には、直ちに水でじゅうぶんに洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当てなどを受けてください。
- 試薬が誤って皮膚及び粘膜に付着した場合には、直ちに大量の水で洗い流してください。
- 試薬(MP液、試液1及び試液2)をこぼした場合には水で希釈してから拭き取ってください。
- 検体又はヒト血液由来成分を含む構成試薬(Cal1及びCal2)をこぼした場合は、次亜塩素酸剤(有効塩素濃度 1,000 ppm、0.1%)などの消毒液を使用してじゅうぶんに拭き取ってください。なお、拭き取る際には、ゴム製の手袋などにより手を保護してください。
- 検体及び本品を取り扱う場所では飲食又は喫煙をしないでください。
- 検体及びヒト血液由来成分を含む構成試薬(Cal1及びCal2)はHIV、HBV、HCVなどのウイルスによる感染の危険性があるものとして取り扱い、検体又は検査に使用した器具類は高圧蒸気滅菌器を用いて121℃で20分以上加熱滅菌処理をするか、次亜塩素酸剤(有効塩素濃度 1,000 ppm、0.1%)に1時間以上浸すなどにより消毒してください。これらの作業中は、じゅうぶんに換気を行ってください。

2. 使用上の注意

- 試薬及び消耗品は専用のものを使用し、その容器・付属品などはほかの目的に転用しないでください。
- 試薬は必ず貯蔵方法に従って保存し、凍結させるなど指定の条件以外で保存したものや使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- ロットの異なる試薬又は残った試薬を混ぜ合わせて使用しないでください。
- 試薬パックは使用する前に、恒温槽(Water bath など)に浸けたりしないでください。
- RFIDをぬらしたり、強く押さないでください。

- (6) 測定の前はすべての試薬と測定試料中の気泡の有無を確認してください。気泡がある場合は除いてください。
- (7) すべての試薬は保存又は反応中に強い光を当てないでください。
- (8) すべての試薬は開封又は分注時に微生物の汚染を避けてください。
- (9) 測定系又は洗浄液の調製には必ず精製水を使用し、水道水は用いないでください。
- (10) 検体は使用前に 20～25℃に戻し、よく混和してください。ただし、激しく振り混ぜたり、泡立てたりしないでください。
- (11) 本品を保存する際は、キャップの裏に試薬を付けないように、垂直の状態でご保存してください。
- (12) 本品を使用する際は、キャップの裏に試薬を付けないように、垂直の状態でご使用してください。
- (13) 添付のボトルラベルは、ロット指定になっています。別ロットには使用しないでください。
- (14) 構成試薬のうちプロセルは、個別に包装されていますので、組み合わせて使用してください。

3. 廃棄上の注意

- (1) 測定により生じた廃液については、検体などと同様に滅菌又は消毒の処理を行ってください。また、これらを廃棄する場合には、各都道府県によって定められた規定に従ってください。
- (2) 使用後の容器を廃棄する場合には、廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物又は産業廃棄物など区別して処理してください。
- (3) 廃棄する際は、水質汚濁防止法等の規制に留意して処理してください。
- (4) 検体及び試薬をこぼした場合は、次亜塩素酸剤(有効塩素濃度 1,000 ppm、0.1%)などの消毒液を使用してじゅうぶんに拭き取ってください。なお、拭き取る際には、ゴム製の手袋などにより手を保護してください。
- (5) プロセル(別売)を原液のまま廃棄する場合は強アルカリ溶液(エクルーシス クリーンセル)と混合しないでください。

4. その他の注意

本品による測定値は既存製品と高い相関性を示しますが、系統的な誤差を生じる場合がありますので、必要に応じて相関性について検討されることをお勧めします。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法

エクルーシス試薬

- (1) **Anti-HAV IgM**
2～8℃で保存してください(凍結は避けてください)。
製品を倒さないでください。
- (2) **プロセル(別売)**
15～25℃で保存してください(凍結は避けてください)。
製品を倒さないでください。

2. 有効期間

エクルーシス試薬

- (1) **Anti-HAV IgM**
12 ヶ月
使用期限(Exp.)は外箱に記載してあります。
- (2) **プロセル(別売)**
24 ヶ月
使用期限(Exp.)は外箱に記載してあります。

**【包装単位】

エクルーシス試薬 Anti-HAV IgM (S300)		300 テスト
MP 液 (M)	1 × 12.4 mL	
試液1 (R1)	1 × 21 mL	
試液2 (R2)	1 × 21 mL	
Cal1	1 × 0.67 mL	
Cal2	1 × 0.67 mL	

<付属品>

ボトルラベル Cal1及び Cal2用

エクルーシス試薬 プロセル G2(別売)※4

プロセル 2 × 2 L 又は 2 × 2 L × 2

※4 e801 モジュールのプロセルは、その他のモジュール(e601 及び e602 モジュール)にはご使用になれません。また、e601 及び e602 モジュールのプロセルは e801 モジュールにはご使用になれません。ご不明な点などがございましたら弊社までお問い合わせください。

【主要文献】

- 1) Blackburn, G.F. et al. Electrochemiluminescence Detection for Development of Immunoassays and DNA Probe Assays for Clinical Diagnostics. Clin.Chem. 1991, 37(9), p.1,534～1,539.
- 2) 自社データ

【問い合わせ先】

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
カスタマーソリューションセンター
〒108-0075 東京都港区港南 1-2-70
フリーダイヤル: 0120-600-152

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
〒108-0075 東京都港区港南 1-2-70
フリーダイヤル: 0120-600-152

COBAS is a trademark of Roche.

コバス及びエクルーシスは Roche の商標です。



ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社