

この添付文書をよく読んでから使用してください。
また、必要時に読めるように保管しておいてください。

体外診断用医薬品

** 2020 年 11月改訂(第4版)

* 2020 年 1月改訂(第3版)

製造販売認証番号:301AAEZ00004000

コバス® システム-L

リン/無機リンキット

コバス® 試薬 PHOS Gen.2

【全般的な注意】

1. 本品は体外診断用であり、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状やほかの検査結果などと併せて、担当医師が総合的に判断してください。
3. 添付文書に記載された使用目的及び用法・用量に従って使用してください。記載された使用目的及び用法・用量以外での使用については、測定結果の信頼性を保証しかねます。
4. 使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読み、記載に従って使用してください。

【形状・構造等(キットの構成)】

コバス試薬 PHOS Gen.2

R1:酸性液

R2:モリブデン酸液

モリブデン酸アンモニウム


(R1:ポジション B、R2: ポジション C)

【使用目的】

血清、血漿又は尿中の無機リン(P)の測定

【測定原理】

本品はモリブデン酸法を原理としています。無機リンは、酸性溶液中でモリブデン酸アンモニウムと反応して、リンモリブデン錯体を生成します。生成したリンモリブデン錯体の濃度は、無機リンの濃度に比例していますので、この吸光度を測定することにより試料中の無機リン濃度を求めます¹⁾。

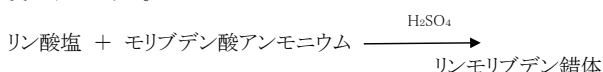

*【操作上の注意】

1. 測定試料の性質・採取法

測定試料:血清、血漿(ヘパリン Li 及び EDTA-2K)

測定試料の安定性:

血清、血漿²⁾: 15~25℃で24時間、

2~8℃で4日間、

-15~-25℃で1年間安定

尿^{3),4)}:

2~8℃で6ヵ月間安定

(採取後に塩酸で酸性にした試料の場合)

24時間尿: 試料は冷やして採取してください。

溶血した試料の使用は避けてください。

採血管の種類によっては、測定結果に影響を及ぼす場合があります。採血管をそのまま機器にセットして測定する場合は、採血管の製造元の指示に従ってください。

沈殿物のある検体は、使用前に遠心操作を行ってください。

検体中に気泡が存在する場合は取り除いてください。

凍結保存した検体の凍結融解の繰り返しは避け、融解後の検体はよく混和してから測定に使用してください。

2. 妨害物質・妨害薬剤

血清及び血漿

- (1) ヘモグロビン濃度 300 mg/dL、抱合型ビリルビン濃度 40 mg/dL、非抱合型ビリルビン濃度 60 mg/dL、及び乳ビ(イントラピッド)L インデックス 800 まで測定に与える影響は±10%以内です。(無機リン濃度が 2.7 mg/dL の試料による検討時)
- (2) 一般的な薬剤の治療濃度域^{5), 6)}では測定に与える影響はありません。
- (3) リポソーム製剤に含まれるリン脂質は、酸性条件下で加水分解されるため、測定結果に正の誤差を与える場合があります⁷⁾。
- (4) 非常に稀なケースとして免疫グロブリン異常症、特に IgM 型(ワルデンシュトレーママクログロブリン血症)の場合、信頼性に欠ける結果となる場合があります⁸⁾。

尿

- (1) 尿素濃度 9,009 mg/dL まで測定に与える影響は±10%以内です。(無機リン濃度が 40.3 mg/dL の試料による検討時)
- (2) 一般的な薬剤の治療濃度域⁶⁾では測定に与える影響はありません。

3. その他

本試薬はコバス 8000(生化学処理用 c 702 モジュール)専用です。

【用法・用量(操作方法)】

1. 試薬の調製方法

すべての試薬はそのままご使用ください。

標準液: 自動分析用キャリブレーター II (C.f.a.s. II)(別売)を使用してください。

尿検体は生理食塩液で希釈し、試料とします。

2. 試薬の安定性

未開封時: 2~8℃で使用期限まで安定

3. 別途必要な器具・器材・試薬

・コバス 8000(生化学処理用 c 702 モジュール)

・自動分析用キャリブレーター II (C.f.a.s. II)

・プレチコントロール CC1

・プレチコントロール CC2

・コバス システム-L NACL

使用方法は、各製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。

4. 操作方法

詳細な操作方は別途パラメーターを用意してありますので、弊社までお問い合わせください。

(コバス 8000(c 702)の例)

- (1) 精製水(試薬ブランク用)、標準液、又は試料 2.5 µL を量りとり、酸性液 90 µL と精製水 28 µL を量りとり、37℃でインキュベーションします。
- (2) モリブデン酸液 38 µL を加え、37℃でインキュベーションします。
- (3) モリブデン酸液添加直前から添加約 5 分後までの吸光度変化量を主波長 340 nm、副波長 700 nm で測定します。
- (4) 試薬ブランク、標準液の吸光度変化量から検量線を作成し、試料の吸光度変化量から無機リン濃度を求めます。

5. 精度管理

精度管理には、プレチコントロール CC1、プレチコントロール CC2(別売)をご使用ください。

【測定結果の判定法】

1. 測定結果の判定及び参考基準範囲

参考基準範囲:

血清及び血漿

成人 ⁹⁾	2.7~4.6mg/dL	
未成年 ¹⁰⁾	男性	女性
1~30 日	3.9~6.9 mg/dL	4.3~7.7 mg/dL
1~12 ヶ月	3.5~6.6 mg/dL	3.7~6.5 mg/dL
1~3 歳	3.1~6.0 mg/dL	3.4~6.0 mg/dL
4~6 歳	3.3~5.6 mg/dL	3.2~5.5 mg/dL
7~9 歳	3.0~5.4 mg/dL	3.1~5.5 mg/dL
10~12 歳	3.2~5.7 mg/dL	3.3~5.3 mg/dL
13~15 歳	2.9~5.1 mg/dL	2.8~4.8 mg/dL
16~18 歳	2.7~4.9 mg/dL	2.5~4.8 mg/dL

尿

早朝尿 ¹¹⁾	40~136 mg/dL
24 時間尿 ³⁾	0.4~1.3 g/日

基準範囲は、測定試料、測定条件、測定個体などにより異なる場合がありますので、各施設で臨床医と相談の上、設定してください。

2. 結果の判定にかかる注意

測定範囲上限を超える高値を示した検体又は、あらかじめ高値が予測される検体については、生理食塩液などを用いて検体を適宜希釈して測定してください。

【性能】

1. 性能

【用法・用量(操作方法)】に記載に従い、感度・正確性・同時再現性の各試験を行った場合、下記の規格値に適合します。

(1) 感度試験

- ① 精製水を試料として操作した場合の吸光度変化量(光路長 10 mm)は 0.1~0.3 の範囲内です。
- ② 無機リン濃度 1~2 mmol/L の標準液を試料として操作した場合の吸光度変化量(光路長 10 mm)は 0.35~0.70 の範囲内です。

(2) 正確性試験

既知濃度の管理用試料を測定するとき、既知濃度の±18%以内です。



(3) 同時再現性試験

同一管理用試料を3回同時に測定するとき、測定値の CV 値は6%以下です。

(4) 測定範囲

血清及び血漿: 0.31~20.0 mg/dL

尿: 3.4~285 mg/dL

測定範囲は、検出下限~測定レンジ上限となります。測定感度は、0濃度の試料として精製水を用いて多重測定した結果から求めています。(mean + 3SD, n = 21)

2. 相関性試験成績

- (1) 本品と既存製品との相関性を検討したところ、75 例の血清検体において良好な相関性が得られました。

相関係数 $r=1.000$

回帰式 $y=0.961x + 0.045$

y: 本品 x: 既存製品

- (2) 本品と既存製品との相関性を検討したところ、75 例の血清検体において良好な相関性が得られました。

相関係数 $r=1.000$

回帰式 $y=0.992x - 0.062$

y: 本品 x: 既存製品

- (3) 本品と既存製品との相関性を検討したところ、80 例の尿検体において良好な相関性が得られました。

相関係数 $r=1.000$

回帰式 $y=1.037x - 0.315$

y: 本品 x: 既存製品

- (4) 血清検体と EDTA-2K 血漿検体の相関性を検討したところ、35 例の検体において良好な相関性が得られました。

相関係数 $r=0.981$

回帰式 $y=1.006x - 0.057$

y: EDTA-2K 血漿 x: 血清

- (5) 血清検体とヘパリン血漿検体の相関性を検討したところ、35 例の検体において良好な相関性が得られました。

相関係数 $r=0.976$

回帰式 $y=1.006x - 0.059$

y: ヘパリン血漿 x: 血清

**【使用上又は取扱上の注意】

1. 取扱い上(危険防止)の注意

- 検体及び本品の取扱いには、使い捨て手袋、実験着などの保護衣及び保護用眼鏡を着用するなど、人体に直接触れないように注意してください。また、測定終了後はよく手を洗ってください。
- 試薬が誤って目や口に入った場合には、直ちに水でじゅうぶんに洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当てを受けてください。
- 試薬が誤って皮膚及び粘膜に付着した場合には、直ちに大量の水で洗い流してください。
- 試薬をこぼした場合には水で希釈してから拭き取ってください。
- 検体をこぼした場合は、次亜塩素酸剤(有効塩素濃度 1,000 ppm、0.1%)などの消毒液を使用してじゅうぶんに拭き取ってください。なお、拭き取る際には、ゴム製の手袋などにより手を保護してください。
- 検体及び本品を取り扱う場所では飲食又は喫煙をしないでください。
- 検体は HIV、HBV、HCV などのウイルスによる感染の危険性があるものとして取り扱い、検体又は検査に使用した器具類は高圧蒸気滅菌器を用いて 121℃で 20 分以上加熱滅菌処理をするか、次亜塩素酸剤(有効塩素濃度 1,000 ppm、0.1%)に1時間以上浸すなどにより消毒してください。これらの作業中は、じゅうぶんに換気を行ってください。
- 本試薬には腐食性を有する硫酸が含まれています。誤って目や皮膚に付着した場合には、直ちに水で洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当てを受けてください。また、装置などに付着した場合は不織布などで拭き取ってください。皮膚などを傷める原因となりますので、作業時には、適切な衣服、手袋、目や顔を保護するものを身につけてください。

2. 使用上の注意

- 試薬及び消耗品は専用のものを使用し、その容器・付属品などはほかの目的に転用しないでください。
- 試薬は必ず貯蔵方法に従って保存し、凍結させるなど指定の条件以外で保存したものや使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- ロットの異なる試薬又は残った試薬を混ぜ合わせて使用しないでください。
- 試薬カセット内の試薬ボトルの組合せを変えないでください。
- RFID をぬらしたり、強く押さないでください。
- すべての試薬は保存又は反応中に強い光を当てないでください。
- すべての試薬は開封又は分注時に微生物の汚染を避けてく

ださい。

- 測定系の調製には必ず精製水を使用し、水道水は用いないでください。
- 検体は使用前に 15~25℃に戻し、よく混和してください。ただし、激しく振り混ぜたり、泡立てたりしないでください。
- 本品を保存する際は、垂直の状態でご保存してください。
- 本品の試薬カセットは再使用できません。

3. 廃棄上の注意

- 測定により生じた廃液については、検体などと同様に滅菌又は消毒の処理を行ってください。また、これらを廃棄する場合には、各都道府県によって定められた規定に従ってください。
- 使用後の容器を廃棄する場合には、廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物又は産業廃棄物など区別して処理してください。
- 廃棄する際は、水質汚濁防止法等の規制に留意して処理してください。
- 検体及び試薬をこぼした場合は、次亜塩素酸剤(有効塩素濃度 1,000 ppm、0.1%)などの消毒液を使用してじゅうぶんに拭き取ってください。なお、拭き取る際には、ゴム製の手袋などにより手を保護してください。

4. その他の注意

本品による測定値は既存製品と高い相関性を示しますが、系統的誤差を生じる場合がありますので、必要に応じて相関性について検討されることをお勧めします。

**【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法

2~8℃で保存してください。

2. 有効期間

18 カ月

使用期限(Exp.)は外箱に記載してあります。

【包装単位】

コバス システム-L コバス試薬 PHOS Gen.2

600 テスト

R1: 酸性液 30.0 mL

R2: モリブデン酸液 6.0 mL

【主要文献】

- Henry, R. ed. Clinical Chemistry: Principles and Technics, 2nd ed. New York, NY: Harper & Row. 1974, p.723.
- Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations. WHO Publication WHO/DIL/LAB/99.1. Rev. 2. Jan. 2002.
- Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. Philadelphia. WB Saunders Co. 2006, p.852~855.
- NCCLS GP-16A2, Urineanalysis and Collection, Transportation and Preservation of Urine specimens, 2nd edition 2001.
- Breuer J. Report on the Symposium "Drug effects in Clinical Chemistry Methods". Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996, 34, p.385~386.
- Sonntag, O. et al. Drug interference in clinical chemistry. recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem 2001, 38, p.376~385.
- Lane, JW. et al. Pseudohyperphosphatemia associated with high-dose liposomal amphotericin B therapy. Clin Chim Acta 2008, 387, p.145~149.
- Bakker, AJ. et al. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: mechanisms, detection and prevention. Clin Chem Lab Med 2007, 45(9), p.1,240~1,243.
- 日本臨床検査標準協議会 共用基準範囲
- Soldin, S.J. et al. Pediatric reference intervals. Washington, AACC Press. 2005, 5, p.153.
- Krieg, M. et al. Vergleichende quantitative Analytik klinischchemischer Kenngrößen im 24-Stunden-Urin und Morgenurin. J Clin Chem Clin Biochem. 1986, 24, p.863~869.

【問い合わせ先】

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

カスタマーソリューションセンター

〒108-0075 東京都港区港南 1-2-70

フリーダイヤル: 0120-600-152

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】


ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 1-2-70

フリーダイヤル: 0120-600-152

COBAS is a trademark of Roche.

コバスは Roche の商標です。

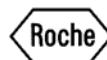

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

