

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください。

体外診断用医薬品 2025年 4月作成(第1版)
製造販売承認番号:30400EZ00032000

SARS コロナウイルス抗原キット
インフルエンザウイルスキット

ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B テストストリップ

【重要な基本的注意】

1. 本品の判定が陰性であっても、SARS-CoV-2 感染、A 型インフルエンザウイルス及び B 型インフルエンザウイルス感染を否定するものではありません。
2. 検査に用いる検体については、厚生労働省より発表されている「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 病原体検査の指針」を参照してください。
3. 診断は厚生労働省より発表されている医療機関-検査機関向けの最新情報を参照し、本製品による検査結果のみで行わず、臨床症状を含めて総合的に判断してください。
4. 鼻腔ぬぐい液を検体とした場合、適切な検体採取が行われないと正しい結果が得られない可能性があるため、【用法・用量 (操作方法)】をよく読み、1 本のスワブで必ず両鼻腔から採取してください。
5. 検体採取及び取扱いについては、必要なバイオハザード対策を講じてください。

【全般的な注意】

1. 本品は体外診断用であり、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 電子化された添付文書に記載された以外の使用方法については保証をいたしません。
3. 使用する機器の電子化された添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。
4. 本品は、SARS-CoV に対する反応性を否定できないため、感染の流行状況等も踏まえ、判定結果を解釈してください。
5. 検体抽出液にはアジ化ナトリウム等が含まれていますので、誤って目や口に入ったり皮膚に付着した場合には水でじゅうぶんに洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。

【形状・構造等(キットの構成)】

ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B テストストリップ

1. テストストリップ
 - ・抗 SARS-CoV-2 モノクローナル抗体(マウス)蛍光ラテックス
 - ・抗 SARS-CoV-2 モノクローナル抗体(ウサギ)固相化磁性粒子
 - ・抗 A 型インフルエンザウイルスモノクローナル抗体(マウス)蛍光ラテックス
 - ・抗 A 型インフルエンザウイルスモノクローナル抗体(マウス)固相化磁性粒子
 - ・抗 B 型インフルエンザウイルスモノクローナル抗体(マウス)蛍光ラテックス
 - ・抗 B 型インフルエンザウイルスモノクローナル抗体(マウス)固相化磁性粒子
2. 検体抽出液(Extraction Buffer)
 - ・緩衝剤、アジ化ナトリウム

< 付属品 >

 - ・ノズル (Caps Extraction Buffer)

【使用目的】

鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV-2 抗原、A 型インフルエンザウイルス抗原及び B 型インフルエンザウイルス抗原の検出 (SARS-CoV-2 感染又はインフルエンザウイルス感染の診断の補助)

【測定原理】

本品は、マイクロ流体免疫蛍光法の原理に基づいた SARS-CoV-2 抗原、A 型インフルエンザウイルス抗原及び B 型インフルエンザウイルス抗原を定性的に検出する試薬です。

検体をテストストリップに滴下すると、検体中の SARS-CoV-2 抗原、A 型インフルエンザウイルス抗原又は B 型インフルエンザウイルス抗原はテストストリップ中の抗 SARS-CoV-2 抗体(マウス)蛍光ラテックス、抗 A 型インフルエンザウイルス抗体(マウス)蛍光ラテックス又は抗 B 型インフルエンザウイルス抗体(マウス)蛍光ラテックスと免疫複合体を形成します。免疫複合体はテストストリップ中を進行し、抗 SARS-CoV-2 抗体(ウサギ)固相化磁性粒子、抗 A 型インフルエンザウイルス抗体(マウス)固相化磁性粒子又は抗 B 型インフルエンザウイルス抗体(マウス)固相化磁性粒子に捕捉され、抗体蛍光ラテックス-抗原-抗体固相化磁性粒子の結合物を形成します。

機器は磁性粒子を捕捉し、この結合物の蛍光シグナルを検出し、予め求められた試薬ロット固有のカットオフ値に基づき、陽性又は陰性と判定された結果を機器のタッチスクリーンに表示します。

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質・採取法

【用法・用量 (操作方法)】に従い、検体採取を行ってください。いずれの検体種も各施設の一般的な採取法の注意事項とガイドラインに従ってください。

2. 妨害物質・妨害薬剤

以下の物質はそれぞれ記載された濃度まで測定結果に影響がありませんでした。

全血 (5%)、ムチン (500 mg/dL)、トブラマイシン (0.4 mg/dL)、ムピロシム (0.15 mg/dL)、フルチカゾン (0.126 µg/dL)、タミフル (500 mg/dL)、ブデソニド (0.63 µg/dL)、ビオチン (0.35 mg/dL)、アセチルサリチル酸 (2.04 mg/dL)、ジフェンヒドラミン (77.4 µg/dL)、デキストロメトर्फアン (1.56 µg/dL)、デキサメタゾン (1.2 mg/dL)、ベクロメタゾン (16 µg/dL)、フルニソリド (68.75 µg/mL)、モメタゾン (2.5 µg/mL)、トリアムシノロン (5.5 µg/mL)、ザナミビル (1 mg/mL)、塩酸ヒスタミン (1%)

3. その他

本品の測定にはルミラ 測定機器をご使用ください。

【用法・用量 (操作方法)】

1. 試薬の調製方法

- (1) テストストリップ
そのままご使用ください。
- (2) 検体抽出液
そのままご使用ください。

注意)

- ・テストストリップは使用前にアルミパウチを開封し、速やかにご使用ください。
- ・アルミパウチに裂目や穴などの明らかな損傷の兆候がある場合は、テストストリップを使用しないでください。
- ・損傷があったり、開封後に落としたテストストリップやその他の構成部品は廃棄し、使用しないでください。
- ・検体抽出液は使用前に室温に戻してください。

2. 別途必要な器具・器材

- ・ルミラ 測定機器
- ・鼻咽頭ぬぐい液用スワブ又は鼻腔ぬぐい液用スワブ
- ・ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B コントロール

認定スワブの情報については、当社のウェブサイトをご参照ください。認定スワブ以外を使用した場合、性能が異なる場合があります。使用法は各製品の電子化された添付文書及び取扱説明書をご参照ください。本品でのウイルス輸送培地の使用は検証されていません。

3. 検体の採取方法


(1) 検体採取の準備

検体の採取については、一般的な採取の注意事項と各施設のガイドラインに従ってください。

(2) 検体採取方法


鼻咽頭ぬぐい液

- 1) 患者の頭を70度後ろに傾けます。
- 2) スワブをしっかり持ち、鼻腔に挿入します。
スワブは、鼻腔から耳孔までの距離と同じ深さまで挿入します。スワブを数秒間そのままの位置で保ち分泌物を浸透させます。
- 3) スワブを回転させながらゆっくりと取り出します。スワブを検体抽出液の容器に入れます。4. 試料の調製をご参照ください。

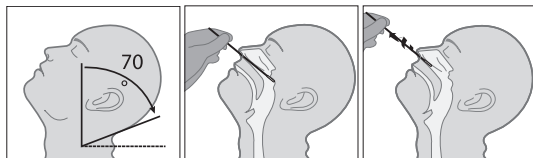

鼻腔ぬぐい液

- 1) 患者の頭を70度後ろに傾けます。
- 2) 同じスワブで両方の鼻孔から検体を採取します。スワブを静かに回転させながら、2.5 cm 未満、鼻甲介で抵抗を感じるまで挿入します。(鼻甲介は鼻の内側の小さな突起です。)
- 3) 鼻壁に対してスワブを少なくとも4~5回、10~15秒回転させます。スワブを取り出し、同じスワブでもう片方の鼻孔からも同様に採取します。
スワブを検体抽出液の容器に入れます。4. 試料の調製をご参照ください。

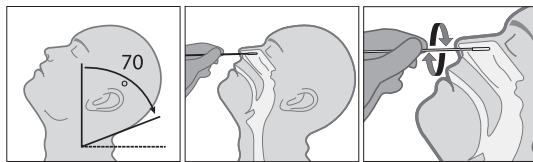

検体採取後、すみやかに抽出を行ってください。検体採取後のスワブは、スワブが入っていた袋には戻さないでください。

4. 試料の調製

- (1) 検体抽出液の容器のアルミシールを剥がすか、青のスクリュキャップを外します。
- (2) 検体採取後のスワブを検体抽出液に10秒浸し、容器の壁に押し付けながらスワブを5回転させ攪拌します。
- (3) 容器の外側の中央から綿球を挟みこみながら、試料を絞り出すようにスワブを引き抜きます。スワブは医療廃棄物として廃棄します。
- (4) 検体抽出液の容器の上端に付属の透明又は紫のノズルを被せてしっかりと閉めます。抽出した試料は室温で保管する場合は、5時間以内に使用してください。-80℃で凍結する場合は、5日間まで保管できます。
- (5) テストストリップに滴下する直前に検体抽出液の容器を5回やさしく転倒混和します。



5. 操作方法

(1) 測定の準備

- 1) 機器を初めて使用する場合は、試験を開始する前に、ルミラ 測定機器の取扱説明書、及び本製品の電子化された添付文書全体をお読みください。

- 2) 測定は、温度15~30℃、湿度10~75%の環境下で行ってください。
- 3) 機器の背面にある電源ボタンを押して、機器の電源を入れます。装置の電源がオンになり、ディスプレイが起動する前に数秒間、空白の黒い画面になります。
- 4) 画面が淡色表示されている場合は、タッチスクリーンをタップして機器を起動します。
- 5) 新しいロットのテストストリップを使用する際は、機器の指示に従い、ロット校正ファイルをインストールします。インストールされると、機器は測定に必要な情報を得ます。同じロットのテストストリップを使用する場合は、インストールする必要はありません。



RFID リーダー

機器のRFIDマークの位置です。

インストール

テストストリップの外箱の背面のRFIDマークをタッチします。
インストールされると、確認音が鳴り、メッセージが表示されます。

- 6) タッチスクリーン上で指示が表示されたら、使用直前にアルミパウチを開封し、青い部分を持ち、ラベルの上を向けてテストストリップを機器に挿入します。検体滴下エリア及びテストストリップ端子に触れないでください。
 - 7) 検体を滴下する準備ができると、機器に表示されます。
- (2) 検体測定

試料を凍結した場合は、測定前に室温に戻してください。

- 1) テストストリップに滴下する直前に検体抽出液の容器を5回やさしく転倒混和します。
- 2) 検体抽出液の容器から検体をテストストリップの検体滴下エリアに滴下します。完全な1滴(20~36 µL)ができるまで容器をやさしく押して、検体滴下エリアに触れさせます。
毛細管現象によって検体がテストストリップに吸い込まれます。
検体が検出されると、機器の確認音が鳴り(サウンドが有効になっている場合)、確認メッセージが表示されます。次に、機器のタッチスクリーンに、カバーを閉じるよう表示されます。(注:10秒以内にカバーを閉めてください。)
- 3) 検体を1滴を超えて滴下しないでください。測定の進行中は、カバーを開けないでください。タッチスクリーンに測定の進行状況が表示されます。
- 4) 検体を滴下し測定を開始してから12分以内に、結果がタッチスクリーンに表示されます。SARS-CoV-2 抗原(SARS-CoV-2 Ag)、A型インフルエンザウイルス抗原(Flu A)及びB型インフルエンザウイルス抗原(Flu B)のそれぞれの結果が、陽性の場合は"Positive+"、陰性の場合は"Negative-"と表示されます。
- 5) 使用後のスワブ、テストストリップ、検体抽出液の容器は、医療廃棄物として、適切に廃棄してください。

【測定結果の判定法】

1. 測定結果の判定

測定結果はタッチスクリーンに表示されます。（下記は表示例です）



2. 判定上の注意

- (1) 測定結果は、患者の臨床症状、既往歴、及びその他の検査結果と併せて、担当医師が総合的に判断する必要があります。
- (2) 本品は不活化した検体も検出します。
- (3) 陽性の測定結果は他の病原体との共感染を除外しません。
- (4) 陰性の測定結果は他の SARS 以外のウイルス又は細菌感染を否定するものではありません。
- (5) 検体中のウイルス抗原のレベルが検出限界を下回っている場合、又は検体が不適切に採取された場合は、偽陰性となる可能性があります。
- (6) 操作手順に従わない場合、測定に悪影響を及ぼしたり、測定結果が無効となる可能性があります。
- (7) 無効の結果
 - ・問題が起こると機器のタッチスクリーンにメッセージが表示されます。警告メッセージには有用な情報が含まれ、オレンジ色のバナーで強調表示されます。
 - ・エラーメッセージには△のマークが表示されます。すべてのメッセージには機器の状態又はエラーの説明と指示が含まれます。また、トラブルシューティングを行うために使用するエラー識別コードが含まれています。
 - ・機器のタッチスクリーンにエラーメッセージが表示される場合は、ルミラ 測定機器の取扱説明書をご参照ください。また、カスタマーソリューションセンターまでご連絡ください。
- (8) 経鼻弱毒生インフルエンザワクチン接種後一定期間は、ワクチン由来のインフルエンザウイルスにより本キットで陽性の結果が出る可能性があります。

【臨床的意義】

本品は、マイクロ流体免疫蛍光法の原理に基づいた SARS-CoV-2 抗原、A 型インフルエンザウイルス抗原及び B 型インフルエンザウイルス抗原を定性的に検出する試薬です。ポータブル型分析装置を用いて、簡便な検体処理により、12 分で SARS-CoV-2 抗原、A 型インフルエンザウイルス及び B 型インフルエンザウイルスの検出が可能です。

1. SARS-CoV-2 鼻腔ぬぐい液の臨床性能試験成績

鼻腔ぬぐい液 124 例を用いて、既承認 RT-PCR 法と比較したところ、以下の結果が得られました。

		RT-PCR 法	RT-PCR 法	RT-PCR 法
		陽性	陰性	計
本品 SARS-CoV-2	陽性	42	3	45
	陰性	2	77	79
	計	44	80	124

陽性一致率:95.5% (42/44)

陰性一致率:96.3% (77/80)

全体一致率:96.0% (119/124)

2. SARS-CoV-2 鼻咽頭ぬぐい液の臨床性能試験成績

鼻咽頭ぬぐい液 131 例を用いて、既承認イムノクロマト法と比較したところ、以下の結果が得られました。

		対照品 SARS-CoV-2		
		陽性	陰性	計
本品 SARS-CoV-2	陽性	53	1	54
	陰性	0	77	77
	計	53	78	131

陽性一致率:100% (53/53)

陰性一致率:98.7% (77/78)

全体一致率:99.2% (130/131)

3. インフルエンザ鼻咽頭ぬぐい液の臨床性能試験成績

鼻咽頭ぬぐい液 131 例を用いて、既承認イムノクロマト法と比較したところ、以下の結果が得られました。

		対照品 インフルエンザ			
		A 型陽性	B 型陽性	陰性	計
本品 インフルエンザ	A 型陽性	31	0	0	31
	B 型陽性	0	10	0	10
	陰性	0	1	89	90
	計	31	11	89	131

A 型陽性一致率:100% (31/31)

B 型陽性一致率:90.9% (10/11)

陰性一致率:100% (89/89)

全体一致率:99.2% (130/131)

4. A 型インフルエンザ

鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液への培養ウイルス添加試験成績

陰性鼻咽頭ぬぐい液を採取し抽出した後、LOD 付近の 2 濃度の Influenza A/ST1349 (H3N2) を添加し、本品及び RT-PCR 法¹⁾で測定しました。

培養ウイルス	未添加	添加 (1×LOD)	添加 (2×LOD)
濃度 (TCID ₅₀ /mL)	0	3.2	6.4
検体数	20	20	20
RT-PCR 法陽性数	0	20	20
本品陽性数	0	20	20
本品陽性率 (%)	0	100	100

陰性鼻腔ぬぐい液を採取し抽出した後、LOD 付近の 2 濃度の Influenza A/ST1349 (H3N2) を添加し、本品及び RT-PCR 法¹⁾で測定しました。

培養ウイルス	未添加	添加 (1×LOD)	添加 (2×LOD)
濃度 (TCID ₅₀ /mL)	0	3.2	6.4
検体数	20	20	20
RT-PCR 法陽性数	0	20	20
本品陽性数	0	20	20
本品陽性率 (%)	0	100	100

5. B 型インフルエンザ

鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液への培養ウイルス添加試験成績

陰性鼻咽頭ぬぐい液を採取し抽出した後、LOD 付近の 2 濃度の Influenza B/ST1633 (Yamagata) を添加し、本品及び RT-PCR 法¹⁾で測定しました。

培養ウイルス	未添加	添加 (1×LOD)	添加 (2×LOD)
濃度 (TCID ₅₀ /mL)	0	4,000	8,000
検体数	20	20	20
RT-PCR 法陽性数	0	20	20
本品陽性数	0	20	20
本品陽性率 (%)	0	100	100

陰性鼻腔ぬぐい液を採取し抽出した後、LOD 付近の 2 濃度の Influenza B/ST1633 (Yamagata) を添加し、本品及び RT-PCR 法¹⁾で測定しました。

培養ウイルス	未添加	添加 (1×LOD)	添加 (2×LOD)
濃度 (TCID ₅₀ /mL)	0	4,000	8,000
検体数	20	20	20
RT-PCR 法陽性数	0	20	20
本品陽性数	0	20	20
本品陽性率 (%)	0	100	100

【性能】

1. 性能

(1) 感度試験

SARS-CoV-2 抗原陽性、A 型インフルエンザウイルス抗原陽性、及び B 型インフルエンザウイルス抗原陽性の自家管理検体を所定の操作で試験するとき、それぞれ陽性反応を示します。

(2) 正確性試験

- 1) SARS-CoV-2 抗原陽性、A 型インフルエンザウイルス抗原陽性、及び B 型インフルエンザウイルス抗原陽性の自家管理検体を所定の操作で試験するとき、それぞれ陽性反応を示します。
- 2) 陰性自家管理検体を所定の操作で試験するとき、それぞれ陰性反応を示します。

(3) 同時再現性試験

- 1) SARS-CoV-2 抗原陽性、A 型インフルエンザウイルス抗原陽性、及び B 型インフルエンザウイルス抗原陽性の自家管理検体を所定の操作で 3 回繰り返し試験するとき、それぞれ同一の反応性を示します。
- 2) 陰性自家管理検体を所定の操作で 3 回繰り返し試験するとき、それぞれ同一の反応性を示します。

(4) 最小検出感度 (例示)

- 1) SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 USA-WA1/2020:80 TCID₅₀/mL
- 2) A 型インフルエンザ
Flu A H1N1/California/07/2009:200 TCID₅₀/mL
Flu A H3N2 Hong Kong/6/68:100 TCID₅₀/mL
- 3) B 型インフルエンザ
Flu B Brisbane 60/08:100 TCID₅₀/mL
Flu B Wisconsin/1/10:40 TCID₅₀/mL

(5) 交叉反応性

50 種類の微生物又は鼻腔洗浄液について下表の濃度まで検討したところ、意図しない交叉反応性は認められませんでした。

微生物	濃度
Human coronavirus 229E	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Human coronavirus OC43	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Human coronavirus NL63	1 x 10 ⁵ PFU/mL
MERS-CoV	4095 PFU/mL
Adenovirus Type 1	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Adenovirus Type 7	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Human Metapneumovirus	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Parainfluenza virus Type 1	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Parainfluenza virus Type 2	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Parainfluenza virus Type 3	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Parainfluenza virus Type 4a	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Influenza A H1N1 (Denver/1/57)	1.5 x 10 ⁷ TCID ₅₀ /mL
Influenza A H3N2 (Hong Kong/8/68)	6.33 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL
Influenza B (Victoria/2/87)	1 x 10 ^{4.93} TCID ₅₀ /mL
SARS-CoV-2 (WA1/2020)	7.55 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL

Enterovirus	1.58 x 10 ⁵ PFU/mL
Respiratory syncytial virus Type A	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Respiratory syncytial virus Type B	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Rhinovirus Type 1A	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Rhinovirus Type 2	8.89 x 10 ⁵ PFU/mL
<i>Hemophilus influenzae</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Hemophilus parainfluenzae</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Streptococcus pyogenes</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Candida Albicans</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Bordetella pertussis</i>	1 x 10 ⁸ CFU/mL
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Legionella pneumophila</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
Cytomegalovirus	1 x 10 ⁵ PFU/mL
Epstein Barr Virus	1.4 x 10 ⁵ CP/mL
<i>Escherichia Coli</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
Herpes Simplex Virus	1 x 10 ⁵ PFU/mL
<i>Kingella Kingae</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Klebsiella oxytoca</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Lactobacillus sp.</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Measles</i>	1 x 10 ⁵ PFU/mL
<i>Mumps</i>	1 x 10 ⁵ PFU/mL
<i>Moraxella catarrhalis</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Neisseri elongata</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Nocardia asteroides</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Serratia marcescens</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Staphylococcus aureus</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Staphylococcus epidermis</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
Varicella-Zoster Virus	1 x 10 ⁵ PFU/mL
<i>Lactobacillus casei</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Corynebacterium bovis</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	1 x 10 ⁶ CFU/mL
Pooled human nasal wash	14% v/v

2. 校正用の基準物質

自家標準品 (株) により検定

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 取扱い上 (危険防止) の注意

- (1) 検体、使用したテストストリップや検体抽出液の容器等は、感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
- (2) 試験にあたっては感染の危険を避けるため、使い捨て手袋、目の保護具などを使用し、施設で定める方針と手順に従ってください。
- (3) 非常に微量の試薬がテストストリップ内に封入されています。動物由来の成分の原料には感染性又は伝染性物質がないことが確認されています。ただし、試薬が暴露された場合は、感染の可能性があるものとして処理する必要があります。
- (4) 各患者検体の使用後又は汚染が疑われた場合及び少なくとも 1 日 1 回は、機器の消毒を行うことをお勧めします。消毒用品については、当社のウェブサイトをご参照ください。ワイプを使用し、機器の表面が湿るようにし、消毒剤を少なくとも 1 分間、付けたままにしておいてください。USB ポート及び電源接続部分は避け、機器に直接、溶液をスプレーしたり、かけたりしないでください。テストストリップスロットの中に物や清掃用品を入れないでください。

2. 使用上の注意

- (1) 本品は必ず 2～30℃で保管し、30℃を超える可能性のある場所では保管しないでください。適切に保管した場合、テストストリップは、テストストリップのアルミパウチと外箱に印字された使用期限まで使用できます。使用期限を過ぎた場合は、テストストリップを廃棄してください。
- (2) 使用期限を過ぎた構成部品は使用しないでください。また、再使用しないでください。
- (3) 取り込みコントロール

機器は各テストストリップの 2 次元バーコードを読み取り、使用期限を過ぎていないか、ロット校正ファイルがインストールされているかを確認します。

機器及び本品には、各試験の実施の妥当性を保証するためにいくつかの品質管理機能があります。これらのチェックにより、サンプルの滴下量が十分であること、測定が正しく行われていることを確認します。また、テストストリップに損傷がないこと、使用済でないことを確認します。

これらのチェックをクリアしない場合、試験が無効となり、エラーメッセージが機器のタッチスクリーンに表示されます。

ルミラ 測定機器は以下の機能によって、測定結果の品質を保証します。

- ・電源をオンにした際及び操作中に機器が正常に機能していることを自動的にチェックします。
 - ・これには電気的な操作、ヒーターの操作、バッテリーの充電状態、機械的なアクチュエーター及びセンサー、光学システムの性能が含まれます。
 - ・測定中のテストストリップの性能と制御をモニターします。
- (4) 再試験が必要な場合は、抽出した試料で、新しいテストストリップを使用し、再試験を行ってください。

3. 廃棄上の注意

- (1) 使用後のテストストリップ、スワブ等は、医療廃棄物として、国や地域と各施設の基準に従って、適切に廃棄してください。
- (2) 検体等が付着した使用済み器具等は、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度 1,000ppm、1 時間以上で処理)、グルタルアルデヒド(2%、1 時間以上で処理)等による消毒処理あるいは、オートクレーブ処理(121℃、20 分間以上)による滅菌処理を行ってください。
- (3) 検体抽出液には保存剤として 0.1%以下のアジ化ナトリウムが含まれています。アジ化ナトリウムは鉛管、銅管と反応して爆発性のある金属アジドを生成することがあるため、廃棄の際には多量の水で洗い流してください。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法

2～30℃で保存してください。

2. 有効期間

9 ヶ月

使用期限(Exp.)は外箱に記載してあります。

【包装単位】

ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B テストストリップ 24 テスト

1. テストストリップ 24 枚
 2. 検体抽出液(Extraction Buffer) 24 本
- <付属品>
- ・ ノズル(Caps Extraction Buffer) 24 本

【主要文献】

- 1) A. Tsuneki-Togunaga: Growth Capability of epidem influenza viruses in Japan since the 2009 H1N1 Pandemic, Archives of Virology 166, 1193-1196(2021)

【問い合わせ先】

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
カスタマーソリューションセンター
〒108-0075 東京都港区港南 1-2-70
フリーダイヤル:0120-642-860

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
〒108-0075 東京都港区港南 1-2-70
フリーダイヤル:0120-642-860

全ての製品名及び商標は、各所有者に帰属します。

