

届出番号 13E1X80073000020
TBA-87B2

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください。

フェリチンキット

イアトロ フェリチン

●全般的な注意

1. 本品は体外診断用医薬品です。それ以外の目的には使用できません。
2. 診断・治療効果の判定は、本法を含めて関連する他の検査や臨床症状に基づき医師が総合的に判断してください。
3. 添付文書以外の使用方法については保証をいたしません。
4. 使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。

●形状・構造等（キットの構成）

1. フェリチン R-1
2. フェリチン R-2
抗ヒトフェリチンウサギポリクローナル抗体感作ラテックス

●使用目的

血清又は血漿中のフェリチンの測定

●測定原理

検体中のフェリチンは、抗ヒトフェリチンウサギポリクローナル抗体感作ラテックスと特異的な抗原抗体反応を起こし、凝集塊を形成します。この凝集塊を光学的に測定し、検体中のフェリチン濃度を求めます。

●操作上の注意

1. 測定試料の性質、採取法
 - 1) 検体には血清、ヘパリン加血漿、EDTA加血漿、フッ化ナトリウム加血漿又はシュウ酸ナトリウム加血漿を使用してください。
 - 2) 検体及び標準品等を分注するときは、泡立てないように注意してください。
 - 3) 検体については、乳び等の濁りは反応に影響ありませんが、ゴミ、カビ、細菌類、洗剤等の混入は絶対に避けてください。
 - 4) 不溶物を含む検体は遠心分離又は濾過により除去した後使用してください。
 - 5) 測定範囲を超えた高濃度検体は、生理食塩水で希釈し再測定してください。
2. 妨害物質・妨害薬剤
リウマチ因子は 200 IU/mL まで、ビリルビンは 20 mg/dL まで、乳びは 2,000 ホルマジン濁度まで、溶血はヘモグロビン濃度として 500 mg/dL まで影響ありませんでした。


●用法・用量（操作方法）

操作法は自動分析装置により異なります。詳細な操作法は各装置ごとにパラメータを用意してありますのでご用命ください。

[自動分析装置 TBA-120FR の例]

1. 試薬の調製方法
 - 1) R-1：フェリチン R-1 をそのまま使用します。
 - 2) R-2：フェリチン R-2 をそのまま使用します。
 - 3) 標準品：使用説明書に従って調製します。
2. 必要な器具・器材・試薬等
 - 1) 標準品（別売品）
フェリチン キャリブレーター（ST-873AS）
フェリチン キャリブレーター II（ST-874AS）

3. 測定（操作）法

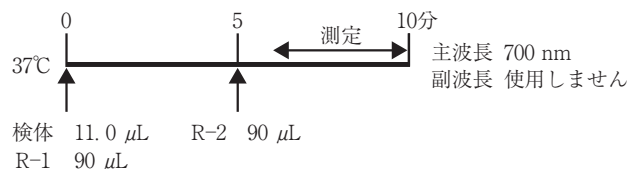

11.0 μ L の検体に 90 μ L の R-1 を加えて 37℃ で 5 分間加温した後、90 μ L の R-2 を加えます。37℃ で 5 分間加温しながら波長 700 nm で吸光度変化量を測定します。同様に標準品を用いて操作したときの吸光度変化量と対比し、検体中のフェリチン濃度を求めます。

●測定結果の判定法

1. 参考基準範囲 男性 31~325 ng/mL ($n=70$, $MEAN \pm 2S.D.$)¹⁾
女性 5~179 ng/mL ($n=87$, $MEAN \pm 2S.D.$)¹⁾
基準範囲は種々の条件下、各検査室により変動する可能性がありますので、各施設にて適した値を設定してください。
2. 判定上の注意
 - 1) 検体によっては、まれに検体中の目的成分以外との反応や妨害反応を生じることがあります。測定値や測定結果に疑問がある場合は、再検査や希釈再検査により確認してください。
 - 2) 非常に高濃度の検体については低値を示す可能性がありますので注意してください。
 - 3) 測定上限以上の高濃度検体については、キャリーオーバーにより次検体以降の測定値に影響を与える可能性がありますので注意してください。
 - 4) 採血管については、分離剤等が測定値に影響を与える場合がありますので注意してください。
 - 5) 診断・治療効果の判定は、本法を含めて関連する他の検査や臨床症状に基づき医師が総合的に判断してください。

●性能

1. 性能
弊社の品質管理基準に基づいた値です。
 - 1) 感度
生理食塩液（日局）と 5 ng/mL の自社標準品をそれぞれ 5 回同時測定するとき、 $MEAN \pm 2S.D.$ は重なりません。
 - 2) 正確性
既知濃度の管理血清を測定するとき、既知濃度 $\pm 15\%$ 以内です。
 - 3) 同時再現性
管理血清を 5 回同時測定するとき、C.V. は 10% 以下です。
 - 4) 測定範囲 [自動分析装置 TBA-120FR 使用]
5~1,000 ng/mL (ST-873AS 使用)
5~2,200 ng/mL (ST-874AS 使用)
2. 相関性試験成績
本法とイアトロメイト フェリチンとの相関は
血清を試料とした場合
 $n=94$, $r=0.997$, $y=0.959x-3.5$ でした。(y: 本法)
同一人から採取した血清と血漿を試料とした場合の相関は
 $n=50$, $r=1.000$, $y=0.979x+1.4$ でした。(y: 血漿)
3. 校正用基準物質
WHO (1st Lot.)

●使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上（危険防止）の注意
 - 1) 検体は、HIV、HBV、HCV 等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
 - 2) 検査にあたっては、感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、口でのピペettingは行わないでください。
 - 3) フェリチン R-2 には、アジ化ナトリウム (0.1% 以下) が含まれていますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

2. 使用上の注意

- 1) 試薬は貯蔵方法に従って保存し、使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
- 2) 凍結した試薬は使用しないでください。
- 3) ロットの異なる試薬は混合しないでください。また、検量線作成と検体測定は必ず同一条件で行ってください。
- 4) 使い残りの試薬の混合は避けてください（汚染や試薬の劣化をきたすことがあります）。
- 5) 測定終了後は、蓋をして貯蔵方法に従って保存してください。
- 6) フェリチン R-2 は、泡立てないように混和してから装置にセットしてください。
- 7) ゴミなどが試薬及びセルに混入しないように留意してください。

3. 廃棄上の注意

- 1) 検体、検査に使用した器具類及び廃液は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度 1,000 ppm、1 時間以上浸漬）、グルタルアルデヒド溶液（2%、1 時間以上浸漬）等での消毒又はオートクレーブ処理（121℃、20 分以上）を行ってください。
- 2) フェリチン R-2 には、アジ化ナトリウム（0.1% 以下）が含まれています。アジ化ナトリウムは、爆発性の強い金属アジドを生成することがありますので、廃棄は大量の流水で行ってください。
- 3) 試薬、検査に使用した器具類及び廃液を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等に従って、廃棄してください。

●貯蔵方法、有効期間

1. 貯蔵方法 2～10℃
2. 有効期間 1 年
使用期限は外箱ラベル及び容器ラベルに記載してあります。

●包装単位

製品番号	包装単位
TBA-87B2	フェリチン R-1 ……15 mL×2 フェリチン R-2 ……15 mL×2

●主要文献

- 1) 社内資料
- 2) Laufberger, V. : Sur La cristallisation de la ferritine. Bull.Soc. Chim. Biol., 19 : 1575-1582, 1937 : cf. C. A. 31. 3979
- 3) Brittenham G. M. Danish, E. H. & Harris, J. W. : Assesment of bonemarrow and body iron stress : old techniques and new Technologies. Semin. Haematol. 18 : 194-221, 1981.
- 4) Lipschitz, D. A. Cook, J. D. & Finch, C. A. : A Clinical Evaluation of serum ferritin as an index of iron stores. : New Engl. J. Med. 290 : 1213-1216. 1974.
- 5) 加藤淳二：検査値のみかた 225. フェリチン：臨床医, 19（増刊号）：605-606, 1993.

*●問い合わせ先

PHC株式会社 インフォメーション担当
TEL : 03-6865-2500
E-mail: medi-ho-service@gg.phchd.com

*●製造販売業者の氏名又は名称及び住所

PHC株式会社

東京都千代田区有楽町1-13-2