

承認番号 16200EZZ01580000
RM75-372LK
7-78B4

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください。

クラスⅡ汎用・血液・内分泌検査用シリーズ
フィブリン・フィブリノーゲン分解産物キット
エルピア FDP-P

●全般的な注意

1. 本品は体外診断用医薬品です。それ以外の目的には使用できません。
2. 診断・治療効果の判定は、本法を含めて関連する他の検査や臨床症状に基づき医師が総合的に判断してください。
3. 添付文書以外の使用方法については保証をいたしません。
4. 使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。

●形状・構造等（キットの構成）

1. 安定化液
2. ラテックス試薬
抗FDPモノクローナル抗体感作ラテックス(マウス使用)

●使用目的

血漿又は血清中フィブリン及びフィブリノーゲン分解産物（FDP）の測定

●測定原理

本キットは、ラテックス凝集反応に伴う濁度光量の減少を光学的に測定するラテックス近赤外光比濁法用FDP測定試薬です。

●操作上の注意

1. 測定試料の性質、採取法
 - 1) 検体にはクエン酸加血漿（EDTAカリウム、ヘパリンも測定値に影響を与えません）、又は抗プラスミン剤及び凝固促進剤が入っている採血管で採血して得られた血清を使用してください。長期保存する場合は必ず凍結（-40℃以下）してください。なお、凍結融解を繰り返すと測定値が変動する場合があります。
 - 2) 検体及び標準品等を分注するときは、泡立てないように注意してください。
 - 3) 検体については、乳び等の濁りは反応に影響ありませんが、ゴミ、カビ、細菌類、洗剤等の混入は絶対に避けてください。
 - 4) 不溶物を含む検体は遠心分離又は濾過により除去した後使用してください。
 - 5) 測定範囲を超えた高濃度検体及びプロゾーン検体は別売りの希釈液で希釈し再測定してください。
なお、STACIA®、STACIA® CN10では装置による自動希釈再測定が可能です。
 - 6) 本品を使用する際は、コントロール等を用いて精度管理を実施し、測定値が許容範囲内であることを確認してから検体測定を行ってください。
2. 妨害物質・妨害薬剤
リウマチ因子は 200 IU/mLまで、ビリルビンは 20 mg/dLまで、乳びは 2,000ホルマジン濁度まで、溶血はヘモグロビン濃度として 500 mg/dLまで影響はありませんでした。

●用法・用量（操作方法）

1. 試薬の調製方法
 - 1) 安定化液：そのまま使用します。
開封後の安定性：装置上 35日間安定
（STACIA®、STACIA® CN10の場合）

- 2) ラテックス試薬：そのまま使用します。
開封後の安定性：装置上 35日間安定
（STACIA®、STACIA® CN10の場合）
- 3) 標準品：使用説明書に従って調製します。
- 4) 共通希釈液Ⅱ（ステイシア®用）：そのまま使用します。

2. 必要な器具・器材・試薬等

- 1) 標準品（別売品）
FDP-P用標準品セット（ST-781XS）
- 2) 共通希釈液（別売品）
共通希釈液Ⅱ（ステイシア®用）（RM75D-002）

3. 測定（操作）法

測定法は自動分析装置により異なります。詳細な測定法は装置毎にパラメータを用意してありますのでご用命ください。
ラテックス試薬を泡立てないよう混和してから装置にセットしてください。

RM75-372LKを使用の際は、未開封のラテックス試薬ボトルを 10 回転倒混和してから、専用開閉ボトルキャップに付け替えて装置にセットしてください。以降の転倒混和は必要ありません。

[STACIA®、STACIA® CN10の例]

検体 5.5 μ L に安定化液 100 μ Lを加え、37℃で 4分間加温した後、ラテックス試薬 55 μ Lを加え、37℃で 6分間加温しながら波長 800 nmで吸光度変化量を測定します。

同様に標準品を用いて操作したときの吸光度変化量と対比し、検体中のFDP濃度を求めます。

●測定結果の判定法


1. 参考基準範囲 5 μ g/mL未満¹⁾
基準範囲は種々の条件下、各検査室により変動する可能性がありますので、各施設にて適した値を設定してください。
2. 判定上の注意
 - 1) 検体によっては、まれに検体中の目的成分以外との反応や妨害反応を生じることがあります。測定値や測定結果に疑問がある場合は、再検査や希釈再検査により確認してください。
 - 2) STACIA®、STACIA® CN10の場合、検量線範囲外の高濃度検体については、プロゾーン（PZ）が表示されます。
 - 3) 非常に高濃度の検体については低値を示す可能性がありますので注意してください。
 - 4) 測定上限以上の高濃度検体については、キャリーオーバーにより次検体以降の測定値に影響を与える可能性がありますので注意してください。
 - 5) 採血管については、分離剤等が測定値に影響を与える場合がありますので注意してください。
 - 6) 診断・治療効果の判定は、本法を含めて関連する他の検査や臨床症状に基づき医師が総合的に判断してください。

●性能


1. 性能
弊社の品質管理基準に基づいた値です。
 - 1) 感度
FDP濃度 2.5 μ g/mLの標準液を測定するとき、2~3 μ g/mLを示します。
 - 2) 正確性
既知濃度（約 10 μ g/mL）の標準液を測定するとき、該表示濃度の±15%以内を示します。
 - 3) 同時再現性
同一検体を 3回同時に測定するとき、CV値は 10%以下を示します。
 - 4) 測定範囲
2.5~80 μ g/mL（STACIA®、STACIA® CN10）

2. 相関性試験成績

本法とエルビア・FDPとの血清での相関は以下のとおりでした。
n=50、r=0.973、
y=1.110x-0.967 (y：本法)

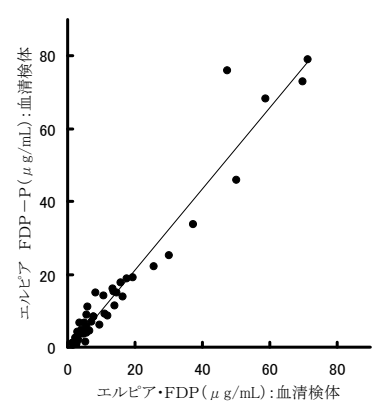

本法での血漿と血清との相関は以下のとおりでした。
n=50、r=0.991、
y=0.984x+1.824 (y：血漿)

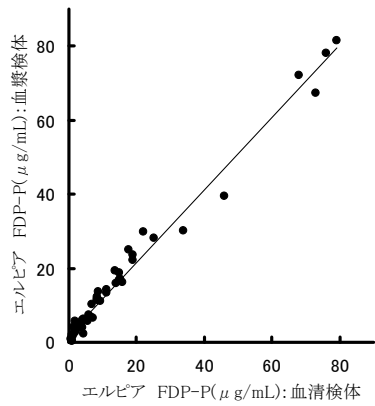

●使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上（危険防止）の注意
- 1) 検体は、HIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
 - 2) 検査にあたっては、感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、口でのピペッティングは行わないでください。
 - 3) 各構成試薬にはアジ化ナトリウムが含まれていますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。
2. 使用上の注意
- 1) 試薬は貯蔵方法に従って保存し、使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
 - 2) 凍結した試薬は使用しないでください。
 - 3) 異なるロットとの組み合わせで使用しないでください。また、検量線作成と検体測定は必ず同一条件で行ってください。
 - 4) 使い残りの試薬の混合は避けてください。（汚染や試薬の劣化をきたすことがあります。）
 - 5) 測定終了後は、蓋をして貯蔵方法に従って保存してください。RM75-372LKを使用の際は、一度取り付けた専用開閉ボトルキャップを取りはずさないでください。
 - 6) STACIA®、STACIA® CN10の場合：検量線の有効期間は28日間です。また、試薬ロットが変わった場合には、検量線を再作成してください。
 - 7) ゴミなどが試薬及びセルに混入しないように留意してください。

3. 廃棄上の注意

- 1) 検体、検査に使用した器具類及び廃液は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度 1,000 ppm、1時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド溶液（2%、1時間以上浸漬）等での消毒又はオートクレーブ処理（121℃、20分以上）を行ってください。
- 2) 各構成試薬には、アジ化ナトリウムが含まれています。アジ化ナトリウムは、爆発性の強い金属アジドを生成することがありますので、廃棄は大量の流水で行ってください。
- 3) 試薬、検査に使用した器具類及び廃液を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等に従って、廃棄してください。
- 4) 試薬類や検体が飛散した場合には、飛散した溶液を吸収剤で吸収し、飛散した場所を洗浄液で拭き取った後、さらに消毒用エタノール溶液などの適切な消毒剤で拭き取ってください。作業は適切な保護用具（手袋、安全眼鏡、実験衣など）を着用して行ってください。
- 5) 容器等は他の目的に転用しないでください。

●貯蔵方法、有効期間

- 1. 貯蔵方法 2～10℃
- 2. 有効期間 1年 6ヵ月
使用期限は外箱ラベル及び容器ラベルに記載してあります。

●包装単位

製品番号	適用装置	包装単位
RM75-372LK	STACIA®	(1)安定化液……………10 mL×1
	STACIA® CN10	(2)ラテックス試薬…5.5 mL×1

製品番号	包装単位
7D-78B4	(1)安定化液……………8 mL×1
	(2)ラテックス試薬…8 mL×1

製品番号	包装単位
7E-78B4	(1)安定化液……………7 mL×2
	(2)ラテックス試薬…7 mL×2

製品番号	包装単位
7F-78B4	(1)安定化液……………6 mL×2
	(2)ラテックス試薬…6 mL×2

●主要文献

- 1) 静 怜子他：臨床検査機器・試薬，14：143，1991.
- 2) 井本清美他：医学と薬学，43：401，2000.
- 3) 井本清美他：臨床病理，49：283，2001.
- 4) 盛合亮介他：臨床検査機器・試薬，24：173，2001.
- 5) 田中秀磨他：医学と薬学，45：1047，2001.
- 6) 盛合亮介他：日本検査血液学会雑誌，6：21，2005.
- 7) 田中秀磨他：医学検査，54：999，2005.
- 8) 布野純子他：医学検査，54：1093，2005.
- 9) 菅野信子他：日本検査血液学会雑誌，6：332，2005.

*●問い合わせ先

PHC株式会社 インフォメーション担当
TEL：03-6865-2500
E-mail：medi-ho-service@gg.phchd.com

*●製造販売業者の氏名又は名称及び住所

PHC株式会社
東京都千代田区有楽町1-13-2