

WTG

ディメンション ビスタ用

トリグリセライドキット

Lタイプウェュー TG・H

(GPO・HDAOS 法, グリセリン消去)

〔全般的な注意〕

- (1) 本製品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないで下さい。
- (2) この添付文書に記載された使用方法に従って使用して下さい。記載された使用方法および使用目的以外での使用については、測定値の信頼性を保証しかねます。
- (3) 測定機器は取扱説明書に従い適切な条件下で使用して下さい。なお、詳細については医療機器製造販売元に問い合わせして下さい。
- (4) 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果と併せて担当医師が総合的に判断して下さい。

〔形状・構造等(キットの構成)〕

- 1 カートリッジの容量
(120テスト)
2.3 mL × 8
- (1) 酵素発色液 A (R1: コンパートメント 1-8)

グッド緩衝液
 グリセロールキナーゼ(GK)(微生物由来)
 アデノシン-5'-三リン酸二ナトリウム(ATP)
 グリセロール-3-リン酸オキシダーゼ(GPO)(微生物由来)
 カタラーゼ(ウシ肝臓由来)
 N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリン(HDAOS)
 アスコルビン酸オキシダーゼ(AOD)(微生物由来)
 - (2) 酵素発色液 B (R2: コンパートメント 9-12)

グッド緩衝液
 リポプロテインリパーゼ(LPL)(微生物由来)
 ペルオキシダーゼ(POD)(西洋ワサビ由来)
 4-アミノアンチピリン

注) 試薬封入部をコンパートメントと呼び、カートリッジの幅の広い方から1として番号を付けています。


〔使用目的〕

血清中又は血漿中中性脂肪の測定

〔測定原理〕


第一反応(遊離グリセリンの消去)

試料中の遊離グリセリンはグリセロールキナーゼ(GK)、グリセロール-3-リン酸オキシダーゼ(GPO)及びカタラーゼの作用を受けて消去されます。

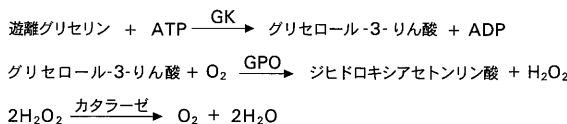

第二反応(トリグリセライドの測定)

試料中のトリグリセライドは、リポプロテインリパーゼ(LPL)の作用によりグリセリンと脂肪酸に分解されます。生成したグリセリンは、ATPの存在下でグリセロールキナーゼの作用によりグリセロール-3-リン酸になります。生成したグリセロール-3-リン酸は、グリセロール-3-リン酸オキシダーゼの作用を受けて酸化され、同時に過酸化水素を生じます。生成した過酸化水素は、ペルオキシダーゼの作用によりN-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリンナトリウム(HDAOS)と4-アミノアンチピリンとを定量的に酸化縮合させ、青色の色素を生成させます。この青色の吸光度を測定することにより試料中のトリグリセライド濃度を求めます。

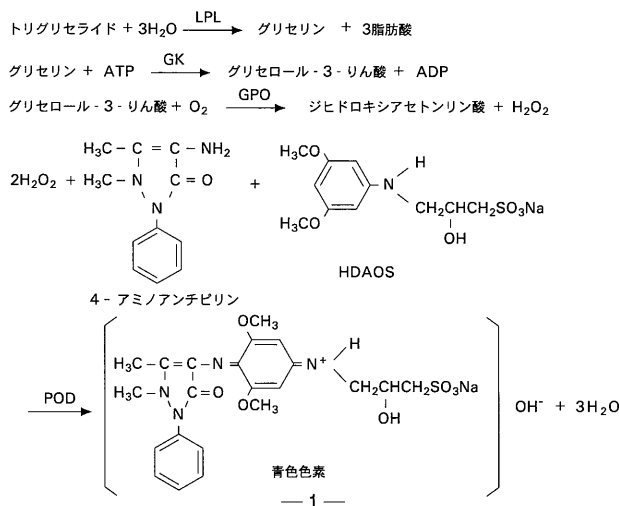

〔操作上の注意〕

- (1) 測定試料の性質、採取法
 - (イ)採取後の検体は速やかに測定して下さい。
 - (ロ)抗凝固剤のヘパリン、クエン酸塩、シュウ酸塩、EDTAおよび解糖阻止剤のフッ化ナトリウムは、通常使用量では測定値に影響を与えません。
- (2) 妨害物質・妨害薬剤
 - (イ)溶血、アスコルビン酸、ビリルビンは測定値にほとんど影響を与えません。
 - (ロ)遊離グリセリンはトリグリセライドとして 3000 mg/dL まで影響を与えません。(ディメンション ビスタ 1500による)

〔用法・用量(操作方法)〕

- (1) 試薬の調製方法

酵素発色液Aおよび酵素発色液Bはそのまま使用して下さい。
装置に試薬カートリッジを装填した後、シールされた状態で2~10℃保存で30日間安定です。
シール開封後、2~10℃保存で酵素発色液Aは4日以内、酵素発色液Bは8日以内に使用して下さい。
カートリッジの取扱いについては〔使用上又は取扱い上の注意〕を参照して下さい。
- (2) 必要な器具・器材・試料等

自動分析装置：ディスクリット方式臨床化学自動分析装置 ディメンション ビスタ シリーズ
検量用試料：マルチキャリブレーター リピッド(別売品)
使用に際しては、マルチキャリブレーター リピッドの現品説明書を参照して下さい。

(3) 測定法

〈ディメンション ビスタ シリーズへの適応〉

(1) 測定設定条件

- ・検体量：2.0 μL
- ・第一試薬(R1)量：129.0 μL
- ・第二試薬(R2)量：65.0 μL
- ・希釈液量：15.0 μL
- ・測定温度：37℃
- ・測定法：2波長エンドポイント法
- ・波長：主波長 600 nm および副波長 700 nm
- ・濃度単位：mg/dL

(2) 操作法

- ①本品をディスクリット方式臨床化学自動分析装置 ディメンション ビスタ シリーズの所定位置に装填します。
- ②検体(血清、血漿)または検量用試料を装置専用サンプルカップに分注します。
- ③装置上のキーボードを用いて、患者検体IDおよび検査項目を入力します。
- ④サンプルカップを指定された位置に装填し、操作ボタンを押しますと自動的に分析が下記手順で行われます。
- ⑤第一試薬(129.0 μL)、精製水(10.0 μL)および検体(2.0 μL)がキューベット中に分注混和され、37℃で一定時間インキュベーションされます。
- ⑥次に第二試薬(65.0 μL)および精製水(5.0 μL)が分注混和され、反応液中の青色色素の生成量が2波長(600 および 700 nm)でエンドポイント測定されます。
- ⑦測定された吸光度は濃度(mg/dL)に変換され、測定結果がプリントアウトされます。

注) 手入力で装置に試薬情報を入力する際には、外箱及び試薬カートリッジ本体のラベルに記載されたロット番号(Lot)を使用して下さい。

〔測定結果の判定法〕

参考正常値⁽²⁾ 50~130 mg/dL

高トリグリセライド血症診断基準値⁽³⁾ 空腹時 150 mg/dL 以上

〔性能〕

〈性能〉

- (1) 感度
 - (イ)生理食塩水を試料として操作した場合の吸光度は、0.05以下です。
 - (ロ)特定濃度の標準液(トリグリセライド 200 mg/dL)を試料として操作した場合の吸光度は、0.03~0.21の範囲内です。
- (2) 正確性

既知濃度の管理用血清を測定するとき、既知濃度の±10%以内にあります。
- (3) 同時再現性

同一検体を5回同時に測定するとき、測定値のCV値は5%以下です。
- (4) 測定範囲

トリグリセライド 5~2000 mg/dL です。(ディメンション ビスタ 1500による)

〈校正用の基準物質(標準物質)〉

検査医学標準物質機構(ReCCS)

脂質測定用常用参照標準物質(JCCRM224)

〔使用上又は取扱い上の注意〕

〈取扱い上(危険防止)の注意〉

- (1) 試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、直ちに大量の水で洗い流し、必要があれば医師の手当等を受けて下さい。

〈使用上の注意〉

- (1) 試薬は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
(2) 誤って凍結させた試薬は使用しないで下さい。正しい結果が得られないことがあります。
(3) カートリッジは必ず外箱に入れ、指定の条件で保存して下さい。
(4) 本品中の容器は他の目的に転用しないで下さい。

**〈廃棄上の注意〉

- (1) 廃棄に際しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び排水基準に従って適切に処理して下さい。酵素発色液B中にシアノ錯体(シアンとして1.1 mg/L)を含有しています。
(2) 検体と接触した試薬及び試薬容器等は、感染の危険性があるものとして処理して下さい。
(3) 酵素発色液Bは、防腐剤としてアジ化ナトリウムを0.1%含有しています。アジ化ナトリウムは、銅や鉛などの重金属と結合してアジ化物を形成します。重金属のアジ化物は、乾燥状態で衝撃により爆発する性質がありますので、排水後は、排水管に残留しないように十分量の水で洗い流して下さい。

〔貯蔵方法・有効期間〕

- (1) 貯 法 2～10℃保存
(2) 有効期間 製造後1か年間

〔包装単位〕

(コード番号)	(品 名)	(包 装)
464-40801	L タイプワコー TG・H	4×120 テスト

〔主 要 文 献〕

- (1) Spayd, R. W., Bruschi, B., et al. : Clin. Chem., **24**, 1343-1350(1978).
(2) 福井 巖, 久城英人, 高野圭以: 日本臨牀(秋季臨時増刊号), **40**, 264-276(1982).
(3) 動脈硬化性疾患診療ガイドライン2002年版, 5-7(日本動脈硬化学会)(2002).

*〔問い合わせ先〕

富士フイルム 和光純薬株式会社
臨床検査薬 カスタマーサポートセンター
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号
Tel: 03-3270-9134(ダイヤルイン)

〔別 売〕

(コード番号)	(品 名)	(包 装)
464-01601	マルチキャリブレーター リピッド (表示値はロットごとに異なり) (現品説明書に記載しています)	3 mL用×4

*〔販売元〕

シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社

東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

製造販売元

富士フイルム 和光純薬株式会社
大阪市中央区道修町三丁目1番2号

18.02.02K05