

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 保護栓 70280000

プラグ L

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 組成

ポリプロピレン

2. 形状

本品は、ISO594-2 に適合したルアーロックタイプのメスルアーに使用するキャップである。

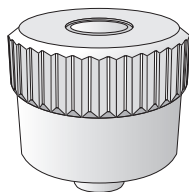

【使用目的、効能又は効果】

（一般的名称定義）

用具の内容物の漏れを防止し、使用するまで内容物の無菌状態を維持するために用いるプラスチック製の蓋状の器具をいう。本品は単回使用である。

【品目仕様等】

漏れ試験

規定の圧力を規定の時間かけた際に空気の漏れを認めない。

【操作方法又は使用方法等】

1. 必要に応じて、あらかじめ手袋を着用する。
2. 包装を開封し、包装内から製品を取り出す。
3. 接続するメスルアーに確実にねじ込む。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 包装が破損・汚染している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- あらかじめ接合部に緩みがないことを確認してから使用すること。また、使用中は定期的に緩み、外れがないことを確認すること。
- 使用時に緩みや液漏れ等が認められた場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 過度な締め付けをしないこと。〔キャップが外れなくなる又は、キャップが破損する可能性がある。〕
- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して安全な方法で処分すること。

- 使用中は本品の破損、接合部の緩み及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- 接液部を汚染させないこと。
- 本品を再滅菌しないこと。
- 併用する医療機器及び医薬品の添付文書を確認後、使用すること。
- 本品使用後は医療廃棄物として処理すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〈貯蔵・保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

〈使用期限〉

箱のラベル及び直接の被包記載の使用期限を参照。〔自己認証による〕

【包装】

1 箱 200 個入り

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地
TEL：0120-8555-90 (BDお客様情報センター)

外国製造業者：

ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー
(Becton, Dickinson and Company)
国名：スウェーデン、メキシコ合衆国

