

類別 医療用品 05 副木
一般医療機器 一般的名称
販売名

医療用品 05 副木
成形副木 ** JMDNコード 35354000
ミニパーフィットエース

再使用禁止

【警告】

使用方法

** ◆(この項目削除)


- ◆患者さんに使用する前に、このネックカラーを使用するための臨床的な教育・トレーニングを十分に受けてください。また、本品の取扱方法について、本書を十分に読み、よく理解しておいてください。
- ◆ここに記載されている事はガイドラインです。医学的な処置について定義しているものではありません。使用においては医師の指導・指示に従ってください。
- ◆処置中は常に、頭頸部を中央の位置に保ってください。カラーが正しく取付けられ、患者さんが固定された後も頭部を保持してください(写真23)。状況に合わせて、ヘッドイモバイザーなどにより患者さんを更に固定してください。

【禁忌・禁止】

使用方法

- ◆再使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

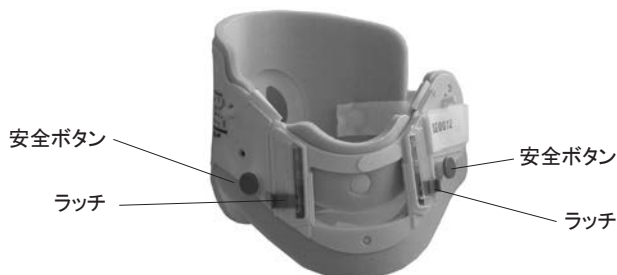

1. 構成

本体×1、添付文書×1

2. 原理

頸椎や脊髄の保護や損傷を防止するため、頭頸部を本品に固定することで、頭頸部を中央位置に維持し、前後左右に曲ることのないようにします。同時に脊髄のひねり・圧迫による、生理学的な損傷、虚血性の損傷が脊髄に加わることを防ぎます。

① 救護をする方は手を使って患者さんの頭頸部を安定させ、丁寧に中央の位置にしてください(写真1)。

注：万一、この処置の中で、何らかの抵抗を感じたり、患者さんの不快感が増加する場合、脊髄損傷などがある、あるいは疑われるときにとられる所定の固定処置法に従ってください。

② 頭頸部が安定したら、第二の救護者が、本品を以下の方法でサイズを患者さんに合わせてから、患者さんに取付けてください。患者さんの頸部が伸び過ぎないように注意してください。

③ 患者さんの顎の下から(患者さんの)肩までの距離を測定してください(写真2)。


④ 上記で測定した距離とカラーのサイズ線とプラスチックの下(フォーム部ではありません)の部分との距離を比較してください(写真3)。

⑤ ミニパーフィットエースは出荷時点でサイズ1(新生児)にセットされています。サイズを大きくする場合、安全ボタンを上引き上げて安全のためロックをはずしてください(写真4)。

⑥ カラーサイズを調節してください。サイズ1(新生児)からサイズ3(体格の小さい成人)の中で12段階で調節できます。指で測定した距離になるまで、カラーを広げてください(写真5)。

⑦ 安全ボタンを押し下げて 安全のためのロックを固定してください(写真6)。

⑧ サイズを再調節する場合、安全ボタンを引き上げ(写真7)、ラッチをOUT(外)側に押し解除(写真8)してから、サイズを調節してください(写真9)。サイズが決まったら、ラッチをIN(内)側に押し(写真10)、安全ボタンを下側に押し下げて、安全のためのロックを固定してください(写真11)。

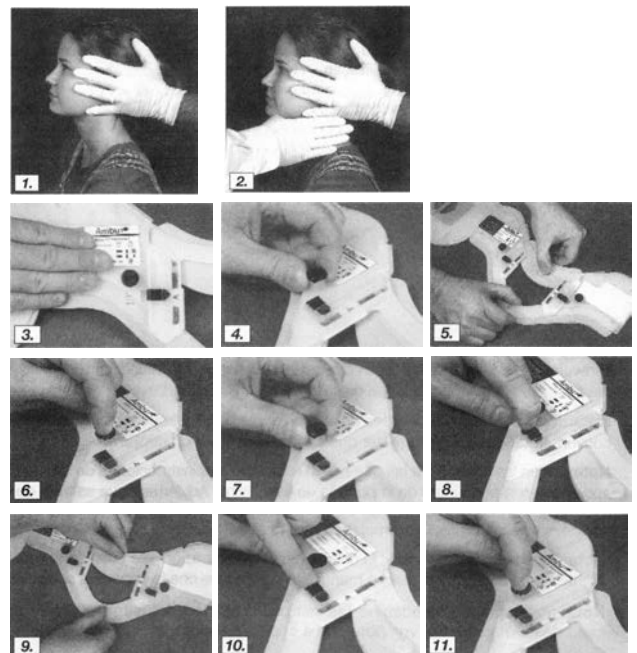

** 【使用目的又は効果】

** 頭頸部を固定して、頸椎や脊髄を保護し損傷を防止します。

** 【使用方法等】

1. 操作方法

頸椎や脊髄の保護や損傷を防止するため頭頸部を固定(サイズはアンブパーフィットカラーのサイズ1～3に相当し、患者さんにあわせて12段階で調節可能)してください。

2. カラーの組立て

カラーの気管開口部を手で持ち、人差し指を顎用ピース（センターリベット上）のフォーム側に、親指を顎用ピースの反対側に当ててください。顎用ピースを裏側から正面側に回してください（写真13、14）。これで顎用ピースが正しい位置にセットされます。

3. 適用

固定用ネックカラーを使用するには、2人の人員が必要です。第一番目の救護者がspread finger法（写真15）により、頭部を保持して、頭頸部を中央の位置にして、動かさないように注意してください。

- ① 第二番目の救護者がカラーを患者さんの胸、顎に当ててください。カラーは特別なことをしなくても、患者さんの肩と胸骨の上に乗るはずですが（写真16）。患者さんの顎が中央の位置で、顎用ピースにしっかりとることを確認してください（写真17）。
- ② カラーの正面を持ちながら、カラー後部を首の後ろ側に回し、ベルクロストラップをカラーの正面側に回してください（写真17）。
- ③ ベルクロストラップを必要な長さに調節して固定してください（写真18）。
- ④ 貴施設の手順に従ってカラーサイズを調節してください。

4. 仰臥位での使用

患者さんが仰臥位の場合、カラー後部を患者さんの首の後ろに均等に滑り込ませてください（写真19、20）。顎に顎用カラーを当てた（写真21）あと、片手でカラーを保持し、もう一方の手でベルクロストラップを締めてください（写真22、23）。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ◆ 固定用ネックカラーは、患者さんの固定処置の一部となっています。

**【保管方法及び有効期間等】

保管温度：常温。

【主要文献及び文献請求先】

** アイ・エム・アイ株式会社 救急・CC部

* TEL：048-968-4442

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

製造業者名（国名）：Ambu A/S（アンブ社）（デンマーク）

