

類別 機械器具(6)呼吸補助器  
一般医療機器 一般的名称 人工呼吸器フィルタ \* JMDNコード 14352000

再使用禁止 販売名 **アヴェア ディスポ呼吸フィルタカートリッジ**

**【警告】**

**＜使用方法＞**

- \* ◆(この項目削除)
- \* ◆(この項目削除)
- ◆本品下部のウォータトラップ内の水分が、ボトルの排水レベルに近くなった場合、排水クランプを緩め適当な容器に排水してください[回路内に液体が流入する恐れがあります]。
- ◆本品を交換する際には、全ての接続が正しく、しっかりと接続されていることを確認してください[不完全な接続により、漏れが生じる恐れがあります]。
- ◆アヴェアベンチレーター本体の左下部のレバーがきちんと閉じられており、本品がしっかりと固定されていることを確認してください。

**【禁忌・禁止】**


**＜使用方法＞**

- ◆使用後は廃棄し、再使用しないでください。
- ◆本品は単回使用のディスポーザブル製品のため、使用時に、再使用可能なフィルタ等の付属品(再使用可能なフィルタ、ボトル、ウォータトラップ、及びカートリッジ等)と併用しないでください。

**【形状・構造及び原理等】**

**1. 構成**

|   |             |
|---|-------------|
| ① | 呼吸フィルタ      |
| ② | ボトル         |
| ③ | 呼吸回路接続用コネクタ |
| ④ | 排水用チューブ     |
| ⑤ | 排水用クランプ     |

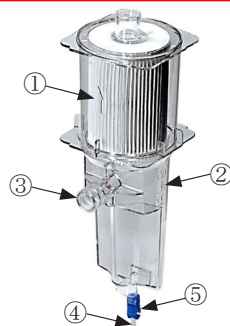


**\* 【使用目的又は効果】**

人工呼吸器のガスラインへの粒子及び微生物の侵入を防止するために用いる篩をいいます。本品は、通常、プラスチックに格納されており、紙、繊維又は銅糸製です。

**\* 【使用方法等】**


**＜使用前＞**

- ①本品に亀裂、破損等がないことを確認してください。亀裂、破損等があった場合、本品を使用しないでください。
- ②アヴェアベンチレーター本体の左下部のレバーを引いてロックを解除してください。
- ③呼吸回路接続用コネクタが正面に来るように本品を取付けてください。
- ④レバーを元の位置に戻し、本品を固定してください。

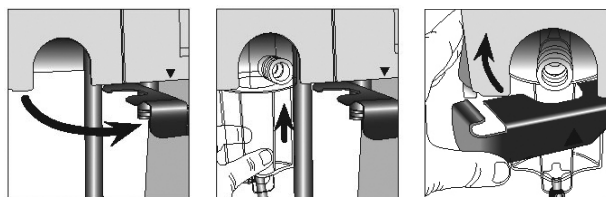

**＜使用中＞**

- ①水分の水位を定期的に確認してください。
- ②水分の量がボトルの排水レベルに近くなった場合、排水用クランプを緩め適当な容器に排水してください。

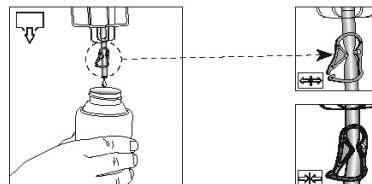

- ③本品に亀裂、破損等がないことを確認してください。亀裂、破損等があった場合、本品を使用しないでください。
- ④レバーを元の位置に戻し、本品を固定してください。

**＜使用后＞**

- ①レバーを引いてロックを解除し、本品をアヴェアベンチレーター本体から外してください。
- ②本品を破棄してください。

**\* 【保管方法及び有効期間等】**

高温、多湿、直射日光、水漏れを避け、室温で保存してください。

温度 : (保管) -20 ~ +60℃

相対湿度 : (保管) 0 ~ 95% (非結露)

**【保守・点検に係る事項】**

**＜使用前＞**

- ①本品に亀裂、破損等がないか確認してください。亀裂、破損等があった場合は、本品を使用しないでください。

**＜使用中＞**

- ①水分の水位を定期的に確認し、ボトルの排水レベルに近くなった場合、排水用クランプを緩め適当な容器に排水してください。
- ②本品に亀裂、破損等がないか確認してください。亀裂、破損等があった場合は、本品を使用しないでください。

**【主要文献及び文献請求先】**

\* アイ・エム・アイ株式会社 レスピラトリ・ケア部  
TEL : 048-968-4442

**\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者の名称 : アイ・エム・アイ株式会社

\*\* 製造業者名(国名) : Vyair Medical, Inc.  
(パイエア メディカル社)(米国)