

ハナコ・シリンジ

再使用禁止

【警告】

併用する医療機器の添付文書を必ず参照すること。


【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止

【形状・構造および原理等】

本品形状

・シリンジ本体

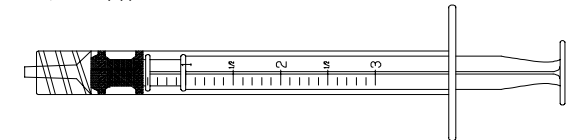

・ファネル

キャップタイプ



カニューラタイプ



材質

部 品	材 質
外 筒	ポリカーボネート
プランジャー	ABS
ガスケット	シリコンゴム
ファネル	ポリプロピレン／ポリエチレン

【性能、使用目的、効能又は効果】

本品は、マニホールド、チューブ又はカテーテル等と組み合わせて、血管内に薬液等（造影剤の場合もある）を注入する又は生検検体等を吸引するために用いる単回使用製品である。

【品目仕様等】

プランジャーは、外筒内面を滑らかに移動できること。

【操作方法又は使用方法等】

[1. シリンジの一般的な使用方法]

- 1) 包装を開封し、包装内から製品を取り出す。
- 2) 本品のプランジャーを引き、薬液等を本品先端から吸引する。
- 3) 先端を上に向け、プランジャーを押して外筒内部から空気を完全に押し出す。
- 4) プランジャーを押して注入する。

[2. 付属品（ファネル）の使用方法]

- 1) 包装を開封し、包装内から製品を取り出す。
- 2) シリンジ本体の外筒先端にファネルを取り付けた後、上述の1. (2)～(4)のとおり使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

注入する全ての薬液及び併用するデバイスの適用、禁忌、注意、警告については、その製造元の添付文書を参照すること。

【使用上の注意】

【一般的な注意事項】

- 1) 医薬品の添付文書を確認後、使用すること。
- 2) 本品は医療用以外には使用しないこと。

3) 本品を使用する前には次の事項に注意すること。

- ①本品及び滅菌包装に破損、汚損等の異常のないことを確認すること。万一、異常が認められた場合には、使用しないこと。
 - ②本品を、包装から取り出す際は、細菌等の汚染が起らないように十分に注意すること。
- 4) 本品の使用中に次の事項に注意すること。
- ①本品の全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - ②本品及び本品によるものと判断される患者の異常を認めた場合には直ちに患者の安全をはかる処置を講じ、患者の安全を確認したのち、本品を状況に応じた適切な方法により取り除くこと。
 - ③接続するハブ又はコネクタとしっかりと接続すること。
- 5) 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で医療用廃棄物として処分すること。

【製品固有の注意事項】

- 1) 本品を脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含有する製剤の投与時に使用しないこと。（変形や破損が生じる可能性がある。）
- 2) 本品を用いて造影剤等を注入する際は、空気がシリンジ内に混入していないことを確認する。もし、空気が混入している場合は、空気を完全に除去すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

- 1) 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管し、振動、衝撃等を避け、安定した状態で保管すること。
- 2) 有効期間・使用の期限
滅菌年月日より3年間（滅菌年月日は被包に記載）
[自己認証(当社データ)による。]

【包装】

30個／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：ハナコメディカル株式会社

〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2-24-11

TEL 048-881-4001

製造業者：ハナコメディカル株式会社 大宮工場