


器 17 血液検査用器具 一般医療機器 手動式血球計数装置 (35103000)


血球計算盤

【形状・構造及び原理等】

1. 上面図

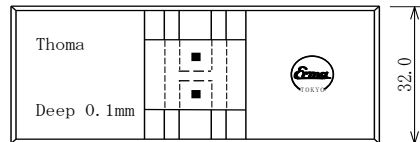

2. 横断面図

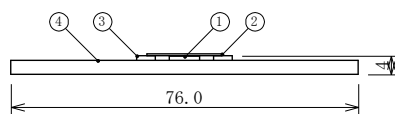

- ①計算室
- ②デッキガラス
- ③堤
- ④計算盤

- 寸法 (mm) 76.0 (幅) × 4 (高さ) × 32.0 (奥行き)
- 包装 1 個/箱

【使用目的又は効果】

本装置は一定の深さのくぼみのあるブロックと線で四角く区切られた平面から構成される。区切られた四角とデッキガラスの間の既知の容量中の血球を顕微鏡を通して計算する。

【使用方法等】

1. 基本操作
 - (1)きれいに洗浄され拭き取られた計算盤にきれいなデッキガラスを計算盤の左右の堤の上に当たるように置いてください。
 - (2)デッキガラスの上面の両端を、両手親指で斜めに擦り込むように軽く押さえてください。
 - (3)正しい位置にデッキガラスが装着されているかの確認は計算盤の左右の堤の部分に虹の環（ニュートンリング）がみえる事で確認できます。ニュートンリングが見えない時は計算盤・デッキガラスの汚れかデッキガラスの装着不良と思われるので、洗浄あるいは拭き取り等の操作を行ってください。
(エルマ計算盤は、押さえ金具付きケースに入っていますので、ニュートンリングが見えたら押さえ金具でデッキガラスを押さえてください。)
 - (4)ニュートンリングが見えたら、サンプルを計算盤の計算室に入れます。
 - (5)サンプルが入った計算盤を顕微鏡のステージに乗せます。
 - (6)サンプルが計算室にはいると、液体の屈折率の影響でビントが少しくれます。微動ツマミで再度ビントを合わせてください。

【使用上の注意】

ブライトライン血球計算盤は使用に当たって次の注意をお守りください。

- (1) 強酸、強アルカリ液に浸漬したり、洗浄等を使用されますと、蒸着被膜が侵され薄くなったり、剥がれたりする場合がありますので御注意ください。

- (2) 計算室の洗浄にはレンズペーパーやセーム皮を使用しないでください。きれいな、柔らかい布やガーゼ等にエーテル、アルコールを含ませて拭拭してください。
- (3) 切削、摩擦によって計算室を損傷しないように十分御注意ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : エルマ販売株式会社
住 所 : 〒342-0045 埼玉県吉川市木売 3-4-8 エルマ吉川ビル
電 話 番 号 : 048-984-3138