

器 17 血液検査用器具 一般医療機器 特定保守管理医療機器 ヘモグロビン分析装置(35481000)


ヘモグロビンメーター Hb-20N

【禁忌・禁止】

お客様が本装置の外装を弊社に無断で外し、装置の内部に手を触れると、感電の危険があります。取扱説明書で指定されている保守・点検箇所や部品交換箇所以外は手を触れないで下さい。

【形状・構造及び原理等】


ドレイン式

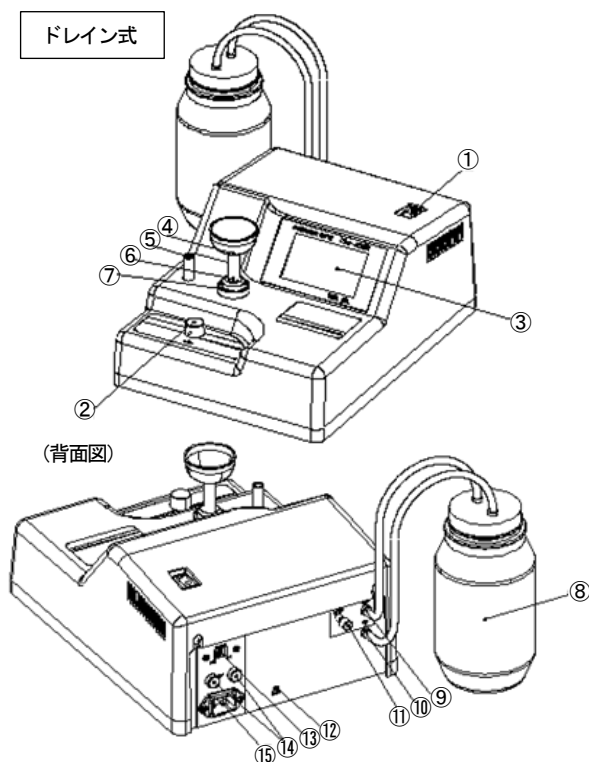

- | | |
|------------|--------------|
| ①電源スイッチ | ⑧廃液瓶 |
| ②O-Adj ツマミ | ⑨DRAIN OUT |
| ③デジタルメータ | ⑩PUMP IN |
| ④ドレインセル | ⑪PUMP ON/OFF |
| ⑤EJECT | ⑫S-Adj ボリューム |
| ⑥セル入口 | ⑬V-SERECT |
| ⑦ドレインゴム | ⑭ヒューズホルダー |

試験管式

- ①デジタル表示部
②測定部
③O-Adj ツマミ
④電源スイッチ

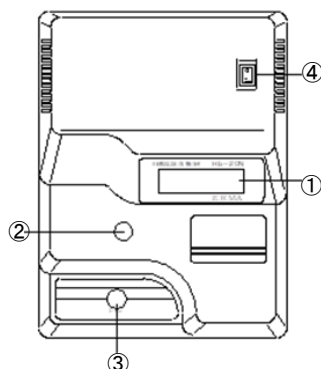

●品目仕様等

- | | |
|----------|--------------------------------|
| ・測定法 | SLS-Hb 法 |
| ・測定範囲 | 0~25g/dl |
| ・測定精度 | CV1%以内 |
| ・希釈倍率 | 251 倍 |
| ・試料量 | 約 4.5ml (試験管使用時は 約 1ml) |
| ・定格電圧 | AC100/220V±10% |
| ・周波数 | 50/60Hz |
| ・電源入力 | 15VA |
| ・寸法 (mm) | 250 (幅) × 117 (高さ) × 324 (奥行き) |
| ・質量 | 約 5Kg |

- 包装 1 台/箱

【使用目的又は効果】

分光光度法により血液中のヘモグロビンを測定します。

【使用方法等】

(1) 測定前の操作

- ①血液を反応試薬で 251 倍希釈してください。
- ②室温に 5 分間放置してください。

(2) 測定操作

- ①電源を ON にし、器械が安定するまで 15 分待ってください。
- ②試験管に蒸留水を入れ、試験管をよく拭いてから器械にセットしてください。
- ③0-ADJ ツマミを回して、表示が 00.0 になることを確認してください。
- ④反応させた検体を試験管に入れ器械にセットし表示値を読みとってください。

【使用上の注意】

- (1) 本体内部にネジや硬貨などの異物を入れると故障の原因となります。
- (2) 直射日光の当たる場所、流し台の付近など水のかかるような場所は避けて設置してください。
- (3) 塩素ガスなどの腐食性ガスの発生する危険性のない場所に設置してください。
- (4) 振動のない、水平で安定した台に設置してください

【保管方法及び有効期間等】

- | | |
|--------|----------------------|
| 使用耐用年数 | 指定した保守点検を実施した場合に 7 年 |
| 使用環境条件 | 温度 : 10~30℃ |
| | 湿度 : 30~80% |

【保守・点検に係る事項】

詳細については、取扱説明書を参照して下さい。
本装置を正しく使用するために定期点検を実施して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- | | |
|--------|------------------------------------|
| 製造販売業者 | : エルマ販売株式会社 |
| 住所 | : 〒342-0045 埼玉県吉川市木売 3-4-8 エルマ吉川ビル |
| 電話番号 | : 048-984-3138 |

取扱説明書を必ずご覧ください。