


※※2017年11月作成(第3版) (新記載要領に基づく改訂)
※2016年5月作成(第2版)

届出番号 11B3X10002000500 号

類別：機械器具(器 68)印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器
JMDN コード：10201000
販売名：ST バネ付咬合器

※※〔形状、構造及び原理〕

1) 形状、構造

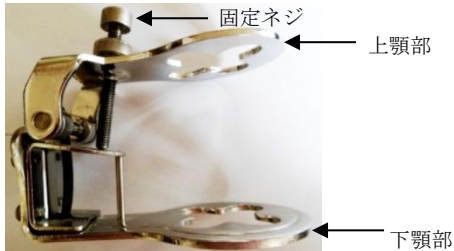

2) 材料

- *上顎部 ステンレス鋼板 (SUS304)
- *下顎部 ステンレス鋼板 (SUS304)
- *固定ネジ ステンレス鋼 (SUS303)
- *板バネ バネ鋼 (鉄鋼板)

3) 原理

- *石膏模型を制限する器具

※※〔使用目的又は効果〕

・使用目的

本品は主として歯冠修復物、欠如物の補綴物製作の為、全顎の印象を採得した印象材より作成した石膏模型を本品に設置して技工室で患者機能を再現させる器具として使用する。

・効果

形式：全顎用咬合器

機能：上下方向開閉機能及び横方向回転機能石膏模型の取り除き操作が容易である事

※※〔使用方法等〕

- 1) 本品は使用者が使用前に消毒を行ってから使用する。
- 2) 本品は必ず使用前にひび、割れ、そり、傷、バリ、等がないよう確認する。
- 3) 本品の上顎部及び下顎部にそれぞれ石膏を盛り、それを台として石膏模型の上顎部及び下顎部を植え付ける。
- 4) 石膏模型を設置してから上顎部及び下顎部の上下方向の開閉機能を確認する。
- 5) 下顎部に対する上顎部の横方向の回転機能を実現して補綴物の機能を確認する。
- 6) 石膏模型を設置するにあたり、上顎部と下顎部の角度は固定ネジを調節して固定する。

※※〔使用上の注意〕

- 1) 使用前、消毒を行ってから使用する事。
- 2) 表面に鋭利な刃物等できずにつけたりなどすることなく丁寧に扱う事。
- 3) 板バネは急激に圧力を掛けると割れることがあり、注意する事。

※※〔保管方法及び有効期間等〕

- 1) 錆びる恐れがある為、水分が付着したまま保管しない事。
- 2) 表面が損傷する為、鋭利な刃物等で汚物除去及び清掃時不使用しない事
- 3) 有効期間は定めません。

※※〔保守・点検に係る事項〕

使用前、使用後に点検し破損、ヒビ、キズ、変色、腐食、稼動部の動き等に異常がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。また長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので適宜交換する事。

〔製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等〕

製造販売業者：片瀬工業株式会社

製造業者：片瀬工業株式会社

住 所：埼玉県所沢市山口257-5

電話番号：04-2922-7577

FAX 番号：04-2924-0126