

機械器具（55） 医療用洗浄器
一般医療機器 鼻用洗浄器（JMDNコード：41599000）

EMS ハナ通り

【警告】

- ・本品を使用後、症状の改善が見られない場合や、発熱、鼻血、頭痛等の症状が認められた場合は使用を中止し、直ちに専門医に相談して下さい。
- ・耳、鼻、鼻腔の手術を受けた場合は、本品の使用前に専門医に相談して下さい。
- ・妊娠中あるいは授乳中の方は使用前に専門医に相談して下さい。
- ・感染の可能性があるため、本品を他人との間で使い回さないで下さい。
- ・お子様の手の届かないところで保管して下さい。
- ・本品は専用塩とともに使用して下さい。


【禁忌・禁止】

- ・鼻血がひどい場合は本品を使用しないで下さい。
- ・本品は鼻洗浄以外の目的で使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

<形状>

本品は未滅菌品です。

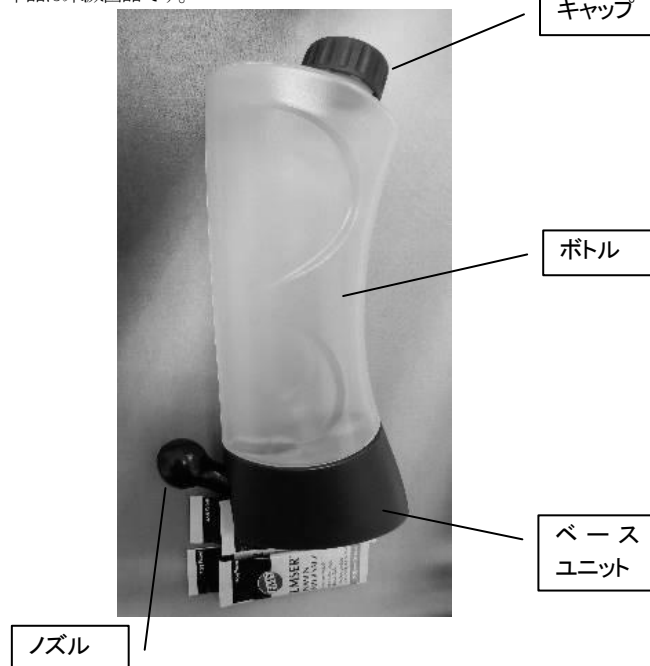

<原材料>

ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は、温かい食塩水等の治療液を直接鼻腔に適用し、粘膜及び鼻の通路を洗浄するために用いる器具である。

【使用方法等】

①本品を使用する前にボトルとベースユニットを接続し、ノズルを水平方向に向けて、軽くすすぎます（ノズルの向きが正しくないと水が漏れる場合があります）。次にボトル上部のmaxの目印までぬるま湯を注ぎ、専用塩一包をボトルに入れます。ぬるま湯の量が多かったり少なかったりすると、使用時に痛みを伴う場合がありますので、適切な分量を守って下さい。

②キャップを閉め、図のようにキャップの中心の孔を指で押しながら、専用塩が完全に溶けるまでボトルを振ります。

③キャップを指で押さえたまま、ノズルを斜め上向きに動かして下さい。

④リラックスしながら姿勢よく立ち、顔がシンクの上にくるように少し傾けます。口を大きく開けることによって、軟口蓋が塞がり、食塩水が喉に入らなくなり、口で呼吸を続けることができます。

⑤ボトルをしっかりと持ち、ノズルの先端を鼻孔に強く押し当ててから、キャップの孔を押さえていた指を外します。そうするとボトルに入っている食塩水が鼻腔に流れ込み、鼻中隔を洗い流し、反対の鼻孔から流れ出ます。次に同じ動作を反対の鼻孔で行います。食塩水が喉に入った場合は吐き出して下さい。鼻腔の上部を洗う場合は、ボトルを少し強く握ります。その際、強く握り過ぎると食塩水が耳管に流れ込んでしまうことがありますので注意して行って下さい。

⑥使用後はボトルをぬるま湯ですすぎます。キャップを外し、図のようにベースユニットの内側にノズルを戻して、完全に乾燥させます。本品は200回使用時、もしくは使用後1年を経過した時点で廃棄し、新しい製品をご使用いただくことを推奨しております。

【使用上の注意】**

- ・3才未満の小児には使用させないこと
- ・嚥下障害がある方は使用しないこと
- ・耳鼻咽喉科の治療を受けている方は、使用前に医師に相談すること
- ・洗浄後、強く鼻をかまないこと
- ・鼻洗浄のみに使用し、目や耳には使用しないこと
- ・鼻の炎症、鼻づまりがひどいときは使用しないこと

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・本品を使用した後ボトルをすすぎ、十分に乾燥させてから保管して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社 名 優

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

TEL:047-480-6161 FAX:047-480-6162

製造業者：

Siemens & Co, Heilwasser und Quellenprodukte des
Staatsbades Bad Ems GmbH & Co. KG（ドイツ）