

医療用品 (05) 副木
一般医療機器 体外式鼻用副木 (JMDNコード：35411000)

デンバースプリント

再使用禁止

【警告】

スプリントを皮膚に接触させたり、締めつけ過ぎたりしないように注意してください。

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・本品を装着したまま磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)を使用しないでください（発熱し火傷をする恐れがあるため）。**

【使用上の注意】


- ・スプリントを皮膚に接触させたり、締めつけすぎたりしないように注意すること。
- ・本品を装着したまま磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)を使用しないでください（発熱し火傷をする恐れがあるため）。**

【保管方法及び有効期間等】***

1. 常温常圧下で保管すること。
2. 直射日光を避け、水のかからない場所に保管すること。

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

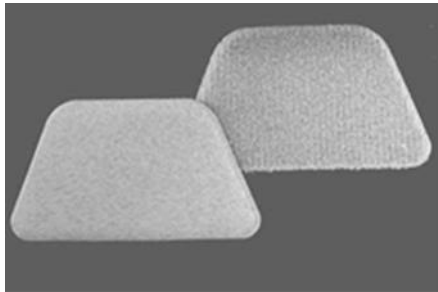

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】***

製造販売業者：

株式会社 名 優

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

TEL:047-480-6161 FAX:047-480-6162

製造業者：

Shippert Medical Technologies Corporation（アメリカ合衆国）

＜材質＞

アルミ製スプリント：アルミニウム

ベロクロパッド：ナイロン

【使用目的又は効果】***

骨折または治療した鼻骨を支持するために用いる器具である。本器具は鼻の外側から貼り付け、患部を支持する。

【使用方法等】***

1. 使用前
包装を開封し、製品に不具合があった場合は正常品を使用する。
2. 使用中
 - ・患部を清拭して十分に乾燥させる。
 - ・患部皮膚を保護するため、スプリントが接触する患部にテープを貼り付ける。
 - ・テープの上から、鼻骨に沿ってセンターパッドを貼り付ける。
 - ・ベロクロパッドの剥離紙を剥がし、接着面を下にしてテープの上から貼り付ける。
 - ・金属面のスプリントの固定面を下にして、ベロクロパッドの上から当て、形を整える。
3. 使用後
本品の廃棄にあたっては、該当する法令を遵守して廃棄する。