

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー JMDNコード 16350000



コー・STO-Kトレー

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

（形状）

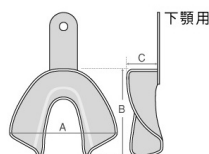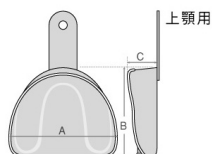

（型番）＊

上顎用	単位:mm		
トレー No	A	B	C
#U-1-0	60.3	47.6	11.1
#U-2-0	65.1	50.8	11.1
#U-3-0	68.3	57.2	11.1
#U-4-0	74.6	60.3	12.7

#U-1-S	60.3	50.8	11.1
#U-2-S	76.2	60.3	11.1
#U-3-S	82.6	58.7	12.7

#U-1-T	60.3	50.8	9.5
#U-2-T	66.7	57.2	11.1
#U-3-T	76.2	68.3	12.7

下顎用	単位:mm		
トレー No	A	B	C
#L-1-0	57.2	46.0	7.9
#L-2-0	60.3	46.0	6.4
#L-3-0	66.7	52.4	6.4
#L-4-0	69.9	57.2	7.9

#L-1-S	61.9	44.5	7.9
#L-2-S	63.5	47.6	7.9
#L-3-S	66.7	47.6	7.9
#L-4-S	69.9	57.2	9.5
#L-5-S	74.6	57.2	9.5

#L-1-T	57.2	42.9	7.9
#L-2-T	60.3	50.8	7.9
#L-3-T	65.1	54.0	7.9
#L-4-T	71.4	57.2	7.9

（原材料）

黄銅合金（70/30 黄銅）

【使用目的、効能又は効果】

無歯顎の印象採得のために使用する。

【操作方法又は使用方法等】

- ①患者の口腔サイズに合ったトレーを選択する。
- ②印象材をトレーに盛り付けて口腔内に装着する。
- ③印象材の硬化終了後、トレーを口腔内から取り出し、歯科用石こうを用いて印象から模型を作製する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③材質の異なる金属製器具と一緒に洗剤に長時間浸漬すると、化学的反応によりメッキが傷むことがある。
- ④乾熱滅菌は行わないこと。
- ⑤化学薬品や殺菌剤（例：酸性水や次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤等）は種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。

- ⑥患者の口腔サイズに合ったトレーがない場合等で変形させる場合は、指で行うこと。ペンチ等の使用によりメッキが剥がれることがある。
- ⑦すすぎが不十分であると、高圧蒸気滅菌により変色することがあるので注意すること。
- ⑧金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面に傷をつけるので、洗浄時に使用しないこと。
- ⑨消毒を行う時は、グルタラル製剤は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（保管方法）

本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ①トレーを洗浄するときはトレーから印象材を取り除き、トレークリーナー（デントクラフトトレークリーナー、コートレークリーナーを推奨）を温水で溶かした溶液に15～30分浸漬する。
- ②トレーに残った印象材は軟毛のブラシを用いてきれいに取り除く。
- ③トレーを洗浄後、トレークリーナーや洗浄剤が残らないよう、流水下で丁寧にすすぎを行う。
- ④トレーを乾燥させ、滅菌バックに入れる。
- ⑤滅菌は、121℃で20～30分又は132℃で5～20分の高圧蒸気滅菌を行う。乾燥工程は行わないこと。
- ⑥保管するときは、十分に乾燥させること。

【包装】

セット：#U-1-0, #U-2-0, #U-3-0, #U-4-0, #L-1-0, #L-2-0, #L-3-0, #L-4-0 各1個、合計8個入り

単品：1個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ジーシー**

住所：〒110-8507

東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電話番号：03-3845-2931

FAX番号：03-3841-8204

製造元：ジーシーアメリカ

GC America Inc.（国名：アメリカ合衆国）