

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレー JMDN コード 16350000



ボーダーロックトレー

【禁忌・禁止】

本品の原材料に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

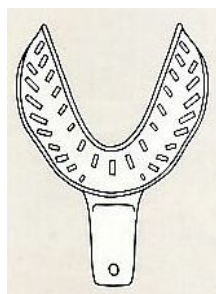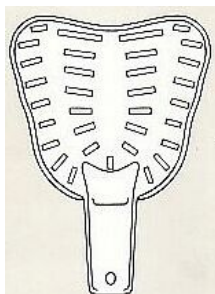

(型番)

上顎用	単位 mm		
トレーNo.	長さ	幅	柄
U31	62	52	32
U32	66	55	32
U33	69	59	32
U34	71	61	32
U35	80	65	32

下顎用	単位 mm		
トレーNo.	長さ	幅	柄
L21	49	59	32
L22	52	62	32
L23	55	66	32
L24	57	70	32
L25	59	71	32

2. 原材料

P P S 樹脂成型品

3. 付属品

専用キャリパー、測定用プレート

【使用目的、効能又は効果】

無歯顎の印象採得のために使用する。

【操作方法又は使用方法等】

- ①患者の口腔サイズを専用キャリパーと測定用プレートを
使用して測定する。
- ②患者の口腔サイズに合ったトレーを選択する。
- ③印象材をトレーに盛り付けて口腔内に装着する。
- ④印象材の硬化終了後、トレーを口腔内から取り出し、歯
科用石こうを用いて印象から模型を作製する。
- ⑤印象を口腔内から取り出すときは、患者の頭部を保持し
ながら、臼歯方向に押し込むようにして外す。
- ⑥印象の消毒を行う場合は、印象材の添付文書の消毒方法
に従って行うこと。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③乾熱滅菌は行わないこと。

- ④化学薬品や殺菌剤（例：酸性水や次亜塩素酸ナトリウ
ム等の塩素系消毒剤等）によっては、トレーの表面を
変化させたり、腐食することがあるので注意すること。
- ⑤すすぎが不十分であると、高圧蒸気滅菌により変色す
ることがあるので注意すること。
- ⑥金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面に傷
をつけるので、洗浄時に使用しないこと。
- ⑦消毒を行う時は、グルタラル製剤は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

本品の使用によりアレルギー反応等の異常を認めた場
合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせる
こと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(保管方法)

本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に
保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ①トレーを洗浄するときはトレーから印象材を取り除
き、トレークリーナー（デントクラフトトレークリー
ナー、コートレークリーナーを推奨）を温水で溶かし
た溶液に 15～30 分浸漬する。
- ②トレーに残った印象材は軟毛のブラシを用いてきれい
に取り除く。
- ③トレーを洗浄後、トレークリーナーや洗浄剤が残らな
いよう、流水下で丁寧にすすぎを行う。
- ④滅菌時は、滅菌バックに入れるか、又はトレーライナ
ーを敷いて行う。滅菌は 132℃で 5～20 分の高圧蒸気
滅菌を行う。乾燥工程は行わないこと。
- ⑤保管するときは、十分に乾燥させること。

【包装】

セット：各 1 個、合計 10 個及び付属品入り
単 品：1 個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材営業本部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：克蘭社
Clan Dental Products (国名：オランダ)