

医療用品（3）手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋 JMDN コード：70911000

デンタグローブノーパウダー ニトリル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は使い捨てなので再使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

1.

種 類：2 種
形 状：直指形 S、平手タイプ
表面仕上げ：粗面(T)、パウダーなし
原 材 料：アクリルニトリルブタジエンゴム

（外観及び寸法）

サイズ	掌部の幅 mm	全長 mm
SS	75±5	240
S	80±5	240
M	95±5	240
L	106±5	240

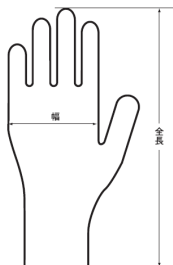

2. 原理

対象物と手が直接接触しないようにゴム製手袋で手を覆う。

【使用目的、効能又は効果】

歯科の診察、治療及び処置に用いる（手術を除く）。

【品目仕様等】

（老化前）

- ・引張強さ : 14MPa 以上
- ・切断時伸び : 500% 以上

（老化後）

- ・引張強さ : 14MPa 以上
- ・切断時伸び : 400% 以上

検査水準 S-2、AQL4.0（寸法、物性について）

【操作方法又は使用方法等】

手指を洗浄し、手指で手袋の表面をさわらないように装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②原材料の添加物である加硫促進剤、安定剤によりまれに赤み、はれ、痒み等の症状が現れる場合があるので、このような症状が現れた場合は使用を中止すること。
- ③油類、薬品、溶剤によっては手袋を膨潤させたり浸透するものがあるので、使用に際して注意すること。
（過酸化水素水やフェノールの扱いには適さない。）
- ④ピンホールが無いか観察して使用すること。

2. 重要な基本的注意

- ①製品に損傷や汚染等の異常が認められる場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（保管方法）

- ①品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管すること。
- ②本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（使用期限）

製造より 35 ヶ月。（使用期限は自己認証〔当社データ〕による。）

※使用期限は外箱に記載されている。

【包装】

1 箱 150 枚入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：ウェアセーフ（マレーシア）エスディーエヌ
ビーエイチディー
WEAR SAFE(MALAYSIA) SDN.BHD.
（国名：マレーシア）