

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄剤注入用具 70463000

ウロバック エバキューエータ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 適用対象(患者)


- * (1) ウロバック エバキューエータ(以下、本品という)は附属品のチューブに天然ゴム(ラテックス)を使用している。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。
- (2) 本品は、ラテックスに対するアレルギーがある患者には使用しないこと。

2. 使用禁止


再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

＜ウロバック エバキューエータ＞

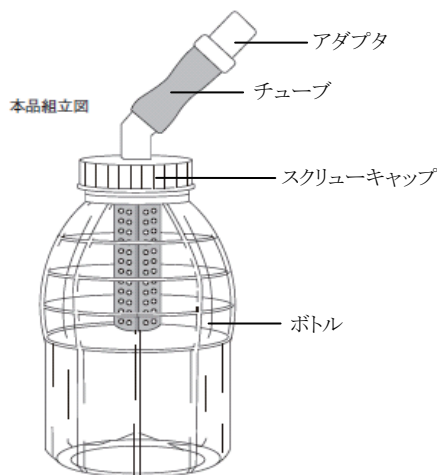

＜キャップ＞

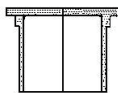

＜主な原材料＞

エバキューエータ(ボトル、スクリーキャップ):ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン
附属品(チューブ、アダプタ):天然ゴムラテックス、ポリプロピレン

【使用目的、効能又は効果】

洗浄剤を注入する器具である。

【品目仕様等】

漏れ試験:30秒以上、24-31kPa(3.5-4.5psi)の圧力をかけたとき、漏れを生じない。

【操作方法又は使用方法等】

●使用前の準備

- (1) レゼクトスコープ(本品に含まれない)のサイズに適合するアダプタを選択する。
- (2) アダプタのもう一方の端をチューブへしっかりと挿入し、チューブをスクリーキャップ口へ接続する。

●使用方法

＜ボトルの充填方法＞

- (1) スクリーキャップを手で閉める。
- (2) ボトルを握り空気漏れをテストする。空気漏れがある場合は、スクリーキャップをややきつめに締め、チューブが確実に接続されているかどうかを確認する。それでもさらに漏れがある場合は、本品を使用しないこと。
- (3) 本品を逆さにし、アダプタを灌流液の中へ浸ける。ボトルを握って空気を排除した後、手を緩めてボトルに灌流液を満たす。空気が完全に排除されるまでこの操作を繰り返す。

＜排出方法＞

- (1) アダプタをレゼクトスコープのシースへ接続する。このとき、内側に向けてしっかりと押す。
- (2) 膀胱を適量の灌流液で満たす。
- (3) ボトルを交互に握ったり緩めたりすることで、組織を吸引する。組織がそれ以上本品へ吸引されなくなるまで継続する。チューブ及びアダプタ内の組織は、膀胱内へ逆流することがあるが、ボトル内の組織は、膀胱へ逆流することはない。
- (4) レゼクトスコープで膀胱底の端から端までを観察し、膀胱内の異物を全て吸引する。1回の手技で全組織の回収が困難な場合は、本品を空にして新たに灌流液を再充填し、排出手順を繰り返しても良い。

＜後処理＞

- (1) 手技完了後には、全組織がボトル内に回収される。灌流液を排出するには、ボトルを逆さにしてゆっくりと握り締める。
- (2) 回収した組織を取り出すには、スクリーキャップを外して組織を適切な容器に移す。
- (3) 組織は本品に入ったままでも運ぶことが出来る。スクリーキャップ口からチューブを取り外し、その口を添付のキャップでしっかりと密閉する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は1回限りの使用とし、再使用、再処理又は再滅菌は行わないこと。[医療機器の構造上、支障が生じる可能性があるとともに、医療機器の故障、ひいては故障が原因となって患者の傷害、疾病あるいは死亡が引き起こされる可能性がある。また、医療機器が汚染される可能性とともに、患者の感染や交差感染が引き起こされる可能性がある。また、医療機器が汚染された場合、結果的に患者の傷害、疾病あるいは死亡につながる可能性がある。]
- (2) 本品は、エチレンオキシドガスによる滅菌済みの状態で供給される。滅菌包装が破損している場合は、本品を使用しないこと。

- ③ ポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出するおそれがあるので注意すること。
- ④ 本品は附属品のチューブにおいて、天然ゴム製ラテックスを含有しており、個人によってはその素材に対してアレルギー反応を起こす場合がありますので、注意すること。
- ⑤ 手技を実施する前に、接続部は全て十分締めておくように注意すること。
- ⑥ 体液に接触する可能性がある場合は、適切で安全な処置をとること。

2. その他の注意

使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規則に従って、製品及び包装を廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。有機溶剤、電離放射線又は紫外線に曝さないこと。

2. 有効期間・使用の期限

本品は、包装上に記載されている「使用期限」までに使用すること。

【包装】

10個／箱入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

** 製造販売業者:

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
電話番号:03-6853-1000

外国製造所:

米国 ボストン・サイエンティフィック コーポレーション
[BOSTON SCIENTIFIC CORP.]