



* 1 0 9 - 0 3 8 *

2024年 6 月（第1版）

届出番号 13B1X00062SPC016

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療用スポンジ（JMDN：13695000）
メドライン スポンジスティック

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止 [感染症の恐れがあるため]
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 構成

本品は、スティック付のウレタンスポンジである。

(1) イエロー

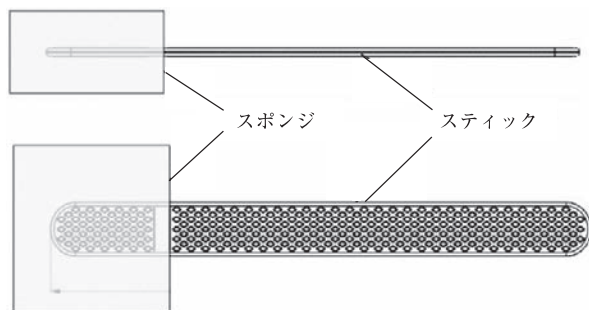

(2) ブルー

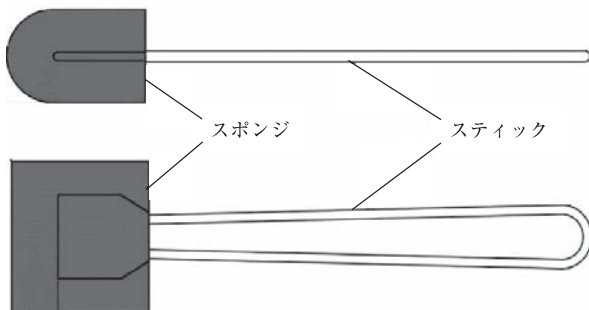

2. 原理

スポンジ部分の毛細管現象を利用して、患部に医薬品等を塗布する。

【使用目的又は効果】

本品は、身体部位に薬物を塗布するために用いる。

【使用方法等】

スティックを手で持ち、スポンジ部分で医薬品等を適量吸収させ、塗布する。

※使用後は、各病院のプロトコルに従って適正に廃棄すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品の未滅菌品を使用する際は、使用前に必ずエチレンオキシドガス滅菌を行うこと。
2. 本品又は本品の原材料に過敏な人、又はアレルギー反応を有する人は使用しないでください。

<その他の注意>

1. 滅菌済みの本品は、包装の破損等がない限り無菌性は保証されていますが、使用時に包装が破損または汚損している場合には使用しないでください。
2. 開封後、直ちに使用してください。
3. 次亜塩素酸塩液や過酸化水素液等の酸化剤との併用はしないでください。（ポリウレタン成分を分解することがあるため）
4. ブルーを使用する場合は、高濃度アルコールを含む消毒液（CHG等）との併用はしないでください。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：

1. 化学薬品、有機溶剤の保管場所や腐食性ガスの発生する場所には保管しないでください。
2. 水濡れに注意し、直射日光、オゾン、紫外線、熱源、X線、高温多湿を避けて保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

メドライン・ジャパン合同会社

電話 (03) 5842-8800