

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 綿状パッド 32572000

ヘムコン デンタル ドレッシング™ HemCon Dental Dressing

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用、再滅菌はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、キトサン及び酢酸を含むパッドから構成される。

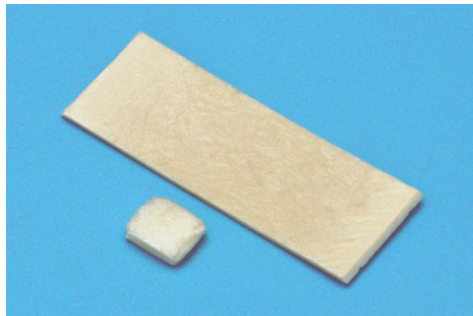

2. 寸法

本品のサイズは下記のとおりである。（公差：±10%）

- (1) 10mm × 12mm 厚さ：3.5mm
- (2) 25mm × 70mm 厚さ：1.15mm

3. 原理

本品を出血面(部位)に適応すると、プラス電荷のキトサンにマイナス電荷の赤血球及び血小板が引き寄せられて凝固し、止血される。

【使用目的、効能又は効果】

口腔内止血のために、手術等に使用する。また、一時的に口腔粘膜組織を保護する。



【品目仕様等】

- ・生物学的安全性：適合すること。
- ・無菌性保証水準(SAL)： 10^{-6} に適合すること。



【操作方法又は使用方法等】

1. 滅菌包装を開封し、本品を取り出してください。



2. 必要であれば、本品を出血面(部位)にあわせて適当な大きさに切ってください。

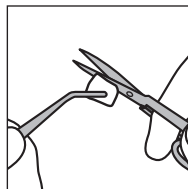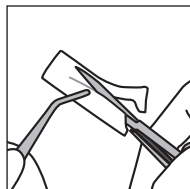

3. 少量の血液を残し、ピンセット等で本品を直接、出血面(部位)に接着させてください。この時、出血面(部位)を包み込んだりしないようにしてください。

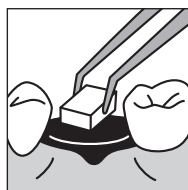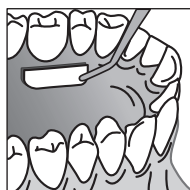

4. 出血面(部位)を圧迫し、しばらく押えて止血してください。

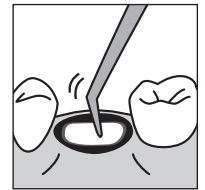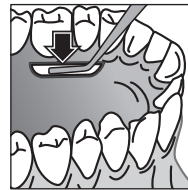

5. 48 時間以内に水で洗い流して、本品を取り除いてください。

【注】本品は酢酸が含まれるため、においがありますが、製品に問題はありませ

廃棄

使用後は医療廃棄物、又は地域の指定に従って処理してください。

【使用上の注意】

- ・包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- ・本品を留置したまま縫合しないこと。
- ・本品は単回使用製品であり、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- ・再滅菌しないこと。
- ・本品使用中に過敏症状が現れた場合には使用を中止し、適切な治療を行うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
 - ・室温で保管すること。
2. 使用期限
 - ・包装に表示の使用期限内に使用すること。
 - 〔自己認証(製造元データ)による〕

【包装】

5 枚／1 箱、12 枚／1 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町 10-11
電話 (03) 3663-2351 (代表)

発売元
ゼリア商事株式会社
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 9-7

製造元
ヘムコン メディカル テクノロジー
HemCon Medical Technologies, Inc.
アメリカ合衆国