

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 31836030
ジンマー プラスチック コーピング

再使用禁止

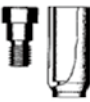
【禁忌・禁止】

- ・ 歯科における技工以外の用途に用いないこと。
- ・ 本品を落下させるなど強い衝撃を与えない、また乱暴に取り扱わないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品の構成品は以下のとおり。

① インテグラル/オムニロック インプラント システム

品番	製品名、規格	形状
0724	ワキシングスリーブ 3.25 / 4.0	
0948	パンヘッドコロナルスクリュー 3.25	
0949	パンヘッドコロナルスクリュー 4.0	
0950	プラスチックキャストブルアバット 4.0	
0951	プラスチックキャストブルアバット 3.25	

② スプライン インプラント システム

品番	製品名、規格	形状
1645	ショルダーアバットワキシングスリーブ 3.25 / 4.0	
1648	ショルダーアバットワキシングスリーブ 5.0	
1661 1663	ダイレクトプラスチックコーピング 4.0	
1662 1664	ダイレクトプラスチックコーピング 5.0	

材質;

本体: プラスチック (アセタール樹脂)

付属スクリュー: チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、修復物等の製作に用いる既製パターンである。
歯科用インプラントの上部構造の製作に使用する。

【使用方法等】

- (1) 本品を作業模型上に取り付ける。
- (2) 個別の症例に応じて削り、形態を修正する。
- (3) 通法に従い、ワックスアップとフレームワークの鋳造を行う。
- (4) フレームワークを模型から取り外す。

【使用上の注意】

- (1) 術前の正確な診査・診断に基づき、最適な製品を選択すること。
- (2) 埋入したインプラントボディーのサイズに適応した製品を選択すること。また、上部構造物との関係を考慮すること。
- (3) 本品は未滅菌品なので、必要に応じて滅菌を行うこと。
ただし、本体を滅菌する場合は、プラスチックの融点を考慮し170℃を超える高温での滅菌は行わないこと。
また、変形の恐れがあるので、直に滅菌器の底に置かずステンレスかごを使用するか、布・滅菌バック等で覆うこと。

【保管方法及び有効期間等】

包装を開封せず、室温で塵や湿気を避けて保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ジンヴィ・ジャパン合同会社
東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL: 03-4333-9900

製造業者: バイオメット スリーアイ インク (Biomet 3i Inc.)
アメリカ合衆国