

インプレッションコンポーネンツ2
インプレッションコンポーネンツ2S

再使用禁止 (トライイン、ツール類を除く)


【禁忌・禁止】

- 1. 歯科における印象採得、歯科技工所等での作業模型製作以外に使用しないこと。
- 2. 劣化や異常が見られた場合は、本品の使用を中止すること。
- 3. 本品を落下させるなど強い衝撃を与えない、また乱暴に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品の構成品の形状、構造は以下のとおり。

1) トランスファー

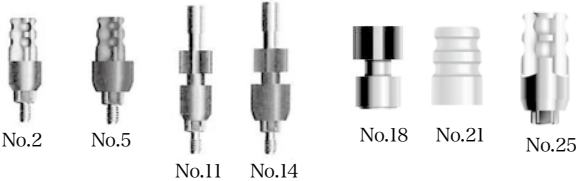

2) インプレッションキャップ



3) アナログ



4) ワキシングスクリュー



5) ワキシングコーピング



6) トライイン



7) ツール類



No	製品番号	製品名	滅菌※	再使用
15	DHT4/6	ダイレクトトランスファーP4.5/6.5mmフレア	済	不可
16	DHTS	リテーニングスクリュー-DHTS	済	不可
17	DHTS2	リテーニングスクリュー-DHTS2	済	不可
18	ACTDT	テーパーDABダイレクトトランスファー	済	不可
19	ACTIT	テーパーDABインダイレクトトランスファー	済	不可
20	SCDT/4	SCダイレクトトランスファー	済	不可
21	BAT	ボールABトランスファー-SV(2個入)	未	不可
22	OPT/5	インダイレクトトランスファーOcta_P4.8/5.2mm	済	不可
23	OPT/6	インダイレクトトランスファーOcta_P4.8/6.0mm	済	不可
24	OPTS	インダイレクトトランスファーOcta交換用スクリュー	済	不可
25	SPMT	インダイレクトトランスファーナロー-Hex_P3.8/4.6mm	済	不可
26	HLTSI	インダイレクトトランスファーナロー-Hex用交換スクリュー	済	不可
27	OPBAT	ボールABトランスファー-SP(2個入)	未	不可
2) インプレッションキャップ				
28	ZOCIMP3S	カントウアーインプレッションCAP_3.5mmフレア	済	不可
29	ZOCIMP3A	カントウアーインプレッションCAPi7_3.5mmフレア	済	不可
30	ZOCIMP4S	カントウアーインプレッションCAP_4.5mmフレア	済	不可
31	ZOCIMP4A	カントウアーインプレッションCAPi7_4.5mmフレア	済	不可
32	ZOCIMP5S	カントウアーインプレッションCAP_5.5mmフレア	済	不可
33	ZOCIMP5A	カントウアーインプレッションCAPi7_5.5mmフレア	済	不可
34	ZOCIMP6S	カントウアーインプレッションCAP_6.5mmフレア	済	不可
35	ZOCIMP6A	カントウアーインプレッションCAPi7_6.5mmフレア	済	不可
36	SAIMP4	ショートインプレッションCAP_4.5mmフレア	済	不可
37	SAIMP5	ショートインプレッションCAP_5.5mmフレア	済	不可
38	SAIMP6	ショートインプレッションCAP_6.5mmフレア	済	不可
3) アナログ				
39	IA2	インプラントアナログP3.5 2mmHEX	未	不可
40	IA3	インプラントアナログP3.5	未	不可
41	IA4	インプラントアナログP4.5	未	不可
42	IA5	インプラントアナログP5.7	未	不可
43	ZOANA3S	カントウアーABアナログ(プラスチック)3.5mmフレア	未	不可
44	ZOANA3A	カントウアーABアナログi7(プラスチック)3.5mmフレア	未	不可
45	ZOANA4S	カントウアーABアナログ(プラスチック)4.5mmフレア	未	不可
46	ZOANA4A	カントウアーABアナログi7(プラスチック)4.5mmフレア	未	不可
47	ZOANA5S	カントウアーABアナログ(プラスチック)5.5mmフレア	未	不可
48	ZOANA5A	カントウアーABアナログi7(プラスチック)5.5mmフレア	未	不可
49	ZOANA6S	カントウアーABアナログ(プラスチック)6.5mmフレア	未	不可
50	ZOANA6A	カントウアーABアナログi7(プラスチック)6.5mmフレア	未	不可
51	TCANA3S	カントウアーABアナログストレート(チタン)3.5mmフレア	未	不可
52	TCANA3A	カントウアーABアナログアングル(チタン)3.5mmフレア	未	不可
53	TCANA4S	カントウアーABアナログストレート(チタン)4.5mmフレア	未	不可
54	TCANA4A	カントウアーABアナログアングル(チタン)4.5mmフレア	未	不可
55	TCANA5S	カントウアーABアナログストレート(チタン)5.5mmフレア	未	不可
56	TCANA5A	カントウアーABアナログアングル(チタン)5.5mmフレア	未	不可
57	TCANA6S	カントウアーABアナログストレート(チタン)6.5mmフレア	未	不可
58	TCANA6A	カントウアーABアナログアングル(チタン)6.5mmフレア	未	不可
59	SAANA4	ショートABアナログ4.5mmフレア	未	不可
60	SAANA5	ショートABアナログ5.5mmフレア	未	不可
61	SAANA6	ショートABアナログ6.5mmフレア	未	不可

No	製品番号	製品名	滅菌※	再使用
1) トランスファー				
1	HLT3/3	インダイレクトトランスファーP3.5	済	不可
2	HLT3/4	インダイレクトトランスファーP3.5/4.5mmフレア	済	不可
3	HLT3/5	インダイレクトトランスファーP3.5/5.5mmフレア	済	不可
4	HLT4/4	インダイレクトトランスファーP4.5/ノフレア	済	不可
5	HLT4/5	インダイレクトトランスファーP4.5/5.5mmフレア	済	不可
6	HLT4/6	インダイレクトトランスファーP4.5/6.5mmフレア	済	不可
7	HLT5/6	インダイレクトトランスファーP5.7/6.5mmフレア	済	不可
8	HLTE	エクステンションスクリュー	済	不可
9	HLTS2	リテーニングスクリュー-HLTS2	済	不可
10	DHT3/3	ダイレクトトランスファーP3.5	済	不可
11	DHT3/4	ダイレクトトランスファーP3.5/4.5mmフレア	済	不可
12	DHT3/5	ダイレクトトランスファーP3.5/5.5mmフレア	済	不可
13	DHT4/4	ダイレクトトランスファーP4.5	済	不可
14	DHT4/5	ダイレクトトランスファーP4.5/5.5mmフレア	済	不可

No	製品番号	製品名	滅菌※	再使用
62	ACTR	テーパードABアナログ	未	不可
63	SCR	SCアナログ	未	不可
64	BAR	ボールABアナログSV	未	不可
65	OPR	インプラントアナログOcta_P4.8	未	不可
66	SPMR	インプラントアナログHex_P3.8	未	不可
67	OPBAR	ボールABアナログSP	未	不可
68	OPAR	ナローアバットメントショルダーアナログP4.8	未	不可
69	SPMAR	ナローアバットメントショルダーアナログP3.8	未	不可
70	LATSV35	TSVインプラントデジタルラボアナログ3.5mm (p)	未	不可
71	LATSV45	TSVインプラントデジタルラボアナログ4.5mm (p)	未	不可
72	LATSV57	TSVインプラントデジタルラボアナログ5.7mm (p)	未	不可
73	LATTSV	TSVインプラントデジタルラボアナログプレースメントツール	未	可
4) ワキシングスクリュー				
74	SCWS	ワキシングスクリューSCWS	未	不可
75	MTWSD	ワキシングスクリューMTWSD	未	不可
76	WSX	ワキシングスクリューWSX	未	不可
5) ワキシングコーピング				
77	ZOCWAX3S	カントウアーワキシングコーピング3.5mmフレア	未	不可
78	ZOCWAX3A	カントウアーワキシングコーピング17_3.5mmフレア	未	不可
79	ZOCWAX4S	カントウアーワキシングコーピング4.5mmフレア	未	不可
80	ZOCWAX4A	カントウアーワキシングコーピング17_4.5mmフレア	未	不可
81	ZOCWAX5S	カントウアーワキシングコーピング5.5mmフレア	未	不可
82	ZOCWAX5A	カントウアーワキシングコーピング17_5.5mmフレア	未	不可
83	ZOCWAX6S	カントウアーワキシングコーピング6.5mmフレア	未	不可
84	ZOCWAX6A	カントウアーワキシングコーピング17_6.5mmフレア	未	不可
85	SAWAX4	ショートワキシングコーピング4.5mmフレア	未	不可
86	SAWAX5	ショートワキシングコーピング5.5mmフレア	未	不可
87	SAWAX6	ショートワキシングコーピング6.5mmフレア	未	不可
88	OPC	プラスチックトランスファー/ワキシングコーピングP4.8	未	不可
89	SPMC	プラスチックトランスファー/ワキシングコーピングP3.8	未	不可
6) トライイン				
90	ZOAT34	カントウアーABトライインP3.5/4.5mmフレア	未	可
91	ZOAT45	カントウアーABアバットメントトライインP4.5/5.5mmフレア	未	可
92	ZOAT56	カントウアーABトライインP5.7/6.5mmフレア	未	可
—	ZOATKIT	カントウアーABトライインキット	上記No.85～87のセット品	
7) ツール類				
93	PR	テーパードアバットメントコーピング用リマー	未	可
94	SCHST	SCアングルDABトップツール	未	可
95	CAI	キャップアタッチメントインスツルメントセット	未	可
96	ABTH	アバットメントホルダー	未	可

※滅菌欄：済＝γ線滅菌済み、未＝未滅菌

・原材料：チタン合金、アルミニウム、ステンレス鋼
フッ素樹脂、ナイロン、液晶ポリマー、アセタール樹脂等

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具である。指定のインプラントの印象採得及び作業模型製作等に使用する。

【使用方法等】

- (1) 印象採得部位に適応したコンポーネンツを選択する。
- (2) 通法に従い、選択したコンポーネンツを口腔内のフィクスチャに装着させて印象採得を行う。
- (3) 口腔内より印象採得後のコンポーネンツを取り外し、アナログに装着して印象面に戻し、通法に従い作業模型を製作する。

【使用上の注意】

- 1. 重要な基本的注意
 - (1) 本品を患者に使用している際は常に患者を観察し、安全を確保すること。
 - (2) 術前に行った正確な診査・診断に基づいた顎骨、その他のパラメーターにより、印象採得部位に適切なコンポーネンツを選択すること。
 - (3) 埋入したフィクスチャの長さ、太さに適応した製品を選択すること。また、上部構造物との関係をきちんと把握しておくこと。
- 2. 一般的注意
 - (1) 未滅菌品については、必要に応じて使用前に滅菌を行うこと。
 - (2) 滅菌品(γ線滅菌済み)は使用時に再滅菌する必要はないが、有効期間が過ぎたもの、一度開封したものについては、滅菌して使用すること。
 - (3) 滅菌は、加熱滅菌(オートクレーブ滅菌等)を行う。
滅菌条件は飽和蒸気中121℃・80分が推奨される。操作方法は加熱滅菌器製造者の指示に従うこと。
 - (4) 加熱滅菌後の未乾燥保管は避け、使用直前(使用前日もしくは当日)に滅菌すること。
 - (5) 170℃を超える高温での滅菌は、作動部の硬度を減じ、耐用年数を短くする恐れがあるので行わないこと。
 - (6) ケミクレーブ(高圧アルコール蒸気滅菌)は、製品の品質を損なう恐れがあるため、行わないこと。
 - (7) 滅菌処理前には器具の洗浄、消毒を行うこと。
 - (8) 微生物汚染による患者感染を防止するため、使用後は直ちに、洗浄、消毒し保管すること。
 - (9) 超音波洗浄を行う場合は、器具の接触を避けて十分に間隔をあけるか、1つずつガーゼ等でくみ洗浄すること。
 - (10) 洗浄、消毒処理後は水で完全にすすぎ、十分乾燥のうえ保管すること。
 - (11) 器具の損傷を防ぐため、洗浄および消毒処理中の器具同士の接触に気をつけること。
 - (12) 錆防止のため、耐食性の洗浄剤及び消毒剤を使用すること。
 - (13) 特殊な器具に対する洗浄剤及び消毒剤の適性、使用方法、使用時間等は、説明書を確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- (1) 本品は、包装を開封せず、室温で塵や湿気を避けて保管すること。
- (2) 器具は使用後直ちに洗浄・消毒し、十分に乾燥の上、衛生面が十分保たれた容器に保管すること。
- (3) 滅菌後の未乾燥保管は劣化の原因になるので、避けること。

有効期間等

- (1) 耐用期間：本品は使用毎に消耗・摩耗されるため、各製品・骨質・使用方法等により異なる。
- (2) 滅菌の保証期限：包装に表示（滅菌日から5年間）

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】※

製造販売業者：ジンヴィ・ジャパン合同会社
東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL：03-4333-9900

製造業者：バイオメット スリーアイ インク (Biomet 3i Inc.)
アメリカ合衆国