

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 手術用ドリルビット JMDN コード: 32390000

テーパーード ナビゲーター サージカルキット

【形状・構造及び原理等】

| 品番      | 種類                     |
|---------|------------------------|
| SGTIKIT | テーパーード ナビゲーター サージカルキット |

キット内容物(1～69) ※単品販売もされる。

|    | 品番       | 数量 | 種類                                                     |
|----|----------|----|--------------------------------------------------------|
| 1  | SGTTRAY  | 1  | テーパーード ナビゲーター サージカル トレー                                |
| 2  | SGTTP4   | 1  | テーパーード ナビゲーター ティッシュパッチ<br>4.1mm (D)                    |
| 3  | SGTTP5   | 1  | テーパーード ナビゲーター ティッシュパッチ<br>5.0mm (D)                    |
| 4  | SGTCP4S  | 1  | テーパーード ナビゲーター コーティカル ハーフオレーター<br>4.1mm (D) ショート        |
| 5  | SGTCP4L  | 1  | テーパーード ナビゲーター コーティカル ハーフオレーター<br>4.1mm (D) ロング         |
| 6  | SGTCP5S  | 1  | テーパーード ナビゲーター コーティカル ハーフオレーター<br>5mm (D) ショート          |
| 7  | SGTCP5L  | 1  | テーパーード ナビゲーター コーティカル ハーフオレーター<br>5mm (D) ロング           |
| 8  | SGTD19A  | 1  | テーパーード ナビゲーター ツイストドリル<br>1.9mm (D) × a (L)             |
| 9  | SGTD19B  | 1  | テーパーード ナビゲーター ツイストドリル<br>1.9mm (D) × b (L)             |
| 10 | SGTD19C  | 1  | テーパーード ナビゲーター ツイストドリル<br>1.9mm (D) × c (L)             |
| 11 | SGTD19D  | 1  | テーパーード ナビゲーター ツイストドリル<br>1.9mm (D) × d (L)             |
| 12 | SGTD19E  | 1  | テーパーード ナビゲーター ツイストドリル<br>1.9mm (D) × e (L)             |
| 13 | SGTD19F  | 1  | テーパーード ナビゲーター ツイストドリル<br>1.9mm (D) × f (L)             |
| 14 | SGTD19G  | 1  | テーパーード ナビゲーター ツイストドリル<br>1.9mm (D) × g (L)             |
| 15 | MSGTCDS  | 1  | テーパーード ナビゲーター カウンターシンク トドリル<br>3.4mm (D) × S (L)       |
| 16 | MSGTCDL  | 1  | テーパーード ナビゲーター カウンターシンク トドリル<br>3.4mm (D) × L (L)       |
| 17 | SGTCD4S  | 1  | テーパーード ナビゲーター カウンターシンク トドリル<br>4.1mm (D) × S (L)       |
| 18 | SGTCD4L  | 1  | テーパーード ナビゲーター カウンターシンク トドリル<br>4.1mm (D) × L (L)       |
| 19 | SGTCD5S  | 1  | テーパーード ナビゲーター カウンターシンク トドリル<br>5mm (D) × S (L)         |
| 20 | SGTCD5L  | 1  | テーパーード ナビゲーター カウンターシンク トドリル<br>5mm (D) × L (L)         |
| 21 | MSGTD85S | 1  | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>3.25mm (D) × 8.5mm (L) ショート |
| 22 | MSGTD10S | 1  | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>3.25mm (D) × 10mm (L) ショート  |
| 23 | MSGTD11S | 1  | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>3.25mm (D) × 11mm (L) ショート  |
| 24 | MSGTD13S | 1  | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>3.25mm (D) × 13mm (L) ショート  |
| 25 | MSGTD15S | 1  | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>3.25mm (D) × 15mm (L) ショート  |
| 26 | MSGTD85L | 1  | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>3.25mm (D) × 8.5mm (L) ロング  |
| 27 | MSGTD10L | 1  | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>3.25mm (D) × 10mm (L) ロング   |


|    |          |   |                                                      |
|----|----------|---|------------------------------------------------------|
| 28 | MSGTD11L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>3.25mm (D) × 11mm (L) ロング |
| 29 | MSGTD13L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>3.25mm (D) × 13mm (L) ロング |
| 30 | MSGTD15L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>3.25mm (D) × 15mm (L) ロング |
| 31 | SGTD485S | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル 4mm (D) ×<br>8.5mm (L) ショート  |
| 32 | SGTD410S | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>4mm (D) × 10mm (L) ショート   |
| 33 | SGTD411S | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>4mm (D) × 11mm (L) ショート   |
| 34 | SGTD413S | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル 4mm (D) ×<br>13mm (L) ショート   |
| 35 | SGTD415S | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル 4mm (D) ×<br>15mm (L) ショート   |
| 36 | SGTD485L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル 4mm (D) ×<br>8.5mm (L) ロング   |
| 37 | SGTD410L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル 4mm (D) ×<br>10mm (L) ロング    |
| 38 | SGTD411L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>4mm (D) × 11mm (L) ロング    |
| 39 | SGTD413L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>4mm (D) × 13mm (L) ロング    |
| 40 | SGTD415L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル 4mm (D) ×<br>15mm (L) ロング    |
| 41 | SGTD585S | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル 5mm (D) ×<br>8.5mm (L) ショート  |
| 42 | SGTD510S | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル 5mm (D) ×<br>10mm (L) ショート   |
| 43 | SGTD511S | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル 5mm (D) ×<br>11mm (L) ショート   |
| 44 | SGTD513S | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>5mm (D) × 13mm (L) ショート   |
| 45 | SGTD515S | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>5mm (D) × 15mm (L) ショート   |
| 46 | SGTD585L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル 5mm (D) ×<br>8.5mm (L) ロング   |
| 47 | SGTD510L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル 5mm (D) ×<br>10mm (L) ロング    |
| 48 | SGTD511L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル 5mm (D) ×<br>11mm (L) ロング    |
| 49 | SGTD513L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>5mm (D) × 13mm (L) ロング    |
| 50 | SGTD515L | 1 | テーパーード ナビゲーター シェービングドリル<br>5mm (D) × 15mm (L) ロング    |
| 51 | SGTDPHT  | 1 | テーパーード ナビゲーター ツイストドリル ボジショニング<br>ハントル                |
| 52 | SGTDPHR  | 1 | テーパーード ナビゲーター リタグションドリル ボジショ<br>ニング ハントル             |
| 53 | MSGIIMS  | 1 | ナビゲーター サージン インフラントマウント<br>3.4mm (D) ショート             |
| 54 | MSGIIML  | 1 | ナビゲーター サージン インフラントマウント<br>3.4mm (D) ロング              |
| 55 | SGIIM4S  | 1 | ナビゲーター サージン インフラントマウント<br>4.1mm (D) ショート             |
| 56 | SGIIM4L  | 1 | ナビゲーター サージン インフラントマウント<br>4.1mm (D) ロング              |
| 57 | SGIIM5S  | 1 | ナビゲーター サージン インフラントマウント<br>5mm (D) ショート               |

|    |         |   |                                             |
|----|---------|---|---------------------------------------------|
| 58 | SGIIM5L | 1 | ナビゲーター サーデン インプラントマウント 5mm (D) ロング          |
| 59 | SGTTAPK | 1 | テーパード ナビゲーター ボーンタップ キット                     |
| 60 | IMMBP   | 1 | サーデン マニュアル ボーンプロファイラー 3.4mm (D) × 4.1mm (P) |
| 61 | IMBP4   | 1 | サーデン マニュアル ボーンプロファイラー 4.1mm (D) × 5mm (P)   |
| 62 | IMBP5   | 1 | サーデン マニュアル ボーンプロファイラー 5mm (D) × 6mm (P)     |
| 63 | MDR10   | 1 | ハントピース コネクター                                |
| 64 | PHD02N  | 1 | ラージヘクスドライバー 17mm (L)                        |
| 65 | RASH3N  | 1 | ラージヘクスドライバースチップ 24mm (L)                    |
| 66 | RE100   | 1 | ラチェット エクステンション 6mm (L)                      |
| 67 | RE200   | 1 | ラチェット エクステンション 15mm (L)                     |
| 68 | CW100   | 1 | オープンエンド レンチ                                 |
| 69 | WR150   | 1 | ラチェット レンチ                                   |

59. テーパード ナビゲーター ボーンタップ キット (SGTTAPK) 内容物

| 品番       | 種類                                          |
|----------|---------------------------------------------|
| SGTTAPT  | テーパード ナビゲーター ボーンタップ トレー                     |
| MSGTT85S | テーパード ナビゲーター タップ 3.25mm(D) × 8.5mm(L) ショート  |
| MSGTT10S | テーパード ナビゲーター タップ 3.25mm(D) × 10mm(L) ショート   |
| MSGTT11S | テーパード ナビゲーター タップ 3.25mm(D) × 11.5mm(L) ショート |
| MSGTT13S | テーパード ナビゲーター タップ 3.25mm(D) × 13mm(L) ショート   |
| MSGTT15S | テーパード ナビゲーター タップ 3.25mm(D) × 15mm(L) ショート   |
| MSGTT85L | テーパード ナビゲーター タップ 3.25mm(D) × 8.5mm(L) ロング   |
| MSGTT10L | テーパード ナビゲーター タップ 3.25mm(D) × 10mm(L) ロング    |
| MSGTT11L | テーパード ナビゲーター タップ 3.25mm(D) × 11.5mm(L) ロング  |
| MSGTT13L | テーパード ナビゲーター タップ 3.25mm(D) × 13mm(L) ロング    |
| MSGTT15L | テーパード ナビゲーター タップ 3.25mm(D) × 15mm(L) ロング    |
| SGTT485S | テーパード ナビゲーター タップ 4mm(D) × 8.5mm(L) ショート     |
| SGTT410S | テーパード ナビゲーター タップ 4mm(D) × 10mm(L) ショート      |
| SGTT411S | テーパード ナビゲーター タップ 4mm(D) × 11.5mm(L) ショート    |
| SGTT413S | テーパード ナビゲーター タップ 4mm(D) × 13mm(L) ショート      |
| SGTT415S | テーパード ナビゲーター タップ 4mm(D) × 15mm(L) ショート      |
| SGTT485L | テーパード ナビゲーター タップ 4mm(D) × 8.5mm(L) ロング      |
| SGTT410L | テーパード ナビゲーター タップ 4mm(D) × 10mm(L) ロング       |
| SGTT411L | テーパード ナビゲーター タップ 4mm(D) × 11.5mm(L) ロング     |
| SGTT413L | テーパード ナビゲーター タップ 4mm(D) × 13mm(L) ロング       |
| SGTT415L | テーパード ナビゲーター タップ 4mm(D) × 15mm(L) ロング       |
| SGTT585S | テーパード ナビゲーター タップ 5mm(D) × 8.5mm(L) ショート     |
| SGTT510S | テーパード ナビゲーター タップ 5mm(D) × 10mm(L) ショート      |
| SGTT511S | テーパード ナビゲーター タップ 5mm(D) × 11.5mm(L) ショート    |
| SGTT513S | テーパード ナビゲーター タップ 5mm(D) × 13mm(L) ショート      |
| SGTT515S | テーパード ナビゲーター タップ 5mm(D) × 15mm(L) ショート      |
| SGTT585L | テーパード ナビゲーター タップ 5mm(D) × 8.5mm(L) ロング      |
| SGTT510L | テーパード ナビゲーター タップ 5mm(D) × 10mm(L) ロング       |
| SGTT511L | テーパード ナビゲーター タップ 5mm(D) × 11.5mm(L) ロング     |
| SGTT513L | テーパード ナビゲーター タップ 5mm(D) × 13mm(L) ロング       |
| SGTT515L | テーパード ナビゲーター タップ 5mm(D) × 15mm(L) ロング       |

基本的形状:

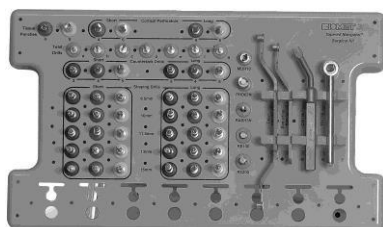

SGTIKIT



SGTDPHR



IMBP4



MDR10



PHD02N



RASH3N




RE100



WR150



CW100

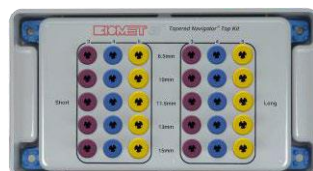

SGTTAPK



MSGTT85S

成分:

|        |                                                                   |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.     | テーパード ナビゲーター サージカル トレー                                            | プラスチック             |
| 2~3.   | テーパード ナビゲーター ティッシュハンチ                                             | ステンレススチール          |
| 4~7.   | テーパード ナビゲーター コーティカル パーフォレーター                                      | ステンレススチール          |
| 8~14.  | テーパード ナビゲーター ツイストリル                                               | ステンレススチール          |
| 15~20. | テーパード ナビゲーター カウンターシンクトリル                                          | ステンレススチール          |
| 21~50. | テーパード ナビゲーター シェーピングドリル                                            | ステンレススチール          |
| 51.    | テーパード ナビゲーター ツイストリル ポジショニング ハンドル                                  | チタン合金              |
| 52.    | テーパード ナビゲーター リダクションドリル ポジショニング ハンドル                               | チタン合金              |
| 53~58. | ナビゲーター サーデン インプラントマウント (シリンダー 部) ナビゲーター サーデン インプラントマウント (スクリュー 部) | ステンレススチール<br>チタン合金 |
| 59.    | テーパード ナビゲーター ボーンタップ キット                                           | チタン合金              |
| 60~62. | サーデン マニュアル ボーンプロファイラー                                             | ステンレススチール          |
| 63.    | ハントピース コネクター                                                      | ステンレススチール          |
| 64.    | ラージヘクスドライバー                                                       | ステンレススチール          |
| 65.    | ラージヘクスドライバースチップ                                                   | ステンレススチール          |
| 66~67. | ラチェット エクステンション                                                    | ステンレススチール          |
| 68.    | オープンエンド レンチ                                                       | チタン合金              |
| 69.    | ラチェット レンチ                                                         | ステンレススチール          |

## 【使用目的又は効果】

1. テーパードナビゲーター サージカル トレー：  
SGTIKIT の内容物を収納する。
- 2～3. テーパードナビゲーター ティッシュ パンチ：  
フラップレス手術のために軟組織を除去するために用いる。
- 4～7. テーパードナビゲーター コーティカル パーフォレーター：  
無歯顎患者の顎骨内に、インプラントを埋入するための形成窩を切削する。
- 8～14. テーパードナビゲーター ツイストドリル：  
無歯顎患者の顎骨内に、インプラントを埋入するための形成窩を切削する。
- 15～20. テーパードナビゲーター カウンターシンクドリル：  
無歯顎患者の顎骨内に、インプラントを埋入するための形成窩を切削する。
- 21～50. テーパードナビゲーター シェーピングドリル：  
無歯顎患者の顎骨内に、インプラントを埋入するための形成窩を切削する。
51. テーパードナビゲーターツイストドリル ポジショニング ハンドル：所定の深度までツイストドリルをガイドするために使用する。
52. テーパードナビゲーターリダクションドリル ポジショニング ハンドル：  
所定の深度までツイストドリルをガイドするために使用する。
- 53～58. ナビゲーター サーテンインプラントマウント：  
サージカルガイドに埋め込まれたマスターチューブを通して、インプラントを埋入するために用いる。
59. テーパードナビゲーター ボンタップキット：  
インプラントにに合わせて歯槽骨を取り除くために用いる。
- 60～62. サーテン マニュアル ボーンプロファイラー：  
インプラントにに合わせて歯槽骨を取り除くために用いる。
63. ハンドピース コネクター：  
インプラント用タップ及びインプラント・マウントの操作に用いる。
64. ラージヘクスドライバー：  
インプラント・マウントのスクリュー及びヘクスタイプのリテイニングスクリューやユニスクリューの着脱、固定に用いる。
65. ラージヘクスドライバー チップ：  
インプラント・マウントのスクリュー及びヘクスタイプのリテイニングスクリューやユニスクリューの着脱、固定に用いる。
- 66～67. ラチェット エクステンション：  
インプラント用タップ及びインプラント・マウントに接続し、緻密骨へのタッピングやインプラント埋入時の最終固定に用いる。
68. オープンエンドレンチ：  
マウントスクリューを取り外す時に、インプラント・マウントを保持するために用いる。
69. ラチェットレンチ：  
インプラントの最終固定時や緻密骨へのタッピング時に、ラチェット・エクステンションと共に用いる。

## 手術用ドリルビットの定義：

手動式又は動力方式の手術用穿孔器に取り付ける器具をいう。適切な速度で回転させると、骨に本品の径と同じ寸法の孔が作製される。通常、「ツイストドリル」型（らせん型）であるが、平坦で斜めの刃先を持つものもある。本品は再使用可能である。

## 【使用方法等】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。【保守・点検に係る事項】参照
2. 各機器の使用方法
  1. テーパードナビゲーター サージカル トレー：  
SGTIKIT の内容物を収納する。高圧蒸気滅菌が可能である。
  - 2～3. テーパードナビゲーター ティッシュパンチ：  
サージカル・ドリリング・ユニットのハンドピースに装着し、軟組織の除去に用いる。
  - 4～7. テーパードナビゲーター コーティカル パーフォレーター：  
サージカル・ドリリングユニットのハンドピースに装着し、無歯顎患者の顎骨内にインプラントを埋入するために形成窩を切削する。
  - 8～14. テーパードナビゲーター ツイストドリル：  
サージカル・ドリリングユニットのハンドピースに装着し、無歯顎患者の顎骨内にインプラントを埋入するために形成窩を切削する。
  - 15～20. テーパードナビゲーター カウンターシンクドリル：  
サージカル・ドリリングユニットのハンドピースに装着し、無歯顎患者の顎骨内にインプラントを埋入するために形成窩を切削する。

- 21～50. テーパードナビゲーター シェーピングドリル：  
サージカル・ドリリングユニットのハンドピースに装着し、無歯顎患者の顎骨内にインプラントを埋入するために形成窩を切削する。
51. テーパードナビゲーター ツイストドリル ポジショニング ハンドル：手指で把持し、上部からツイストドリルを挿入し、所定の深度までツイストドリルをガイドするために用いる。
52. テーパードナビゲーターリダクションドリル ポジショニング ハンドル：  
手指で把持し、上部からツイストドリルを挿入し、所定の深度までツイストドリルをガイドするために用いる。
- 53～58. ナビゲーター サーテン インプラントマウント：  
サージカルガイドに埋め込まれたマスターチューブを通して、インプラントを埋入するために用いる。
59. テーパードナビゲーター ボンタップキット：  
ハンドピース又はラチェットレンチに装着したラチェット・エクステンションに接続し、形成窩のネジ切りに用いる。
- 60～62. サーテン マニュアル ボーンプロファイラー：  
サージカルガイドを取り外した後、手指で把持し、適切にアバットメントが装着できるように、インプラントに合わせて歯槽骨を取り除くために用いる。
63. ハンドピースコネクター：  
ハンドピースに装着し、インプラント用タップ及びインプラント・マウントの操作に用いる。
64. ラージヘクスドライバー：  
手指で把持し、インプラントマウントのスクリュー及びヘクスタイプのリテイニングスクリューやユニスクリューの着脱、固定に用いる。
65. ラージヘクスドライバーチップ：  
ハンドピースに装着し、インプラントマウントのスクリュー及びヘクスタイプのリテイニングスクリューやユニスクリューの着脱、固定に用いる。
- 66～67. ラチェット エクステンション：  
ラチェット・レンチの先端に装着後、インプラント用タップ及びインプラントマウントに接続し、緻密骨へのタッピングやインプラント埋入時の最終固定に用いる。
68. オープンエンドレンチ：  
手指で把持し、先端でインプラントマウントのシリンダーを側面から固定し、インプラントマウントの着脱、固定に用いる。
69. ラチェットレンチ：  
手指で把持し、先端にラチェット・エクステンションを装着し、インプラント用タップ及びインプラントマウントに接続し、緻密骨へのタッピングやインプラント埋入時の最終固定に用いる。

## 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
  - 1) 使用前に必ず滅菌を行うこと。  
・滅菌方法
    - (1) サージカルトレーからバンプブロックを取り外す。サージカルトレーとブロックを柔毛のブラシと弱い洗剤でブラッシング洗浄し、その後十分に水洗いする。
    - (2) サージカルトレーに器具類を置き、残留した洗剤や水道水中の含有銻物を除去するために、バードレーにエチルアルコールを注ぐ。この操作は腐食や白い斑点を予防するために重要である。
    - (3) 外装が破損し器具が汚染されるのを防ぐため、サージカルトレーを紙や滅菌対応のバッグで二重に包む。
    - (4) 132℃～135℃で 40 分間高圧蒸気滅菌を行う。
    - (5) 器具を 30 分間乾燥させる。ただし、乾燥時間は滅菌する物の量によって多少の違いがある。

折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

## 2. 相互作用

### 【併用禁忌・禁止】(併用しないこと)

| 医療機器の名称等     | 臨床症状・措置方法                                  | 機序・危険因子             |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 当社の指定する以外の製品 | 本製品は当社が指定する製品と組み合わせるよう設計されていないため、正しく機能しない。 | 指定外の製品との併用を想定していない。 |
|              | よって、指定外の製品とは組み合わせる使用しないこと。                 |                     |

### 3. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

#### 1) 不具合

・変形、破損、磨耗

#### 2) 有害事象

- ・本品を用いた手術により、局所の浮腫、疼痛、術部の裂開、短期の知覚過敏、血腫あるいは出血が起こる場合がある。
- ・下顎の手術の場合は下唇並びに頬のしびれ、上顎の手術の場合は鼻周囲のしびれが起こるが、殆どの場合は一時的なものである。
- ・歯肉組織の潰瘍、組織反応、あるいは感染を起こす場合があるが、一般的には局所的治療で治癒する。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 貯蔵・保管方法

・室温保管

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 使用前後の洗浄・滅菌方法

・洗浄方法

- 1) ドリルや器具類は使用後、有機質分解剤液の入った容器に入れる。
- 2) 目に見える破片を除去するため、柔毛のブラシでブラッシング洗浄しながら水道水で最低2 分間すすぐ。
- 3) ドリルを防錆剤薬液の入った超音波洗浄器で5分間超音波洗浄する。ドリルを柔毛で再度ブラッシング洗浄する。
- 4) 器具を1分間水道水ですすぎ洗いする。
- 5) 骨片や破片が残っていないか目視検査し、必要に応じて再度洗浄する。

・滅菌方法

- 1) サージカルトレーからバーブロックを取り外す。サージカルトレーとブロックを柔毛のブラシと弱い洗剤でブラッシング洗浄し、その後十分に水洗いする。
- 2) サージカルトレーに器具類を置き、残留した洗剤や水道水中の含有鉱物を除去するために、バーとトレーにエチルアルコールを注ぐ。この操作は腐食や白い斑点を予防するために重要である。
- 3) 外装が破損し器具が汚染されるのを防ぐため、サージカルトレーを紙や滅菌対応のバッグで二重に包む。
- 4) 132℃～135℃で 40 分間高圧蒸気滅菌を行う。
- 5) 器具を 30 分間乾燥させる。ただし、乾燥時間は滅菌する物の量によって多少の違いがある。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジンヴィ・ジャパン合同会社

東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル 2 F

電話：03-4333-9900

製造業者

バイオメット スリーアイ インク (Biomet 3i Inc.)

アメリカ合衆国