

単回使用チュービングセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用・再滅菌禁止。

*【形状・構造及び原理等】

<外観>

※代表的な形状を下記に示す。

<タイプ 1>



<タイプ 2>



<タイプ 3>



<タイプ 4>



【使用目的又は効果】

本品は、送水装置又は吸引装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等との接続に用いる柔軟性のあるチューブである。本品は単回使用である。

*【使用方法等】

<使用前>

1. 滅菌包装を開けて無菌的に本品を取り出す。
2. チュービングセットは、包装の開封、破損、汚損又はピンホール等が認められた場合は使用しないこと。


<使用中>

3. タイプ 1

- (1) 適合する灌流・吸引装置の電源を入れ、セルフチェックが終了して正常に作動することを確認する。
- (2) ローラーポンプ部のリリースボタンを押してローラーを開放する。
- (3) ポンプ用チュービングセットの器械装着チューブの方向を確認してコネクター部分を機器に挿入する。
- (4) チュービングセットのクランプを閉じてから灌流液バッグにスパイクを差す。
- (5) チュービングセットの接続チューブに滅菌済みの灌流用器具を接続する。
- (6) タイプ 3 の患者用チューブを使用する場合は、初めに患者用チューブをシースに接続してから、ポンプ用チュービングセットと患者用チューブを接続する。
- (7) ポンプのオンスイッチを押してポンプを作動させ、チューブ内のエア抜きを行なう。
- (8) 処置に使用する。

3. タイプ 2


- (1) 器具のポンプリールレバーを水平方向に下げる。

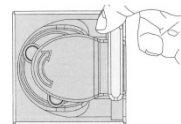

コネクター（青）


- (2) 図のようにポンプチューブをリールに取り付ける。

注：ポンプチューブのコネクターはサイズが異なるので一方のみ挿入することができる。

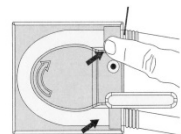


- (3) ポンプリールレバーを垂直に上げポンプチューブをロックする。

注：ポンプチューブが固定されないとポンプをスタートさせることができない。

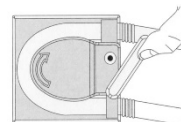

- (4) チューブクランプを閉じる。
- (5) パンクチャーニードルから保護キャップを取り、灌流液バッグに流し込み、通気口を開ける。
- (6) 接続チューブ（細い方）の接続プラグを洗浄用シースに接続する。
- (7) 洗浄機の取扱説明書に従って、灌流を行う。

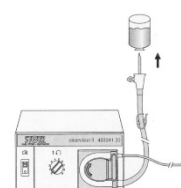


3. タイプ3

- (1) 単独で使しない患者用チューブで、タイプ1のポンプ用チュービングセットと使用する。

3. タイプ4

- (1) カセット型チュービングセットを灌流装置に取り付ける。

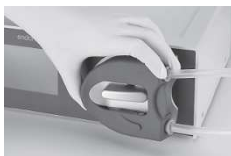

- (2) ローラーポンプのレバーを垂直に回し、カセットを固定する



3-1. 送水用チュービングセット

- (3) キャップを取り外し、灌流バッグにパンクチャーニードルを挿入する。



型番：031523 及び 031524

- (4) シリコンチューブの一端を灌流装置に接続する。



- (5) 灌流液を送液して、気泡が完全になくなるまで空気抜きをしてからチュービングセットを使用する。

3-2. 吸引用チュービングセット

型番：030647

- (3) シリコンチューブを吸引機器に接続する。



- (4) 「waste」と記載されているシリコンチューブのもう一端を吸引容器に接続する。



型番：031647

- (3) 追加のチュービングセットのシリコンチューブの一端を吸引装置に接続し、もう一端を吸引ボトルに接続する。



- (4) ポンプ用チュービングセットの短い端を吸引ボトルと接続し、「waste」と記載されているシリコンチューブのもう一端を吸引システムに接続する。



<使用後>

4. ポンプより取り外し、廃棄を行う。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やほこり、或いは塩分や硫黄分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などの安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
5. 有効期間は滅菌後5年間（ガンマ線滅菌の場合）又は滅菌後3年間（EOG滅菌の場合）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコープ・ジャパン株式会社
TEL：03-6380-8622

製造業者：KARL STORZ SE & Co. KG（カールストルツ社）
国名：Germany

添付文書番号：KSTJ - 400