

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 送水吸引チューブ 70355000

チューブカートリッジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用・滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

<外観>


※代表的な形状を下記に示す。

送水チューブ




吸引チューブ

<DS タイプ>

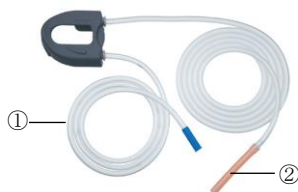

<BS タイプ>

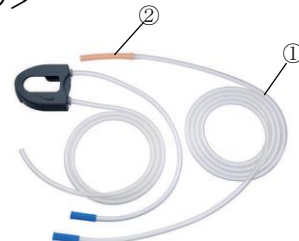

<各部の名称及び機能>

番号	名称	機能
①	チューブ	装置同士をつなぎ送水・吸引する
②	コネクター	送水装置又は吸引装置、内視鏡又は内視鏡用処置具を接続する
③	スパイク	送水液バッグに挿し込む

原材料

番号	名称	原材料
①	チューブ※	PVC 樹脂
②	コネクター※	シリコン、PCTG 樹脂
③	スパイク※	ABS 樹脂

※体液又は血液に直接または間接的に接触することがある部分。

【使用目的又は効果】

本品は、送水装置又は吸引装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等との接続に用いる柔軟性のあるチューブである。本品は単回使用である。

【使用方法等】


<使用前>

1. 滅菌包装を開けて無菌的に本品を取り出す。
2. チュービングセットは、包装の開封、破損、汚損又はピンホール等が認められた場合は使用しないこと。

<使用中>

3.

- (1) ロッキングレバーを時計回りに水平にし、カセット型チュービングセットを装置のポンプローラー部に取り付ける。

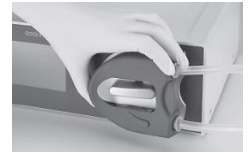

- (2) ローラーポンプのロッキングレバーを垂直に回し、カセットを固定する。



3-1. 送水用チュービングセット

- (3) プロテクションキャップを取り外し、送水バッグにスパイクを挿入する。




- (4) チュービングセットの接続チューブに滅菌済みの内視鏡等の送水用器具を接続する。

- (5) 送水液を送液して、気泡が完全になくなるまで空気抜きをしてからチュービングセットを使用する。

3-2. 吸引用チュービングセット

<DS タイプ>

- (3) チュービングセットの患者側チューブ（オレンジ色）の端を滅菌済みの内視鏡等の器具に接続する。

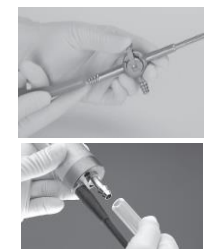

- (4) 流出用送水チューブ（青色）の端を回収用コンテナに接続する。



<BS タイプ>

- (3) チュービングカートリッジ上部のインフロー用チューブのチューブコネクタを、吸引ボトルのふたでこし器の付いたコネクターに取り付ける。



- (4) ポンプ用チュービングセットの短い一端を吸引器用ボトルに接続し、「waste」と記載されているシリコンチューブの他端を、バケツなどの回収コンテナに入れる



- (5) チュービングセットの２本目のチューブ（カートリッジなし）の青い端を空いているボトル接続チューブに取り付ける。



- (6) チューブのオレンジ色の端を器具（トランスデューサー）に接続する。



<使用後>

4. ポンプより取り外し、廃棄を行う。

<併用医療機器>

販売名	医療機器認証番号	製造販売業者
エントマツ SELECT	231AABZX00013000	当社

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やほこり、或いは塩分や硫黄分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などの安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
5. 有効期間は滅菌後５年間（ガンマ線滅菌の場合）又は滅菌後３年間（EOG 滅菌の場合）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社
TEL：03-6380-8622

製造業者：KARL STORZ SE & Co. KG（カールストルツ社）
国名：Germany

添付文書番号：KSTJ - 475