

再使用禁止

(EMG 表面電極および EMG 表面電極ケーブル付き)

EMG 測定用電極 (LB 用)

*【禁忌・禁止】


*・再使用禁止 (EMG 表面電極および EMG 表面電極ケーブル付き)

【形状・構造及び原理等】

*1. 形状


本品の構成は下記の通りである。

- 1) EMG 表面電極 (再使用禁止)

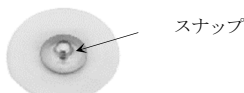


L20-2028 EMG 表面電極 3 個入り

- 2) EMG 表面電極リードケーブル付き (再使用禁止)

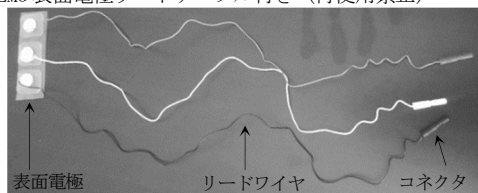


L20-2029 EMG 表面電極リードケーブル付き 3 本セット
全長：59cm

- 3) EMG リード

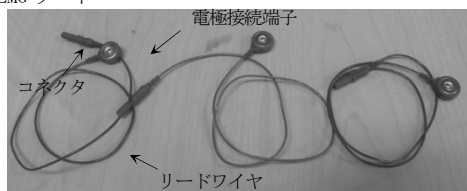


L20-2023 EMG リード 3 本セット
全長：46cm

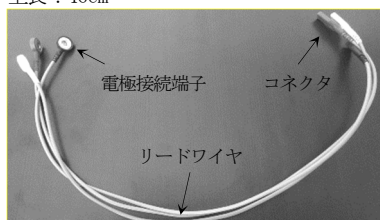

L20-2021 EMG リード (シールド付きタイプ) 3 本セット
全長：46cm

- 4) EMG リード延長ケーブル (Goby 接続用。EMG リード (シールド無しタイプ) 専用)

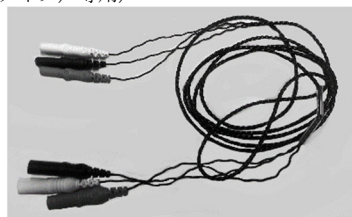

EMG リード延長ケーブル 3 本セット
全長：137cm

*2. 原材料

電極部	銀／塩化銀
ベースパッド	5%塩化カリウム含有電導粘着ハイドロゲル

【使用目的又は効果】

本品は体表面において、括約筋等の生体電気信号を検知する電極及びケーブルであり、感知された電気活動は筋電計 (EMG) によって記録される。

【使用方法等】

本品はラボリー社製ウロダイナミクス検査装置と併用する。

EMG リードの電極接続端子に取り付ける表面電極は、本品以外にも同等の機能をもつ表面電極が併用可能である。なお、コネクタに接続する筋電計接続ケーブルは、ラボリー社製の以下の製品を使用すること。

本品 (注文番号)	対応する筋電計接続ケーブル (注文番号)
・L20-2029 ・L20-2023	L20-2022
・L20-2021	L20-2020

1. 使用前の準備

- (1) 本品に破損がないことを確認する。
- (2) 患者の測定箇所を清拭する。

2. 使用方法

- (1) EMG 表面電極 (以後、「表面電極」と記載する) のスナップに EMG リードの電極接続端子を取り付ける。※
- (2) 表面電極を患者の測定箇所に貼付する。
- (3) コネクタを筋電計接続ケーブルの適切な端子に接続する。
- (4) 筋電図を測定する。

3. 使用後の処置

- (1) 表面電極をゆっくりと患者から剥がし、コネクタを筋電計接続ケーブルから取り外す。
 - (2) EMG リードを表面電極から取り外し、清拭して保管する。※
 - (3) 表面電極、もしくは EMG 表面電極ケーブル付きは施設の手順に従って廃棄する。
- ※「EMG 表面電極リードケーブル付き」ではこの手順は不要。

*4. 使用方法等に関連する使用上の注意

- (1) 本品を折り曲げるなど過剰な力を加えないこと。
- (2) 本品を取り外す際、ケーブル部分を持って引っ張らないこと。
- (3) EMG 表面電極と EMG リードが確実に接続されているか、確認すること。【電極とプリアンプの間の抵抗値が高いと、正確に筋電位が計測されないことがある。】
- (4) 本品は短期間の計測にのみ使用すること。

【使用上の注意】

*1. 重要な基本的注意

- ・本品は健常な皮膚にのみ使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気により悪影響の生じるおそれのない場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

2. 使用期限

- ・包装に記載されている使用期限を守ること (EMG 表面電極/EMG 表面電極リードケーブル付き)。
- ・表面電極接続端子やコネクタに腐食、汚れが見られた場合は、新品に交換すること (EMG リード)。

【保守・点検に係る事項】

EMG リードは、使用後は消毒用エタノールで清拭し、ケーブルをまとめて保管すること。

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

1. 製造販売業者・製造業者

- ・ 製造販売業者
エダップテクノメド株式会社

***・ 製造業者**

EMG 表面電極 EMG 表面電極リードケーブル付き EMG リード（シールド付きタイプ）	ConMed Corporation French Road Facility （アメリカ）
EMG 延長ケーブル	Plastics One Inc. （アメリカ）
EMG リード（シールド無しタイプ）	Laborie Medical Technologies Canada ULC （カナダ）

2. お問い合わせ先

エダップテクノメド株式会社 営業部
03-5540-6767
marketing@edaptechnomed.co.jp