

* 器具器械 74 医薬品注入器

* 一般医療機器 歯科用薬剤注入器 70387000


ルートキャナル[®] シリンジ

ROOT CANAL SYRINGE

【形状・構造及び原理等】**

**本品は、本体と針状部が一体化された外筒、ガスケット及びプランジャーから構成される合成樹脂製の根管注入器である。外筒内面には潤滑油が塗布してあり、プランジャーは5種類に色分けされている。

** 1. 構造

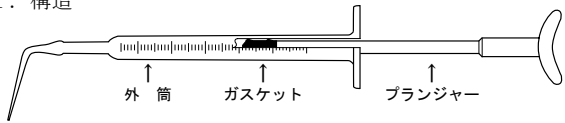

** 2. 組成

構 成 名	組 成
外 筒	ポリプロピレン
ガスケット	シリコーンゴム
潤 滑 油	メチルポリシロキサン

【使用目的、効能又は効果】

歯科領域における根管清掃及び根管処置剤の貼付又は充填等に使用する。

【品目仕様等】**

**針状部先端の外径：0.5 ± 0.1 mm

【操作方法又は使用方法等】**

- ** 1. プランジャーを押し、外筒内部から空気を押し出す。
- ** 2. 外筒先端の針状部を薬剤の中に入れ、必要量を吸引する。
- ** 3. 適用根管に針状部を挿入し、薬剤を貼付又は充填する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ** 1. 使用に際しては、針状部を適切な方法で消毒すること。
[「保守・点検に係る事項」の項参照]
- 2. 本品での樹脂溶解性の強い有機溶剤（クロロホルム等）の使用は避けること。
- 3. 外筒の内径が細いので、内部に空気が入らないように注意して薬剤を吸引し、軽くプランジャーを押して薬剤の流出を確かめてから、根管内に応用すること。
- 4. 応用に際しては、強い圧が加わらないよう、ゆっくりとプランジャーを押し、薬剤を輸送すること。

【使用上の注意】*

1. 使用注意

- 1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

* 2) 本品を【使用目的、効能又は効果】に掲げた用途以外に使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

吸引した薬剤等をシリンジから誤って漏出させ、口腔粘膜や皮膚に付着させたり、目に入れないように注意すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 1. 本品は、殺菌灯（紫外線ランプ）を点灯したキャビネット等に保管しないこと。（本品が劣化するため。）
- 2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】**

** 1. 使用後は消毒用エタノール又は蒸留水等を用いて洗浄し、使用した薬剤がシリンジ内に残留しないように注意すること。

** 2. 本品は適切な薬液により消毒すること。

[参 考] HIVに対するWHOが示した消毒法

70 %エタノール	10～30分 (室温)
2 %グルタルアルデヒド	
0.5 %次亜塩素酸ナトリウム	
5 %ホルマリン	

** 3. 本品に破損（割れ、ひび等）及び変形等の異常がないことを確認してから使用すること。

** 4. プランジャーが動きにくくなった場合には、付属の潤滑油をガスケットに少量塗布すること。

【包装】

- 1. 2本セット（クリーム、ブルー：潤滑油 袋入×1）

- 2. 3本セット

（レッド、ブラック、グリーン：潤滑油 袋入×1）

※付属の潤滑油は、別売（袋入×6：専用ケース）があります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売業者及び製造業者：ネオ製薬工業株式会社

住 所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3

電 話 番 号：03-3400-3768 Fax：03-3499-0613

フリーダイヤル：☎ 0120-07-3768

ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.neo-dental.com/



ネオ製薬工業株式会社