

* 器具器械 65 歯科用充填器

* 一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 38782000（歯科用貼薬針 70679000）

ネオ ブルーチップ°（S）

NEO BLUE TIPS（S）

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】*

* 本品は、口腔内で使用するロック式（ルアーロック式）シリ
ンジに接合する紺色の合成樹脂製の先端チップで、歯科用接
着充填材料及び歯科用根管充填材料等の適用、又は歯科用薬
剤の貼薬等に使用する。

* 1. 構造

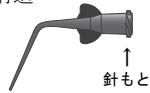

* 2. 組成

ポリプロピレン

【使用目的、効能又は効果】*

* 歯科領域における充填材料、修復材料及び歯科用薬剤等の適
用又は貼薬等に使用する。

【品目仕様等】*


* チップ先端の外径：0.5 ± 0.1 mm

【操作方法又は使用方法等】**

* 口腔内で使用するルアーロック式のシリンジ等に接合し、応
用する。

適合確認済み当社製品

・ビタベックス

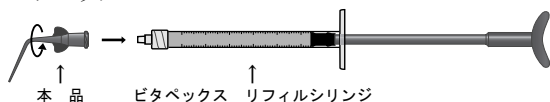

**・キャビオス



【使用方法に関連する使用上の注意】

1. ロック式ではないシリンジ及びロック部分が適合しない
シリンジには使用しないこと。
- * 2. あらかじめ接合部に緩みがないことを確認してから使用
すること。また、使用中は定期的に緩み、外れがないこ
とを確認すること。
- * 3. 他の医療機器と接合する場合には、次の事項に注意す
ること。

- * 1) 接合する製品の添付文書をよく読んでから装着すること。
- * 2) 過度な締め付けをしないこと。[針もとが外れなくなる、
又は針もとが破損する可能性がある。]
- * 3) 接合部分に充填材料又は薬液等を付着させないこと。
[接合部分の緩み等が生じる可能性がある。]
- * 4. 使用に際しては、針状部を適切な方法で消毒すること。
[「保守・点検に係る事項」の項参照]
- ** 5. 使用に際しては、強い光が長時間あたらないように注意
すること。[遮光性が弱いので、チップ内で充填材料又
は薬液等が変質することがある。]

【使用上の注意】

使用注意

1. 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
2. 本品を【使用目的、効能又は効果】に掲げた用途以外に
使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 本品は、殺菌灯（紫外線ランプ）を点灯したキャビネット
等に保管しないこと。（本品が劣化するため。）
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・
管理すること。

【保守・点検に係る事項】*

- * 1. 本品は未滅菌なので、消毒用エタノール等で清拭・消毒
してから使用すること。
なお、オートクレーブ滅菌を行うと形状が変化するので、
注意すること。
- * 2. 本品に破損（割れ、ひび等）及び変形等の異常がないこ
とを確認してから使用すること。

【包装】**

40 本（20 本入袋× 2）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：ネオ製薬工業株式会社

住 所：〒 150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3

電 話 番 号：03-3400-3768 Fax. 03-3499-0613

フリーダイヤル：☎ 0120-07-3768

製 造 元：ネオ製薬工業株式会社