

* 歯科材料 6 歯科用印象材料

* 一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000


ネオ ディスペンサー

NEO DISPENSER

【形状・構造及び原理等】**

本品は、専用カートリッジに充填されたペーストを一定の割合で吐出させるガンタイプのディスペンサーである。

** 1. 構造

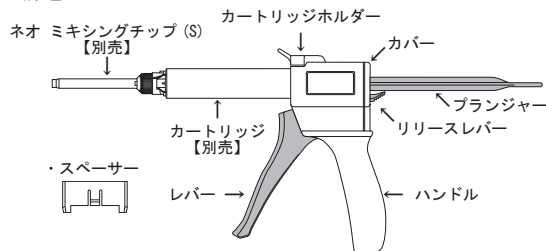

** 2. 原理

レバーを握ることにより、プランジャー部分が一定距離移動し、専用カートリッジに充填されたペーストを一定の割合で吐出させる。


【使用目的、効能又は効果】

専用カートリッジに充填されたペースト状歯科材料の吐出に用いる。

【品目仕様等】**

** 適合カートリッジ


適合カートリッジ
差し込み部形状

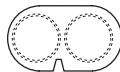

【操作方法又は使用方法等】

通法により、以下の操作を行う。

1. リリースレバーを押し上げながら、プランジャーを引き戻す。
2. カートリッジホルダーを引き上げてカートリッジを差し込み、カートリッジホルダーを元に戻す。
3. カートリッジのキャップを取り外し、レバーを握りペーストをごく少量吐出させ、左右両方のペーストが均一に吐出されたことを確認する。
片方のみが吐出した場合には、均等になるまでペーストを吐出させる。
4. ミキシングチップをカートリッジへ確実に取り付ける。
5. レバーを握り、練和物をミキシングチップ先端から吐出させる。
握りにくい場合には、付属のスペーサーをレバーとカートリッジホルダーの間に挿入する。

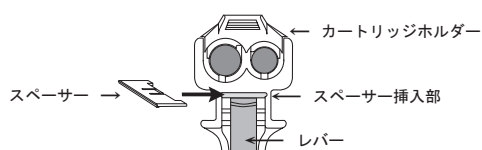

6. 作業終了後、使用済ミキシングチップを取り外し、吐出口の余剰ペーストをガーゼ等で除去してからカートリッジキャップを装着する。

- 1) カートリッジをディスペンサーに装着したまま保管する場合には、次回使用時は3.の操作以降を繰り返す。
- 2) カートリッジをディスペンサーから取り外して保管する場合には、リリースレバーを押し上げながらプランジャーを完全に引き戻し、カートリッジホルダーを引き上げ、カートリッジを取り外す。次回使用時は2.以降の操作を繰り返す。

【使用方法に関連する使用上の注意】

練和物を急激に吐出すると、ペーストの漏れやカートリッジの破損を引き起こすことがあるので、静かにレバーを握り練和物を吐出させること。

【使用上の注意】*

1. 本品に適合しないカートリッジは使用しないこと。
2. 本品を用いる時、レバーとハンドルの間に手指を挟まないように注意すること。
3. 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- * 4. 本品を【使用目的、効能又は効果】に掲げた用途以外に使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】**

- ** 1. 本品に破損（割れ、ひび等）及び変形等の異常がないことを確認してから使用すること。
- ** 2. 本品を消毒用エタノール以外の薬液で清拭しないこと。
- ** 3. 本品は、オートクレーブ滅菌が可能であるが、乾燥機能を有した機種で使用する場合には、200℃を超えないようにすること。[高温により変形する。]

【包装】

1個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売元：ネオ製薬工業株式会社
住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3
電話番号：03-3400-3768 Fax：03-3499-0613
フリーダイヤル：☎0120-07-3768
製造元：ネオ製薬工業株式会社



ネオ製薬工業株式会社