

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
一般医療機器 単回使用心電用電極 35035000

HFVI V1 Plus センサー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品を磁気共鳴画像診断装置(MR I)及びX線使用診断装置下では使用しないこと。
2. 本品を傷口や炎症のある部位に貼付しないこと。
3. 本品を再使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

* 1. 概要

本品は、神経モニターであるHFVI MOC-9モジュール(承認番号：30300BZX00302000)専用の電極として、2歳以上の小児および成人患者用に設計されたものである。

* 2. 外観

表

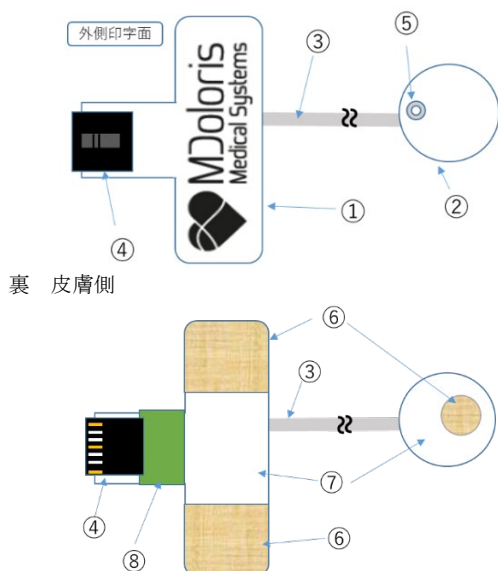

3. 主な原材料及び成分

番号	名称	原材料
①	双電極	汎用プラスチック
②	単電極	汎用プラスチック
③	被覆リード線	一般電気部品
④	コネクタハウジング	一般電気部品
⑤	ハトメ	一般電気部品
⑥	導電性ゲル	医療用導電性ゲル
⑦	両面接着剤フォーム	ポリエステル、医療用アクリル
⑧	絶縁シート	一般電気部品

【使用目的又は効果】

本品は体表に貼付し、体表の電気信号を専用の処理装置に伝達する導体である。本品は単回使用である。


【使用方法等】

＜本品の使用にあたっては組み合わせて使用するHFVI MOC-9モジュールおよび重要パラメータ付き多項目モニターであるルートモニター(承認番号：22600BZX00344000)の取扱説明書を確認すること＞

1. 使用方法

- 1) 電極の貼付位置を下記に示す

- 2) 電極を装着する皮膚の部位が清潔で乾燥しており、体毛がないことを確認し、皮脂や汚れがある場合は、酒精綿を用いて清拭すること。体毛は必要に応じて剃毛すること。
- 3) 本品のコネクタハウジングをHFVI MOC-9モジュールから伸びたケーブルのコネクタにカチッと音が鳴るまで挿入して接続する。接続後、HFVI MOC-9モジュールをルートモニター(重要パラメータ付き多項目モニター)に接続する
- 4) 粘着力が低下した際は、ECG信号の取得精度が低下するため新しい電極に交換すること
- 5) 最長 24 時間連続で貼付することができる

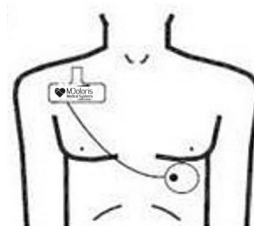

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 電気メスを用いる際は、高周波電流の影響を最小限に抑えるために、本品は手術部位からできるだけ離して設置すること
- 2) 電気メスによる火傷のリスクを最小限に抑えるため、本品を手術部位と電気メスユニットの対極板の間に設置しないこと
- 3) 電極やコネクタを、他の装置の導電部(アースまたは等電位化端子を含む)に接触させないこと

2. 併用注意(併用注意)

除細動器	除細動器を使用する際には、本品を除細動器パドルの間に残さないこと。
電気痙攣療法(ECT)機器	信号が干渉する可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

指定温度範囲内(0～40℃)で保管すること

* 2. 有効期間

外側アルミ包装未開封 3年
開封後 1年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 平和物産株式会社
電話番号： 03-3287-0731
製造業者： エムドロリス メディカルシステムズ(MDoloris Medical Systems)
製造業者国名： フランス

取扱説明書を必ずご参照下さい。