

## 再使用禁止

## アドヒーシブデンバースプリント


## 【禁忌・禁止】

## 【使用方法】

- ・再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】\*\*

本品は、マジックテープ付アルミニウム板とマジックテープ付粘着シール、スポンジパッド、紙テープからなる副木である。また、清拭材が付いている。

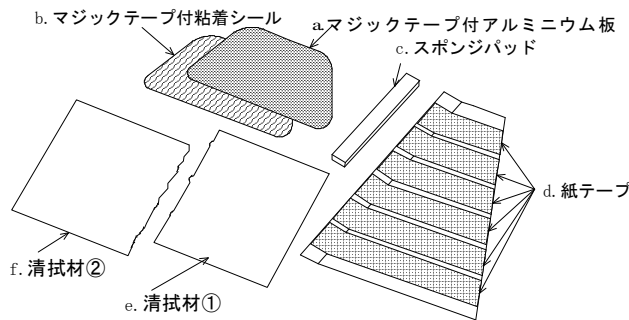


製品番号と規格

(単位：mm)

寸法図

| 製品番号    | 規格                | サイズ |    |
|---------|-------------------|-----|----|
|         |                   | H   | W  |
| #1500LA | LA (Large)        | 43  | 69 |
| #1500SM | SM (Small/Medium) | 35  | 65 |
| #1500PE | PE (Petite)       | 30  | 58 |
| #1500MI | MI (Mini)         | 28  | 50 |

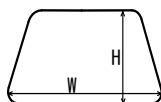

## 【使用目的又は効果】

鼻骨の骨折部位周辺を外部より支持固定する固定用材料であり、鼻稜部から顔面部の骨折部位をアルミニウム板で支持固定する。

## 【使用方法等】\*\*

## 【A. 装着するとき】\*\*


- 1) 本品を包装から取り出し、本品の点数が欠落していないか確認する。
- 2) 貼付部を清拭材①（アルコール含有）で拭い、乾かした後、清拭材②で患部全体を軽く拭く。

## 〈注意〉

- ・開封後、何らかの事情で直ちに使用しない場合には、廃棄すること。[清潔な状態が保たれていないおそれがあるため。]
- 3) 本品の紙テープを患部に重ねるように貼り付ける。

## 〈注意〉

- ・必ず、貼付部が乾燥してから紙テープを貼ること。[紙テープが患部より剥がれ、上手く固定できないおそれがあるため。]
  - 4) 本品のスポンジパッドの台紙を剥がし、紙テープの貼り付けられた患部の鼻筋にスポンジパッドを貼り付ける。
- 〈注意〉
- ・スポンジパッドは皮膚に直接触れないこと。[希に本品の粘着剤で皮膚に炎症をおこす場合がある。]

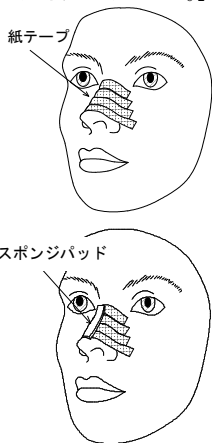



- 5) 本品のマジックテープ付粘着シール（以下、粘着シール）の台紙を剥がし、紙テープ、スポンジパッドの貼り付けられた患部に粘着シールを貼り付ける。

## 〈注意〉


- ・粘着シールは皮膚に直接触れないこと。[希に本品の粘着剤で皮膚に炎症をおこす場合がある。]
- 6) 本品のマジックテープ付アルミニウム板（以下、アルミニウム板）を患者の鼻の形に整える。
  - 7) アルミニウム板をマジックテープ側から粘着シールに貼り付ける。

## 〈注意〉

- ・アルミニウム板は皮膚に直接触れないこと。[本品で皮膚に傷を付けてしまうことがある。]
- 8) 患者の装着状態を確認する。

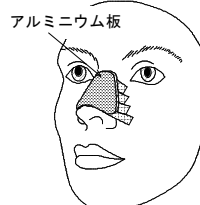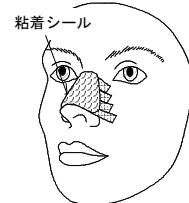

## 〈装着図〉

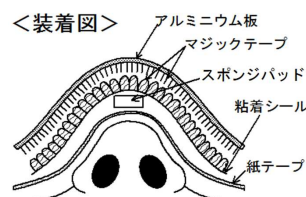

## 【B. 取りはずすとき】

上層から患部に負担をかけないようにゆっくり剥がす。

## 【使用上の注意】

## 【重要な基本的注意】

- ・本品は必ずマジックテープ付アルミニウム板、マジックテープ付粘着シール、スポンジパッド、紙テープと組み合わせて使用すること。[これ以外の組み合わせ、あるいは単体使用では機能せず、適正使用範囲外となるため。]

## 【不具合・有害事象】

本品の使用中に次の事象が起こることがある。使用期間中は十分な観察を行い、このような場合には本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。

- 1) その他の不具合  
剥離
- 2) その他の有害事象  
発赤、かぶれ、発疹

## 【保管方法及び有効期間等】

## 【有効期間】

3 年 [自己認証（当社データ）による。]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*

## 【製造販売元】

株式会社 高研  
TEL 03-3816-3500

## 【製造元】\*

Summit Medical, LLC  
アメリカ合衆国